

CE₀₁₂₃

Metacross™RX

PTA Balloon Dilatation Catheter
Cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA
PTA-Balloon dilationskatheter
Catéter de dilatación de balón para ATP
Cateter de Dilatação de Balão para ATP
Catetere con palloncino di dilatazione per PTA
PTA ballondilatatiekatheter
PTA ballongdilations kateter
PTA ballon-dilationskateter
PTA ballongdilatasjonskateter
PTA-pallolaajennuskatetri
Καθετήρας Διαστολής PTA με Μπαλόνι
Периферический баллонный катетер ЧТА
Balonowy cewnik dylacyjny do PTA
PTA Tágító Ballonkatéter
Balónkový dilatační katétr pro PTA
PTA balónikový dilatačný katéter
PTA Balon Dilatasyon Kateteri
PTA balloondilatatsiooni kateeter
PTA dilatācijas balonkatetrs
PTA kateteris su išplečiamuoju balionėliu
Balonski kateter za dilataciju PTA
PTA balon dilatacion kateter
Cateter de dilatare pe balon pentru PTA
PTA дилатационен балон-катетър
Дилатаційний балон-катетер для ЧТА
Balonski dilatacijski kateter za PTA

**TERUMO**

September, 2021

PM-05580
1/115 (3209-3)

REF	SN	LOT	
Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer Número de catálogo Referência Codice prodotto Catalogusnummer Artikelnnummer Varenummer Artikkelnummer Tuotekoodi Κωδικός Προϊόντος Каталожный номер Kod produktu Termékkód Kód výrobku Kód výrobku Ürün kodu Kood Koda Nr. Katalogo Nr. Koda izdelka Šifra proizvoda Codul produsului Каталожен номер Номер за каталогом Kataloški broj	Serial number Numéro de série Seriennummer Número de serie Número de série Numero di serie Serienummer Serienummer Serienummer Serienummer Sarjanumero Αριθμός παραγωγής Серийный номер Numer serii Sorozatszám Sériové číslo Sériové číslo výrobku Seri Numarası Seerianumber Sērijas Nr. Serijos Nr. Serijska številka Serijski broj Număr de serie. Сериен номер Серийный номер Serijski broj	Lot number Numéro de lot Chargenbezeichnung Número de lote Número de lote Numero di lotto Lotnummer Batchkod Batchnummer Batch number Eränumero Αριθμός παρτίδας Номер партии Numer serii Tételszám Číslo výrobní serie Identifikačné číslo Lot numarası Partii nr. Sērijas Nr. Partijos kodas Številka serije Serijska oznaka Număr lotului Партиден номер Код партії Šifra serije	Use by A utiliser jusque Verwendbar bis Caducidad Data limite de uso Utilizzare entro Gebruiken voor Användes före Udløbsdato Brukes før-dato Eräpäivä Ημερομηνία Λήξης Годен до Użyć przed datą Felhasználható Použit do Použit do Son kullanim tarihi Säilivusaeg Derīguma termiņš Sunaudoti iki Uporabno do Upotrebljivo do Data de expirare Срок на годност Використати до Upotrijebiti do
STERILEEO			P
Sterilized using ethylene oxide Stérilisé à l'oxyde d'éthylène Sterilisation mit Ethylenoxid Esterilizado con óxido de etileno Esterilizado com oxido de etileno Sterilizato con ossido di etilene Gesteriliseerd met ethyleenoxide Steriliserad med etylenoxid Ætylenoxid steriliseret Sterilisert med etylen oksid Steriloitu etyleenoksidilla Αποστειρωμένο με αιθυλαινοξειδιο Стерилизовано окисью этилена Sterylizowane tlenkiem etylenu Etilénoxidál sterilizálva Sterilizováno ethylenoxidem Sterilizované etylénoxidom Etilen Oksitle sterilize edilmiştir Steriliseeritud etüleenoksiidiga Sterilizēts ar etilēna oksīdu Sterilizuota naudojant etileno oksidą Sterilizirano z etilen oksidom Sterilisano etilen oksidom Sterilizat cu oxid de etilena Стерилизовано с этилен оксид Простерилизовано за допомогою оксиду етилену Sterilizirano etilen-oksidadom		Do not reuse Ne pas réutiliser Nicht zur Wiederverwendung No reutilizar Não reutilizar Monouso Niet opnieuw gebruiken Ingen återanvändning Må ikke genbruges Må ikke gjenbrukes Kertakäyttöinen Μόνο για μια χρήση Не использовать повторно Nie używać powtórnie Csak egyszeri használatra Nelze použiť opakovaně Na jednorázové použitie Tek kullanımlık Ainult ühekordseks kasutuseks Tikai vienreizējai lietošanai Pakartotina nenaudoti Samo za enkratno uporabo Samo za jednokratnu upotrebu Doar pentru unica folosinta Само за еднократна употреба Використовувати повторно заборонено Ne upotrebljavati ponovno	Pressure Pression Druck Presión Pressão Pressione Druk Tr yck Tr yk Trykk Paine Πίεση Давление Ciśnienie Nyomás Tlak Tlak Basiņš Röhk Spiediens Slegis Tlak Pritisak Presiune Налягане Тиск Tlak

	
Consult instructions for use Lire le mode d'emploi Gebrauchsanweisung beachten Consulte las instrucciones de uso Consultar instruções de uso Consultare le istruzioni per l'uso De gebruiksaanwijzing raadplegen Läs bruksanvisningen Læs brugsanvisningen Les bruksanvisning før bruk Lue käyttöohjeet Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης Прочитайте инструкции по применению Sprawdź w instrukcji stosowania Olvassa el a használati útmutatót! Postupujte podle pokynů Prečítajte si návod na použitie Kullanma talimatına başvurunuz Tutvu kasutusjuhendiga. Pirms lietošanas izlasiet instrukciju Skaitykite naudojimo instrukciją Glej navodila za uporabo Pogledaj instrukcije za upotrebu A se consulta instrucțiunile de folosință Прочетете указанията за употреба Ознайомтеся з інструкціями для застосування Pogledati upute za upotrebu	Manufacturer Fabricant Hersteller Fabricante Fabricante Fabbicante Fabrikant Tilverkare Produceret af Produsent Valmistaja Κατασκευαστής Изготовлено Wytwórca Gyártó Výrobeno Výrobca Üretici firma Toodetud Razõts Gamintojas Izdelevalac Proizvodjač Fabricat de Произведено от Виробник Proizvođač
NP	RBP
Nominal Pressure Pression nominale Nenndruck Presión nominal Pressão nominal Pressione nominale Nominale druk Nominellt tryck Nominelt tryk Nominelt trykk Nominaalipaine Ονομαστική Πίεση Номинальное давление Ciśnienie znamionowe Névleges nyomás Jmenovitý tlak Menovitý tlak Nominal Basiņ Nominaalrõhk Nominālais spiediens Minimalus slėgis Nominalni tlak Nominalni pritisak Presiune nominală Номинално налягане Номинальний тиск Nominalni tlak	Rated Burst Pressure Pression nominale de rupture Zerreißdruck Presión de rotura Pressão nominal de ruptura Pressione massima di sicurezza Bepaalde scheurdruk Nominellt bristningstryck Nominel øvre trykgrænse Nominelt sprengtrykk Nimellinen rikkoutumispaine Ονομαστική Πίεση Ρήξης Расчетное давление разрыва Znamionowe ciśnienie rozrywające Becsült szakítónyomás Jmenovitý tlak prasknutí Menovitý tlak prasknutia Anma Patlama Basıncı Arvestuslik purunemisrõhk Aprēķinātais sprādziena spiediens Minimalus išplėtimo slėgis Naznačen delovni tlak Granični pritisak pucanja Presiunea nominală de explozie Номинално налягане на разкъсване Номинальний тиск розриву Nazivni tlak prsnuća

 Contents	
Contents Contenu Stück Unidades Conteúdo Unità Stuks Styck Indhold Innhold Sisältö Περιεχόμενα Содержание Zawartość Tartalom Obsah Obsah İçindekiler Sisu Satus Sudėtis Vsebina Sadržaj Conținut Зміст Вміст Sadržaj	Do not use if package is damaged Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé Inhalt beschädigter Packung nicht verwenden No usar si el paquete está dañado Não usar se a embalagem estiver danificada Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is Använd inte om förpackningen är skadad Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget Må ikke brukes hvis forpakningen er ødelagt Älä käyttää jos pakkaus on vahingoittunut Μην το χρησιμοποιήσετε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη Не использовать, если упаковка повреждена Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania Ne használja, ha a csomagolás sérült! Nepoužívejte, bylo-li balení poškozeno Nepoužívejte, ak je obal poškodený Paket hasarlıysa kullanmayınız Årge kasutage, kui pakend on kahjustatud Nelietot, ja sterila isepakojums ir bojāts Jei pakuotė pažeista, nenaudoti Ne uporabljajte ga, če je ovojnina poškodovana. Ne upotrebljavati ukoliko je pakovanje oštećeno A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este deteriorat Не използвайте, ако опаковка е повредена Не використовувати, якщо пакування пошкоджено Ne upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno
	
Balloon diameter Diamètre du ballon Durchmesser des Ballons Diámetro del balón Diâmetro do balão Diametro del palloncino Ballondiameter Ballongdiameter Ballondiameter Ballongdiameter Pallon halkaisija Διάμετρος μπαλονιού Диаметр баллона Średnica balonu Ballon átmérő Průměr balónku Priemer balóna Balon çapı Ballooni diameeter Balona diametrs Ballono diametras Premier balona Prečnik balona Diametrul balonului Диаметър на балона Диаметр балону Promjer balona	Balloon length Longueur du ballon Länge des Ballons Longitud de balón Comprimento do Balão Lunghezza del palloncino Ballonlengte Ballonglängd Ballonlængde Ballonglengde Pallon pituus Μήκος Μπαλονιού Длина баллона Długość balonu Ballon hossz Délka Balonku Dĺžka balóna Balon Uzunluğu Ballooni pikkus Balona garums Ballono ilgis Dolžina balona Dužina balona Lungimea balonului дължина на балона довжина балону Duljina balona

EC REP	2 STERILIZE
Authorized Representative in the European Community Rep. CE (Mandataire européen) Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft Representante autorizado de la Comunidad europea Representante autorizado na CE Rappresentante autorizzato nella comunità europea Gemachtigde vertegenwoordiger in de EU (Europese Unie) Auktoriserad återförsäljare inom EU-området Autoriseret forhandler indenfor EU området Autoriseret representant i Det europeiske Fællesmarked EY edustaja Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Авторизованный представитель Европейского сообщества Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej Az Európai Közösségben a képviseletre jogosult Zástupce Evropského společenství Predstaviteľ Európskej únie Yetkili AB temsilcisi Esindaja EL-s ES pārstāvis Įgaliotas atstovas Europos bendrijoje Zastopnik v Evropski Skupnosti Predstavnik u Evropskoj Uniji Reprezentant UE Упълномощен представител в ЕС Уповноважений представник в Европейському Союзу Ovlašteni predstavnik u europskoj zajednici	Do not resterilize Ne pas restériliser Nicht wieder sterilisieren No reesterilizar Não re-esterilizar Non risterilizzare Niet hersteriliseren Får ej omsteriliseras Må ikke reesteriliseres Må ikke re-steriliseres Ei uudelleen sterilointia Να μην επαναποστείρωθεί Не стерилизовать повторно Nie sterylizować ponownie Nem sterilizálható újra! Nesterilizujte opakovane Nesterilizujte Yeniden sterilize etmeyin Ärge steriliseerige uuesti Nesterilizēt atkārtoti Pakartotinai nesterilizuoti Ne reesterilizirati Ne resterilisati Nu resterilizați Да не се стерилизира повторно Повторно не стерилизувати Ne ponovo sterilizirati
	
Manufacturing Site Site de fabrication Herstellungsort Lugar de fabricación Site do fabricante Sito di produzione Productielocatie Tillverkningsplats Produktionssted Produksjonssted Valmistuspaikka Τόπος Κατασκευής Произведено Miejsce produkcji Gyártóhely Misto výroby Miesto výroby Üretim Yeri Tootmiskoht Ražotne Gambybos vieta Proizvodno mesto Mesto proizvodnje Locul de Productie Место на производство Виробнича дільниця Mjesto proizvodnje	Keep dry Conserver au sec Vor Nässe schützen Mantener seco Manter seco Conservare in luogo asciutto Droog bewaren Håll torrt Holdes tør Holdes tørt Pidä kuivassa Διατηρήστε το στεγνό Беречь от влаги Przechowywać w miejscu suchym Nedvességtől védett helyen tartandó Udržujte v suchu Udržujte ja suchom mieste Kuru tutunuz Hoida kuivas Sargāt no mitruma Laikyti sausoje vietoje Izogibajte se dežju Čuvati na suvom mestu A se păstra în locuri ferite de umezeală Съхранявайте на сухо Зберігати в сухому місці Držati suho



Keep away from sunlight
Craint la chaleur
Vor Sonnenlicht schützen
Mantener alejado de la luz solar
Manter ao resguardo da luz solar
Tenere lontano da fonti di calore
Niet blootstellen aan zonlicht
Aktas för solljus
Må ikke udsættes for sollys
Unngå sollys
Suojattava auringonvalolta
Φυλάξτε το μακριά από το ηλιακό φως
Избегать прямого солнечного света
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Napfénytől védett helyen tartandó
Chraňte před slunečním zářením
Udržujte mimo slnečného žiarenia
Güneş ışığından uzak tutunuz
Kaitsta otsese päikesevalgus eest
Sargāt no saules stariem
Saugoti nuo saulės šviesos
Izogibajte se sončni svetlobi
Ne izlagati sunčevoy svetlosti
A se pästra la umbrä
Пазете от сплънчева светлина
Зберігати подаль від сонячного проміння
Drżati dalje od sunčevog svjetla

Rapid Exchange Type
Echange rapide
Rapid Exchange Typ
del Tipo de Intercambio Rápido
Tipo de Troca Rápida
Tipo a Scambio Rapido
Rapid Exchange Type
Snabbutbytestyp
Rapid Exchange Type
Hurtig Utskifting
Nopeasti Vaihdehtava
Ταχείας Ανταλλαγής
Быстрой Замены
Typ szybkiej wymiany
Gyorscserele rendszeru
Rychlou Výmenou
Rýchlo Vymeniteľný
Rapid Exchange Tipi
Kiirvahetustüüpi
Atras Apmainas
Greitai Keiciamas
Hitro Izmenjavo
Rapid Exchange Type
Schimb rapida
Бързосменния
Швидкої Заміни
Tip za brzu razmjenu

Rx ONLY

CAUTION: Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

ATTENTION : Conformément au droit fédéral des Etats-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par ou sur prescription d'un médecin.

VORSICHT: Das Bundesgesetz in den USA beschränkt den Verkauf des Geräts auf die Verschreibung durch einen Arzt.

ATENCIÓN: La Ley Federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a un médico o bien por orden de este.

ATENÇÃO: A Lei Federal dos E.U. A. restringe a venda deste dispositivo por médicos ou por sua prescrição.

ATTENZIONE: La Legge Federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo prodotto esclusivamente ai Medici o dietro prescrizione medica.

OPGELET: In overeenstemming met de federale wetgeving (VS) mag dit hulpmiddel enkel door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

VARNING: Federal lagstiftning i USA tillåter endast att denna produkt säljs genom eller på ordination av läkare.

ADVARSEL: Ifølge amerikansk føderal lov må det te produkt kun sælges af en læge eller på ordination af en læge.

FORSIKTIG: Denne enheten kan i følge amerikansk lov kun selges til leger eller ved bestilling fra leger.

HUOM: USA:n liit tovaltion lain mukaan tämä tuote voidaan myydä vain lääkärille tai hänen määräyksestään.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι νόμοι των Η.Π.Α. περιορίζουν την πώληση αυτής της συσκευής μόνο με συνταγή ιατρού.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Федеральный закон (США) строго регламентирует продажу данного устройства только по предписанию врача.

UWAGA: Prawo federalne (U.S.A.) przewiduje, że urządzenie to może być sprzedawane tylko przez lub na zamówienie lekarza.

FIGYELMEZTETÉS: Az USA szövetségi törvénye az eszköz árusítását korlátozza, azt csak orvosi javaslatra vagy orvos előírására lehet forgalmazni.

UPOZORNENÍ: Podle amerických federálních zákonů může být toto zařízení prodáváno pouze lékařem nebo na jeho předpis.

POZOR: Federální zákon (v USA) povoluje prodej tohoto přístroje jedine na základě požiadavky lekára.

UYARI: Eyalet yasaları (U.S.A.) bu cihazın satışını bir hekimin talebi veya siparişi ile sınırlandırmaktadır.

TÄHELEPANU! USA föderaaliseaduse järgi võib antud vahendit müüa ainult arst või arsti retsepti olemasolul.

UZMANIBU! Federala (ASV) likumdošana ierobežo šī aprīkojuma tirdzniecību tikai ārstiem vai saskaņā ar to atļauju.

ISPEJIMAS: Federalinis istatymas (JAV) draudžia gydytojams parduoti ar išrašyti šį prietaisą.

POZOR: Po zveznem zakonu (ZDA) smejo to napravu prodajati le zdravniku oz. se sme prodajati le na recept zdravnika.

MERE ZAŠTITE: Savezni (USA) zakon dozvoljava prodaju ovog proizvoda od ili po nalogu lekara.

ATTENTIE: În conformitate cu legea federală (SUA), vînderea acestui dispozitiv este permisă doar medicului sau la prescripția medicului.

ВНИМАНИЕ: Федерален закон (САЩ) регламентира продажбата на това изделие само от лекари или по тяхно предписание.

УВАГА! : Згідно з Федеральним законодавством (США), цей виріб може бути проданий лише лікарем або за його призначенням.

OPREZ: Savezni zakon (SAD-a) ograničava prodaju ovog uređaja od strane ili po nalogu liječnika.


[PRODUCT DESCRIPTION]

Metacross RX is a Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA) Balloon Dilatation Catheter for peripheral indications. Metacross RX is a rapid exchange (RX) type and the maximum diameter of the compatible guidewire is 0.035 inches (0.89 mm).

The distal section of this catheter consists of a balloon and dual lumen shafts (co-axial). The outer lumen is used for inflation and deflation of the balloon with contrast medium diluted with saline solution. The inner lumen (the guidewire lumen; from the distal tip to the guidewire port) is for inserting a compatible guidewire to facilitate advancing the catheter through the stenotic lesion or stent to be dilated. The proximal section is a single lumen shaft with a single luer port hub for connecting an inflation/deflation device. Inside the balloon, two radiopaque markers, which indicate the working length of the balloon, are placed to guide the physician for positioning the balloon properly in the targeted lesion under fluoroscopy. Metacross RX is available in various balloon sizes by its diameter and length at recommended inflation pressures (Nominal pressure). Upon inflation, the balloon diameter varies according to the inflating pressure. The balloon compliance chart of Metacross RX is provided in Table 1 at the end of this Instructions for Use. In the sterilization package, the device is equipped with the protective materials, a balloon protective tube and a stylet, which are to be removed before use. The balloon protective tube is placed over the balloon folded in a low profile and the stylet is inserted into the guidewire lumen to prevent collapsing the catheter shaft. The catheter's distal tip is tapered to facilitate the catheter's advancing into the stenotic lesion or stent.

The flushing needle is provided as an accessory of this device for flushing and filling the guidewire lumen with heparinized saline.

<NAME OF EACH PART>

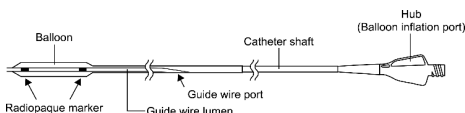

Sterile and non pyrogenic in an undamaged and unopened blister pouch. This device is sterilized by ethylene oxide.

Recommended guidewire diameter:

Maximum diameter: 0.035"(0.89 mm)

Recommended inflation pressure and maximum inflation pressure

Nominal pressure:

- Balloon diameter: smaller than 6 mm: 10atm
- Balloon diameter: 6 mm and larger: 8atm

Rated burst pressure:

- Balloon diameter: smaller than 5 mm: 20atm
- Balloon diameter: 5 mm : 18atm
- Balloon diameter: 6 mm, 7 mm, 8 mm : 14atm
- Balloon diameter: 9 mm and larger: 12atm

[INDICATIONS]

The Metacross RX PTA balloon dilatation catheter is intended to dilate stenosis in the iliac, femoral, ilio-femoral, popliteal, infra-popliteal and renal arteries, and for the treatment of obstructive lesions of native or synthetic arteriovenous dialysis fistulae. This device is also indicated for stent post-dilatation in the peripheral vasculature.

Note: The verification test for stent post-dilatation of Metacross RX was conducted using Complete® SE Vascular Stent System (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System (Cordis Corporation) and Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System (Boston Scientific Corporation).

[CONTRA-INDICATIONS]

1. Patients who have developed anastomotic stenosis within one month after AV shunt construction.
2. Patients having lesions which communicate with a pseudoaneurysm.
3. Patients who are pregnant.
4. Patients who cannot tolerate antiplatelet therapy or anticoagulant therapy.

[WARNINGS AND PRECAUTIONS]

[Warnings]

1. This device is for single use only. Do not reuse. Do not resterilize. Do not reprocess. Reprocessing may compromise the sterility, the biocompatibility and the physical integrity of the device.
2. Do not use if the product or the unit packaging has been damaged.
3. Do not inflate the balloon exceeding the diameter of the blood vessel proximal and distal to the stenotic lesion.
4. Do not inflate the balloon to a pressure exceeding the rated burst pressure.
5. Do not use this catheter in the central circulatory system.

[Precautions related to procedures]

1. Do it carefully and slowly to remove this device out of the carrier tube and to remove protection parts from this device, Careless handling may damage the balloon and/or the catheter shaft of this device to impair balloon inflation and/or deflation.
2. Inflate the balloon with the contrast medium diluted with saline in the ratio of 1:1 (hereafter, inflation fluid). No gaseous medium such as air should be used for inflation. (Balloon may be inflated irregularly.)
3. Prior to use, expel all the air in the balloon and balloon inflation lumen and replace it with the inflation fluid. (In case of incomplete air removal, balloon inflation state can not be observed under fluoroscopy.)
4. In case of serious stenotic lesions such as calcified lesions, the blood vessel can not be dilated fully. Do not apply a pressure exceeding the rated burst pressure in such a case. (The balloon may burst and the debris may remain inside the body.)
5. As for the medical devices used in conjunction with this catheter, follow the instructions for use of such devices. (When the balloon catheter is used for post-dilatation of stent during peripheral stent placement procedure, refer to the manufacturer's instructions for use.)
6. For insertion into stent, withdrawal from stent or in-stent dilatation of the balloon, proceed with caution under fluoroscopy. (Doing so without fluoroscopy may damage this catheter or injure the blood vessel.)
7. Do not attempt to pass the Metacross RX PTA balloon dilatation catheter through a smaller sized introducer sheath than indicated on the label. Refer to product labeling.

[Precautions during usage]

1. Use the device immediately after the sterile package is opened.
2. The entire procedure should be carried out aseptically.
3. This catheter should be used only by physicians skilled in percutaneous vascular therapy.
4. Select the catheter with appropriate balloon size (balloon diameter, balloon length) according to the following (procedures) criteria.
 - 1) The inflated balloon diameter shall not exceed the inner vessel diameter proximal and distal to the lesion.
 - 2) The length of the inflated balloon shall not exceed the length of the lesion to be treated.

(Inappropriate catheter selection may lead to acute vascular occlusion.)

5. Use this catheter only when emergency surgery can be performed at any time.
6. The physician in charge of the procedure should determine the duration and number of balloon inflations based on his/her past experiences.
7. Heparinized saline should be infused for anti-coagulation while this balloon catheter is inserted in the blood vessel.
8. Never inflate the balloon or advance the guidewire with the catheter bent or kinked.
9. Manipulate the catheter carefully in the blood vessel verifying the location and movement of its tip under fluoroscopy or DSA (Digital Subtraction Angiography) monitoring.
10. Always inflate the balloon while observing its inflation state under fluoroscopy. Inflate the balloon carefully while verifying its movement with the radiopaque markers. If any abnormality is found such as a little resistance, immovable catheter during manipulation or kinked distal tip of the guidewire, the procedure should be discontinued immediately and this catheter should be removed slowly together with the guidewire.
11. Do not insert or remove the catheter rapidly. (Operating rapidly may damage the catheter or injure the vascular intima.)
12. Do not move the catheter with the balloon inflated. (Moving the catheter with the balloon inflated may result in balloon burst or catheter shaft breakage.)
13. Do not inflate or deflate the balloon rapidly in the blood vessel. (Rapid inflation or deflation may damage the blood vessel or cause the balloon to burst resulting in the debris left inside the body.)
14. Do not use an injector (automatic injection device) for inflating the balloon.
15. Precautions should be taken to prevent any damage to the catheter by a surgical knife or scissors.
16. If any abnormality such as strong resistance is experienced while manipulating the catheter, the procedure should be discontinued immediately. The cause should be verified and appropriate measures should be taken. (Continuing the operation with excessive force may result in damage to the catheter or in vascular wall injury.)
17. Always pay attention to the patient's condition and monitor the body temperature, pulse, and breathing. When any abnormality is found, discontinue the use of the catheter immediately or take appropriate measures for the patient's condition on the discretion of the physician.
18. After use dispose the catheter as medical waste according to hospital procedures.
19. Do not use catheters containing organic solvents or oleaginous contrast media. Contact with these agents may lead to damage of the catheter.
20. While manipulating this catheter, do not twist or rotate the catheter.
21. While inserting this device into the blood vessel or removing this device from the blood vessel, make sure that the balloon is completely deflated. (A device with larger and longer balloon requires a longer deflation time.)
22. If resistance is felt during post procedural withdrawal of this device, it is recommended to withdraw the entire system together with the introducer / guide sheath.
23. Always use the catheter along a guide wire inserted into the guide wire lumen.

[Operational Instructions]

Materials typically required for PTA with the Metacross RX PTA balloon dilatation catheter include:

- Guidewire(s) of appropriate diameter and length
- Appropriate introducer/guide sheath and dilator set
- Vial of contrast medium
- Vial of sterile saline
- Inflation device with manometer
- Luer-lock syringe
- Three-way stopcock

[Operation method or instructions for use]

1. Selection of the catheter
Prior to use, verify the blood vessel inner diameter proximal and distal to the stenotic lesion under fluoroscopy, and select the catheter with appropriate balloon size. If two sizes are applicable to the diameter verified, select the smaller size.
2. Preparations
 - 1) After aseptically removing the catheter from the package container, remove the protective materials from the catheter.
 - 2) Replace the air in the balloon and balloon inflation lumen with inflation fluid according to the following procedures.
 - a) Attach the inflation device (not included in this kit) filled with the inflation fluid onto the balloon inflation port.
 - b) After applying negative pressure for approximately 10 seconds to the inflation device, direct the catheter shaft tip downward and release the negative pressure slowly to allow the fluid to fill the balloon and balloon inflation lumen and to expel the air.
 - c) When any air is found in the balloon and balloon inflation lumen, repeat the procedure b) until the air is expelled completely.
 - d) Detach the inflation device from the balloon inflation port and remove air from the cylinder of the inflation device.
 - e) Reattach the inflation device onto the balloon inflation port and maintain negative pressure. Verify that the air no longer returns into the syringe.
 - 3) Flush the guidewire lumen with heparinized saline using the flushing needle and fill the lumen with the heparinized saline.
 - 4) Immerse the entire Metacross RX PTA balloon dilatation catheter in saline.
3. Insertion and inflation of the balloon catheter
Prior to use, please check if this catheter is compatible to the guide catheter (not included in this kit), the introducer sheath (not included in this kit), and the guidewire (not included in this kit) by the following table.

Catalogue number	Balloon diameter (mm)	Compatible sheath (Fr/mm)	Maximum diameter for the guidewire (inch/mm)
BD-L30020MR	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2.00 mm	0.035 inch (0.89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2.33 mm	

When using the catheter inserted in the introducer sheath or guide catheter

- 1) When using the catheter in the guide catheter, loosen the hemostatic valve while keeping it tight enough to prevent blood leakage.
- 2) Gradually insert the catheter, with the balloon deflated completely, into the introducer sheath or guide catheter over the guidewire and advance to the distal periphery of the lesion. Under fluoroscopy, advance the catheter slowly to make its radiopaque marker in the balloon reach the target site.

- 3) Under fluoroscopy, verify the position of the radiopaque marker in the balloon and determine the dilatation site.
- 4) Attach the inflation device securely to the balloon inflation port.
- 5) Inflate the balloon gradually to the target diameter verifying the inflation pressure and dilate the stenotic lesion (for inflated balloon diameters, consult the balloon compliance chart provided in Table 1. at the end of this Instructions for Use).
4. Removal of the catheter
 - 1) After applying negative pressure to deflate the balloon completely, remove the catheter.
5. Re-insertion of the catheter
 - 1) If a re-insertion of the removed catheter with deflated balloon is required, ensure the balloon is completely deflated and folded before re-inserting it into the patient's blood vessel. On re-insertion use the catheter as per "Insertion and inflation of the balloon catheter" section herein.
 - 2) If any resistance is encountered while re-inserting the catheter, stop advancing it and carefully remove it out of the patient's blood vessel. Prepare to use a new Metacross RX in accordance with the procedures provided above in this section of this Instruction for Use.

[Complications]

Device Failures:

- Balloon rupture
- Insufficient inflation / deflation of the balloon
- Breakage of the balloon and / or the catheter shaft
- Difficulty in removing the device
- Leakage of inflation fluid

Adverse Events:

- Local or systemic infections
- Local internal bleeding or hematoma
- Intimal rupture
- Vascular dissection
- Vascular perforation
- Vascular rupture
- Aneurysm
- Arrhythmia
- Acute vascular occlusion
- Venous thromboembolism
- Vasospasm
- Formation of pseudoaneurysm
- Arteriovenous fistula
- Bleeding requiring transfusion
- Allergic response to the contrast media / renal failure
- Ache or pressing pain
- Death
- Embolism
- Endocarditis
- Fever
- Hypertension / Hypotension
- Inflammation
- Myocardial Infarction
- Sepsis
- Shock
- Stroke
- Transient Ischemic Attack

[Storage and expiration date]

1. Store in a cool, dry, dark place. Avoid exposure to water, direct sunlight.
2. The expiration date is indicated on the box. Do not use after the expiration date.

[Package]

1 set/box

[Name and address of manufacturer]



Manufacturer : KANEKA CORPORATION

Address: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN

TEL No.: (+81)-(0) 6-6226-5256

FAX No.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Authorized representative in the European Community:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Address: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

TEL No.: (+32)-(0) 14-256-297

FAX No.: (+32)-(0) 14-256-298

EU Distributor : TERUMO EUROPE N.V.

Address: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgium

TEL No.: (+32)-(0) 16 381 211

FAX No.: (+32)-(0) 16 400 249

All brand names are trademarks or registered trademarks of TERUMO CORPORATION and their respective owners.

Table 1. Metacross RX Balloon Compliance Chart

Pressure (atm)	Balloon Diameter (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40*	7.49*	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							


* Nominal pressure

** Rated Burst Pressure

[DESCRIPTIF DU PRODUIT]

Metacross RX est un cathéter de dilatation à ballonnet pour l'angioplastie transluminale percutanée (PTA) périphérique. Metacross RX est un système à échange rapide (RX) et le diamètre maximal du guide compatible est de 0.035 pouces (0,89 mm). La partie distale de ce cathéter est composée d'un ballonnet et d'un corps à double lumière (co-axial). La lumière externe est utilisée pour gonfler et dégonfler le ballonnet à l'aide d'un produit de contraste dilué dans du sérum physiologique. La lumière interne (lumière du guide ; de l'extrémité distale à l'orifice du guide) permet d'insérer un guide compatible afin de faciliter le passage du cathéter au travers de la lésion sténosante ou du stent à dilater. La partie proximale est constituée d'un corps à lumière unique avec une embase de connexion Luer unique permettant de raccorder un dispositif de gonflage/dégonflage. À l'intérieur du ballonnet, deux marqueurs radio-opaques, indiquant la longueur utile du ballonnet, sont présents pour aider le médecin à positionner le ballonnet correctement dans la lésion cible sous radioscopie. Metacross RX est disponible avec plusieurs tailles de ballonnet déterminant son diamètre et sa longueur aux pressions de gonflage recommandées (pression nominale). Lors du gonflage, le diamètre du ballonnet varie en fonction de la pression de gonflage. Les valeurs de compléance du ballonnet du dispositif Metacross RX sont fournies dans le tableau 1, à la fin de ces instructions d'utilisation. Dans le conditionnement stérile, le dispositif est équipé de couches protectrices, un tube de protection du ballonnet et un stylet, qui doivent être retirés avant utilisation. Le tube de protection du ballonnet est placé sur le ballonnet, replié en position compacte, et le stylet est inséré dans la lumière du guide afin d'empêcher le corps du cathéter de s'écraser. L'extrémité distale du cathéter est fuselée pour faciliter la progression du cathéter dans la lésion sténosante ou le stent. L'aiguille de rinçage est fournie comme accessoire avec ce dispositif pour rincer et remplir la lumière du guide à l'aide de sérum physiologique hépariné.

<NOM DE CHAQUE SEGMENT>

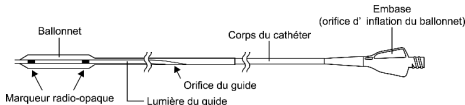

Produit fourni stérile et apyrogène dans un blister fermé et intact. Ce dispositif a été stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Diamètre du guide recommandé :

Diamètre maximal : 0,035" (0,89 mm)

Pression d'inflation recommandée et pression d'inflation maximale

Pression nominale :

- Diamètre du ballonnet : inférieur à 6 mm : 10 atm
- Diamètre du ballonnet : 6 mm et plus : 8 atm

Pression de rupture nominale :

- Diamètre du ballonnet : inférieur à 5 mm : 20 atm
- Diamètre du ballonnet : 5 mm : 18 atm
- Diamètre du ballonnet : 6 mm, 7 mm, 8 mm : 14 atm
- Diamètre du ballonnet : 9 mm et plus : 12 atm

[INDICATIONS]

Le cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA Metacross RX est destiné à la dilatation des sténoses dans les artères iliaques, fémorales, ilio-fémorales, poplitées, infra-poplitées et rénales et au traitement des lésions obstructives au niveau des fistules artério-veineuses (AV) spontanées ou artificielles pour dialyse. Ce dispositif est également indiqué pour la post-dilatation du stent dans le réseau vasculaire périphérique.

Remarque : le test de vérification concernant la post-dilatation du stent avec Metacross RX a été réalisé en utilisant le système de

stent vasculaire Complete® SE (Medtronic, Inc), le système de stent vasculaire S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) et le système de stent vasculaire auto-expandible Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[CONTRE-INDICATIONS]

1. Patients ayant développé une sténose anastomotique dans le mois suivant la mise en place d'une dérivation AV (shunt).
2. Patients présentant des lésions communiquant avec un pseudo-anévrisme.
3. Patientes enceintes.
4. Patients intolérants au traitement antiplaquettaire ou anticoagulant.

[AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS]

[Avertissements]

1. Ce dispositif est à strict usage unique. Ne pas réutiliser. Ne pas stériliser. Ne pas re-traiter. Le retraitement peut compromettre la stérilité, la biocompatibilité et l'intégrité fonctionnelle du dispositif.
2. Ne pas utiliser si le produit ou le conditionnement individuel est endommagé.
3. Ne pas gonfler le ballonnet au-delà du diamètre du vaisseau sanguin en amont et en aval de la sténose.
4. Ne pas gonfler le ballonnet à un niveau de pression dépassant la pression de rupture nominale.
5. Ne pas utiliser ce cathéter dans le système circulatoire central.

[Précautions à respecter lors des procédures]

1. Retirer lentement et avec précaution ce dispositif du tube support et enlever les segments de protection de ce dispositif. Une manipulation imprudente pourrait endommager le ballonnet et/ou le corps du cathéter, ce qui risquerait d'entraver l'inflation et/ou la déflation du ballonnet.
2. Gonfler le ballonnet à l'aide du produit de contraste dilué dans du sérum physiologique en proportion de 1/1 (appelé ci-après « liquide d'inflation »). Aucun produit gazeux tel que l'air ne doit être utilisé pour l'inflation. (L'inflation du ballonnet risquerait d'être irrégulière.)
3. Avant utilisation, expulser tout l'air présent dans le ballonnet et au sein de la lumière du conduit d'inflation du ballonnet et le remplacer par le liquide d'inflation. (Si l'air n'a pas été totalement éliminé, le niveau d'inflation du ballonnet ne pourra être observé sous radioscopie.)
4. En cas de lésions sténosantes graves, telles que des lésions calcifiées, le vaisseau sanguin ne peut pas être entièrement dilaté. Dans ce cas, ne pas appliquer une pression dépassant la pression de rupture nominale. (Le ballonnet risquerait d'éclater et pourrait laisser des débris dans l'organisme.)
5. S'agissant des dispositifs médicaux utilisés en association avec ce cathéter, suivre les instructions d'utilisation des dispositifs en question. (Si le cathéter à ballonnet est utilisé pour la post-dilatation du stent au cours d'une procédure de pose d'un stent périphérique, se reporter aux instructions d'utilisation du fabricant.)
6. Pour insérer le ballonnet dans le stent, le retirer ou le dilater à l'intérieur du stent, procéder avec précaution sous radioscopie. (La réalisation de ces opérations sans recours à la radioscopie pourrait endommager le cathéter ou léser le vaisseau sanguin.)
7. Ne pas tenter de faire passer le cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA Metacross RX au travers d'un introducteur de taille inférieure à celle indiquée sur l'étiquetage. Se reporter à l'étiquetage du produit.

[Précautions à observer en cours d'utilisation]

1. Utiliser immédiatement le dispositif une fois le conditionnement stérile ouvert.
2. La totalité de la procédure doit être réalisée dans des conditions d'asepsie.

- Ce cathéter doit être utilisé exclusivement par des médecins expérimentés dans le domaine du traitement vasculaire percutané.
- Sélectionner le cathéter disposant d'un ballonnet de taille appropriée (diamètre du ballonnet, longueur du ballonnet) sur la base des critères (des procédures) suivants.
 - Le diamètre du ballonnet gonflé ne doit pas dépasser le diamètre interne du vaisseau en amont et en aval de la lésion.
 - La longueur du ballonnet gonflé ne doit pas dépasser la longueur de la lésion à traiter. (Une sélection inappropriée du cathéter pourrait entraîner une occlusion vasculaire aiguë.)
- Utiliser ce cathéter uniquement si une intervention chirurgicale en urgence peut être pratiquée à tout moment.
- Le médecin chargé de la procédure devra déterminer la durée et le nombre d'inflations du ballonnet sur la base de son expérience professionnelle.
- Le sérum physiologique hépariné doit être injecté en perfusion en tant qu'anticoagulant lorsque ce cathéter à ballonnet est introduit dans le vaisseau sanguin.
- Ne jamais gonfler le ballonnet ou faire avancer le guide si le cathéter est courbé ou plié.
- Manipuler le cathéter avec précaution dans le vaisseau sanguin, en vérifiant la localisation et le déplacement de son extrémité sous radioscopie ou angiographie numérisée (DSA, Digital Subtraction Angiography).
- Veiller à toujours gonfler le ballonnet en surveillant le niveau de l'inflation sous radioscopie. Gonfler le ballonnet avec précaution en vérifiant ses déplacements à l'aide des marqueurs radio-opaques. Si la moindre anomalie est observée, comme une légère résistance, un blocage du cathéter lors de la manipulation ou une plicature de l'extrémité distale du guide, la procédure doit être immédiatement interrompue et le cathéter doit être retiré lentement, conjointement avec le guide.
- Ne pas insérer ou retirer rapidement le cathéter. (Tout déplacement brusque pourrait endommager le cathéter ou léser la paroi interne du vaisseau.)
- Ne pas déplacer le cathéter lorsque le ballonnet est gonflé. (Si le cathéter est déplacé alors que le ballonnet est gonflé, le ballonnet pourrait éclater ou le corps du cathéter pourrait se rompre.)
- Ne pas gonfler ou dégonfler le ballonnet rapidement dans le vaisseau sanguin. (En cas d'inflation ou de déflation rapide, le vaisseau sanguin pourrait être lésé ou le ballonnet pourrait éclater, laissant des débris dans l'organisme.)
- Ne pas utiliser d'injecteur (appareil d'injection automatique) pour gonfler le ballonnet.
- Prendre les précautions pour ne pas endommager le cathéter avec un bistouri ou des ciseaux chirurgicaux.
- Si la moindre anomalie, telle une forte résistance, survient pendant la manipulation du cathéter, la procédure doit être immédiatement interrompue. La cause du problème doit être recherchée et les mesures appropriées doivent être prises. (Poursuivre l'opération en appliquant une force excessive pourrait endommager le cathéter ou léser la paroi vasculaire.)
- Veiller à toujours prêter attention à l'état du patient et surveiller sa température corporelle, son pouls et sa respiration. Si une anomalie est observée, interrompre immédiatement l'utilisation du cathéter ou prendre les mesures adaptées à l'état du patient, à la discrétion du médecin.
- Après utilisation, éliminer le cathéter comme il convient pour un déchet médical selon les procédures de l'hôpital.
- N'utiliser aucun agent contenant des solvants organiques ni aucun produit de contraste oléagineux. Tout contact avec ces agents pourrait endommager le cathéter.
- Ne pas tordre ou faire tourner le cathéter lors de sa manipulation.
- Lors de l'insertion de ce dispositif dans le vaisseau sanguin ou de son retrait hors du vaisseau sanguin, s'assurer de la déflation totale du ballonnet. (Le temps de déflation nécessaire pour un ballonnet de taille et de longueur supérieure est plus important.)
- Si une résistance se fait sentir lors du retrait du dispositif après la procédure, il est recommandé de retirer l'ensemble du système, l'introducteur et le guide.
- Le cathéter doit toujours être utilisé le long d'un guide, inséré dans la lumière du guide.

[Instructions pour la procédure]

Le matériel habituellement nécessaire pour réaliser la PTA avec le cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA Metacross RX comprend :

- Guide(s) de diamètre et de longueur appropriés
- Introducteur/guide et dilateur appropriés
- Flacon de produit de contraste
- Flacon de sérum physiologique stérile
- Dispositif de gonflage avec manomètre
- Seringue Luer-Lock
- Robinet à trois voies

[Mode de fonctionnement ou instructions d'utilisation]

- Sélection du cathéter

Avant utilisation, évaluer le diamètre interne du vaisseau sanguin en amont et en aval de la sténose sous radioscopie, puis choisir le cathéter disposant d'un ballonnet de taille appropriée. Si deux tailles correspondent au diamètre mesuré, choisir la plus petite.
- Préparation
 - Une fois le cathéter sorti de l'emballage dans des conditions d'asepsie, retirer les couches protectrices du cathéter.
 - Remplacer l'air présent dans le ballonnet et dans la lumière du conduit d'inflation du ballonnet par le liquide d'inflation en procédant comme indiqué ci-dessous.
 - Raccorder le dispositif d'inflation (non fourni) rempli de liquide à l'orifice d'inflation du ballonnet.
 - Après avoir appliqué une pression négative pendant environ 10 secondes dans le dispositif d'inflation, orienter l'extrémité du corps du cathéter vers le bas et libérer lentement la pression négative afin de permettre au liquide de remplir le ballonnet et la lumière du conduit d'inflation du ballonnet et pour permettre l'expulsion de l'air.
 - Si de l'air est encore présent dans le ballonnet et la lumière du conduit d'inflation du ballonnet, répéter l'étape b) jusqu'à expulsion totale de l'air.
 - Déconnecter le dispositif d'inflation de l'orifice d'inflation du ballonnet et éliminer l'air présent dans le cylindre.
 - Raccorder à nouveau le dispositif d'inflation à l'orifice d'inflation du ballonnet et maintenir une pression négative. Vérifier que l'air ne rentre plus dans la seringue.
 - Rincer la lumière du guide à l'aide de sérum physiologique hépariné en utilisant l'aiguille de rinçage et remplir la lumière de sérum physiologique hépariné.
 - Immerger entièrement le cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA Metacross RX dans du sérum physiologique.
- Insertion du cathéter et gonflage du ballonnet

Avant utilisation, vérifier que ce cathéter est compatible avec le cathéter guide (non fourni), l'introducteur (non fourni) et le guide (non fourni) à l'aide du tableau suivant.

Référence	Diamètre du ballonnet (mm)	Introducteur compatible (Fr/mm)	Diamètre maximal du guide (pouces/mm)
BD-L30020MR ~	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 po (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Lorsque le cathéter est inséré dans l'introducteur ou le cathéter guide:

- Lorsque le cathéter est utilisé dans le cathéter guide, relâcher la valve hémostatique tout en la laissant suffisamment serrée pour éviter toute fuite de sang.
- Insérer progressivement le cathéter, avec le ballonnet entièrement dégonflé, dans l'introducteur ou le cathéter guide en passant sur le guide et le faire avancer en direction de la périphérie de la lésion, en aval de celle-ci. Sous radioscopie, faire avancer lentement le cathéter jusqu'à ce que son marqueur radio-opaque, dans le ballonnet, atteigne le site cible.
- Sous radioscopie, contrôler la position du marqueur radio-opaque dans le ballonnet et repérer le site à dilater.

- 4) Fixer solidement le dispositif d'inflation sur l'orifice d'inflation du ballonnet.
- 5) Gonfler progressivement le ballonnet jusqu'à atteindre le diamètre cible tout en contrôlant la pression de gonflage et dilater la lésion sténosante (pour connaître les diamètres du ballonnet gonflé, consulter les valeurs de compliance du ballonnet fournies dans le tableau 1, à la fin de ces instructions d'utilisation).
4. Retrait du cathéter
 - 1) Après avoir appliqué une pression négative afin de dégonfler totalement le ballonnet, retirer le cathéter.
5. Ré-insertion du cathéter
 - 1) S'il est nécessaire de ré-insérer le cathéter retiré avec le ballonnet dégonflé, vérifier que le ballonnet est entièrement dégonflé et replié avant de le ré-insérer dans le vaisseau sanguin du patient. Lors de la ré-insertion, utiliser le cathéter comme indiqué dans la section « Insertion du cathéter et gonflage du ballonnet » de ce document.
 - 2) Si une résistance se fait sentir lors de la ré-insertion du cathéter, arrêter de le faire avancer et le retirer avec précaution du vaisseau sanguin du patient. Préparer l'utilisation d'un nouveau dispositif Metacross RX conformément aux procédures décrites ci-dessus dans cette section des instructions d'utilisation.

[Complications]

Défaillances du dispositif :

- Rupture du ballonnet
- Inflation/déflation insuffisante du ballonnet
- Rupture du ballonnet et/ou du corps du cathéter
- Difficultés à retirer le dispositif
- Fuite du liquide d'inflation

Événements indésirables :

- Infections locales ou généralisées
- Hémorragie ou hématomes internes localisés
- Rupture de la paroi vasculaire interne
- Dissection vasculaire
- Perforation vasculaire
- Rupture vasculaire
- Anévrisme
- Arythmies
- Occlusion vasculaire aiguë
- Thrombo-embolie veineuse
- Vasospasme
- Formation d'un pseudo-anévrisme
- Fistule artério-veineuse
- Hémorragie nécessitant une transfusion
- Réaction allergique au produit de contraste/insuffisance rénale
- Douleur ou pression douloureuse
- Décès
- Embolie
- Endocardite
- Fièvre
- Hypertension/hypotension
- Inflammation
- Infarctus du myocarde
- Sepsie
- Choc
- Accident vasculaire cérébral
- Accident ischémique transitoire

[Stockage et date de péremption]

1. Conserver le dispositif dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Éviter toute exposition à l'eau et à la lumière directe du soleil.
2. La date de péremption est indiquée sur la boîte. Ne pas utiliser après la date de péremption.

[Conditionnement]

1 jeu/boîte

[Nom et adresse du fabricant ou représentant]



Fabricant: KANEKA CORPORATION

Adresse : 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city, OSAKA, 530-8288 JAPAN

Tél. : (+81)-(0) 6-6226-5256

Fax : (+81)-(0) 6-6226-5143



Représentant agréé dans la Communauté européenne :

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresse : Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerloo-Oevel, BELGIUM

Tél. : (+32)-(0) 14-256-297

Fax : (+32)-(0) 14-256-298

Distributeur dans l'UE : TERUMO EUROPE N.V.

Adresse : INTERLEUVENLAAN 40,3001 LOUVAIN, Belgique

Tél. : (+32)-(0) 16 381 211

Fax : (+32)-(0) 16 400 249

Tous les noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires respectifs.

Tableau 1: Valeurs de compliance du ballonnet Metacross RX

Pression (atm)	Diamètre du ballonnet (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							


* Pression nominale

** Pression de rupture

[PRODUKTBESCHREIBUNG]

Metacross RX ist ein Ballondilatationskatheter zur perkutanen transluminalen Angioplastie (PTA) an peripheren Gefäßen. Metacross RX ist für den schnellen Wechsel (RX) konzipiert und der maximale Durchmesser des kompatiblen Führungsdrahtes beträgt 0,89 mm. Der distale Teil dieses Katheters besteht aus einem Ballon und dualen Lumenschäften (koaxial). Das äußere Lumen dient zur Inflation und Deflation des Ballons mit einem mit Kochsalzlösung verdünnten Kontrastmittel. Das innere Lumen (das Führungsdrahtlumen; von der distalen Spitze bis zum Führungsdrahtport) dient zum Einführen eines kompatiblen Führungsdrahts, um das Vorschieben des Katheters durch die stenotische Läsion oder den zu dilatierenden Stent zu vereinfachen. Der proximale Teil ist ein einzelner Lumenschaff mit einem einzelnen Luer-Port-Hub für den Anschluss einer Inflations-/Deflationsvorrichtung. Im Ballon sind zwei röntgendichte Marker, welche die Arbeitslänge des Ballons anzeigen, platziert, um den Arzt bei der korrekten Positionierung des Ballons unter Durchleuchtung zu unterstützen. Metacross RX ist in verschiedenen Ballongrößen gemäß dem entsprechenden Durchmesser und der entsprechenden Länge bei den empfohlenen Inflationsdrücken (Nennndruck) erhältlich. Bei der Inflation verändert sich der Ballondurchmesser gemäß dem Inflationsdruck. Das Ballon-Compliance-Diagramm des Metacross RX finden Sie in Tabelle 1 am Ende dieser Gebrauchsanweisung. In der sterilen Verpackung ist der Ballonkatheter mit den Schutzvorrichtungen, einem Ballon-Schutzhub und einem Mandrin, versehen, die vor dem Gebrauch entfernt werden müssen. Der Ballon-Schutzhub ist über den flach zusammengefalteten Ballon gezogen; der Mandrin ist in das Führungsdrahtlumen eingeführt, um ein Kollabieren des Katheters zu verhindern. Die distale Spitze des Katheters ist konisch, um das Vorschieben des Katheters in die stenotische Läsion oder den Stent zu vereinfachen. Die Spülnadel wird als Zubehör zu diesem Gerät bereitgestellt. Sie dient zum Spülen und Befüllen des Führungsdrahtlumens mit Kochsalzlösung.

<BENENNUNG DER EINZELNEN BESTANDTEILE>

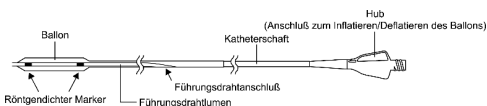

Steril und nicht pyrogen in unbeschädigter und ungeöffneter Blisterverpackung. Dieses Produkt wurde mit Ethylenoxid sterilisiert.

Empfohlener Führungsdrahtdurchmesser:

Maximaler Durchmesser: 0,035" (0,89 mm)

Empfohlener und maximaler Inflationsdruck

Nominaldruck:

- Ballondurchmesser: kleiner als 6 mm: 10 atm
- Ballondurchmesser: 6 mm und größer: 8 atm

Nennberstdruck:

- Ballondurchmesser: kleiner als 5 mm: 20 atm
- Ballondurchmesser: 5 mm: 18 atm
- Ballondurchmesser: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Ballondurchmesser: 9 mm und größer: 12 atm

[INDIKATIONEN]

Der Metacross RX PTA-Ballondilatationskatheter ist vorgesehen zur Dilatation von Stenosen in der A. iliaca, A. femoralis, A. poplitea, A. infra-poplitea und der A. renalis sowie für die Behandlungen von obstruktiven Läsionen nativer oder synthetischer arteriovenöser Dialysefisteln. Das Produkt ist zudem für die Post-Dilatation von Stents in der peripheren Gefäßen zugelassen.

Hinweis: Der Verifizierungstest für die Stent-Postdilatation des Metacross RX wurde mithilfe des Vaskulären Stentsystems Complete®

SE (Medtronic, Inc), des vaskulären Stentsystems S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) und des selbstexpandierenden vaskulären Stent-Systems Epic™ (Boston Scientific Corporation) durchgeführt.

[KONTRAINDIKATIONEN]

1. Bei Patienten, die innerhalb von einem Monat nach Anlage eines arteriovenösen Shunts eine Stenose im Bereich der Anastomose entwickelt haben.
2. Bei Patienten, die mit einem Pseudoaneurysma kommunizierende Läsionen aufweisen.
3. Bei schwangeren Patientinnen.
4. Bei Patienten, die keine plättchenhemmende Therapie oder Antikoagulationstherapie vertragen.

[WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN]

[Warnungen]

1. Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen. Nicht wiederverwenden. Nicht resterilisieren. Nicht wiederaufbereiten. Das Wiederaufbereiten kann die Sterilität, die Biokompatibilität und die physikalische Integrität des Produktes beeinträchtigen.
2. Nicht verwenden, wenn das Produkt oder seine Verpackung beschädigt ist.
3. Der inflatierte Ballon darf den inneren Gefäßdurchmesser proximal und distal der Läsion nicht überschreiten
4. Den Ballon nicht weiter als bis zum Nennberstdruck inflatieren.
5. Dieser Katheter darf nicht am zentralen Kreislaufsystem eingesetzt werden.

[Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Verfahren]

1. Den Ballonkatheter vorsichtig und langsam aus dem Schutzhub entnehmen und die Schutzelemente entfernen. Durch unachtsame Handhabung kann der Ballon und/oder der Katheterschaft des Ballons beschädigt werden, was die Inflation und/oder Deflation des Ballons beeinträchtigt.
2. Den Ballon nur mit Kontrastmittel, das im Verhältnis 1:1 mit Kochsalzlösung verdünnt wurde befüllen (nachstehend als „Inflationsflüssigkeit“ bezeichnet). Zur Inflation sollte kein gasförmiges Medium, wie Luft, verwendet werden. (Der Ballon kann sich ungleichmäßig füllen.)
3. Vor dem Gebrauch sämtliche Luft aus dem Ballon und dem Inflationslumen entfernen und durch Inflationsflüssigkeit ersetzen. (Wenn die Luft nicht vollständig entfernt wird, kann der Inflationsstatus des Ballons nicht unter Durchleuchtung beobachtet werden.)
4. In Fällen von schweren stenotischen Läsionen, wie kalzifizierten Läsionen, kann das Blutgefäß nicht vollständig dilatiert werden. In diesem Fall keinen Druck ausüben, der den Nennberstdruck übersteigt. (Der Ballon kann bersten und Bestandteile können im Körper verbleiben.)
5. Für die Medizinprodukte, die zusammen mit diesem Katheter verwendet werden, sind die jeweiligen Gebrauchsanweisungen zu befolgen. (Weitere Informationen zum Verwenden des Ballonkatheters für die Post-Dilatation von Stents bei der peripheren Stentplatzierung finden Sie in der Herstelleranleitung.)
6. Beim Einführen des Ballons in den Stent, Zurückziehen des Ballons aus dem Stent oder der Dilatation des Ballons im Stent gehen Sie vorsichtig und unter Durchleuchtung vor. (Bei einer Manipulation ohne Durchleuchtung kann der Katheter beschädigt oder das Gefäß verletzt werden.)
7. Versuchen Sie nicht, den Metacross RX PTA-Ballondilatationskatheter durch eine Einführschleuse von einer kleineren Größe als auf dem Typenschild angegeben einzuführen. Siehe das Typenschild am Produkt.

[Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch]

1. Produkt unmittelbar nach Öffnen der sterilen Verpackung verwenden.

2. Der gesamte Eingriff ist unter sterilen Bedingungen durchzuführen.
3. Dieser Katheter sollte nur von Ärzten verwendet werden, die mit der perkutanen Gefäßtherapie vertraut sind.
4. Katheter mit geeigneter Ballongröße (Ballondurchmesser, Ballonlänge) gemäß den folgenden (Operations-)Kriterien auswählen.
 - 1) Der Durchmesser des inflatierten Ballons darf den inneren Gefäßdurchmesser proximal und distal der Läsion nicht überschreiten.
 - 2) Die Länge des inflatierten Ballons darf die Länge der zu behandelnden Läsion nicht überschreiten.
(Die Wahl eines ungeeigneten Katheters kann zu einer akuten vaskulären Okklusion führen.)
5. Dieser Katheter darf nur verwendet werden, wenn zu jedem Zeitpunkt eine Notoperation durchgeführt werden kann.
6. Der operierende Arzt sollte die Dauer und die Anzahl der Balloninflationen aufgrund seiner Erfahrungen festlegen.
7. Während der Katheter ins Blutgefäß eingeführt ist, sollte heparinisierte Kochsalzlösung zur Gerinnungshemmung infundiert werden.
8. Wenn der Katheter verbogen oder geknickt ist, darf der Ballon nicht inflatiert und der Führungsdraht nicht vorgeschoben werden.
9. Den Katheter vorsichtig im Blutgefäß bewegen. Dabei die Position und die Bewegung seiner Spitze unter Durchleuchtung oder mit einem DSA-Monitor (Digitale Subtraktionsangiographie) überwachen.
10. Den Ballon stets unter Beobachtung seines Inflationsstatus unter Durchleuchtung befüllen. Ballon vorsichtig inflatieren und seine Bewegung anhand der röntgengedichten Marker kontrollieren. Wenn Anomalien (z. B. ein leichter Widerstand, ein Katheter, der sich nicht bewegen lässt, oder eine geknickte distale Spitze des Führungsdrahts) auftreten, sollte die Prozedur sofort abgebrochen und der Katheter zusammen mit dem Führungsdraht langsam entfernt werden.
11. Der Katheter darf nicht schnell eingeführt oder entfernt werden.
(Durch ein schnelles bewegen kann der Katheter beschädigt oder die Tunica intima verletzt werden.)
12. Bewegen Sie den Dilatationskatheter erst, nachdem der Ballon vollständig deflatiert ist. (Wenn der Katheter mit gefülltem Ballon bewegt wird, kann der Ballon platzen oder der Katheterschaft brechen.)
13. Der Ballon darf im Gefäß nicht schnell gefüllt oder entleert werden.
(Schnelles Füllen oder Entleeren kann dazu führen, dass das Gefäß beschädigt wird oder der Ballon platzt und Teile des Ballons im Körper verbleiben.)
14. Keinen Injektor (automatisches Injektionsgerät) zur Inflation des Ballons verwenden.
15. Es sollten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um Beschädigungen durch ein chirurgisches Messer oder eine chirurgische Schere am Katheter zu vermeiden.
16. Wenn beim Bewegen des Katheters Anomalien, wie beispielsweise ein starker Widerstand, auftreten, muss das Verfahren sofort eingestellt werden. Die Ursache sollte festgestellt und die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. (Die Fortsetzung des Eingriffs mit übermäßiger Kräfteanwendung kann zu Schäden am Katheter oder Verletzungen der Gefäßwand führen.)
17. Stets auf den Zustand des Patienten achten und Körpertemperatur, Puls und Atmung überwachen. Bei Anomalien sollte der Arzt nach seinem Ermessen den Einsatz des Katheters sofort beenden oder entsprechende Maßnahmen ergreifen, um den Zustand des Patienten zu verbessern.
18. Nach dem Gebrauch ist der Katheter gemäß den Standardverfahren des Krankenhauses als medizinischer Abfall zu entsorgen.
19. Keine Substanzen mit organischen Lösungsmitteln oder ölhaltige Kontrastmittel verwenden. Ein Kontakt mit diesen Mitteln kann zu Schäden am Katheter führen.
20. Bei der Betätigung dieses Katheters den Katheter nicht verdrehen oder verwickeln
21. Beim Einführen dieses Produktes in das Blutgefäß oder beim Zurückziehen dieses Produktes aus dem Blutgefäß sicherstellen, dass der Ballon vollständig deflatiert wird. (Bei größeren und längeren Ballonen ist eine längere Zeit zur Deflation erforderlich.)
22. Wenn beim Zurückziehen nach der Intervention ein Widerstand zu spüren ist, wird empfohlen, das gesamte System zusammen als eine Einheit mit Einführ-/Führungsschleuse zurückzuziehen.
23. Den Katheter stets über einen Führungsdraht, der in das Führungsdrahtlumen eingeführt ist, verwenden.

Bedienungsanleitung

Die Materialien, die üblicherweise für eine PTA mit dem Metacross RX PTA-Balloon Dilatationskatheter benötigt werden, umfassen u. a.

Folgendes:

- Führungsdraht (Führungsdrähte) von geeignetem Durchmesser und adäquater Länge
- Geeignete Einführ-/Führungsschleuse und Dilator-Set
- Fläschchen mit Kontrastmittel
- Fläschchen mit steriler Kochsalzlösung
- Inflationsgerät mit Manometer
- Luer-Lock-Spritze
- Drei-Wege-Hahn

[Bedienung oder Gebrauchsanweisung]

1. Wahl des Katheters

Vor dem Gebrauch unter Durchleuchtung den Innendurchmesser des Gefäßes proximal und distal zur stenotischen Läsion bestimmen und den Katheter mit der geeigneten Ballongröße wählen. Falls zwei Größen für den ermittelten Durchmesser in Frage kommen, sollte die kleinere gewählt werden.

2. Vorbereitungen

- 1) Nachdem der Katheter unter aseptischen Bedingungen aus seiner Verpackung entnommen wurde, ist das Schutzmaterial vom Ballonkatheter zu entfernen.
- 2) Die Luft in Ballon und Inflationslumen gemäß den folgenden Schritten durch Inflationsflüssigkeit ersetzen:
 - a) Das mit Inflationsflüssigkeit gefüllte Inflationsgerät (nicht in diesem Set enthalten) an den Füllanschluss anschließen.
 - b) Ca. 10 Sekunden lang Unterdruck an das Inflationsgerät anlegen. Anschließend die Katheterschaftspitze nach unten halten und den Unterdruck langsam entweichen lassen, damit die Flüssigkeit den Ballon und das Inflationslumen füllen und die Luft verdrängen kann.
 - c) Wenn sich nach dem Befüllen des Ballons mit der Inflationsflüssigkeit noch Luft im Ballon oder im Anschlussstück befindet, ist Schritt b) so lange zu wiederholen, bis die Luft vollständig entfernt ist.
 - d) Inflationsgerät vom Füllanschluss abnehmen und die Luft im Zylinder des Inflationsgeräts entfernen.
 - e) Inflationsgerät wieder am Inflationsanschluss des Ballons anbringen und den Unterdruck beibehalten. Sicherstellen, dass die Luft nicht mehr in die Spritze zurückkehrt.
- 3) Das Lumen des Führungsdrahtes unter Verwendung der Spülnadel mit heparinisierte Kochsalzlösung spülen und dann mit der heparinisierten Kochsalzlösung füllen.
- 4) Den gesamten Metacross RX PTA-Balloon Dilatationskatheter in Kochsalzlösung eintauchen.
3. Einführung und Inflation des Ballonkatheters
Prüfen Sie vor dem Gebrauch gemäß der folgenden Tabelle, ob dieser Katheter mit dem Führungskatheter (in diesem Kit nicht enthalten), der Einführschleuse (in diesem Kit nicht enthalten) und dem Führungsdraht (in diesem Kit nicht enthalten) kompatibel ist.

Katalognummer	Ballon- durchmesser (mm)	Kompatible Schleuse (Fr/mm)	Maximaler Führungsdraht- durchmesser (inch./mm)
BD-L30020MR ~ BD-L70200ER	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 inch. (0,89 mm)
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Verwendung des in die Einführschleuse oder den Führungskatheter eingeführten Katheter

- 1) Bei Verwendung des Katheters im Führungskatheter:
Hämostatisches Ventil lockern, aber so stark angezogen lassen, dass kein Blut austritt.
- 2) Den Katheter langsam und mit vollständig deflatiertem Ballon in die Einführschleuse einführen. Den Katheter über einen Führungsdraht in die distale Peripherie der Läsion vorschieben. Den Katheter langsam und unter Durchleuchtung vorschieben, damit sein röntgendichter Marker im Ballon die Zielposition erreicht.
- 3) Unter Durchleuchtung die Position des röntgendichten Markers im Ballon verifizieren und die Dilatationsstelle bestimmen.
- 4) Das Inflationsgerät sicher am Inflationsanschluss des Ballons anschließen.
- 5) Ballon allmählich unter Kontrolle des Inflationsdrucks bis zum Zieldurchmesser füllen und die stenotische Läsion aufweiten (die Durchmesser des inflatierten Ballons finden Sie im Ballon-Compliance-Diagramm in Tabelle 1 am Ende dieser Gebrauchsanweisung).
4. Entfernen des Katheters
 - 1) Unterdruck anlegen, um den Ballon vollständig zu entleeren, und dann den Katheter entfernen.
5. Wiedereinführung des Katheters
 - 1) Wenn eine Wiedereinführung des entfernten Katheters mit dem deflatierten Ballon erforderlich ist, sicherstellen, dass der Ballon vollständig deflatiert und zusammengefalt ist, bevor er wieder in das Blutgefäß des Patienten eingeführt wird. Nach der Wiedereinführung den Katheter gemäß dem Abschnitt „Einführung und Inflation des Ballonkatheters“ in dieser Bedienungsanleitung verwenden.
 - 2) Wenn bei der Wiedereinführung des Katheters Widerstand zu spüren ist, den Katheter nicht weiter vorschieben. Stattdessen den Katheter vorsichtig aus dem Blutgefäß des Patienten entfernen. Die Verwendung eines neuen Metacross RX gemäß den oben in diesem Abschnitt der Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren vorbereiten.

[Komplikationen]

Produktversagen:

- Ballonruptur
- Unzureichende Inflation/Deflation des Ballons
- Bruch des Ballons und/oder des Katheterschafts
- Probleme beim Zurückziehen des Produktes
- Austreten von Inflationsflüssigkeit

Unerwünschte Ereignisse:

- Lokale oder systemische Infektionen
- Lokale innere Blutungen oder Hämatome
- Intimaruptur
- Gefäßdissektion
- Gefäßperforation
- Gefäßruptur
- Aneurysma
- Arrhythmie
- Akuter Gefäßverschluss
- Venöse Thromboembolie
- Vasospasmus
- Bildung eines Pseudoaneurysmas
- Arteriovenöse Fistel
- Blutungen, die eine Transfusion erfordern
- Allergische Reaktion auf das Kontrastmittel/Nierenversagen
- Anhaltender oder drückender Schmerz
- Tod
- Embolie
- Endokarditis
- Fieber
- Hypotension/Hypertension
- Entzündung
- Myokardinfarkt
- Sepsis
- Schock

- Schlaganfall
- ischämische Attacke (TIA)

[Aufbewahrung und Verfallsdatum]

1. An einem kühlen, trocken und dunklen Ort aufbewahren. Das Produkt vor Wasser und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
2. Das Verfallsdatum ist auf der Schachtel angegeben. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.

[Packing]

1 Set/Schachtel

[Name und Adresse des Herstellers oder Vertreters]



Hersteller: KANEKA CORPORATION

Adresse: 3-18, 2 chome, Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city
OSAKA, 530-8288 JAPAN

TEL-Nr.: (+81)-(0) 6-6226-5256

FAX-Nr.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Autorisierter Repräsentant in der Europäischen Union:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresse: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

TEL-Nr.: (+32)-(0) 14-256-297

FAX-Nr.: (+32)-(0) 14-256-298

Vertrieb, EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresse: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, Belgien

TEL-Nr.: (+32)-(0) 16 381 211

FAX-Nr.: (+32)-(0) 16 400 249

Alle Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von TERUMO CORPORATION und ihrer jeweiligen Inhaber.

Tabelle 1: Compliance-Diagramm für Metacross RX-Ballone

Druck (atm)	Ballondurchmesser (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							


* Nominaldruck:

** Nennberstdruck

[DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO]

Metacross RX es un catéter de dilatación de balón para angioplastia transluminal percutánea (ATP) en indicaciones periféricas. Metacross RX es un tipo de catéter de cambio rápido (RX) y el diámetro máximo de la guía compatible es 0.035 pulgadas (0.89 mm). La sección distal de este catéter se compone de un balón y de un eje de doble lumen (coaxial). El lumen externo se utiliza para inflar y desinflar el balón con medio de contraste diluido en solución salina. El lumen interior (el lumen de la guía; desde la punta distal hasta el puerto de la guía) es para insertar una guía compatible y facilitar el avance del catéter a través de la lesión estenótica o stent que hay que dilatar. La sección proximal es un eje de lumen simple con una conexión de puerto luer para conectar un dispositivo de inflado/desinflado. Dentro del balón hay colocados dos marcadores radiopacos que indican la longitud de trabajo del balón y sirven para guiar al médico en el posicionado correcto del balón en la lesión meta bajo fluoroscopia. Metacross RX está disponible en diferentes tamaños de balón según el diámetro y longitud a las presión de inflado recomendada (presión nominal). Tras el inflado, el diámetro del balón varía en función de la presión de inflado. La tabla de presiones de rotura del balón Metacross RX es la Tabla 1 que se encuentra al final de estas Instrucciones de uso. En el envase de esterilización el producto cuenta con materiales de protección, un tubo protector de balón y una guía que se deben quitar antes del uso. El tubo protector del balón está colocado sobre el balón plegado de bajo perfil y la guía está insertada en el lumen de la guía para evitar que el eje del catéter se rompa. La punta distal del catéter está tapada para facilitar el avance del catéter hacia la lesión estenótica o stent. Este producto incluye como accesorio una aguja de enjuague para enjuagar y llenar el lumen de la guía de suero salino heparinizado.

<NOMBRE DE CADA PARTE>

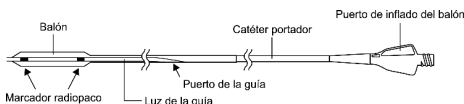

Estéril y no pirógeno en blíster no dañado y cerrado. Este producto se ha esterilizado con óxido de etileno.

Diámetro recomendado de la guía:

Diámetro máximo: 0,035" (0,89 mm)

Presión de inflado recomendada y presión máxima de inflado

Presión nominal:

- Diámetro del balón: inferior a 6 mm:	10 atm
- Diámetro del balón: 6 mm o más:	8 atm

Presión de ruptura

- Diámetro del balón: inferior a 5 mm:	20 atm
- Diámetro del balón: 5 mm:	18 atm
- Diámetro del balón: 6 mm, 7 mm, 8 mm:	14 atm
- Diámetro del balón: 9 mm o más:	12 atm

[INDICACIONES]

El catéter de dilatación de balón para ATP Metacross RX tiene como función la dilatación de la estenosis en las arterias ilíaca, femoral, poplitea, infrapoplitea y renal, así como el tratamiento de lesiones oclusivas de fistulas arteriovenosas nativas o sintéticas.

Este producto también está indicado para la postdilatación de la endoprótesis en la vasculatura periférica.

Nota: el ensayo de verificación de stent postdilatación de Metacross RX se ha llevado a cabo utilizando el Sistema de Stent Vascular Complete® SE (Medtronic, Inc), el Sistema de Stent Vascular S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) y el Sistema de Stent Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System auto-expandible Vascular (Boston Scientific Corporation).

[CONTRAINDICACIONES]

1. Pacientes que hayan sufrido una estenosis anastomótica dentro del mes siguiente a la derivación arteriovenosa.
2. Pacientes que tengan lesiones que se comunican con un pseudoaneurisma.
3. Pacientes embarazadas.
4. Pacientes que no toleran un tratamiento antiplaquetario o una terapia anticoagulante.

[ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES]

[Advertencias]

1. Este producto es para un solo uso. No reutilizar. No reesterilizar. No reprocesar. El reprocesamiento puede comprometer la esterilidad, la biocompatibilidad y la integridad física del producto.
2. No utilizar si el envase del producto o de la unidad está dañado.
3. No inflar el balón más allá del diámetro del vaso sanguíneo proximal y distal respecto a la lesión estenótica.
4. No inflar el balón a una presión que sobrepase la presión de estallido.
5. No utilizar este catéter en el sistema circulatorio central.

[Precauciones relacionadas con los procedimientos]

1. Saque el producto con cuidado y lentamente del tubo portador y retire las piezas de protección. Si se maneja sin cuidado, se puede dañar el balón y/o el eje del catéter del producto, perjudicando el inflado y/o desinflado del balón.
2. Infle el balón con un medio de contraste diluido en solución salina en proporción de 1:1 (en lo sucesivo, el "fluido de inflado"). No se debe utilizar un medio gaseoso, como por ejemplo el aire, para el inflado. (El balón podría inflarse de forma irregular).
3. Antes de su uso, extraiga todo el aire del balón y el lumen de inflado del balón, y sustitúyalo por el fluido de inflado. (Si no se extrae el aire por completo, no se podrá observar el estado de inflado del balón bajo fluoroscopia).
4. En caso de lesiones estenóticas graves, tales como lesiones calcificadas, el vaso sanguíneo no puede dilatarse totalmente. En ese caso, no aplique una presión superior a la presión de estallido. (El balón podría explotar y quedar los restos dentro del cuerpo).
5. En cuanto a los dispositivos médicos utilizados en combinación con este catéter, hay que seguir las instrucciones de uso de dichos dispositivos. (Cuando se usa el catéter de balón para la postdilatación de la endoprótesis durante el procedimiento de colocación periférica de la endoprótesis, es necesario consultar las instrucciones de uso del fabricante).
6. Para la inserción en la endoprótesis, la retirada de la endoprótesis o la dilatación del balón en la endoprótesis, hay proceder con precaución bajo fluoroscopia. (Si esto se realiza sin fluoroscopia, se puede dañar este catéter o lesionar el vaso sanguíneo).
7. No intente pasar el catéter de dilatación de balón para ATP Metacross RX a través de una vaina de un introductor de un tamaño menor al indicado en la etiqueta. Consulte la etiqueta del producto.

[Precauciones durante el uso]

1. Utilizar el dispositivo inmediatamente después de la apertura del envase estéril.
2. Todo el procedimiento deberá realizarse en condiciones asépticas.
3. Este catéter solo debe ser utilizado por médicos especializados en terapia vascular percutánea.
4. Seleccione el catéter con el tamaño de balón adecuado (diámetro y longitud del balón) de acuerdo con los siguientes criterios (procedimientos).
 - 1) El diámetro del balón inflado no debe sobrepasar el diámetro interior del vaso proximal y distal respecto a la lesión.
 - 2) La longitud del balón inflado no debe sobrepasar la longitud de la lesión que se vaya a tratar. (Una selección inadecuada del catéter puede provocar una oclusión vascular aguda).

5. Utilizar este catéter solo cuando se pueda realizar una cirugía de urgencia en cualquier momento.
6. El médico encargado del procedimiento debe determinar la duración y el número de inflados del balón basándose en su experiencia previa.
7. Se debe infundir suero salino heparinizado como anticoagulante mientras se inserta el catéter de balón en el vaso sanguíneo.
8. No inflar nunca el balón o hacer avanzar la guía con el catéter doblado o torcido.
9. Manipular cuidadosamente el catéter en el vaso sanguíneo verificando la ubicación y el movimiento de la punta bajo fluoroscopia o monitor de DSA (angiografía por sustracción digital).
10. Inflar siempre el balón observando su estado de inflado bajo fluoroscopia. Inflar el balón con cuidado verificando su movimiento con los marcadores radiopacos. Si se detecta alguna irregularidad, como una leve resistencia, catéter no móvil durante la manipulación o punta distal de la guía torcida, se debe interrumpir inmediatamente el procedimiento y se debe quitar lentamente el catéter junto con la guía.
11. No insertar ni quitar rápido el catéter. (Si se actúa muy rápido, se puede dañar el catéter o lesionar la íntima vascular).
12. No mueva el catéter con el balón inflado. (Si se mueve el catéter con el balón inflado, puede estallar el balón o romperse el eje del catéter).
13. No inflar o desinflar rápido el balón en el vaso sanguíneo. (El inflado o desinflado rápido puede dañar el vaso sanguíneo o hacer que estalle el balón quedando los restos en el interior del cuerpo).
14. No utilizar un inyector (dispositivo de inyección automático) para inflar el balón.
15. Se deben tomar precauciones para evitar cualquier daño al catéter con el bisturí o las tijeras.
16. Si se detecta alguna irregularidad, como una fuerte resistencia mientras se manipula el catéter, se debe interrumpir inmediatamente el procedimiento. Se deberá verificar la causa y se deberán tomar las medidas adecuadas. (Si se continúa el procedimiento con una fuerza excesiva, se puede dañar el catéter o lesionar la pared vascular).
17. Hay que prestar atención siempre al estado del paciente y controlar la temperatura corporal, el pulso y la respiración. Cuando se detecte alguna irregularidad, interrumpir inmediatamente el uso del catéter o tomar las medidas adecuadas en función del estado del paciente y a discreción del médico.
18. Tras el uso, desechar el catéter como un residuo médico de conformidad con los procedimientos hospitalarios.
19. No utilice agentes que contengan disolventes orgánicos o medios de contraste oleaginosos. El contacto con estos agentes puede producir daños en el catéter.
20. Durante su manipulación, no tuerza ni gire el catéter.
21. Durante la inserción de este dispositivo en el vaso sanguíneo o su retirada del mismo, hay que asegurarse de que el balón esté completamente desinflado. (Un dispositivo con un balón más grande y más largo requiere un tiempo de desinflado mayor).
22. Si se siente resistencia durante la retirada del dispositivo después del procedimiento, se recomienda retirar todo el sistema, junto con la vaina introductora/guía.
23. Utilice siempre el catéter junto una guía insertada en la luz de la guía.

[Instrucciones de funcionamiento]

Entre los materiales que se requieren normalmente para ATP con el catéter de dilatación de balón para ATP Metacross RX, se incluyen:

- Guía(s) de diámetro y longitud adecuados
- Vaina introductora/guía adecuada y juego de dilatadores
- Vial del medio de contraste
- Vial de suero salino esterilizado
- Dispositivo de inflado con manómetro
- Jeringuilla con bloqueo Luer
- Válvula de tres vías

[Método de manipulación o instrucciones de uso]

1. Selección del catéter
Antes del uso y bajo fluoroscopia, verificar el diámetro interior del vaso sanguíneo proximal y distal respecto a la lesiónestenótica y seleccionar el catéter con el tamaño de balón adecuado. Si se pueden utilizar dos medidas con el diámetro verificado, seleccionar el tamaño más pequeño.
2. Preparación
 - 1) Tras haber sacado asépticamente el catéter del contenedor, retirar el material protector del catéter.
 - 2) Sustituir el aire del balón y el lumen de inflado del balón conforme al siguiente procedimiento.
 - a) Conectar el dispositivo de inflado (no incluido en el kit), lleno de fluido de inflado al puerto de inflado del balón.
 - b) Tras aplicar presión negativa durante aproximadamente 10 segundos al dispositivo de inflado, dirigir la punta del eje del catéter hacia abajo y liberar la presión negativa lentamente para permitir que el fluido llene el balón y el lumen de inflado del balón, y expela el aire.
 - c) Si hay aire en el balón y en el lumen de inflado del balón, repetir el procedimiento b) hasta que el aire sea expelido por completo.
 - d) Desconectar el dispositivo de inflado del puerto de inflado del balón y quitar el aire del cilindro del dispositivo de inflado.
 - e) Volver a conectar el dispositivo de inflado en el puerto de inflado del balón y mantener presión negativa. Verificar que el aire ya no regresa a la jeringuilla.
 - 3) Enjuagar la luz de la guía con una solución salina heparinizada mediante el uso de una aguja de enjuague y llenar el lumen con ella.
 - 4) Sumergir todo el catéter de dilatación de balón para ATP Metacross RX en la solución salina.
3. Inserción e inflado del catéter de balón
Antes de su uso, compruebe si el catéter es compatible con el catéter guía (no incluido en este kit), el introductor de vaina (no incluido en este kit) y la guía (no incluida en este kit), en la tabla siguiente.

Número de referencia	Diámetro del balón (mm)	Vaina introductora compatible (Fr/mm)	Diámetro máximo de la guía (pulgadas/mm)
BD-L30020MR ~	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 pulgadas (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Si se usa el catéter insertado en el introductor de vaina o el catéter guía

- 1) Si se usa el catéter en el catéter guía, aflojar la válvula hemostática manteniéndola a la vez lo suficientemente apretada como para evitar que salga sangre.
- 2) Insertar el catéter poco a poco, con el balón completamente desinflado, en la vaina introductora o el catéter guía sobre la guía y avanzar hasta la periferia distal de la lesión. Bajo fluoroscopia, avanzar el catéter lentamente para que su marcador radiopaco en el balón alcance el punto deseado.
- 3) Bajo fluoroscopia, verificar la posición del marcador radiopaco en el balón y determinar el sitio de dilatación.
- 4) Conectar el dispositivo de inflado de forma segura al puerto de inflado del balón.
- 5) Inflar el balón gradualmente hasta llegar al diámetro objetivo, verificando la presión de inflado, y dilatar la lesiónestenótica (para saber los diámetros de inflado del balón, consultar la tabla de presión de rotura del balón de la Tabla 1. al final de estas Instrucciones de Uso).
4. Extracción del catéter
 - 1) Tras aplicar presión negativa para desinflar el balón por completo, quitar el catéter.
5. Reinserción del catéter
 - 1) Si es necesario volver a insertar el catéter con el balón desinflado que se ha quitado, asegurarse de que el balón esté

completamente desinflado y plegado antes de volver a insertarlo en el vaso sanguíneo del paciente. Para saber cómo reinsertar el catéter, consultar la sección "Inserción e inflado del catéter de balón".

- 2) Si se percibe cualquier resistencia al reinsertar el catéter, detener el avance y sacarlo con cuidado del vaso sanguíneo del paciente. Preparar un nuevo Metacross RX para usarlo conforme a los procedimientos descritos más arriba de esta sección de la Instrucciones de Uso.

[Complicaciones]

Fallos del dispositivo:

- Rotura del balón
- Inflado/desinflado insuficiente del balón
- Rotura del balón y/o el eje del catéter
- Dificultad para retirar el dispositivo
- Fuga del fluido de inflado

Reacciones adversas:

- Infecciones locales o sistémicas
- Sangrado local interno o hematoma
- Rotura de íntima
- Disección vascular
- Perforación vascular
- Rotura vascular
- Aneurisma
- Arritmia
- Oclusión vascular aguda
- Tromboembolismo venoso
- Vasoespasmio
- Formación de pseudoaneurisma
- Fístula arteriovenosa
- Sangrado que requiere transfusión
- Respuesta alérgica al medio de contraste/fallo renal
- Dolor o dolor a la presión
- Muerte
- Embolia
- Endocarditis
- Fiebre
- Hipertensión/hipotensión
- Inflamación
- Infarto de miocardio
- Septicemia
- Shock
- Ictus
- Ataque isquémico transitorio

[Almacenamiento y fecha de caducidad]

1. Almacenar en un lugar seco, fresco y oscuro. Evítese la exposición al agua y a la luz solar directa.
2. La fecha de caducidad se indica en la caja. No utilizar después de la fecha de caducidad.

[Envase]

1 set/caja

[Nombre y dirección del fabricante o representante]



Fabricante: KANEKA CORPORATION

Dirección: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN

N.º TELF.: (+81)-(0) 6-6226-5256

N.º FAX: (+81)-(0) 6-6226-5143



Representante autorizado en la Comunidad Europea: KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Dirección: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

N.º TELF.: (+32)-(0) 14-256-297

N.º FAX: (+32)-(0) 14-256-298

Distribuidor para la UE: TERUMO EUROPE N.V.

Dirección: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LOVAINA, Bélgica

N.º TELF.: (+32)-(0) 16 381 211

N.º FAX: (+32)-(0) 16 400 249

Todas las marcas son marcas comerciales o marcas registradas de
TERUMO CORPORATION y sus respectivos dueños.

Tabla 1: Tabla de presiones de rotura del balón Metacross RX

Presión (atm)	Diámetro del balón (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Presión nominal


** Presión de ruptura

[DESCRIÇÃO DO PRODUTO]

Metacross RX é um Cateter de Dilatação de Balão para Angioplastia Transluminal Percutânea (ATP) para indicações periféricas. O Metacross RX é do tipo de substituição rápida (RX) e o diâmetro máximo do fio-guia compatível é de 0,035 pol. (0,89 mm). A secção distal deste cateter é composta por um balão e um cabo de lúmen duplo (co-axial). O lúmen externo é utilizado para a insuflação e o esvaziamento do balão com meio de contraste diluído em solução salina. O lúmen interno (o lúmen do fio-guia; desde a ponta distal até à porta do fio-guia) é utilizado para a inserção de um fio-guia compatível, a fim de facilitar o avanço do cateter através da lesão estenótica e do stent a serem dilatados. A secção proximal consiste num cabo de lúmen único com um conector de porta luer simples destinado a ligar um dispositivo de insuflação/esvaziamento. No interior do balão, dois marcadores radiopacos, que indicam o comprimento funcional do balão, guiam o médico durante o posicionamento correcto do balão na lesão-alvo sob fluoroscopia. O Metacross RX encontra-se disponível em vários tamanhos de balão (medidos por diâmetro e comprimento), a pressões de insuflação recomendadas (pressão nominal). Após a insuflação, o diâmetro do balão varia de acordo com a pressão de insuflação. A tabela de conformidade do balão do Metacross RX é fornecida no final destas Instruções de Utilização (Tabela 1). Na embalagem esterilizada, o dispositivo encontra-se envolvido nos materiais de protecção, uma bainha de protecção do balão e um estilete, que devem ser removidos antes da respectiva utilização. A bainha de protecção do balão é colocada sobre o balão dobrado e o estilete é inserido no lúmen do fio-guia a fim de prevenir o colapso do cabo do cateter. A ponta distal do cateter é afunilada para facilitar a introdução do cateter na lesão estenótica ou no stent.

A agulha de lavagem é fornecida como um acessório deste dispositivo, para a irrigação e o enchimento do lúmen do fio-guia com salina heparinizada.

<NOME DE CADA PEÇA>

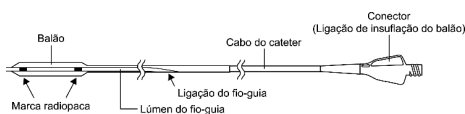

Esteril e não pirogénico, contido numa bolsa de plástico fechada e intacta. Este produto é esterilizado com óxido de etileno.

Diâmetro recomendado do fio-guia:

Diâmetro máximo: 0.035" (0,89 mm)

Pressão de insuflação recomendada e pressão de insuflação máxima

Pressão nominal:

- Diâmetro do balão: inferior a 6 mm: 10 atm

- Diâmetro do balão: 6 mm ou superior: 8 atm

Pressão nominal de ruptura:

- Diâmetro do balão: inferior a 5 mm: 20 atm

- Diâmetro do balão: 5 mm: 18 atm

- Diâmetro do balão: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm

- Diâmetro do balão: 9 mm ou superior: 12 atm

[INDICAÇÕES]

O cateter de dilatação de balão para ATP Metacross RX destina-se a dilatar estenoses nas artérias ilíacas, femorais, iliofemorais, poplíteas, infra-poplíteas e renais, assim como ao tratamento de lesões oclusivas de fistulas de diálise arteriovenosas nativas ou sintéticas. Este dispositivo está igualmente indicado para a pós-dilatação de stents na vasculatura periférica.

Nota: O teste de verificação da pós-dilatação do stent do Metacross RX foi conduzido utilizando um Sistema de Stent Vascular Complete® SE (Medtronic, Inc), um Sistema de Stent Vascular

S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) e um Sistema de Stent Vascular Auto-Expansível Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[CONTRA-INDICAÇÕES]

1. Doentes que desenvolveram estenose anastomótica no período de um mês após a construção do shunt AV.
2. Doentes com lesões que contactem com um pseudoaneurisma.
3. Doentes grávidas.
4. Doentes com intolerância a terapia antiplaquetária ou anticoagulante.

[ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES]

[Advertências]

1. Este dispositivo destina-se a uma única utilização. Não reutilizar. Não reesterilizar. Não reprocessar. O reprocessamento pode comprometer a esterilidade, a biocompatibilidade e a integridade física deste produto.
2. Não utilize se o produto ou a embalagem unitária se encontrarem danificados.
3. Não insuflar o balão de modo a exceder o diâmetro do vaso sanguíneo proximal e distal à lesão estenótica.
4. Não insuflar o balão a uma pressão que exceda a pressão nominal de ruptura.
5. Não utilize este cateter no sistema circulatório central.

[Precauções relacionadas com os procedimentos]

1. Remova lenta e cuidadosamente o dispositivo do tubo de transporte e retire as peças protectoras do dispositivo. Um manuseamento negligente pode provocar danos no balão e/ou no cabo do cateter, comprometendo a insuflação e a desinsuflação do balão.
2. Insuflar o balão com o meio de contraste diluído em solução salina na proporção de 1:1 (daqui em diante denominado "fluido de insuflação"). Não deve ser utilizado para a sua insuflação um meio gasoso, tal como ar. (O balão pode ficar irregularmente insuflado.)
3. Antes de utilizar, extraia todo o ar do balão e do lúmen de insuflação do balão, substituindo-o pelo fluido de insuflação. (No caso do ar não ser completamente removido, o estado de insuflação do balão não pode ser observado sob fluoroscopia.)
4. No caso de lesões estenóticas graves, tais como lesões calcificadas, o vaso sanguíneo pode não ficar totalmente dilatado. Nesse caso, não aplique uma pressão superior à pressão nominal de ruptura. (O balão pode rebentar e os resíduos podem permanecer no interior do organismo.)
5. Relativamente aos dispositivos médicos utilizados em conjunto com este cateter, siga as instruções respectivas. (Sempre que o cateter de balão for utilizado para a pós-dilatação do stent durante o procedimento de colocação de um stent periférico, consulte as respectivas instruções de utilização do fabricante.)
6. Para a inserção no stent, a remoção do interior do stent ou a dilatação do balão no interior do stent, proceda com cuidado sob fluoroscopia. (Realizar este procedimento sem monitorização por fluoroscopia pode danificar este cateter ou lesionar o vaso sanguíneo.)
7. Não tente passar o cateter de dilatação de balão para ATP Metacross RX através de uma bainha introdutora de tamanho inferior ao indicado no rótulo. Consulte o rótulo do produto.

[Precauções durante a utilização]

1. Utilize o dispositivo imediatamente após a abertura da embalagem esterilizada.
2. Todo o procedimento deve ser realizado em condições assépticas.
3. Este cateter deve ser utilizado apenas por médicos especializados em terapia vascular percutânea.
4. Selecione o cateter com o tamanho de balão adequado (diâmetro e comprimento do balão), de acordo com os seguintes critérios (procedimentos).
 - 1) O diâmetro do balão insuflado não deve exceder o diâmetro interno do vaso proximal e distal à lesão.

- 2) O comprimento do balão insuflado não deve exceder o comprimento da lesão a ser tratada.
(A selecção de um cateter inadequado pode levar a oclusão vascular luer-lock.)
5. Utilize este cateter apenas quando for possível realizar cirurgia de emergência.
6. O médico responsável pelo procedimento deve definir a duração e o número insuflações do balão com base na sua experiência.
7. Deve ser administrada solução salina heparinizada para anti-coagulação, enquanto o cateter de balão é introduzido no vaso sanguíneo.
8. Nunca insuflar o balão ou faça avançar o fio-guia com o cateter dobrado ou retorcido.
9. Manipule cuidadosamente o cateter no vaso sanguíneo, verificando a localização e o movimento da respectiva ponta no monitor de fluoroscopia ou de Angiografia de Subtração Digital (ASD).
10. Encha sempre o balão enquanto observa o seu estado de insuflação sob fluoroscopia. Insuflar o balão cuidadosamente, verificando o seu movimento através das marcas radiopacas. Se for detectada qualquer anomalia, tal como resistência mesmo que pequena, cateter imóvel durante a manipulação ou ponta distal do fio-guia retorcida, o procedimento deve ser interrompido de imediato e o cateter removido lentamente em simultâneo com o fio-guia.
11. Não insira ou remova este cateter rapidamente. (A manipulação rápida pode danificar o cateter ou lesionar a íntima vascular.)
12. Não movimente o cateter com o balão insuflado. (A deslocação do cateter com o balão insuflado pode resultar na ruptura do balão ou na quebra do cabo do cateter.)
13. Não insuflar ou desinsuflar o balão rapidamente no interior do vaso sanguíneo. (A rápida insuflação ou desinsuflação pode danificar o vaso sanguíneo ou provocar a ruptura do balão, resultando na permanência de resíduos no interior do organismo.)
14. Não utilize um injector (dispositivo automático de injeção) para insuflar o balão.
15. Devem ser tomadas precauções para prevenir quaisquer danos no cateter por meio de bistrú ou tesoura.
16. No de caso de ocorrer qualquer anomalia tal como forte resistência durante a manipulação do cateter, o procedimento deve ser interrompido de imediato. Deve ser determinada a causa e tomadas as medidas adequadas em conformidade. (A continuação da operação exercendo força excessiva pode provocar danos no cateter ou lesão na parede da vasculatura.)
17. Preste sempre atenção ao estado do doente, monitorizando a sua temperatura corporal, pulsação e respiração. Se detectar alguma anomalia, interrompa de imediato a utilização deste cateter ou tome medidas adequadas relativas ao estado do doente, segundo o critério do médico.
18. Após a utilização, elimine o cateter como desperdícios médicos, em conformidade com os procedimentos hospitalares.
19. Não utilize agentes contendo solventes orgânicos ou meios de contraste oleaginosos. O contacto com tais agentes pode danificar o cateter.
20. Ao manipular este cateter, não torça ou rode o mesmo.
21. Durante a inserção deste dispositivo no vaso sanguíneo, ou durante a remoção deste dispositivo do vaso sanguíneo, certifique-se de que o balão se encontra completamente desinsuflado. (Um dispositivo com um balão maior e mais comprido requer um período de desinsuflação superior.)
22. Se detectar resistência durante a remoção do dispositivo após o procedimento, recomenda-se que retire o sistema completo em simultâneo com a bainha introdutora / guia.
23. Use sempre o cateter em conjunto com um fio-guia inserido no lúmen do fio-guia.

[Instruções de Funcionamento]

Os materiais tipicamente requeridos para ATP com o cateter de dilatação de balão para ATP Metacross RX incluem:

- Fio(s)-guia de diâmetro e comprimento adequados
- Bainha introdutora/guia e conjunto de dilatação adequados
- Frasco de meio de contraste

- Frasco de solução salina esterilizada
- Dispositivo de insuflação com manómetro
- Seringa com luer-lock
- Torneira de três vias

[Método de funcionamento ou instruções de utilização]

1. Selecção do cateter
Antes de utilizar, verifique o diâmetro interno do vaso sanguíneo proximal e distal à lesãoestenótica sob fluoroscopia e seleccione o cateter com o tamanho de balão adequado. Se forem aplicáveis dois tamanhos face ao diâmetro verificado, seleccione o de tamanho inferior.
2. Preparação
 - 1) Após remover de modo asséptico este cateter da embalagem, retire os materiais de protecção.
 - 2) Substitua o ar no interior do balão e o lúmen de insuflação do balão pelo fluido de insuflação de acordo com os seguintes procedimentos.
 - a) Prenda o dispositivo de insuflação (não incluído neste conjunto) cheio com fluido de insuflação à ligação de insuflação do balão.
 - b) Depois de aplicar pressão negativa durante aproximadamente 10 segundos ao dispositivo de insuflação, direcione a ponta do cabo do cateter para baixo e liberte lentamente a pressão negativa a fim de permitir que o fluido encha o balão e o lúmen de insuflação do balão, expelindo o ar.
 - c) Se detectar ar no balão e no lúmen de insuflação do balão, repita o procedimento b) até expelir completamente o ar.
 - d) Desprenda o dispositivo de insuflação da ligação de insuflação do balão e retire o ar do cilindro do dispositivo de insuflação.
 - e) Volte a prender o dispositivo de insuflação à ligação de insuflação do balão e mantenha a pressão negativa. Confirme que o ar não volta a entrar na seringa.
 - 3) Utilizando uma agulha de lavagem, enxágue o lúmen do fio-guia com solução salina heparinizada e encha o lúmen com solução salina heparinizada.
 - 4) Mergulhe por completo o cateter de dilatação de balão para ATP Metacross RX em solução salina.
3. Inserção e insuflação do cateter de balão
Antes de utilizar, verifique se este cateter é compatível com o cateter de orientação (não incluído neste conjunto), a bainha introdutora (não incluída neste conjunto) e o fio-guia (não incluído neste conjunto) de acordo com a tabela que se segue.

Referência	Diâmetro do balão (mm)	Bainha compatível (Fr/mm)	Diâmetro máximo do fio-guia (polegadas/mm)
BD-L30020MR ~	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00mm	0.035 pol. (0.89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Após utilizar este cateter inserido na bainha introdutora ou no cateter de orientação

- 1) Ao utilizar este cateter no cateter de orientação, desaperte a válvula hemostática, enquanto a mantém suficientemente apertada para prevenir derrame sanguíneo.
- 2) Insira gradualmente o cateter, com o balão totalmente desinsuflado, na bainha introdutora ou no cateter de orientação sobre o fio-guia e faça-os avançar até à periferia distal da lesão. Sob fluoroscopia, faça avançar o cateter lentamente até a marca radiopaca atingir o local pretendido.
- 3) Ainda sob fluoroscopia, verifique a posição da marca radiopaca no balão e determine o local de dilatação.
- 4) Prenda firmemente o dispositivo de insuflação à ligação de insuflação do balão.
- 5) Insuflar gradualmente o balão até atingir o diâmetro alvo, verificando a pressão de insuflação, e dilate a lesãoestenótica (para mais informações sobre o diâmetro do balão insuflado, consulte a tabela de conformidade do balão fornecida no final destas Instruções de Utilização, a Tabela 1).

4. Remoção do cateter

- 1) Após aplicar pressão negativa para desinsuflar o balão por completo, remova o cateter.

5. Reintrodução do cateter

- 1) Se for necessária a reinserção do cateter removido com o balão vazio, certifique-se de que o balão se encontra totalmente vazio e dobrado antes de o voltar a introduzir no vaso sanguíneo do paciente. Aquando da reinserção, utilize o cateter conforme descrito na secção "Inserção e insuflação do cateter de balão" aqui incluída.
- 2) Se sentir qualquer resistência durante a reinserção do cateter, interrompa a sua introdução e retire-o cuidadosamente do vaso sanguíneo do paciente. Prepare a utilização de um novo Metacross RX de acordo com os procedimentos anteriormente descritos nesta secção das presentes Instruções de Utilização.



Representante autorizado na Comunidade Europeia:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Endereço: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Nº de Telefone: (+32)-(0) 14-256-297

Nº de FAX: (+32)-(0) 14-256-298

Distribuidor na UE: TERUMO EUROPE N.V.

Endereço: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BÉLGICA

Nº de Telefone: (+32)-(0) 16 381 211

Nº de FAX: (+32)-(0) 16 400 249

Todos os nomes de empresas e marcas são marcas comerciais ou marcas registradas da TERUMO CORPORATION e seus respectivos proprietários.

[Complicações]

Falha do Dispositivo:

- Ruptura do balão
- Insuflação / desinsuflação insuficiente do balão
- Quebra do balão e / ou do respectivo cabo
- Dificuldade na remoção do dispositivo
- Derrame do fluido de insuflação

Ocorrências Adversas:

- Infecção local ou sistémica
- Hemorragia interna local ou hematoma
- Ruptura da íntima
- Dissecção vascular
- Perfuração vascular
- Ruptura vascular
- Aneurisma
- Arritmia
- Oclusão aguda do shunt
- Tromboembolia venosa
- Espasmo vascular
- Formação de pseudoaneurisma
- Fístula arteriovenosa
- Hemorragia com necessidade de transfusão
- Reacção alérgica aos meios de contraste
- Dor normal ou persistente
- Morte
- Embolia
- Endocardite
- Febre
- Hipertensão / Hipotensão
- Inflamação
- Enfarte do miocárdio
- Sépsis
- Choque
- Trombose
- Ataque isquémico transitório

[Armazenamento e data de validade]

1. Armazene em local fresco, seco e escuro. Evite a exposição directa a água ou à luz solar.
2. O prazo de validade encontra-se indicado na embalagem. Não utilizar após o prazo de validade.

[Embalagem]

1 conjunto/caixa

[Nome e endereço do fabricante ou representante]



Fabricante: KANEKA CORPORATION

Endereço: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,

OSAKA, 530-8288 JAPAN

Nº de Telefone: (+81)-(0) 6-6226-5256

Nº de FAX: (+81)-(0) 6-6226-5143

Tabela 1. Tabela de Conformidade do Balão Metacross RX

Pressão (atm)	Diâmetro do balão (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Pressão nominal

** Pressão nominal de ruptura

[DESCRIZIONE PRODOTTO]

Metacross RX è un catetere con palloncino di dilatazione per angioplastica percutanea transluminale (PTA) per indicazioni periferiche. Metacross RX è di tipo a scambio rapido (RX) e il diametro massimo del filo guida compatibile è 0.035 pollici (0,89 mm). La sezione distale di questo catetere è costituita da un palloncino e da steli a doppio lume (coassiali). Il lume esterno è utilizzato per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del palloncino con mezzo di contrasto diluito con soluzione salina. Il lume interno (il lume del filo guida, dalla punta distale alla porta del filo guida) serve per l'inserimento di un filo guida compatibile per facilitare l'avanzamento del catetere attraverso la lesione stenotica o lo stent da dilatare. La sezione prossimale è uno stelo a lume singolo con un unico raccordo della porta luer per il collegamento di un dispositivo di gonfiaggio/sgonfiaggio. All'interno del palloncino, due marker radiopachi che indicano la lunghezza di lavoro del palloncino, sono posizionati per guidare il medico nel posizionare correttamente il palloncino nella lesione mirata sotto fluoroscopia. Metacross RX è disponibile in varie misure del palloncino per diametro e lunghezza a pressioni di gonfiaggio consigliate (pressione nominale). Al gonfiaggio, il diametro del palloncino varia a seconda della pressione di gonfiaggio. Il grafico di compatibilità del palloncino di Metacross RX è fornito nella tabella 1 al termine di queste Istruzioni per l'uso. Nel pacchetto di sterilizzazione, il dispositivo è dotato dei materiali protettivi, un tubo di protezione per il palloncino e un mandrino, che devono essere rimossi prima dell'uso. Il tubo di protezione del palloncino viene posizionato sopra il palloncino ripiegato in un profilo basso e il mandrino viene inserito nel lume del filo guida per impedire il collasso dello stelo del catetere. La punta distale del catetere è rastremata per facilitare l'avanzamento del catetere nella lesione stenotica o nello stent.

L'ago per il lavaggio viene fornito come accessorio di questo dispositivo per il lavaggio e il riempimento del lume del filo guida con soluzione salina eparinizzata.

<IDENTIFICAZIONE DI OGNI PARTE>

Sterile e non pirogenico se in confezione non danneggiata e non aperto. Questo dispositivo è sterilizzato con ossido di etilene.

Diametro del filo guida raccomandato:

Diametro massimo: 0.035"/0,89 mm

Pressione di gonfiaggio e pressione massima di gonfiaggio raccomandate**Pressione nominale:**

- Diametro del palloncino: inferiore a 6 mm: 10 atm
- Diametro palloncino: 6 mm e superiore: 8 atm

Pressione massima di sicurezza:

- Diametro del palloncino: inferiore a 5 mm: 20 atm
- Diametro palloncino: 5 mm: 18 atm
- Diametro palloncino: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Diametro palloncino: 9 mm e superiore: 12 atm

[INDICAZIONI]

Il catetere con palloncino di dilatazione per PTA Metacross RX è destinato per dilatare stenosi nelle arterie iliache, femorali, ileo-femorali, poplitee, infra-poplitee e renali e per il trattamento delle lesioni ostruttive di fistole da dialisi arterovenosa native o sintetiche. Questo dispositivo è indicato anche per post-dilatazione di stent nel sistema vascolare periferico.

Nota: il test di verifica test per la post-dilatazione dello stent di Metacross RX è stato condotto utilizzando il sistema di stent vascolare Complete® SE (Medtronic, Inc), il sistema di stent vascolare S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) e il sistema di stent vascolare auto-espandibile Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[CONTROINDICAZIONI]

1. Pazienti che hanno sviluppato stenosi anastomotica entro un mese dalla costruzione di shunt AV.
2. Pazienti con lesioni comunicanti con uno pseudoaneurisma.
3. Pazienti in stato di gravidanza.
4. Pazienti che non tollerano la terapia antiaggregante o terapia anticoagulante.

[AVVERTENZE E PRECAUZIONI]**[Avvertenze]**

1. Dispositivo monouso. Non riutilizzare. Non risterilizzare. Non riprocessare. Ritirare un prodotto già utilizzato può compromettere la sterilità, la biocompatibilità e l'integrità fisica del prodotto.
2. Non utilizzare se il prodotto o la confezione dell'unità sono stati danneggiati.
3. Non gonfiare il palloncino superando il diametro del vaso sanguigno prossimale e distale alla lesione stenotica.
4. Non gonfiare il palloncino a una pressione superiore alla pressione massima di sicurezza
5. Non utilizzare questo catetere nel sistema circolatorio centrale

[Precauzioni relative alle procedure]

1. Rimuovere con cautela e lentamente il dispositivo dalla confezione e togliere le parti di protezione dal dispositivo. La mancanza di cautela potrebbe danneggiare il palloncino e/o lo stelo del catetere del dispositivo, compromettendo il gonfiaggio e/o lo sgonfiaggio del palloncino.
2. Gonfiare il palloncino con il mezzo di contrasto diluito con soluzione salina in rapporto di 1:1 (in seguito, "fluido per il gonfiaggio"). Nessuna mezzo gassoso come l'aria deve essere usato per il gonfiaggio (il palloncino potrebbe essere gonfiato in modo irregolare).
3. Prima dell'uso, aspirare tutta l'aria dal palloncino e dal lume di gonfiaggio del palloncino e sostituirla con il liquido di gonfiaggio (in caso di rimozione incompleta dell'aria, non è possibile verificare lo stato di gonfiaggio del palloncino mediante fluoroscopia).
4. In caso di gravi lesioni stenotiche come lesioni calcificate, il vaso sanguigno non può essere dilatato completamente. Non applicare una pressione superiore alla pressione di rottura nominale in tal caso (il palloncino può scoppiare e i detriti possono rimanere all'interno del corpo).
5. Come per i dispositivi medicali utilizzati con questo catetere, seguire le istruzioni per l'uso di questi dispositivi (quando il catetere a palloncino viene utilizzato per la post-dilatazione di stent durante la procedura di impianto di stent periferici, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del produttore).
6. Per l'inserimento nello stent, il ritiro dallo stent o la dilatazione del palloncino all'interno dello stent, procedere con cautela sotto fluoroscopia (l'utilizzo senza fluoroscopia potrebbe danneggiare il catetere o causare una lesione all'intima vascolare).
7. Non tentare di far passare il catetere con palloncino di dilatazione per PTA Metacross RX attraverso un introduttore di dimensioni inferiori a quanto indicato in etichetta. Fare riferimento all'etichettatura dei prodotti.

[Precauzioni durante l'utilizzo]

1. Utilizzare il dispositivo immediatamente dopo l'apertura della confezione sterile.
2. L'intera procedura deve essere effettuata in ambiente sterile.
3. Questo catetere deve essere utilizzato solo da medici qualificati nella terapia percutanea vascolare.

4. Selezionare il catetere con la dimensione del palloncino appropriata (diametro del palloncino, lunghezza del palloncino secondo i seguenti criteri procedurali).
 - 1) Il diametro del palloncino gonfiato non deve superare il diametro interno del vaso prossimale e distale alla lesione.
 - 2) La lunghezza del palloncino gonfiato non deve superare la lunghezza della lesione da trattare (la selezione inappropriata del catetere può portare ad un'occlusione vascolare acuta).
5. Utilizzare questo catetere solo se è possibile effettuare un intervento chirurgico di emergenza in qualsiasi momento.
6. Il medico addetto alla procedura deve determinare la durata e il numero di gonfiaggi del palloncino in base all'esperienza.
7. Infondere la soluzione salina eparinizzata per l'anticoagulazione mentre il catetere a palloncino è inserito nel vaso sanguigno.
8. Non gonfiare il palloncino o far avanzare il filo guida con il catetere piegato o attorcigliato.
9. Manipolare il catetere con attenzione dentro il vaso sanguigno verificando sempre posizione e movimento della punta mediante fluoroscopia o monitor AST (angiografia a sottrazione digitale).
10. Gonfiare sempre il palloncino osservando lo stato di gonfiaggio mediante fluoroscopia. Gonfiare il palloncino accuratamente verificandone la stabilità tramite i markers radiopachi. In caso di anomalie come una piccola resistenza, catetere immobile durante la manipolazione, o punta distale del filo guida attorcigliata, interrompere immediatamente la procedura e rimuovere il catetere lentamente insieme al filo guida.
11. Non inserire o rimuovere il catetere rapidamente (un'operazione rapida potrebbe danneggiare il catetere o causare una lesione all'intima vascolare).
12. Non spostare il pallone prima di averlo sgonfiato completamente (lo spostamento del catetere con il palloncino gonfiato potrebbe rompere il palloncino e/o lo stelo del catetere).
13. Non gonfiare o sgonfiare il palloncino rapidamente nel vaso sanguigno (un gonfiaggio o sgonfiaggio rapido potrebbe danneggiare il vaso sanguigno o rompere il palloncino lasciando residui all'interno del corpo).
14. Non utilizzare un iniettore (dispositivo di iniezione automatico) per gonfiare il palloncino.
15. Prendere precauzioni per evitare danni al catetere con bisturi o forbici.
16. Qualora, durante la manipolazione del catetere di verificassero anomalie, come una forte resistenza, la procedura deve essere interrotta immediatamente. La causa deve essere verificata e devono essere prese misure appropriate (continuando l'operazione con forza eccessiva si possono provocare danni al catetere e/o lesioni alla parete vascolare).
17. Prestare sempre attenzione alle condizioni del paziente e monitorare la temperatura corporea, le pulsazioni e il respiro. In caso di anomalie, interrompere immediatamente l'utilizzo del catetere o adottare le misure appropriate alle condizioni del paziente a discrezione del medico.
18. Dopo l'uso, smaltire il catetere come rifiuto sanitario in conformità alle procedure ospedaliere.
19. Non utilizzare prodotti contenenti solventi organici o mezzi di contrasto oleaginosi. Il contatto con questi farmaci può portare a danni del catetere.
20. Mentre si manipola questo catetere, non torcere né ruotare il catetere.
21. Inserendo questo dispositivo nel vaso sanguigno o rimuovendo il dispositivo dal vaso sanguigno, assicurarsi che il palloncino sia completamente sgonfio (un dispositivo con un palloncino più grande e più lungo richiede un tempo di sgonfiaggio più lungo).
22. Se si avverte resistenza durante il ritiro post-intervento di questo dispositivo, si consiglia di ritirare l'intero sistema insieme all'introduttore/guida.
23. Utilizzare sempre il catetere lungo un filo guida inserito nel lume del filo guida.

- Filo guida di diametro e lunghezza adeguate
- Set introduttore/introduttore guida e dilatatore appropriato
- Flacone mezzo di contrasto
- Flacone di soluzione fisiologica sterile
- Dispositivo di gonfiaggio con manometro
- Siringa Luer-lock
- Rubinetto a tre vie

[Metodo operativo o istruzioni per l'uso]

1. Selezione del catetere dilatatore
Prima dell'uso, verificare il diametro interno del vaso sanguigno prossimale e distale della lesione stenotica mediante fluoroscopia e selezionare il catetere con la dimensione del palloncino appropriata. Se ci sono due dimensioni applicabili al diametro selezionato, scegliere la più piccola.
2. Preparazione
 - 1) Dopo aver rimosso in maniera asettica il catetere dal contenitore, staccare i materiali protettivi.
 - 2) Aspirare l'aria nel palloncino e nel lume di gonfiaggio del palloncino, quindi riempire la siringa di gonfiaggio con mezzo di contrasto diluito con soluzione salina con un rapporto di 1:1 (da qui in poi verrà chiamato liquido di gonfiaggio) secondo le procedure seguenti.
 - a) Collegare il dispositivo di gonfiaggio (non incluso nel kit) riempito con il liquido di gonfiaggio sulla porta di gonfiaggio del palloncino.
 - b) Dopo aver applicato una pressione negativa per circa 10 secondi al dispositivo di gonfiaggio, dirigere la punta dello stelo del catetere verso il basso e rilasciare lentamente la pressione negativa per consentire che il liquido riempia il palloncino e il lume di gonfiaggio del palloncino e per espellere l'aria.
 - c) Se è ancora presente dell'aria nel palloncino e nel raccordo dopo che il palloncino è stato gonfiato con il liquido, ripetere la procedura b) fino a espellere l'aria completamente.
 - d) Staccare il dispositivo di gonfiaggio dalla porta di gonfiaggio del palloncino e rimuovere l'aria dal cilindro del dispositivo di gonfiaggio.
 - e) Ricollegare il dispositivo di gonfiaggio alla porta di gonfiaggio del palloncino e mantenere la pressione negativa. Verificare che l'aria non ritorni nella siringa.
 - 3) Sciacquare il lume del filo guida con soluzione salina eparinizzata utilizzando l'ago di lavaggio e riempire il lume con la soluzione fisiologica eparinizzata.
 - 4) Immergere l'intero catetere con palloncino di dilatazione per PTA Metacross RX in soluzione salina.
3. Inserimento e gonfiaggio del catetere a palloncino
Prima dell'uso, verificare se questo catetere sia compatibile con il catetere guida (non incluso nel kit), la guaina di introduzione (non inclusa nel kit) e il filo guida (non incluso nel kit) nella tabella seguente.

Numero del catalogo	Diametro palloncino (mm)	Compatibilità introduttore (Fr/mm)	Diametro massimo per il filo guida (pollici/mm)
BD-L30020MR ~	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 pollici (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Quando si utilizza il catetere inserito nell'introduttore guida/catetere guida

- 1) Quando si utilizza il catetere nel catetere guida, allentare la valvola emostatica tenendola in modo da evitare perdite ematiche.
- 2) Gradualmente inserire il catetere con il palloncino sgonfiato completamente nell'introduttore guida/catetere guida sul filo guida e farlo avanzare fino alla periferia distale della lesione. Sotto fluoroscopia, far avanzare il catetere lentamente fino a che il marcatore radiopaco nel palloncino non raggiunge il sito di destinazione.

[Istruzioni Operative]

I materiali tipicamente richiesti per la PTA con il catetere con palloncino di dilatazione per PTA Metacross RX sono:

- 3) Sotto fluoroscopia, verificare la posizione del marker radiopaco nel palloncino e determinare il sito della dilatazione.
- 4) Collegare il dispositivo di gonfiaggio correttamente alla porta di gonfiaggio del palloncino.
- 5) Gonfiare gradualmente il palloncino fino a raggiungere il diametro target verificando la pressione di gonfiaggio e dilatare la lesione stenotica (per i diametri del palloncino gonfio, consultare il grafico di compatibilità del palloncino indicato nella Tabella 1 alla fine di queste Istruzioni per l'uso).
4. Rimozione del catetere
 - 1) Dopo aver applicato una pressione negativa per sgonfiare completamente il palloncino, rimuovere il catetere.
5. Reinserimento del catetere
 - 1) Se è necessario un secondo inserimento del catetere rimosso con palloncino sgonfio, accertarsi che il palloncino sia completamente sgonfio e piegato prima reinserirlo nel vaso sanguigno del paziente. Al reinserimento utilizzare il catetere in base alla sezione "Inserimento e gonfiaggio del catetere a palloncino".
 - 2) Se si incontra resistenza durante il reinserimento del catetere, interrompere l'avanzamento e rimuoverlo con cautela dal vaso sanguigno del paziente. Prepararsi ad utilizzare un nuovo Metacross RX in conformità con le procedure previste in precedenza in questa sezione di queste Istruzioni per l'uso.

[Complicanze]

Problemi al dispositivo:

- Rottura del palloncino
- Gonfiaggio/sgonfiaggio insufficiente del palloncino
- Rottura del palloncino e/o stelo del catetere
- Difficoltà nel rimuovere il dispositivo
- Perdita di fluido di riempimento

Eventi avversi:

- Infezione locale o sistemica
- Sanguinamento locale interno o ematoma
- Rottura dell'intima
- Dissezione vascolare
- Perforazione vascolare
- Rottura vascolare
- Aneurisma
- Aritmia
- Occlusione acuta vascolare
- Tromboembolia venosa
- Vasospasmo
- Formazione di pseudoaneurisma
- Fistola arterovenosa
- Sanguinamento (che necessita una trasfusione)
- Risposta allergica al mezzo di contrasto
- Dolore o dolore da pressione
- Morte
- Embolia
- Endocardite
- Febbre
- Ipotensione/ipertensione
- Infiammazione
- Infarto miocardico
- Sepsì
- Shock
- Ictus
- Attacco ischemico transitorio

[Conservazione e data di scadenza]

1. Conservare in un posto fresco e asciutto e al buio. Evitare l'esposizione all'acqua e alla luce solare diretta.
2. La data di scadenza è indicata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

[Confezione]

1 set/confezione

[Nome e indirizzo del produttore o rappresentante]



Produttore: KANEKA CORPORATION

Indirizzo: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN

N. di TEL: (+81)-(0) 6-6226-5256

N di FAX: (+81)-(0) 6-6226-5143



Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Indirizzo: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

N. di TEL: (+32)-(0) 14-256-297

N di FAX: (+32)-(0) 14-256-298

Distributore UE: TERUMO EUROPE N.V.

Indirizzo: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgio

N. di TEL: (+32)-(0) 16 381 211

N di FAX: (+32)-(0) 16 400 249

Tutte le denominazioni commerciali sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà di TERUMO CORPORATION e dei loro rispettivi proprietari.

Tabella 1. Grafico di compatibilità per il palloncino Metacross RX

Pressione (atm)	Diametro palloncino (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*			
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31			
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**			
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01			
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90						
18	3.30	4.30	5.48**									
20	3.38**	4.41**	5.61									
22	3.47	4.51	5.75									
24	3.57	4.64										


* Pressione nominale

** Pressione massima di sicurezza

[PRODUCTBESCHRIJVING]

Metacross RX is een ballondilatatiekatheter voor percutane transluminale angioplastiek (PTA) voor perifere indicaties. Metacross RX is van het type rapid exchange (RX) en de maximale diameter van de compatibele voerdraad bedraagt 0,89 mm (0,035 inch). Het distale gedeelte van deze katheter bestaat uit een ballon en een schacht met dubbel lumen (coaxiaal). Het buitenlumen wordt gebruikt voor het vullen en legen van de ballon met contrastmiddel verduld met zoutoplossing. Het binnenlumen (het voerdraatlumen; van de distale tip tot aan de voerdraadpoort) is voor het inbrengen van een compatibele voerdraad ten behoeve van het opvoeren van de katheter door de te dilateren stenotische laesie of stent. Het proximale gedeelte is een schacht met één lumen met een aanzetstuk met één luerpoort voor het aansluiten van een hulpmiddel voor vullen/legen. Binnen in de ballon zijn twee radio-opake markeringen aangebracht die de werklengte van de ballon aangeven, als hulpmiddel voor de arts bij een correcte plaatsing van de ballon in de doellaesie onder fluoroscopie. Metacross RX is verkrijgbaar in verschillende ballonmaten wat betreft de diameter en lengte bij de aanbevolen vuldruk (nominale druk). Eenmaal gevuld varieert de ballondiameter afhankelijk van de vuldruk. De balloncompliance van Metacross RX is vermeld in tabel aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. In de sterilisatieverpakking is het hulpmiddel voorzien van beschermingsmaterialen, een ballonbeschermhuls en een stilet, die vóór het gebruik moeten worden verwijderd. De ballonbeschermhuls is aangebracht over de met laag profiel geplooid ballon en het stilet is in het voerdraatlumen gestoken om inklappen van de katheterschacht te voorkomen. De distale tip van de katheter is conisch om het opvoeren van de katheter in de stenotische laesie of stent te vergemakkelijken. De spoelnaald wordt als een accessoire bij dit hulpmiddel geleverd voor het spoelen en vullen van het voerdraatlumen met gehepariniseerde zoutoplossing.

<NAAM VAN DE ONDERDELEN>

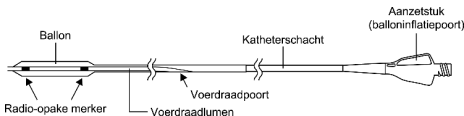

Steriel en pyrogeenvrij in een onbeschadigde en ongeopende blisterverpakking. Dit medisch hulpmiddel is gesteriliseerd met ethyleenoxide.

Aanbevolen voerdraaddiameter:

Maximumdiameter: 0,89 mm (0,035")

Aanbevolen inflatiedruk en maximale inflatiedruk

Nominale druk:

- Ballondiameter: kleiner dan 6 mm: 10 atm
- Ballondiameter: 6 mm en groter: 8 atm

Bepaalde scheurdruk

- Ballondiameter: kleiner dan 5 mm: 20 atm
- Ballondiameter: 5 mm: 18 atm
- Ballondiameter: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Ballondiameter: 9 mm en groter: 12 atm

[INDICATIES]

De Metacross RX PTA ballondilatatiekatheter is bestemd voor de dilatie van stenosen in de aa. iliaca, femoralis, iliofemorialis, poplitealis, infrapoplitealis en renalis, en voor de behandeling van obstructieve laesies van native of synthetische arterioveneuze dialysefistels. Gebruik van dit hulpmiddel is tevens geïndiceerd voor postdilatie van stents in het perifere vaatstelsel.

Opmerking: de verificatietest voor postdilatie van stents met Metacross RX werd verricht met een Complete® SE vasculair stentsysteem (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® vasculair stentsysteem (Cordis Corporation) en een Epic™ vasculair zelfexpanderend stentsysteem (Boston Scientific Corporation).

[CONTRA-INDICATIES]

1. Patiënten die binnen één maand na een AV-shuntconstructie een anastomotische stenose hebben ontwikkeld.
2. Patiënten met laesies die met een pseudoaneurysma verbonden zijn.
3. Zwangere patiënten.
4. Patiënten die behandeling met antibloedplaatjetherapie of anticoagulantia niet kunnen verdragen.

[WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]

[Waarschuwingen]

1. Dit hulpmiddel is bestemd voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken. Niet opnieuw steriliseren. Niet herwerken. Het product herwerken kan de steriliteit, de biocompatibiliteit en de functionele integriteit ervan compromitteren.
2. Niet gebruiken als het product of de eenheidsverpakking beschadigd is.
3. Vul de ballon niet verder dan de diameter van het bloedvat proximale en distaal van de stenotische laesie.
4. Vul de ballon niet tot een druk hoger dan de bepaalde scheurdruk (RBP).
5. Gebruik deze katheter niet in het centrale circulatoire systeem.

[Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot procedures]

1. Ga voorzichtig en langzaam te werk wanneer u het hulpmiddel uit de houder haalt en verwijder de beschermingsmaterialen van dit hulpmiddel. Door onvoorzichtige hantering kan de ballon en/of de katheterschacht van het hulpmiddel worden beschadigd, waardoor het vullen en/of legen van de ballon kan worden belemmerd.
2. Vul de ballon met het contrastmiddel dat in een verhouding van 1:1 is verdund met fysiologische zoutoplossing (hierna "de inflatievloeistof" genoemd). Er mag geen gasvormig medium zoals lucht worden gebruikt om de ballon te vullen. (Hierdoor kan de ballon ongelijkmatig worden gevuld.)
3. Verwijder vóór gebruik alle lucht uit de ballon en het balloninflatielumen en vervang dit door de inflatievloeistof. (Als de lucht niet volledig wordt verwijderd, kan de inflatietoestand van de ballon niet met fluoroscopie worden waargenomen.)
4. Bij ernstige stenotische laesies zoals verkalkte laesies kan het bloedvat niet volledig worden gedilateerd. Oefen in dat geval geen druk uit die hoger is dan de bepaalde scheurdruk. (De ballon kan dan barsten en de resten kunnen achterblijven in het lichaam.)
5. Voor wat betreft de medische hulpmiddelen die in combinatie met deze katheter worden gebruikt, volgt u de gebruiksinstructies van deze hulpmiddelen. (Als de ballonkatheter wordt gebruikt voor postdilatie van de stent tijdens een perifere stentplaatsingsprocedure raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.)
6. Voorzichtig te werk gaan met behulp van fluoroscopie bij het inbrengen in de stent, terugtrekken uit de stent en dilateren van de ballon in de stent. (Het niet uitvoeren onder fluoroscopie, kan deze katheter of het bloedvat beschadigen.)
7. Probeer de Metacross RX PTA ballondilatatiekatheter niet door een inbrenghuls te voeren die kleiner is dan de op het etiket vermelde maat. Zie het productetiket.

[Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik]

1. Gebruik het hulpmiddel onmiddellijk na het openen van de steriele verpakking.
2. De gehele procedure dient aseptisch te worden uitgevoerd.
3. Deze katheter mag uitsluitend worden gebruikt door artsen met ervaring in percutane vasculaire therapie.
4. Kies een katheter met de juiste ballonafmetingen (ballondiameter, ballonlengte) op basis van de volgende criteria (procedures).
 - 1) De diameter van de gevulde ballon mag niet groter zijn dan de inwendige diameter van het bloedvat proximale en distaal van de laesie.
 - 2) De lengte van de gevulde ballon mag niet groter zijn dan de lengte van de te behandelen laesie. (Een verkeerd gekozen katheter kan leiden tot acute vaatocclusie.)

5. Gebruik deze katheter uitsluitend als de mogelijkheid bestaat om op elk gewenst moment een spoedoperatie uit te voeren.
6. De arts die de leiding over de ingreep heeft, bepaalt de duur en het aantal balloninflaties op basis van zijn/haar ervaring.
7. Zolang de ballonkatheter in het bloedvat is ingebracht, wordt geëpariniseerde fysiologische zoutoplossing toegediend voor anticoagulatie.
8. Vul de ballon nooit en voer de voerdraad nooit op als de katheter gebogen of geknikt is.
9. Manipuleer de katheter voorzichtig in het bloedvat, waarbij u de locatie en beweging van de tip controleert met behulp van fluoroscopie of DSA-bewaking (digitale subtractieangiografie).
10. Vul de ballon altijd terwijl de inflatietoestand wordt gecontroleerd met behulp van fluoroscopie. Vul de ballon voorzichtig terwijl u de beweging controleert aan de hand van de radio-opake markers. Als een abnormaliteit wordt opgemerkt, zoals geringe weerstand, een onbeweeglijke katheter tijdens de manipulatie of een geknikte distale tip van de voerdraad, moet de procedure onmiddellijk worden gestaakt en moet deze katheter langzaam worden verwijderd samen met de voerdraad.
11. De katheter niet snel inbrengen of verwijderen. (Een snelle handeling kan de katheter of de vasculaire intima beschadigen.)
12. Verplaats de katheter niet terwijl de ballon gevuld is. (Door verplaatsing van de katheter terwijl de ballon gevuld is, kan de ballon barsten of de katheterschacht breken.)
13. Vul of leeg de ballon niet snel in het bloedvat. (Door snel vullen of legen kan het bloedvat worden beschadigd of de ballon barsten, waarbij resten in het lichaam kunnen achterblijven.)
14. Gebruik geen injector (automatisch injectieapparaat) voor het vullen van de ballon.
15. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om beschadiging van de katheter door een scalpel of schaar te voorkomen.
16. Als tijdens het manipuleren van de katheter een abnormaliteit wordt opgemerkt, zoals sterke weerstand, moet de procedure onmiddellijk worden gestaakt. De oorzaak moet worden vastgesteld en er moeten passende maatregelen worden getroffen. (Voorzetting van de ingreep met overmatige kracht kan de katheter of de vaatwand beschadigen.)
17. Let altijd op de toestand van de patiënt en bewaak de lichaamstemperatuur, hartslag en ademhaling. Als er een afwijking wordt waargenomen, moet het gebruik van de katheter onmiddellijk worden gestaakt of moeten passende maatregelen worden getroffen met het oog op de toestand van de patiënt, naar de beoordeling van de arts.
18. Werp de katheter na gebruik weg als medisch afval volgens de in het ziekenhuis geldende procedures.
19. Gebruik geen middelen die organische oplosmiddelen of olieachtige contrastvloeistoffen bevatten. Door aanraking met deze middelen kan de katheter worden beschadigd.
20. Bij het manipuleren van deze katheter mag de katheter niet worden gedraaid of verdraaid.
21. Zorg dat de ballon volledig gelegeerd is wanneer u dit hulpmiddel in het bloedvat inbrengt of uit het bloedvat verwijdert. (Voor een hulpmiddel met een grotere en langere ballon is een langere deflatietijd vereist.)
22. Als bij het terugtrekken van dit hulpmiddel na de procedure weerstand wordt ondervonden, wordt aanbevolen om het gehele systeem samen met de inbrenghuls/ geleideschacht terug te trekken.
23. Gebruik de katheter altijd met een voerdraad ingebracht in het voerdraatlumen.

[Gebruiksaanwijzingen]

De materialen die over het algemeen nodig zijn voor PTA met de Metacross RX PTA ballondilatatiekatheter zijn:

- Een of meer voerdraden met de juiste diameter en lengte
- Een geschikte set met inbrenghuls/geleideschacht en dilatator
- Flacon contrastmiddel
- Flacon steriele fysiologische zoutoplossing
- Inflatie-instrument met manometer
- Luer-lockspuit

• Driewegafsluitkraan

[Bedieningsmethode of gebruiksinstructies]

1. Keuze van de katheter
Controleer vóór gebruik met behulp van fluoroscopie de inwendige diameter van het bloedvat proximale en distaal van de stenotische laesie en kies de katheter met de juiste ballonmaat. Als er twee maten in aanmerking komen voor de betreffende diameter, kiest u de kleinste maat.
2. Voorbereiding
 - 1) Neem de katheter op aseptische wijze uit de verpakking en verwijder de beschermende materialen van de katheter.
 - 2) Vervang de lucht in de ballon en het balloninflatielumen met inflatievloeistof, waarbij u de volgende procedures opvolgt.
 - a) Sluit het inflatie-instrument (niet inbegrepen in deze kit) gevuld met de inflatievloeistof aan op de balloninflatiepoort.
 - b) Oefen ongeveer 10 seconden onderdruk uit op het inflatie-instrument, richt de tip van de katheterschacht naar beneden en neem de onderdruk langzaam weg zodat de vloeistof de ballon en het balloninflatielumen kan vullen en de lucht wordt verdreven.
 - c) Als er nog lucht aanwezig is in de ballon en het balloninflatielumen, herhaalt u procedure b) tot de lucht volledig is verdreven.
 - d) Maak het inflatie-instrument los van de balloninflatiepoort en verwijder de lucht uit de cilinder van het inflatie-instrument.
 - e) Bevestig het inflatie-instrument weer aan de balloninflatiepoort en handhaaf de onderdruk. Controleer of er geen lucht meer terugstroomt in de spuit.
 - 3) Spoel het voerdraatlumen met geëpariniseerde zoutoplossing met behulp van de spoelnaald en vul het lumen met geëpariniseerde zoutoplossing.
 - 4) Dompel de gehele Metacross RX PTA ballondilatatiekatheter onder in fysiologische zoutoplossing.
3. Inbrengen en vullen van de ballonkatheter
Controleer vóór het gebruik aan de hand van de volgende tabel of deze katheter compatibel is met de geleidekatheter (niet inbegrepen in deze kit), de inbrenghuls (niet inbegrepen in deze kit) en de voerdraad (niet inbegrepen in deze kit).

Catalogusnummer	Ballon-diameter (mm)	Compatibele inbrenghuls (Fr/mm)	Maximum-diameter voor de voerdraad (inch/mm)
BD-L30020MR ~	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 inch (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Bij gebruik van de katheter, ingebracht in de inbrenghuls of geleidekatheter

- 1) Bij gebruik van de katheter in de geleidekatheter moet de hemostatische klep worden losgemaakt, maar zodanig dat er geen bloedlekkage kan optreden.
- 2) Breng de katheter, met de ballon volledig gelegeerd, geleidelijk in de inbrenghuls of geleidekatheter in over de voerdraad en voer de katheter op naar de distale rand van de laesie. Voer de katheter langzaam onder fluoroscopie op tot de radio-opake merker in de ballon de beoogde plaats bereikt.
- 3) Controleer met behulp van fluoroscopie de positie van de radio-opake merker in de ballon en bepaal de dilatatieplaats.
- 4) Bevestig het inflatie-instrument stevig aan de balloninflatiepoort.
- 5) Vul de ballon geleidelijk tot de doeldiameter, controleer hierbij de inflatiedruk en dilateer de stenotische laesie (de diameters van de gevulde ballon vindt u in de balloncompliantietabel, tabel 1, aan het einde van deze gebruiksaanwijzing).
4. Verwijderen van de katheter
 - 1) Oefen onderdruk uit om de ballon volledig te legen en verwijder vervolgens de katheter.
5. Opnieuw inbrengen van de katheter
 - 1) Als het opnieuw inbrengen van de verwijderde katheter met gelegeerde ballon vereist is, moet u zorgen dat de ballon volledig gelegeerd en opgevoeten is voordat u hem opnieuw inbrengt in

het bloedvat van de patiënt. Na het opnieuw inbrengen gebruikt u de katheter volgens de paragraaf "Inbrengen en vullen van de ballonkatheter" in deze gebruiksaanwijzing.

- 2) Als er bij het opnieuw inbrengen van de katheter weerstand ondervonden wordt, stopt u met het opvoeren en verwijdt u hem voorzichtig uit het bloedvat van de patiënt. Bereid het gebruik van een nieuwe Metacross RX voor, overeenkomstig de bovenstaande procedures in dit gedeelte van de gebruiksaanwijzing.

[Complicaties]

Problemen met het hulpmiddel

- Scheuren van de ballon
- Onvoldoende vullen/leggen van de ballon
- Breken van de ballon en/of de katheterschacht
- Moeilijkheden bij het verwijderen van het hulpmiddel
- Lekkage van inflatievloeistof

Ongunstige gebeurtenissen:

- Plaatselijke of systemische infecties
- Plaatselijke inwendige bloeding of hematoom
- Intimaruuptuur
- Vaatdissectie
- Vaatperforatie
- Vaatruptuur
- Aneurysma
- Aritmie
- Acute vaatocclusie
- Veneuze trombo-embolie
- Vasospasme
- Vorming van een pseudo-aneurysma
- Arterioveneuze fistel
- Bloeding waardoor bloedtransfusie nodig is
- Allergische reactie op het contrastmiddel/nierinsufficiëntie
- Pijn of drukpijn
- Overlijden
- Embolie
- Endocarditis
- Koorts
- Hypertensie/hypotensie
- Ontsteking
- Myocardinfarct
- Sepsis
- Shock
- CVA
- TIA

[Opslag en uiterste gebruiksdatum]

1. Op een koele, droge en donkere plaats bewaren. Vermijd blootstelling aan water en direct zonlicht.
2. De uiterste gebruiksdatum is op de doos vermeld. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum.

[Verpakking]

1 set/doos

[Naam en adres van fabrikant of vertegenwoordiger]



Fabrikant: KANEKA CORPORATION

Adres: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Telefoonnr.: (+81)-(0) 6-6226-5256
Faxnr.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Gemachtigde in de EU:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adres: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Telefoonnr.: (+32)-(0) 14-256-297
Faxnr.: (+32)-(0) 14-256-298

Distributeur in de EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adres: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, België
Telefoonnr.: (+32)-(0) 16 381 211
Faxnr.: (+32)-(0) 16 400 249

Alle merknamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van TERUMO CORPORATION en hun respectievelijke eigenaren.

Tabel 1. Balloncompliantietabel Metacross RX

Druk (atm)	Ballondiameter (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Nominale druk


** Bepaalde scheurdruk

[PRODUKTBESKRIVNING]

Metacross RX är en ballongdilationskateter för perkutan transluminal angioplastik (PTA) för perifer indikationer.

Metacross RX är en snabbutbytt (RX) kateter och den maximala diametern för den kompatibla ledaren är 0,89 mm (0,035 tum). Den distala delen av katetern består av en ballong och dubbla lumenaxlar (koaxiala). Den yttre lumen används för upplåsning och tömning av ballongen med kontrastmedel som späts ut med koksaltlösning. Den inre lumen (ledarlumen; från den distala spetsen till ledaröppningen) är för införing av en kompatibel ledare för att underlätta frammatning av katetern genom den stenotiska lesionen eller stenten som ska dilateras. Den proximala delen är en enkellumenaxel med en enkel luerport med infattning för att ansluta en upplåsning/tömningsenhet. Inuti ballongen finns två röntgentäta markörer som anger ballongens effektiva längd. De är placerade för att vägleda läkaren vid placering av ballongen på rätt sätt i mållesionen under fluoroskopi. Metacross RX finns i olika ballongstorlekar beroende på ballongens diameter och längd med rekommenderat upplåsningstryck (nominellt tryck). Vid upplåsning varierar ballongens diameter enligt upplåsningstrycket. Ett diagram över ballongöversensstämmelse för Metacross RX finns i tabell 1 i slutet av denna bruksanvisning. I den sterila förpackningen är enheten utrustad med skyddsmaterial, ett förvaringsrör för ballongen och en mandrin, som ska avlägsnas före användning. Ballongens förvaringsrör är placerad över ballongen vikt i en låg profil. Mandrinen är införd i ledarlumen för att förhindra kollaps av kateterskafet. Kateterns distala spets har en avsmalnande form för att underlätta kateterns införing i den stenotiska lesionen eller stenten. Spolnål finns som tillbehör till utrustningen för spolning och fyllning av ledarlumen med hepariniserad saltlösning.

<NAMN PÅ VARJE DEL>

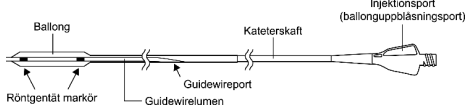

Steril och icke pyrogen i en oskadad och öppnad blisterpåse. Denna produkt har steriliserats med etylenoxidgas.

Rekommenderad ledardiameter:

Maximal diameter: 0,89 mm (0,035")

Rekommenderat inflationstryck och max inflationstryck

Nominellt tryck:

- Ballongdiameter: mindre än 6 mm: 10 atm
- Ballongdiameter: 6 mm och större: 8 atm

Märkt bristningstryck:

- Ballongdiameter: mindre än 5 mm: 20 atm
- Ballongdiameter: 5 mm: 18 atm
- Ballongdiameter: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Ballongdiameter: 9 mm och större: 12 atm

[INDIKATIONER]

Metacross RX PTA ballongdilationskateter är avsedd för att tjäna ut stenosis i iliaca-, femoral-, ilio-femoral-, popliteal-, infra-popliteal- och njurarterier, samt för behandling av obstruktiva lesioner av naturlig eller syntetisk arteriovenös dialysfistel. Enheten är även avsedd för stent efterdilatation i periferivaskulaturen.

Obs! Verifieringstestet för stent efterdilatation av Metacross RX genomfördes med Complete® SE vaskulära stentsystem (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® vaskulära stentsystem (Cordis Corporation) och Epic™ vaskulära självexpanderande stentsystem (Boston Scientific Corporation).

[KONTRAINDIKATIONER]

1. Patienter som har utvecklat anastomotisk stenosis inom en månad efter konstruktion av AV-shunt.
2. Patienter som har lesioner som kommunicerar med ett pseudoaneurysm.
3. Patienter som är gravida.
4. Patienter som inte klarar trombocythämmande behandling eller blodförtunningsbehandling.

[VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]

[Varningar]

1. Enheten är endast avsedd för engångsbruk. Får ej återanvändas. Får ej omsteriliseras. Får ej ombearbetas. Ombearbetning kan äventyra sterilitet, biokompatibilitet och funktionella egenskaper hos produkten.
2. Använd inte produkten eller förpackningen har skadats.
3. Blås inte upp ballongen mer än till diametern på blodkärlet proximalt och distalt till den stenotiska lesionen.
4. Blås inte upp ballongen till ett tryck över det märkta bristningstrycket.
5. Använd inte denna kateter i det centrala cirkulationssystemet

[Försiktighetsåtgärder gällande procedurer]

1. Ta försiktigt och långsamt ut enheten ur förvaringsröret och ta bort skyddsdelarna från enheten. Vårslös hantering kan skada ballongen och/eller kateterskafet på enheten, vilket försämrar ballongupplåsningen och/eller tömningen.
2. Blås upp ballongen med kontrastmedel utspätt med saltlösning med blandningsförhållandet 1:1 (nedan kallat "upplåsningssväska"). Inga gaser, till exempel luft, får användas för upplåsningen. (Ballongen kan bli oregelbundet upplåst.)
3. Före användning ska all luft i ballongen och ballongupplåsninglumen tappas ur och ersättas med upplåsningssväska. (Om inte all luft töms ur kan ballongupplåsningstillståndet inte observeras under fluoroskopi.)
4. Vid allvariga stenotiska lesioner, till exempel förkalkade lesioner, kan inte blodkärlet dilateras fullt. Blås i så fall inte upp ballongen till ett tryck över det märkta bristningstrycket. (Ballongen kan spricka och material kan lämnas kvar i kroppen.)
5. Precis som för medicinsk utrustning, som används tillsammans med denna kateter, skall användningsinstruktionerna för sådan utrustning användas. (När ballongkateter används för postdilatation av stent under perifer stentplacering, se tillverkarens användningsinstruktioner.)
6. Vid införing i stenten, utdragning från stenen eller dilation av ballongen i stenten, utför arbetet med försiktighet under fluoroskopi. (Om detta görs utan fluoroskopi kan katetern eller blodkärlet skadas.)
7. Försök inte föra genom Metacross RX PTA ballongdilationskateter genom en mindre introducer än vad som anges på etiketten. Se produktmärkingen.

[Försiktighetsåtgärder under användning]

1. Använd produkten direkt efter att den sterila förpackningen har öppnats.
2. Hela proceduren skall utföras aseptiskt.
3. Denna kateter får endast användas av läkare som har kunskap om perkutan vaskulär behandling.
4. Välj den kateter med korrekt ballongstorlek (ballongdiameter, ballonglängd) enligt följande (procedurer) kriterier.
 - 1) Den upplåsta ballongdiameteren får inte överskrida kärlets inre diameter proximalt och distalt till lesionen.
 - 2) Den upplåsta ballongens längd får inte överskrida längden på lesionen som ska behandlas.
(Felaktigt val av kateter kan leda till akut vaskulär okklusion.)
5. Använd endast denna kateter när nödfallskirurgi omedelbart kan utföras.

- Läkaren som ansvarar för ingreppet skall fastställa varaktighet och antal ballongupplåsningar baserat på hans/hennes senaste erfarenheter.
- Heparin saltlösning skall ges för antikoagulation medan denna ballongkateter är införd i blodkärlet.
- Fyll inte ballongen och för inte in ledaren med katetern böjd eller knäckt.
- Manipulera försiktigt katetern i blodkärlet för att verifiera dess placering och förflyttning av dess spets under fluoroskopi eller DSA-monitor (Digital Subtraction Angiography).
- Fyll alltid ballongen medan dess tillstånd studeras under fluoroskopi. Fyll försiktigt ballongen samtidigt som dess rörelse observeras med de röntgentäta markörerna. Om någon abnormitet upptäcks som till exempel motstånd, orörlig kateter under manipulering eller knäckt distal spets på ledaren ska proceduren genast avbrytas och katetern skall långsamt tas bort tillsammans med ledaren.
- För inte in och ta inte ut denna kateter snabbt. (Utförs detta snabbt kan katetern eller kärlets intima skadas.)
- Flytta inte denna kateter med ballongen upplåst. (Flyttas denna kateter med ballongen upplåst kan det orsaka att ballongen brister eller kateterskafet bryts.)
- Blås inte upp och töm inte ballongen snabbt i blodkärlet. (Snabb upplåsning eller tömning kan skada blodkärlet eller leda till att ballongen brister vilket i sin tur leder till att smuts lämnas kvar i kroppen.)
- Använd i inte injektor (automatisk injektionsenhet) för att blåsa upp ballongen.
- Var försiktig så att inte katetern skadas av kirurgisk kniv eller sax.
- Om någon abnormitet, till exempel kraftigt motstånd, upplevs under manipulering av katetern ska proceduren genast avbrytas. Orsaken ska verifieras och lämpliga åtgärder ska vidtas. (Om arbetet fortsätts med för mycket kraft kan orsaka att katetern eller kärlväggen skadas.)
- Var alltid uppmärksam på patientens tillstånd och observera kroppstemperaturen, pulsen och andningen. Om abnormitet upptäcks, avbryt genast användningen av katetern eller vidta lämplig åtgärd för patientens tillstånd enligt läkarens bedömning.
- Efter användning skall katetern avfallshanteras som medicinskt avfall i enlighet med sjukhusets föreskrifter.
- Använd inte medel som innehåller organiska lösningsmedel eller oljehaltiga kontrastmedel. Kontakt med dessa medel kan leda till att katetern skadas.
- Vrid eller rotera inte katetern under manipuleringen.
- Kontrollera att ballongen är helt tömd när enheten förs in eller tas ut ur blodkärlet. (En enhet med större och längre ballong kräver längre tömningstid.)
- Om motstånd påträffas utdragningen av enheten rekommenderas att hela systemet dras ut tillsammans med introducer/styrylsan.
- Använd alltid katetern längs en ledare införd i guide wirelumen.

[Användningsinstruktioner]

Material som vanligtvis krävs för PTA med Metacross RX PTA ballongdilationskateter omfattar:

- Ledare med lämplig diameter och längd
- Lämplig introducer/styrylsan och dilator set
- Ampull med kontrastmedel
- Ampull med steril saltlösning
- Upplåsningсанordning med manometer
- Luer-lock-spruta
- Trevägskran

[Användningsmetod eller användningsinstruktioner]

- Val av kateter
Kontrollera, före användning blodkärlets innerdiameter med fluoroskopi före och distalt till den stenotiska lesionen och välj kateter med lämplig ballongstorlek. Om två storlekar kan användas till den verifierade diametern ska den mindre storleken väljas.
- Förberedelser
 - Efter att denna kateter aseptiskt har tagits ur förpackningsbehållaren skall de skyddande materialerna tas bort.

- Ersätt luften i ballongen och ballongupplåsningsslumen med upplåsningssvåtska enligt följande metod.
 - Anslut upplåsningсанordningen (ingår inte i detta set) fyllt med upplåsningssvåtskan till ballongens upplåsningssport.
 - Efter att det negativa trycket har applicerats i ungefär 10 sekunder på upplåsningсанordningen, riktas kateterns axelspets nedåt och det negativa trycket frigörs sakta för att låta svåtskan fylla ballongen och ballongupplåsningsslumen och släppa ut luften.
 - Om det finns någon luft kvar i ballongen och injektionsporten när ballongen har blåsts upp skall proceduren b) upprepas tills att all luft är utsläppt.
 - Koppla från upplåsningсанordningen från ballongupplåsningssporten och luften tappas ur i cylindern till upplåsningсанordningen.
 - Anslut upplåsningсанordningen till ballongens upplåsningssport och bibehåll negativt tryck. Verifiera att luften inte längre kommer tillbaka till sprutan.
- Spola ledarlumen med hepariniserad saltlösning med spólnålen och fyll lumen med hepariniserad saltlösning.
- Sänk ner hela Metacross RX PTA ballongdilationskateter i saltlösning.
- Införing och upplåsning av ballongkatetern
Kontrollera före användning att katetern är kompatibel med ledarkatetern (ingår inte i detta set), introducerhylsan (ingår inte i detta set) och ledaren (ingår inte i detta set) med hjälp av följande tabell.

Artikelnnummer	Ballongdiameter (mm)	Kompatibel hylsa (Fr/mm)	Maximal ledardiameter (tum/mm)
BD-L30020MR	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr/2,00mm	0,035 tum (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr/2,33 mm	

Vid användning av denna kateter införd i introducerhylsan eller ledarkatetern

- Vid användning av denna kateter i ledarkatetern, lossa den hemostatiska ventilen medan den hålls tillräckligt tät så att blodläckage förhindras.
- För gradvis in katetern, med ballongen helt tömd, i introducerhylsan eller ledarkatetern förbi ledaren och för in den till lesionens distala periferi. För sakta fram katetern under fluoroskopi tills de röntgentäta markörerna når målplatsen.
- Verifiera under fluoroskopi de röntgentäta markörernas position i ballongen och bestäm dilationsplatsen.
- Anslut upplåsningсанordningen till ballongens upplåsningssport.
- Blås gradvis upp ballongen till måldiametern och verifiera upplåsningstrycket och tånj ut den stenotiska lesionen (se tabellen över ballongöverensstämmelse i slutet av den här bruksanvisningen för upplåst ballongdiameter).
- Utdragning av kateter
 - När det negativa trycket har applicerats för att tömma ballongen helt skall katetern dras ut.
- Återinföring av katetern
 - Om det krävs en återinföring av den borttagna katetern med tömd ballong, ska du kontrollera att ballongen är helt tömd och vikt innan den sätts in i patientens blodkärl. Vid återinföring ska katetern användas enligt avsnittet "Införing och upplåsning av ballongkatetern" i detta dokument.
 - Om något motstånd påträffas när katetern återinförs ska införingen avbrytas och katetern försiktigt tas ut ur patientens blodkärl. Förbered dig på att använda en ny Metacross RX enligt de förfaranden som anges ovan i detta avsnitt av bruksanvisningen.

[Komplikationer]

Fel på enheten:

- Ballongbristning
- Otillräcklig uppblåsning/tömning av ballongen
- Ballongen och/eller kateterskafet går sönder
- Svårt att ta ut enheten
- Uppblåsningsvätska läcker ut

Biverkningar:

- Lokal eller systeminfektion
- Lokal intern blödning eller hematom
- Inre bristning
- Vaskulär dissektion
- Vaskulär perforation
- Vaskulär bristning
- Aneurysm
- Arytmi
- Akut vaskulär ocklusion
- Venös tromboembolism
- Vasospasm
- Bildning av pseudoaneurysm
- Arteriovenös fistel
- Blödning som kräver transfusion
- Allergisk reaktion på kontrastmedlet/njursvikt
- Värk eller trycksmärta
- Dödsfall
- Embolism
- Endokardit
- Feber
- Hypertension/hypotension
- Inflammation
- Myokardiinfarkt
- Sepsis
- Chock
- Stroke
- Transitorisk ischemisk attack

Alla märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör TERUMO CORPORATION och dess respektive ägare.

[Förvaring och bäst-före-datum]

1. Förvaras på sval, torr, mörk plats. Får ej utsättas för vatten eller direkt solljus.
2. Bäst-före-datum anges på lådan. Får ej användas efter bäst-före-datum.

[Förpackning]

1 set/låda

[Tillverkarens eller representantens adress]**Tillverkare: KANEKA CORPORATION**

Adress: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tfn: (+81)-(0) 6-6226-5256
Fax: (+81)-(0) 6-6226-5143

**Auktoriserad återförsäljare inom EU-området****KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.**

Adress: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tfn: (+32)-(0) 14-256-297
Fax: (+32)-(0) 14-256-298

EU-distributör: TERUMO EUROPE N.V.

Adress: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, Belgien
Tfn: (+32)-(0) 16 381 211
Fax: (+32)-(0) 16 400 249

Tabell 1. Diagram över ballongöverensstämmelse för Metacross RX


Tryck (atm)	Ballongdiameter (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Nominellt tryck

** Märkt bristningstryck

[BESKRIVELSE AF PRODUKTET]

Metacross RX er et perkutant transluminalt angioplastisk (PTA) ballondilatationskateter til perifer indikationer. Metacross RX er af typen rapid exchange (RX), og den kompatible guidewire har en maksimal diameter på 0,89 mm (0,035"). Dette kateters distale del består af en ballon og skafter med dobbeltlumen (koaksial). Den udvendige lumen anvendes til inflation af ballonen med kontrastmiddel fortyndet med saltvand og til tømning af ballonen. Den indvendige lumen (guidewirelumen, fra den distale spids til guidewireporten) er til isætning af en kompatibel guidewire, så det bliver lettere at føre kateteret gennem den stenotiske læsion eller stent, der skal udvides. Den proksimale del er et enkeltlumenskaft med en enkelt luerportmuffe til tilslutning af en inflations-/tømningsenhed. Inden i ballonen angiver to røntgenfaste markører ballonens arbejds længde for at hjælpe lægen med at placere ballonen korrekt i mål læsionen under fluoroskopi. Metacross RX fås med forskellige ballonstørrelser hvad angår diameter og længde ved de anbefalede inflationstryk (nominelt tryk). Efter inflation varierer ballondiameteren afhængigt af inflationstrykket. Der er et skema over ballontolerancer for Metacross RX i tabel 1 sidst i denne brugsanvisning. I den sterile emballage er produktet forsynet med beskyttende materialer, et ballonbeskyttelsesrør og en stilet, som skal fjernes før brug. Ballonbeskyttelsesrøret er placeret over ballonen, der er foldet til en lav profil, og stiletten er ført ind i guidewirens lumen for at forhindre kateterskafet i at kollaps. Kateterets distale spids er tilspidset for at gøre det lettere at føre kateteret ind i den stenotiske læsion eller stent. Skylløkanylen følger med dette produkt som et tilbehør, der er beregnet til at skylle og fylde guidewirens lumen med hepariniseret saltvand.
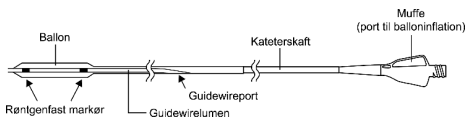
<KATETERETS DELE>

Sterilt og ikke-pyrogen i en ubeskadiget og uåbnet blisterpose. Produktet er steriliseret med ætylenoxid.

Anbefalet guidewirediameter:

Maksimal diameter: 0,89 mm (0,035")

Anbefalet inflationstryk og maksimalt inflationstryk**Nominelt tryk:**

- Ballondiameter: mindre end 6 mm: 10 atm
- Ballondiameter: 6 mm og større: 8 atm

Nominelt sprængningstryk:

- Ballondiameter: mindre end 5 mm: 20 atm
- Ballondiameter: 5 mm: 18 atm
- Ballondiameter: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Ballondiameter: 9 mm og større: 12 atm

[INDIKATIONER]

Metacross RX PTA balloon-dilatationskateteret er beregnet til at dilaterer stenoser i iliac-arterier og i de femorale, iliofemorale, popliteale, infrapopliteale og renale arterier samt til behandling af obstruktive læsioner af naturlige eller syntetiske arteriovenøse dialysefister. Produktet er desuden indikeret til postdilatation af stents i de perifer blodkar.

Bemærk: Verificeringstesten for stentpostdilatation med Metacross RX blev udført med Complete® SE Vascular Stent System (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System (Cordis Corporation) og Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System (Boston Scientific Corporation).

[KONTRAINDIKATIONER]

1. Patienter, der har udviklet anastomosestenose inden for en måned efter konstruktion af en AV shunt.
2. Patienter, der har læsioner, som kommunikerer med en pseudoaneurisme.
3. Gravide patienter.
4. Patienter, der ikke kan tåle trombocythæmmende behandling eller antikoagulationsbehandling.

[ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER]**[Advarsler]**

1. Dette produkt er kun til engangsbrug. Må ikke genbruges. Må ikke resteriliseres. Må ikke omforarbejdes. Omforarbejdning kan kompromittere steriliteten, biokompatibiliteten og funktionen af produktet.
2. Må ikke bruges, hvis produktet eller produktemballagen er blevet beskadiget.
3. Ballonen må ikke inflateres til en diameter, der er større end diameteren af blodkarret proksimalt og distalt for stenosislæsionen.
4. Ballonen må ikke inflateres til et tryk, der overstiger det nominelle sprængningstryk.
5. Brug ikke dette kateter i det centrale kredsløb.

[Forholdsregler i forbindelse med procedurer]

1. Tag forsigtig og langsomt produktet ud af forsendelsesrøret, og fjern de beskyttende dele fra produktet. Uforsigtig håndtering kan beskadige ballonen og/eller kateterskafet, så det ikke er muligt at fylde og/eller tømme ballonen.
2. Inflater ballonen med kontrastmiddel fortyndet med saltvand i forholdet 1:1 (herefter kaldet inflationsvæske). Anvend ikke gasholdige midler som f.eks. luft til at fylde ballonen. (Udvildelsen af ballonen kan blive uregelmæssig.)
3. Inden brug skal ballonen og ballonens inflationslumen tømmes for luft, og luften skal erstattes af inflationsvæske. (Hvis luften ikke tømmes helt ud, kan ballonens inflationstilstand ikke observeres vha. fluoroskopi.)
4. I tilfælde af svært stenotiske læsioner, som f.eks. forkalkede læsioner, kan blodkarret ikke dilateres helt. Anvend ikke et tryk, der overskrider det nominelle sprængningstryk i sådanne tilfælde. (Ballonen kan springe, og rester kan forblive i kroppen.)
5. Hvad angår de medicinske produkter, der anvendes sammen med dette kateter, skal brugsanvisningen til hvert enkelt produkt følges. (Se producentens anvisninger i brug, når ballonkateteret anvendes til postdilatation af en stent under perifer stentanlægning.)
6. Indføring i stenten, tilbagetrekning fra stenten eller udvidelse af ballonen i stenten skal udføres med forsigtighed ved hjælp af fluoroskopi. (Hvis dette gøres uden fluoroskopisk vejledning, kan det medføre beskadigelse af kateteret eller skade af blodkarret.)
7. Forsøg ikke at føre Metacross RX PTA balloon-dilatationskateteret gennem en introducer sheath, der er mindre end angivet på mærkaten. Se produktmærkningen.

[Forholdsregler under brug]

1. Brug produktet umiddelbart efter, at den sterile emballage er åbnet.
2. Hele proceduren skal udføres aseptisk.
3. Dette kateter bør kun anvendes af læger, der har erfaring i perkutan vaskulær behandling.
4. Vælg kateteret med en passende ballonstørrelse (ballondiameter, ballonglængde) i overensstemmelse med følgende (procedure) kriterier.
 - 1) Den inflaterede ballons diameter må ikke være større end den indvendige kardiameter proksimalt og distalt for læsionen.
 - 2) Den inflaterede ballons længde må ikke være større end længden af den læsion, der skal behandles. (U hensigtsmæssigt valg af kateter kan medføre akut karokklusion.)
5. Brug kun dette kateter, hvis nødkirurgi til enhver tid kan udføres.
6. Den læge, der er ansvarlig for proceduren, skal bestemme varigheden og antallet af balloninflationer baseret på egne erfaringer.

- Hepariniseret saltvand skal indgives med henblik på antikoagulation, mens dette ballonkateter føres ind i blodkarret.
- Inflater aldrig ballonen, og før aldrig guidewiren frem, hvis kateteret er bøjet eller snoet.
- Manipuler kateteret forsigtigt i blodkarret, og kontroller kateterspidens placering og bevægelse vha. fluoroskopi eller DSA (digital subtraktionsangiografi) overvågning.
- Ballonen skal altid inflateres under fluoroskopi. Inflater ballonen forsigtigt, mens dens bevægelse kontrolleres ved hjælp af de røntgenfaste markører. Hvis der findes unormaliteter, f.eks. let modstand, fastsiddende kateter under manipulation eller snoet distal guidewirespids, skal proceduren afbrydes øjeblikkeligt, og kateteret skal langsomt fjernes sammen med guidewiren.
- Kateteret må ikke føres ind eller fjernes hurtigt. (Hurtig indføring eller fjernelse kan beskadige kateteret eller skade blodkarrenes intima).
- Kateteret må ikke bevæges, når ballonen er inflateret. (Hvis kateteret bevæges, mens ballonen er inflateret, kan det medføre, at ballonen springer, eller kateterskafet beskadiges.)
- Ballonen må ikke fyldes eller tømmes hurtigt i blodkarret. (Hvis den fyldes eller tømmes hurtigt, kan blodkarret blive beskadiget, eller ballonen kan springe, og rester kan forblive i kroppen).
- Brug ikke en injektor (automatisk injektor) til inflation af ballonen.
- Udvis forsigtighed, så kateteret ikke bliver beskadiget af en skalpel eller saks.
- Hvis der fornemmes stærk modstand under manipulation af kateteret, skal proceduren afbrydes øjeblikkeligt. Find årsagen til modstanden, og tag de nødvendige forholdsregler. (Anvend ikke overdreven kraft, da dette kan føre til beskadigelse af kateteret eller blodkarrets væg.)
- Overvåg patientens tilstand konstant, og overvåg patientens kropstemperatur, puls og vejrtrækning. Hvis der optræder unormalitet, skal brugen af kateteret ophøre øjeblikkeligt, eller der skal tages passende forholdsregler for patientens tilstand, ifølge lægens skøn.
- Efter brug skal kateteret bortskaffes som medicinsk affald i henhold til hospitalets procedurer.
- Anvend ikke midler, der indeholder organiske opløsningsmidler eller olieholdige kontrastmidler. Kontakt med disse midler kan beskadige kateteret.
- Dette kateter må ikke drejes eller roteres, når det manipuleres.
- Kontroller, at ballonen er helt tømt, mens dette produkt føres ind i blodkarret, eller når det fjernes fra blodkarret. (Et produkt med en større og længere ballon kræver længere tømningstid.)
- Hvis der opstår modstand, når dette produkt trækkes tilbage efter proceduren, anbefales det at trække hele systemet tilbage sammen med introduceren/guidesheathen.
- Anvend altid kateteret sammen med en guidewire, indført i guidewirens lumen.

[Nødvendigt tilbehør]

Materialer, der typisk er nødvendige til PTA med Metacross RX PTA ballon-dilatationskateteret omfatter:

- Guidewire(r) af passende diameter og længde
- Passende introducer/guidesheath og dilatatorsæt
- Hætteflaske med kontrastmiddel
- Hætteflaske med steril saltvand
- Inflator med manometer
- Luerlock-sprøjte
- Trevejsstophane

[Anvendelsesmetode eller anvisninger i brug]

- Valg af kateteret
Inden brug verificeres blodkarrets indvendige diameter proksimalt og distalt for den stenotiske læsion vha. fluoroskopi. Vælg kateteret med den passende ballonstørrelse. Hvis to størrelser kan anvendes til den verificerede diameter, skal den mindste størrelse vælges.
- Klargøring
 - Fjern kateteret aseptisk fra emballagebeholderen, og fjern de beskyttende materialer fra kateteret.

- Tøm ballonen og ballonens inflationslumen for luft ved hjælp af inflationsvæske i overensstemmelse med nedenstående procedurer.
 - Sæt indeflatoren (følger ikke med i dette sæt) fyldt med inflationsvæske på porten til balloninflation.
 - Påfør undertryk på indeflatoren i ca. 10 sekunder, vend kateterskafets spids nedad, og udlign langsomt undertrykket, så væsken fylder ballonen og ballonens inflationslumen, og luften presses ud.
 - Hvis der stadig er luft i ballonen og ballonens inflationslumen, skal proceduren gentages, b) indtil ballonen er helt tømt for luft.
 - Kobl indeflatoren af porten til balloninflation, og tøm indeflatorens cylinder for luft.
 - Sæt indeflatoren fast på porten til balloninflation igen, og oprethold undertryk. Kontroller, at luften ikke kommer tilbage i sprøjten.
- Skyl guidewirens lumen med hepariniseret saltvand ved hjælp af skyllekanylen, og fyld lumen med det hepariniserede saltvand.
- Sænk hele Metacross RX PTA ballon-dilatationskateteret ned i saltvand.
- Anlæggelse og inflation af ballonkateteret
Inden brug skal det kontrolleres, at dette kateter er kompatibelt med guidekateteret (følger ikke med i dette sæt), introducersheathen (følger ikke med i dette sæt) og guidewiren (følger ikke med i dette sæt) ved hjælp af den følgende tabel.

Katalog-nummer	Ballondiameter (mm)	Kompatibel sheath (Fr/mm)	Maks. diameter for guidewiren (inch/mm)
BD-L30020MR	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6Fr/2,00 mm	0,035" (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7Fr/2,33 mm	

Ved brug af kateteret indført i introducersheathen eller guidekateteret

- Når kateteret anvendes i guidekateteret, skal hæmostaseventilen løsnes, men den skal dog være tilstrækkeligt fastspændt til at forhindre udsivning af blod.
- Før gradvist kateteret med ballonen helt tømt ind i introducersheathen eller guidekateteret over guidewiren, og før det frem til læsionens distale yderkant. Før ved hjælp af fluoroskopi langsomt kateteret frem, til den røntgenfaste markør i ballonen når målstedet.
- Kontroller positionen af den røntgenfaste markør i ballonen ved hjælp af fluoroskopi, og bestem stedet for dilatation.
- Fastgør indeflatoren sikkert til porten til balloninflation.
- Inflater gradvist ballonen til måldiameteren, idet inflationstrykket kontrolleres, og udvid den stenotiske læsion (se diameter for inflaterede balloner i skemaet over ballontolerancer i tabel 1 sidst i denne brugsanvisning).
- Fjernelse af kateteret
 - Påfør undertryk, indtil ballonen er tømt fuldstændigt, og fjern herefter kateteret.
- Genanlæggelse af kateteret
 - Hvis genanlæggelse af et fjernet kateter med tømt ballon er nødvendig, skal det kontrolleres, at ballonen er helt tom og sammenfoldet, inden kateteret føres ind i patientens blodkar igen. Ved genanlæggelse skal kateteret anvendes som beskrevet i afsnittet "Anlæggelse og inflation af ballonkateteret" heri.
 - Hvis der opstår modstand, når kateteret genanlægges, skal anlæggelsen afbrydes, og kateteret skal tages forsigtigt ud af patientens blodkar. Gør klar til brug af et nyt Metacross RX i overensstemmelse med procedurerne anført herover i dette afsnit i denne brugsanvisning.

[Komplikationer]

Produktsvigt:

- Ballonruptur
- Utilstrækkelig udvidelse/tømning af ballonen
- Beskadigelse af ballonen og/eller kateterskafet
- Vanskeligt at fjerne produktet

- Lækage af inflationsvæske

Komplikationer:

- Lokal eller systemisk infektion
- Lokal intern blødning eller hæmatom
- Intimaruptur
- Kardissektion
- Karperforation
- Karruptur
- Aneurisme
- Arytmi
- Akut karokklusion
- Venøs tromboembolisme
- Vasospasmer
- Dannelse af pseudoaneurismer
- Arteriovenøs fistel
- Blødning, der nødvendiggør transfusion
- Allergisk reaktion overfor kontrastmidlet/nyresvigt
- Smerte eller stærke smerter
- Død
- Emboli
- Endocarditis
- Feber
- Hypertension / Hypotension
- Inflammation
- Myokardieinfarkt
- Sepsis
- Shock
- Slagtilfælde
- Transitorisk iskæmisk attack

[Opbevaring og udløbsdato]

1. Opbevares køligt, tørt og mørkt. Må ikke udsættes for vand eller direkte sollys.
2. Udløbsdatoen er anført på æsken. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

[Emballage]

1 sæt/æske

[Navn og adresse på producent eller repræsentant]



Producent: KANEKA CORPORATION

Adresse: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
TLF.: (+81)-(0) 6-6226-5256
FAX: (+81)-(0) 6-6226-5143



Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresse: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
TLF.: (+32)-(0) 14-256-297
FAX: (+32)-(0) 14-256-298

Forhandler i EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresse: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, Belgium
TLF.: (+32)-(0) 16 381 211
FAX: (+32)-(0) 16 400 249

Alle mærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
TERUMO CORPORATION og deres respektive ejere.

Tabel 1. Metacross RX Skema over ballontolerance

Tryk (atm)	Ballondiameter (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							


* Nominelt tryk

** Nominelt sprængningstryk

[PRODUKTBESKRIVELSE]

Metacross RX er et perkutant transluminalt angioplastisk (PTA) ballongdilatasjonskateter for perifer indikasjon. Metacross RX er av typen hurtig utskifting (RX) og maksimal diameter på kompatibel guidewire er 0,89 mm (0.035"). Den distale delen av dette kateteret består av en ballong og skaft (koaksial) med dobbellumen. Det utvendige lumenet brukes for å fylle og tømme ballongen med kontrastvæske fortynnnet med saltløsning. Det indre lumenet (guidewirelumenet; fra den distale tuppen til guidewireporten) er for innsetting av en kompatibel guidewire for å forenkle fremføringen av kateteret gjennom den stenotiske lesjonen eller stenten som skal dilateres. Den proksimale delen er et skaft med enkel lumen og et enkelt luerportnav for tilkobling av en oppblåsingseenhet. Inni ballongen er det plassert to røntgentette markører, som indikerer ballongens arbeidslengde, for å veilede legen i riktig posisjonering av ballongen i mållesjonen under fluoroskopi. Metacross RX er tilgjengelig i forskjellige ballongstørrelser etter diameter og lengde ved anbefalte oppblåsingstrykk (nominelt trykk). Ved oppblåsing varierer ballongens diameter avhengig av oppblåsingstrykket. Ballong-samsvarsdiagrammet (compliance) for Metacross RX er i tabell 1 på slutten av denne bruksanvisningen. I den sterile pakken er enheten utstyrt med det beskyttende materialet, et ballongbeskyttelsesrør og en stilet, som skal fjernes før bruk. Ballongbeskyttelsesrøret plasseres over den sammenfoldede ballongen i en lav profil og stiletten føres inn i guidewire-lumenet for å forhindre at kateterskaftet kolliderer. Kateterets distale tupp er avsmalnet for å forenkle fremføringen av kateteret inn i den stenotiske lesjonen eller stenten. Skyllenalen leveres som et tilbehør til denne enheten for å skylle og fjerne guidewirelumenet med heparinisert saltløsning.

<NAV NÅ DE ENKELTE DELENE>

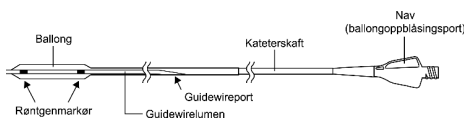

Steril og ikke-pyrogen i uskadet og uåpnet emballasje. Denne enheten er sterilisert med etylenoksidgass.

Anbefalt guidewirediameter,

Maksimal diameter: 0,035" (0,89 mm)

Anbefalt oppblåsingstrykk og maksimalt oppblåsingstrykk

Nominelt trykk:

- Ballongdiameter: mindre enn 6 mm :	10 atm
- Ballongdiameter: 6 mm og større :	8 atm

Antatt sprekketrykk:

- Ballongdiameter: mindre enn 5 mm:	20 atm
- Ballongdiameter: 5 mm:	18 atm
- Ballongdiameter: 6 mm, 7 mm, 8 mm :	14 atm
- Ballongdiameter: 9 mm og større :	12 atm

[INDIKASJONER]

Metacross RX PTA ballongdilatasjonskateter er beregnet for dilatering av stenoser i arteria iliaca, arteria femoralis, ilio-femoralis, arteria poplitea, infra-popliteal arterie og arteria renales, og for behandling av obstruktive lesjoner i medfødt eller syntetisk arteriovenøs dialysefistel. Denne enheten er også indikert for post-dilatasjon av stent i den perifere vaskulaturen.

Merk: Verifiseringstesten for stent post-dilatasjon av Metacross RX ble utført med hjelp av Complete® SE vaskulært stentsystem (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® vaskulært stentsystem (Cordis Corporation) og Epic™ vaskulært selvekspanderende stentsystem (Boston Scientific Corporation).

KONTRAINDIKASJONER

1. Pasienter som har utviklet anastomotisk stenose innen en måned etter konstruksjon av AV-shunt.
2. Pasienter som har lesjoner som kommuniserer med en pseudoaneurisme.
3. Pasienter som er gravide.
4. Pasienter som ikke tåler blodplatehemmende behandling eller antikoagulasjonsbehandling.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

[Advarsler]

1. Denne enheten er kun til engangsbruk. Må ikke brukes på nytt. Må ikke resteriliseres. Må ikke omproduseres. Omproduksjon kan redusere steriliteten, biokompatibiliteten og den fysiske helheten til enheten.
2. Bruk ikke produktet dersom enheten eller emballasjen er skadet.
3. Blås ikke opp ballongen over diameteren til arterien proksimalt eller distalt for stenoselesjonen.
4. Blås ikke opp ballongen over et trykk som tilsvarer antatt sprengtrykk.
5. Bruk ikke dette kateteret i det sentrale kretsløpssystemet.

[Forholdsregler relatert til prosedyrene]

1. Fjern enheten langsomt og forsiktig ut av transportrøret og ta av beskyttelsesdelene fra enheten. Uforsiktig håndtering kan skade ballongen og/eller enhetens kateterskaft, slik at ballongen ikke fylles og/eller tømmes.
2. Fyll ballongen med kontrastvæske fortynnnet med saltløsning i forhold 1:1 (heretter kalt "inflasjonsvæske"). Bruk ikke gassholdige medier, f.eks. luft, for å fylle ballongen. (Ballongen kan blåses opp ujevnt.)
3. Før bruk, fjern all luft i ballongen og ballongoppblåsingslumenet og erstatt den med inflasjonsvæske. (I tilfelle ufullstendig fjerning av luft, kan ballongens oppblåsing ikke observeres under fluoroskopi.)
4. I tilfelle alvorlige stenotiske lesjoner, som f.eks. forkalkede lesjoner, kan ikke blodkaret dilateres helt. I slike tilfeller må det ikke påføres et trykk som overskrider det nominelle sprengtrykket. (Ballongen kan sprekke og restene kan bli igjen i kroppen.)
5. Når det gjelder medisinsk utstyr som brukes sammen med dette kateteret, følg instruksjonene for bruken av slikt utstyr. (Se produsentens bruksanvisning når ballongkateteret brukes for post-dilatasjon av stent under prosedyrer med innsetting av perifer stent.)
6. Vær forsiktig og bruk fluoroskopi ved innsetting i stent, uttrekking fra stent eller dilatasjon av ballongen i stenten. (Hvis dette gjøres uten fluoroskopi, kan kateteret eller den vaskulære overflaten bli skadet.)
7. Forsøk ikke å føre Metacross RX PTA ballongdilatasjonskateter gjennom en innføringshylse som er mindre enn det som er angitt på etiketten. Se produktetiketten.

[Forholdsregler under bruk]

1. Bruk enheten umiddelbart etter at den sterile pakningen er åpnet.
2. Hele prosedyren må utføres aseptisk.
3. Dette kateteret skal bare brukes av leger som har erfaring med perkutant vaskulær behandling.
4. Velg et kateter med passende ballongstørrelse (ballongdiameter, ballonglengde) i henhold til følgende (prosedyre)kriterier.
 - 1) Diameteren på den oppblåste ballongen må ikke være større enn indre kardiemeter proksimalt og distalt for lesjonen.
 - 2) Lengden på den oppblåste ballongen må ikke være større enn lengden på lesjonen som skal behandles. (Valg av feil kateter kan føre til akutt vaskulær okklusjon.)
5. Bruk dette kateteret kun når akutt kirurgi kan utføres.
6. Legen som har ansvaret for prosedyren, må bestemme varighet og antall ballongoppblåsing basert på sin tidligere erfaring.
7. Heparinisert saltvann må infunderes for antikoagulasjon mens ballongkateteret settes inn i blodåren.

8. Blås aldri opp ballongen eller før guidewiren inn mens katetret er bøyd eller brukt.
 9. Manipuler katetret forsiktig i blodkaret for å verifisere plasseringen og bevegelsen av spissen under fluoroskopi eller monitorering med DSA (digital subtraksjonsangiografi).
 10. Blås alltid opp ballongen under observasjon av inflassjonsstatus med fluoroskopi. Blås ballongen forsiktig opp mens bevegelsen kontrolleres ved hjelp av de røntgentette markørene. Hvis noe unormalt observeres, som f.eks. litt motstand, ubevegelig kateter under manipulerings eller knekket distal spiss på guidewiren, må prosedyren avbrytes umiddelbart og dette katetret må fjernes langsamt sammen med guidewiren.
 11. Før ikke inn eller fjern dette katetret raskt. (Rask bruk kan skade katetret eller skade den vaskulære overflaten.)
 12. Ikke beveg katetret når ballongen er blåst opp. (Hvis katetret beveges mens ballongen er oppblåst, kan det føre til at ballongen sprekker eller at katetret brykker.)
 13. Ballongen må ikke fylles eller tømmes raskt i blodkaret. (Rask fylling eller tømming kan skade blodkaret eller føre til at ballongen sprekker og at restene blir igjen i kroppen.)
 14. Bruk ikke en injektor (automatisk injeksjonsstyr) for å blåse opp ballongen.
 15. Iverksett forebyggende tiltak for å forhindre at katetret blir skadet av en kirurgisk kniv eller saks.
 16. Hvis noe unormalt observeres, som f.eks. kraftig motstand under manipulerings av katetret, må prosedyren avbrytes umiddelbart. Årsaken må bekreftes og egnede tiltak iverksettes. (Hvis inngrepet fortsetter med for stor kraft, kan det føre til skade på katetret eller skade på karveggen.)
 17. Følg alltid med på pasientens tilstand og overvåk kroppstemperatur, puls og pust. Dersom noe unormalt oppdages, avbryt bruken av katetret umiddelbart og ta adekvate forholdsregler etter pasientens tilstand og legens vurdering.
 18. Etter bruk må dette katetret kasseres i henhold til sykehusets prosedyrer.
 19. Bruk ikke stoffer som inneholder organiske løsemidler eller oljeaktige kontrastmedier. Kontakt med disse stoffene kan føre til skade på katetret.
 20. Katetret må ikke vris eller roteres ved manipulerings av katetret.
 21. Når enheten settes inn i blodkaret eller enheten fjernes fra blodkaret, må det kontrolleres at ballongen er helt tømt. (Det tar lenger tid å tømme en enhet med større og lenger ballong.)
 22. Dersom det kjennes motstand når enheten trekkes ut etter prosedyren, anbefales det å trekke ut hele systemet sammen med introduseren/innføringshylsen.
 23. Bruk alltid katetret sammen med en guidewire ført inn i guidewirelumenet.
- a) Fest inflassjonsutstyret (ikke inkludert i dette settet) fylt med inflassjonsvæske på ballongporten.
 - b) Etter at det er lagt på negativt trykk i omtrent 10 sekunder på inflassjonsutstyret, rett kateterspissen nedover og slipp ut det negative trykket langsomt for å la væske fylle ballongen og ballonginflassjonslumenet og slippe ut luften.
 - c) Dersom det finnes luft i ballongen og ballonginflassjonslumenet, gjenta prosedyre b) til luften er sluppet ut fullstendig.
 - d) Løsne inflassjonsutstyret fra ballonginflassjonsporten og fjern luft fra sylindere til inflassjonsutstyret.
 - e) Fest inflassjonsutstyret til ballonginflassjonsporten igjen og oppretthold negativt trykk. Verifiser at det ikke lenger kommer luft tilbake inn i sprøyten.
- 3) Skyll guidewirelumenet med heparinisert saltløsning ved hjelp av skyllenen og fyll lumenet med heparinisert saltløsning.
 - 4) Legg hele Metacross RX PTA ballongdilatasjonskateter helt ned i saltløsning.
 3. Innføring og oppblåsing av ballongkatetret.
Før bruk må det kontrolleres at dette katetret er kompatibelt med guidekatetret (ikke inkludert i dette settet), innføringshylsen (ikke inkludert i dette settet) og guidewiren (ikke inkludert i dette settet) som angitt i følgende tabell.

Katalog-nummer	Ballong-diameter (mm)	Kompatibel hylse (Fr/mm)	Maksimal diameter for guidewiren (tomme/mm)
BD-L30020MR	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 tomme (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Når dette katetret brukes i innføringshylsen eller guidekatetret

- 1) Når dette katetret brukes i guidekatetret, skal hemostaseventilen løses samtidig som den holdes tett nok til å hindre blodlekkasje.
- 2) Før katetret gradvis inn, med ballongen helt tømt, i innføringshylsen eller guidekatetret over guidewiren og før det frem til lesjonens distale periferi. Før katetret langsomt frem under fluoroskopi til den røntgentette markøren i ballongen når målstedet.
- 3) Verifiser posisjonen til den røntgentette markøren i ballongen under fluoroskopi og fastslå dilatasjonsstedet.
- 4) Fest dilatasjonsenheten godt til ballonginflassjonsporten.
- 5) Fyll ballongen gradvis til ønsket diameter og verifiser samtidig oppblåsingstrykket og utvider den stenotiske lesjonen (for diameter på oppblåst ballong, se ballong-samsvarsdiagrammet i tabell 1 på slutten av denne bruksanvisningen).
4. Fjerning av kateter
 - 1) Etter påføring av negativt trykk for å tømme ballongen fullstendig, fjern katetret.
5. Gjeninnsetting av kateteret
 - 1) Hvis det er nødvendig å sette inn igjen det uthentede kateteret med tømt ballong, må det sikres at ballongen er helt tømt og foldet sammen før den føres inn i pasientens blodkar igjen. Ved gjeninnføring skal kateteret brukes i henhold til avsnittet "Innføring og oppblåsing av ballongkateteret".
 - 2) Dersom det oppleveres motstand under gjeninnføringen av kateteret, skal innføringen stoppes og kateteret skal forsiktig tas ut av pasientens blodkar. Vær forberedt på å bruke en ny Metacross RX i samsvar med prosedyrene i dette avsnittet av bruksanvisningen.

[Driftsinstruksjoner]

Materialer som typisk kreves ved PTA med Metacross RX PTA ballongdilatasjonskateter, inkluderer:

- Guidewire (r) med egnet diameter og lengde
- Egnede introduser/innføringshylse og dilatorsett
- Glass med kontrastmiddel
- Glass med steril saltløsning
- Oppblåsningsenhet med manometer
- Sprøyte med Luer-lås
- Treveis stoppekran

[Operasjonsmetode eller bruksanvisning]

1. Valg av kateter
Før bruk må den indre diameter av blodkaret proksimalt og distalt for den stenotiske lesjonen kontrolleres under fluoroskopi, og et kateter med passende ballongstørrelse velges. Dersom to størrelser passer til diameteren, velg den minste størrelsen.
2. Klargjøring
 - 1) Etter at katetret er tatt ut av pakningen med aseptisk teknikk, fjern beskyttelsesmateriellet.
 - 2) Erstatt luften i ballongen og ballongoppblåsningslumenet med inflassjonsvæske i henhold til følgende prosedyre.

[Komplikasjoner]

Feil på enheten:

- Ballongruptur
- Utilstrekkelig fylling/tømming av ballongen
- Skade på ballongen og/eller kateterskaffet
- Problemer med å fjerne enheten
- Lekkasje av inflassjonsvæske

Negative følger:

- Lokal infeksjon eller systemisk infeksjon

- Lokal indre blødning eller hematom
- Ruptur av intima
- Vaskulær disseksjon
- Vaskulær perforasjon
- Vaskulær ruptur
- Aneurisme
- Arytmi
- Akutt vaskulær okklusjon
- Venøs blodpropp
- Vasospasme
- Dannelse av pseudoaneurisme
- Arteriovenøs fistel
- Blødning som krever blodoverføring
- Allergisk reaksjon på kontrastmiddel/hyresvikt
- Verking eller trykkende smerte
- Død
- Emboli
- Endokarditt
- Feber
- Hypertensjon/hypotensjon
- Inflammasjon
- Myokardinfarkt
- Sepsis
- Sjokk
- Slag
- Transitorisk iskemisk angrep

[Lagring og utløpsdato]

1. Oppbevares på et kjølig, tørt og mørkt sted. Unngå eksponering for vann og direkte sollys.
2. Utløpsdatoen er angitt på boksen. Må ikke brukes etter utløpsdatoen.

[Forkpakning]

1 sett/boks

[Navn og adresse på produsent eller representant]



Produsent: KANEKA CORPORATION

Adresse: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN

Tlf.nr.: (+81)-(0) 6-6226-5256

Faksnr.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Autorisert representant i EU: KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresse: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Tlf.nr.: (+32)-(0) 14-256-297

Faksnr.: (+32)-(0) 14-256-298

Distributør i EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresse: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgia

Tlf.nr.: (+32)-(0) 16 381 211

Faksnr.: (+32)-(0) 16 400 249

Alle merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
TERUMO CORPORATION og deres respektive eiere.

Tabell 1. Metacross RX ballong-samsvarsdiagram

Trykk (atm)	Ballongdiameter (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							


* Nominelt trykk

**Antatt sprekktrykk

[TUOTTEEN KUVAUS]

Metacross RX on perkutaanisen transluminaalisen angioplastian (PTA) pallolaajennuskatetri perifeeriseen käyttöön. Metacross RX on nopean vaihdon (RX) katetri ja sen kanssa käytettävän ohjainvaijerin suurin mahdollinen läpimitta on 0,035 tuumaa (0,89 mm). Katetrin distaaliossa koostuu pallosta ja kaksoislumenvarsista (sama-akseliset). Ulompaa luumenia käytetään pallon täyttööseen suolaliuoksella laimennetulla varjoaineella sekä pallon tyhjennykseen. Sisemmän luumenin (ohjainvaijerin luumen, distaalikärjestä ohjainvaijerin porttiin) kautta asetetaan yhteensopiva ohjainvaijeri, joka avustaa katetrin viemistä stenootiseen leesioon tai laajennettavan stentin läpi. Katetrin proksimaaliosassa on yksi luumenvarsi, jossa on yksi luer-porttiliitin laajennus-/tyhjennyslaitteen liittämistä varten. Pallon sisälle on asetettu kaksi röntgenpositiivista merkintää, jotka ilmoittavat pallon työskentelypituuden ja joita lääkäri voi käyttää apunaan pallon asettamisessa kohdeleesioon läpivalaisun aikana. Metacross RX -katetreja on saatavilla useina eli pallokokoina läpimitan ja pituuden suhteen suositelluilla täyttöpaineilla (nimellispaine). Pallon täytön aikana pallon läpimitta vaihtelee täyttöpaineen mukaisesti. Metacross RX -katetrin pallon yhteensopivuustaulukko on esitetty tämän käyttöohjeen lopussa Taulukossa 1. Steriilissä pakkauksessa oleva laite on suojattu suojamateriaaleilla, pallon suojauputella ja mandriinilla, jotka on poistettava ennen käyttöä. Pallon suojauputki on asetettu pallon päälle taitettuna ohueksi ja mandriini on asetettu ohjainvaijerin luumeniin estämään katetrin varren romahtaminen. Katetrin distaalikärki on teipattu, mikä auttaa katetrin viemistä stenootiseen leesioon tai stenttiin.

Huuhdeltuneula toimitetaan laitteen lisävarusteena, jotta laite voidaan huuhdella ja ohjainvaijerin luumen voidaan täyttää heparinoidulla suolaliuoksella.
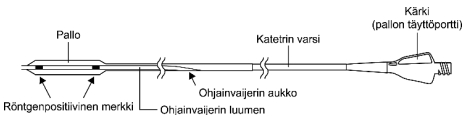
<OSIEN NIMET>

Toimitetaan steriilinä ja pyrogeenittomana ehjässä ja avaamattomassa kuplapussissa. Tämä laite on steriloitu eteenöksiidillä.

Suosittelut ohjainvaijerin halkaisija:

Enimmäishalkaisija: 0,035" (0,89 mm)

Suosittu täyttöpaine ja enimmäistäyttöpaine

Nimellispaine:

- Pallon halkaisija: alle 6 mm: 10 atm
- Pallon halkaisija: 6 mm tai yli: 8 atm

Nimellinen puhkeamispain:

- Pallon halkaisija: alle 5 mm: 20 atm
- Pallon halkaisija: 5 mm: 18 atm
- Pallon halkaisija: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Pallon halkaisija: 9 mm tai yli: 12 atm

[KÄYTTÖAIHEET]

Metacross RX PTA-pallolaajennuskatetri on tarkoitettu ahtauman laajentamiseen lonkkavaltimoissa, reisivaltimoissa, lonkka- ja reisivaltimoissa, polvitaivevaltimoissa, infrapopliteaalissa valtimoissa sekä munuaisvaltimoissa sekä synnynnäisten tai synteettisten valtimolaskimodiläyisfistien aiheuttamien obstruktiivisten leesioiden hoitamiseen. Tämä laite on lisäksi tarkoitettu stentin jälkilaajennukseen perifeerisessä verenkierrassa.

Huomautus: Stentin tarkistustesti Metacross RX -katetrilla suoritettua laajennuksen jälkeen tehtiin käyttämällä vaskulaarista Complete® SE -stenttijärjestelmää (Medtronic, Inc), vaskulaarista S.M.A.R.T.® CONTROL® -stenttijärjestelmää (Cordis Corporation) ja Itselaajenevaa vaskulaarista Epic™-stenttijärjestelmää (Boston Scientific Corporation).

[VASTA-AIHEET]

1. Potilaat, joille on kehittynyt anastomoottinen ahtauma kuukauden kuluessa AV-shuntin rakentamisesta.
2. Potilaat, joilla on pseudoaneurysman kanssa yhteydessä olevia leesioita.
3. Raskaana olevat potilaat.
4. Potilaat, jotka eivät kestä verihuitaleiden toimintaa estävää lääkettä tai antikoagulaatiohoitoa.

[VAROITUKSET JA VAROTOIMENPITEET]**[Varoitukset]**

1. Tämä laite on kertakäyttöinen. Ei uudelleenkäyttöä. Ei saa uudelleen steriloida. Ei saa uudelleen käsitellä. Uudelleenkäsitellyt saattaa vaarantaa laitteen steriilyyden, biolyhteensopivuuden ja fyysisen eheyden.
2. Tuotetta ei saa käyttää, jos tuote tai pakkaus on vahingoittunut.
3. Älä laajenna palloa suuremmaksi kuin mitä verisuonen proksimaalinen ja distaalinen halkaisija on ahtaautuneen leesioon kohdalla.
4. Älä laajenna palloa paineeseen, joka on nimellistä puhkeamispainetta suurempi.
5. Älä käytä tätä katetria sentraalisessa verisuonistossa.

[Toimenpiteeseen liittyvät varoittoimet]

1. Poista laite varovasti ja hitaasti kuljetusputkesta ja poista välineestä suojaosat. Varomaton käsittely voi vaurioittaa palloa ja/tai laitteen katetrin vartta, mikä estää pallon täyttymisen ja/tai tyhjenemisen.
2. Täytä pallo varjoaineella, joka on laimennettu keittosuolaliuoksella suhteessa 1:1 (tämä lähtien "täytöneste"). Täyttämiseen ei saa käyttää kaasumaisia aineita, kuten ilmaa. (Pallo voi täytyä epätasaisesti.)
3. Tyhjennä ennen käyttöä kaikki ilma pallost ja pallon täyttölumesta ja ruiskuta tilalle täytönestettä. (Mikäli ilma ei poistu täysin, pallon täyttötaso ei näy läpivalaisuissa.)
4. Vakavien ahtauttavien leesioiden, kuten kalkkeutuneiden leesioiden, yhteydessä, verisuonta ei voi laajentaa kokonaan. Älä käytä tällaisissa tapauksissa painetta, joka on nimellistä puhkeamispainetta suurempi. (Pallo voi repeytyä ja kehon sisään sisään jäää epäpuhtauksia.)
5. Jos haluat käyttää lääketieteellisiä laitteita tämän katetrin kanssa, noudata kyseisten laitteiden käyttöohjeita. (Kun pallokatetria käytetään stentin jälkilaajentamiseen perifeerisen stentin laitton yhteydessä, noudata valmistajan antamia käyttöohjeita.)
6. Asetettaessa katetria stentin läpi, vedettäessä sitä stentistä tai laajennettaessa palloa stentissä on toimittava varovasti ja käytettävä läpivalaisu. (Ilman läpivalaisu toimiminen voi vahingoittaa katetria tai verisuonta.)
7. Älä yritä työntää Metacross RX PTA-pallolaajennuskatetria etetissä ilmoitettua pienemmän sisäänvientiholkin läpi. Katso tuotetimerkin.

[Käytön aikaiset varoittoimet]

1. Käytä laitetta heti, kun steriili pakkaus on avattu.
2. Koko toimenpide on suoritettava aseptisesti.
3. Tätä katetria saavat käyttää vain lääkärit, jotka hallitsevat perkutaanisen verisuonihoidon.
4. Valitse katetri, jonka pallon koko on sopiva (pallon halkaisija ja pallon pituus) seuraavien (toimenpiteiden) kriteerien mukaan.
 - 1) Täytetyn pallon halkaisija ei saa olla suurempi kuin verisuonen sisähalkaisija leesioon proksimaali- ja distaalipuolella.
 - 2) Täytetty pallo ei saa olla pidempi kuin hoidettava leesio. (Vääräntäisen katetrin valitseminen voi aiheuttaa akuutin verisuonen tukkeutumisen.)
5. Käytä tätä katetria vain, kun hätäleikkauks mahdollisuus on saatavilla.
6. Toimenpiteestä vastuussa olevan lääkärin tulee määrittää pallon täyttökertojen kesto ja määrä kokemuksen perusteella.

- Heparinisoitua suolaliuosta on suositeltava käyttää hyötyymisenestolääkityksenä, kun tätä pallokatetria viedään sisään verisuoneen.
- Älä koskaan täytä palloa tai työnnä ohjainvaijeria eteenpäin, jos katetri on taipunut tai mutkalla.
- Käsittele katetria varovasti verisuonessa ja varmista sen kärjen sijainti ja liike läpivalaisulla tai digitaalisella subtraktioangiografialla (DSA).
- Täytä pallo aina seuraamalla samalla sen täyttymistä läpivalaisulla. Täytä pallo varovasti paikallistamalla se samalla röntgenpositiivisten merkkien avulla. Jos havaitset mitään poikkeavaa, kuten vähän vastusta, katetrin olevan liikkumaton käsittelyn aikana tai ohjainvaijerin distaalisen kärjen taipuvan, toimenpide on keskeytettävä välittömästi ja katetri on poistettava hitaasti yhdessä ohjainvaijerin kanssa.
- Älä vie katetria sisään tai poista sitä nopeasti. (Nopeasti toimiminen voi vahingoittaa katetria tai vahingoittaa verisuonen sisäkalvoa.)
- Älä liikuta katetria, kun pallo on täytetty. (Katetrin liikuttaminen, kun pallo on täytetty, voi aiheuttaa pallon puhkeamisen tai katetrin varren katkeamisen.)
- Älä täytä tai tyhjennä pallo nopeasti verisuonessa. (Nopea täyttö tai tyhjennys voi vahingoittaa verisuonta tai saada pallon puhkeamaan, jolloin kehon sisään voi jäädä epäpuhtauksia.)
- Älä käytä injektoria (automaattista injektointilaitetta) pallon täyttämiseen.
- Varo vahingoittamasta katetria leikkauksiveitsellä tai saksilla.
- Jos havaitset mitään poikkeavaa, kuten voimakasta vastusta, katetrin käsittelyn aikana, toimenpide on keskeytettävä välittömästi. Poikkeavuuden syy on varmistettava ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. (Äärimmäisellä voimalla jatkaminen voi vaurioittaa katetria tai verisuonen seinämiä.)
- Seuraa aina potilaan tilaa ja valvo kehon lämpötilaa, pulssia ja hengitystä. Jos huomaat jotain poikkeavaa, keskeytä katetrin käyttö välittömästi tai ryhdy asianmukaisiin toimiin potilaan tilan ja lääkärin harkinnan mukaisesti.
- Hävitä katetri käytön jälkeen lääketieteellisenä jätteenä sairaalan käyttöjätteen mukaisesti.
- Älä käytä orgaanisia liuottimia sisältäviä aineita tai öljyisiä varjoaineita. Kosketus näihin aineisiin voi aiheuttaa katetrin vaurioitumisen.
- Kun käsittelet katetria, älä taivuta tai kierrä sitä.
- Kun viet tätä laitetta sisään verisuoneen tai poista sitä verisuonesta, varmista, että pallo on täysin tyhjä. (Laitte, jossa on suurempi ja pidempi pallo, edellyttää pidempää tyhjennysaikaa.)
- Jos tunnet vastusta poistaessasi laitetta toimenpiteen jälkeen, on suositeltavaa vetää koko järjestelmä yhdessä sisäänviejän/ohjainholkin kanssa ulos.
- Käytä katetria aina niin, että ohjainvaijeri on työnnetty ohjainvaijerin luumeniin.

[Käyttöohjeet]

Metacross RX PTA-pallolaajennuskatetrin kanssa tehtävään PTA-han yleensä tarvittavat materiaalit:

- halkaisijaltaan ja pituudeltaan oikean kokoisia ohjainvaijereita
- asianmukainen sisäänviejä/ohjainholkki ja laajennin
- varjoainepullo
- keittosuolaliuospullo
- painemittarilla varustettu täyttölaitte
- Luer-lock-ruisku
- kolmitiehana

[Toimintamenetelmä tai käyttöohjeet]

- Katetrin valitseminen
Varmista ennen käyttöä verisuonen sisähalkaisija läpivalaisussa ahtauttavan leesioin proksimaaliselta ja distaliselta puolelta ja valitse katetri, jonka pallo on sopiva. Jos tarkistettuun halkaisijaan sopii kaksi kokoa, valitse pienempi.
- Valmistelu
 - Kun olet poistanut tämän katetrin aseptisesti pakkaussäiliöstä, irrota katetrin suojamateriaalit.

- Korvaa pallossa ja pallon täyttölumenissa oleva ilma täyttönesteellä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 - Kiinnitä täyttönesteellä täytetty laajennuslaite (ei sisälly tähän pakkaukseen) pallon täyttöporttiin.
 - Kun olet kohdistanut täyttölaitteeseen alipainetta noin 10 sekuntia, ohjaa katetrin varren kärki alaspäin ja vapauta alipaine hitaasti, jotta neste täyttää pallon ja pallon täyttölumenin ja jotta ilma poistuu.
 - Kun pallossa ja pallon täyttölumenissa on ilmaa, toista toimenpidettä b), kunnes ilma on tyhjentynyt kokonaan.
 - Irrota täyttölaitte pallon täyttöportista ja tyhjennä ilma täyttölaitteen säiliöstä.
 - Kiinnitä täyttölaitte uudelleen pallon täyttöporttiin ja ylläpidä alipainetta. Varmista, että ilma ei enää palaa ruiskuun.
- Huuhtele ohjainvaijerin lumen heparinisoitulla keittosuolaliuksella täyttölumenin heparinisoitulla keittosuolaliuksella.
- Upota koko Metacross RX PTA-pallolaajennuskatetri keittosuolaliukseen.
- Pallokatetrin sisäänvienti ja täyttö
Tarkista ennen tämän katetrin käyttämistä, että se on yhteensopiva ohjainvaijerin (ei sisälly tähän pakkaukseen), sisäänviejäholkin (ei sisälly tähän pakkaukseen) ja ohjainvaijerin (ei sisälly tähän pakkaukseen) kanssa seuraavan taulukon mukaisesti.

Luettelu numero	Pallon halkaisija (mm)	Yhteensopiva holkki (F/mm)	Ohjainvaijerin enimmäishalkaisija (tuumaa/mm)
BD-L30020MR ~ BD-L70200ER	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 F / 2,00mm	0,035 tuumaa (0,89 mm)
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 F / 2,33 mm	

Käytettäessä katetria työnnettyä sisäänviejäholkkiin tai ohjainkatetrin

- Kun käytät katetria ohjainkatetrissa, löysää hemostaasiventtiiliä ja pidä se samalla riittävän tiukalla verenvuodon estämistä varten.
- Työnnä katetri vähitellen pallon ollessa täysin tyhjä sisäänviejäholkkiin tai ohjainkatetriin, ohjainkatetrin läpi ja leesioin distaaliseseen reunaan. Vie katetria läpivalaisussa hitaasti eteenpäin niin, että sen röntgenpositiivinen merkki saavuttaa kohdealueen.
- Varmista läpivalaisussa röntgenpositiivisen merkin sijainti pallossa ja määritä laajennuskohta.
- Kiinnitä täyttölaitte tiukasti pallon täyttöporttiin.
- Täytä pallo vähitellen tavoitehalkaisijaan, varmista täyttöpaine ja laajenna ahtauttava leesio (tarkista täytetyn pallon läpimitat tämän käyttöohjeen lopussa esitetystä pallon yhteensopivuustaulukosta Taulukko 1).
- Katetrin poistaminen
 - Kun olet tyhjentänyt pallon kokonaan kohdistamalla siihen alipainetta, poista katetri.
- Katetrin vieminen sisään uudelleen
 - Jos poistetun katetrin asettaminen sisään uudelleen pallon ollessa tyhjennetty on tarpeen, varmista, että pallo on täysin tyhjentynyt ja taitunut ennen kuin asetat katetrit uudelleen potilaan verisuoneen. Vie katetri sisään uudelleen Pallokatetrin sisäänvienti ja täyttäminen -kohdan ohjeiden mukaisesti.
 - Jos tunnet vastusta viedessäsi katetria uudelleen sisään, lopeta uusi ja poista katetri varovasti potilaan verisuonesta. Valmistele uusi Metacross RX -katetri käyttöön tässä käyttöohjeessa yllä olevassa kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

[Komplikaatio]

Laitteen toimintahäiriöt:

- Pallon repeäminen
- Pallon riittämätön täyttö/tyhjennys
- Pallon ja/tai katetrin varren rikkoutuminen
- Vaikeudet laitteen poistamisessa
- Täyttönesteen vuoto

Haittatapahtumat:

- Paikalliset tai systeemiset infektiot
- Paikallinen sisäinen verenvuoto tai hematooma
- Verisuonikalvon repeämä
- Verisuonen dissektio
- Verisuonen perforaatio
- Verisuonen repeämä
- Aneurysma
- Rytmihäiriö
- Akuutti verisuonitukos
- Laskimon tromboembolia
- Verisuonikouristus
- Pseudoaneurysman muodostus
- Valtimo-laskimofisteli
- Verensiirtoa edellyttävä verenvuoto
- Varjoaineallergia / munuaisten vajaatoiminta
- Särky tai painekipu
- Kuolema
- Embolia
- Endokardiitti
- Kuume
- Hypertensio/hypotensio
- Tulehdus
- Sydänlihaseinfarkti
- Sepsis
- Sokki
- Aivohalvaus
- Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö

[Säilytys ja viimeinen käyttöpäivä]

1. Säilytä viileässä, kuivassa ja hämärässä paikassa.
Vältä altistamista vedelle ja suoralle auringonvalolle.
2. Viimeinen käyttöpäivä on mainittu pakkauksessa.
Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

[Pakkaus]

1 setti/laatikko

[Valmistajan tai edustajan nimi ja osoite]



Valmistaja: KANEKA CORPORATION

Osoite: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Puh: (+81)-(0) 6-6226-5256
Faksi: (+81)-(0) 6-6226-5143



Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Osoite: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Puh: (+32)-(0) 14-256-297
Faksi: (+32)-(0) 14-256-298

Jakelija EU:n alueella: TERUMO EUROPE N.V.

Osoite: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgium
Puh: (+32)-(0) 16 381 211
Faksi: (+32)-(0) 16 400 249

Kaikki mainitut yritysten nimet ja muut nimet ovat TERUMO CORPORATION ja kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Taulukko 1 Metacross RX -pallon yhteensopivuustaulukko

Paine (atm)	Pallon halkaisija (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.97"	6.98"	8.06"	9.00"	9.91"	12.03"			
10	3.02"	4.01"	5.04"	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31			
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36"	10.44"	12.64"			
14	3.16	4.15	5.26	6.40"	7.49"	8.66"	9.56	10.70	13.01			
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90						
18	3.30	4.30	5.48"									
20	3.38"	4.41"	5.61									
22	3.47	4.51	5.75									
24	3.57	4.64										

* Nimellispaine

** Nimellinen puhkeamispaine

[ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ]

Ο Metacross RX είναι ένας Καθετήρας Διαστολής Διαδερμικής Ενδοαυλικής Αγγειοπλαστικής (PTA) με Μπαλόνι για περιφερικές ενδείξεις. Ο Metacross RX είναι τύπου ταχείας εναλλαγής (RX) και η μέγιστη διάμετρος του συμβατού οδηγού σύρματος είναι 0,035 ίντσες (0,89 mm). Το άνω τμήμα αυτού του καθετήρα αποτελείται από ένα μπαλόνι και δύο στελέχη αυλών (ομοαξονικά). Ο εξωτερικός αυλός χρησιμοποιείται για διαστολή και συστολή του μπαλονιού με σκιαγραφικό μέσο αραιωμένο με φυσιολογικό ορό. Ο εσωτερικός αυλός (ο αυλός του οδηγού σύρματος, από το άνω άκρο έως τη θύρα του οδηγού σύρματος) προορίζεται για την εισαγωγή ενός συμβατού οδηγού σύρματος ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση του καθετήρα διαμέσου της στενωτικής βλάβης ή της προς διαστολή ενδοπρόθεσης. Το εγγύς τμήμα είναι ένα μονό στέλεχος αυλού με μία μονή πλήμνη θύρας luer για τη σύνδεση μίας συσκευής διαστολής/συστολής. Στο εσωτερικό του μπαλονιού, έχουν τοποθετηθεί δύο ακτινοσκοπικοί δείκτες, που υποδεικνύουν το μήκος εργασίας του μπαλονιού, για να καθοδηγούν τον ιατρό στη σωστή τοποθέτηση του μπαλονιού στη στοχευόμενη βλάβη υπό ακτινοσκόπηση. Ο Metacross RX διατίθεται σε διάφορα μεγέθη μπαλονιού ως προς τη διάμετρο και το μήκος του σε συνιστώμενες πιέσεις διαστολής (Ονομαστική πίεση). Με τη διαστολή, η διάμετρος του μπαλονιού ποικίλει σύμφωνα με την πίεση διαστολής. Ο πίνακας συμμόρφωσης μπαλονιού του Metacross RX διατίθεται στον Πίνακα 1 στο τέλος αυτών των Οδηγιών Χρήσης. Μέσα στη συσκευασία αποστείρωσης, η συσκευή εφοδιάζεται με τα προστατευτικά υλικά, ένα προστατευτικό σωλήνα μπαλονιού και ένα στυλεό, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν πριν από τη χρήση. Ο προστατευτικός σωλήνας μπαλονιού τοποθετείται πάνω από το μπαλόνι που είναι διπλωμένο με μικρό προφίλ και ο στυλεός εισάγεται στον αυλό του οδηγού σύρματος για να αποτρέψει την θραύση του στελέχους του καθετήρα. Το άνω άκρο του καθετήρα είναι κυνικό για να διευκολύνει την προώθηση του καθετήρα μέσα στη στενωτική βλάβη ή στην ενδοπρόθεση.

Η βελόνη εκτύλιξης παρέχεται ως παρελκόμενο αυτής της συσκευής για την εκτύλιξη και την πλήρωση του αυλού του οδηγού σύρματος με ηπαρινομένο φυσιολογικό ορό.

<ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ>

Αποστειρωμένο και μη πυρετογόνο σε άθικτη και κλειστή συσκευασία μπλίστερ. Η συσκευή αυτή έχει αποστειρωθεί με οξειδίο του αιθυλενίου.

Συνιστώμενη διάμετρος οδηγού σύρματος:

Μέγιστη διάμετρος: 0,035" (0,89 mm)

Συνιστώμενη πίεση διαστολής και μέγιστη πίεση διαστολής

Ονομαστική πίεση:

- Διάμετρος μπαλονιού: μικρότερη από 6 mm:	10 atm
- Διάμετρος μπαλονιού: 6 mm και μεγαλύτερη:	8 atm

Ονομαστική πίεση ρήξης:

- Διάμετρος μπαλονιού: μικρότερη από 5 mm:	20 atm
- Διάμετρος μπαλονιού: 5 mm:	18 atm
- Διάμετρος μπαλονιού: 6 mm, 7 mm, 8mm:	14 atm
- Διάμετρος μπαλονιού: 9 mm και μεγαλύτερη:	12 atm

[ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ]

Ο καθετήρας διαστολής PTA με μπαλόνι Metacross RX προορίζεται για τη διαστολή στένωσης στις λαγόνιες, μηριαίες, λαγονομηριαίες, ιγνυακές, ιγνυακές κάτωθεν του γονάτου και νεφρικές αρτηρίες καθώς και για τη θεραπεία αποφρακτικών βλαβών αυτογενών ή συνθετικών αρτηριοφλεβικών συριγγίων αιμοκάθαρσης. Αυτή η συσκευή ενδείκνυται επίσης για μετα-διαστολή ενδοπρόθεσης στα περιφερικά αγγεία.

Σημείωση: Η δοκιμή επάλθευσης του Metacross RX για την μετα-διαστολή ενδοπρόθεσης διενεργήθηκε με χρήση του συστήματος αγγειακής ενδοπρόθεσης Complete® SE Vascular Stent System (Medtronic, Inc), του συστήματος αγγειακής ενδοπρόθεσης S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System (Cordis Corporation) και του συστήματος αναπτυσσόμενης αγγειακής ενδοπρόθεσης Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System (Boston Scientific Corporation).

[ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ]

1. Ασθενείς που έχουν αναπτύξει αναστομωτική στένωση εντός ενός μηνός από την κατασκευή αρτηριοφλεβικής (ΑV) επικοινωνίας.
2. Ασθενείς με βλάβες που επικοινωνούν με ψευδοανεύρυσμα.
3. Ασθενείς σε εγκυμοσύνη
4. Ασθενείς που δεν επιδέχονται αντιαιμοπεταλιακή ή αντιπηκτική θεραπεία.

[ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ]**[Προειδοποιήσεις]**

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται για μία μόνο χρήση. Να μην επαναχρησιμοποιηθεί. Να μην επαναποστειρωθεί. Να μην επανεισπείραστεί. Η επανεισπείραξη ενδέχεται να διακυβεύσει τη αποτελεσματικότητα, τη βιοσυμβατότητα και την υλική ακεραιότητα της συσκευής.
2. Μην το χρησιμοποιείτε εάν το προϊόν ή η συσκευασία της μονάδας είναι καταστραμμένη.
3. Μην διαστέλλετε το μπαλόνι υπερβαίνοντας τη διάμετρο του αμοφορού αγγείου εγγύς και πέραν της στενωτικής βλάβης.
4. Μην διαστέλλετε το μπαλόνι σε πίεση που υπερβαίνει την ονομαστική πίεση ρήξης.
5. Μην χρησιμοποιείτε αντον τον καθετήρα στο κεντρικό κυκλοφορικό σύστημα.

[Προφυλάξεις που σχετίζονται με διαδικασίες]

1. Αφαιρέστε αργά και με προσοχή τη συσκευή από το σωλήνα-θήκη και απομακρύνετε τα προστατευτικά τμήματα από τη συσκευή. Η μεταχείριση χωρίς τη δέουσα προσοχή ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο μπαλόνι και/ή στο στέλεχος του καθετήρα της συσκευής, επηρεάζοντας τη διαστολή και/ή τη συστολή του μπαλονιού.
2. Διαστέλλετε το μπαλόνι με τη σκιαγραφική ουσία αραιωμένη σε φυσιολογικό ορό σε αναλογία 1:1 (εφεξής, "υγρό διαστολής"). Για τη διαστολή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αέριο μέσο, όπως αέρας. (Το μπαλόνι ενδέχεται να διασταλεί ανόμοια).
3. Πριν τη χρήση, αφαιρέστε όλο τον αέρα από το μπαλόνι και από τον αυλό διαστολής του μπαλονιού και αντικαταστήστε τον με το υγρό διαστολής. (Σε περίπτωση ατελούς αφαίρεσης του αέρα, δεν είναι εφικτή η παρακολούθηση της κατάστασης διαστολής του μπαλονιού υπό ακτινοσκόπηση.)
4. Σε περίπτωση σοβαρών στενωτικών βλαβών όπως οι ελαστικοποιημένες αλλοιώσεις το αμοφόρο αγγείο δεν μπορεί να διασταλεί πλήρως. Σε τέτοια περίπτωση μην εφαρμόσετε πίεση που υπερβαίνει την ονομαστική πίεση ρήξης. (Το μπαλόνι μπορεί να διαρραγεί και ενδέχεται να κατάρυται να παραμείνουν εντός του σώματος.)
5. Όσον αφορά τις ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτόν τον καθετήρα, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης αυτών των συσκευών. (Όταν ο καθετήρας με μπαλόνι χρησιμοποιείται για τη μετα-διαστολή ενδοπρόθεσης κατά τη διάρκεια διαδικασίας περιφερικής τοποθέτησης ενδοπρόθεσης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.)
6. Για την εισαγωγή του μπαλονιού σε μία ενδοπρόθεση, την αφαίρεση από από μία ενδοπρόθεση ή τη διαστολή του μπαλονιού μέσα σε μία ενδοπρόθεση, προχωρήστε με προσοχή υπό ακτινοσκόπηση. (Εάν προβείτε σε αυτές τις ενέργειες χωρίς ακτινοσκόπηση ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτόν τον καθετήρα ή τραυματισμός του αμοφορού αγγείου.)
7. Μην επιχειρήσετε να περάσετε τον καθετήρα διαστολής PTA με μπαλόνι Metacross RX μέσα από θηκάρη εισαγωγέα μικρότερου

μεγέθους από αυτό που υποδεικνύεται στην επικέτα. Ανατρέξτε στη σήμανση του προϊόντος.

[Προφυλάξεις κατά τη χρήση]

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αμέσως μετά το άνοιγμα της αποστειρωμένης συσκευασίας.
- Η διαδικασία στο σύνολό της πρέπει να διεξαχθεί υπό άσηπτες συνθήκες.
- Αυτός ο καθετήρας πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο από ιατρούς καταρτισμένους στη διαδερμική αγγειακή θεραπεία.
- Επιλέξτε τον καθετήρα με το κατάλληλο μέγεθος μπαλονιού (διάμετρος μπαλονιού, μήκος μπαλονιού) σύμφωνα με τα ακόλουθα (διαδικασίες) κριτήρια.
 - Η διάμετρος του διεσταλμένου μπαλονιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την εσωτερική διάμετρο του αγγείου εγγύς και πέραν της βλάβης.
 - Το μήκος του διεσταλμένου μπαλονιού δεν θα υπερβαίνει το μήκος της υπό θεραπεία βλάβης.
(Η επιλογή ακατάλληλου καθετήρα ενδέχεται να οδηγήσει σε οξεία αγγειακή απόφραξη.)
- Χρησιμοποιήστε αυτόν τον καθετήρα μόνο όταν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης επείγουσας χειρουργικής επέμβασης ανά πάσα στιγμή.
- Ο επικεφαλής ιατρός της διαδικασίας πρέπει να προσδιορίσει τη διάμετρο, πρέπει να εγχέεται ηπαρινισμένος φυσιολογικός ορός για αντιπηκτικό.
- Ποτέ μην διαστέλλετε το μπαλόνι ή προωθείτε το οδηγό σύρμα με τον καθετήρα κυρτωμένο ή στρεβλωμένο.
- Χειριστείτε τον καθετήρα με προσοχή μέσα στο αιμοφόρο αγγείο επαληθεύοντας τη θέση και την κίνηση του άκρου του υπό ακτινοσκόπηση ή παρακολούθηση DSA (Digital Subtraction Angiography - Ψηφιακή Αφαίρετική Αγγειογραφία).
- Διαστέλλετε πάντα το μπαλόνι ενώ παρακολουθείτε την κατάσταση διαστολής του υπό ακτινοσκόπηση. Διαστέλλετε το μπαλόνι προσεκτικά ενώ επαληθεύετε την κίνηση του με τους ακτινοσκοπικούς δείκτες. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ανωμαλία όπως λίγη αντίσταση, αμετακίνητο καθετήρα κατά το χειρισμό ή στρεβλωμένο το άνω άκρο του οδηγού σύρματος, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη διαδικασία και να αφαιρέσετε αυτόν τον καθετήρα αργά μαζί με το οδηγό σύρμα.
- Μην εισάγετε και μην αφαιρείτε γρήγορα αυτόν τον καθετήρα. (Ο ταχύς χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον καθετήρα ή να τραυματίσει τον έσω χιτώνα του αγγείου.)
- Μην μετακινείτε τον καθετήρα με το μπαλόνι διεσταλμένο. (Η μετακίνηση του καθετήρα με το μπαλόνι διεσταλμένο ενδέχεται να οδηγήσει σε ρήξη του μπαλονιού ή σε θραύση του στελέχους του καθετήρα.)
- Μην διαστέλλετε και μην συστέλλετε το μπαλόνι γρήγορα εντός του αιμοφόρου αγγείου. (Η ταχεία διαστολή ή συστολή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο αιμοφόρο αγγείο ή να προκαλέσει τη ρήξη του μπαλονιού, γεγονός που θα οδηγήσει στην παραμονή καταλοίπων μέσα στο σώμα.)
- Μην χρησιμοποιείτε εγχυτήρα (συσκευή αυτόματης έγχυσης) για τη διαστολή του μπαλονιού.
- Εάν πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στον καθετήρα από χειρουργικό σώματος, τους παλμούς και την αναπνοή. Όταν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ανωμαλία, σταματήστε αμέσως τη χρήση του καθετήρα ή λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την κατάσταση του ασθενούς κατά την ιατρική σας κρίση.

- Μετά τη χρήση απορρίψτε τον καθετήρα ως ιατρικό απόβλητο σύμφωνα με τις διαδικασίες του νοσοκομείου.
- Μην χρησιμοποιείτε παράγοντες που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή ελαίουχες σκιαγραφικές ουσίες. Η επαφή με αυτούς τους παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον καθετήρα.
- Κατά τη διάρκεια του χειρισμού του, μην συστρέψετε και μην περιστρέψετε τον καθετήρα.
- Κατά την εισαγωγή αυτής της συσκευής στο αιμοφόρο αγγείο ή κατά την απομάκρυνση της από το αιμοφόρο αγγείο, βεβαιωθείτε ότι το μπαλόνι βρίσκεται σε πλήρη συστολή. (Μία συσκευή με μεγαλύτερο και μακρύτερο μπαλόνι απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο συστολής.)
- Εάν αισθανθείτε αντίσταση κατά την αφαίρεση αυτής της συσκευής μετά τη διαδικασία, συνιστάται να αφαιρέσετε ολόκληρο το σύστημα μαζί με τον εισαγωγέα / οδηγό θηκάρι.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα τον καθετήρα μαζί με ένα οδηγό σύρμα που έχει εισαχθεί στον αυλό του οδηγού σύρματος.

[Οδηγίες Λειτουργίας]

Τα υλικά που τυπικά απαιτούνται για PTA με τον καθετήρα διαστολής PTA με μπαλόνι Metacross RX περιλαμβάνουν:

- Οδηγό(ά) σύρμα(τα) καταλλήλου διαμέτρου και μήκους
- Κατάλληλο εισαγωγέα/οδηγό θηκάρι και σετ διαστολέα
- Φαλίδιο σκιαγραφικού μέσου
- Φαλίδιο φυσιολογικού ορού
- Συσκευή διαστολής με μανόμετρο
- Σύριγγα Luer-lock
- Τρίοδη στρόφιγγα

[Μέθοδος λειτουργίας ή οδηγίες χρήσης]

- Επιλογή του καθετήρα
Πριν τη χρήση, επαληθεύστε υπό ακτινοσκόπηση την εσωτερική διάμετρο του αιμοφόρου αγγείου εγγύς και μακράν της στενωτικής βλάβης και επιλέξτε τον καθετήρα με το κατάλληλο μέγεθος μπαλονιού. Εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο μεγέθη για τη διάμετρο που επαληθεύτηκε, επιλέξτε το μικρότερο μέγεθος.
- Προετοιμασίες
 - Μετά την αφαίρεση του καθετήρα από την θήκη της συσκευασίας υπό συνθήκες ασήπιας, αφαιρέστε τα προστατευτικά υλικά από τον καθετήρα.
 - Αντικαταστήστε τον αέρα μέσα στο μπαλόνι και τον αυλό διαστολής του μπαλονιού με υγρό διαστολής σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες.
 - Συνδέστε τη συσκευή διαστολής (δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το kit) γεμάτη με το υγρό διαστολής πάνω στη θύρα διαστολής του μπαλονιού.
 - Μετά την εφαρμογή αρνητικής πίεσης για περίπου 10 δευτερόλεπτα στη συσκευή διαστολής, κατευθύνετε το άκρο του στελέχους του καθετήρα προς τα κάτω και απελευθερώστε αργά την αρνητική πίεση επιτρέποντας στο υγρό να γεμίσει το μπαλόνι και τον αυλό διαστολής του μπαλονιού και να εκδιώξει τον αέρα.
 - Εάν διαπιστώσετε την ύπαρξη αέρα μέσα στο μπαλόνι και τον αυλό διαστολής του μπαλονιού, επαναλάβετε τη διαδικασία β) μέχρι να εκδιωχθεί πλήρως ο αέρας.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή διαστολής από τη θύρα διαστολής του μπαλονιού και αφαιρέστε τον αέρα από τον κύλινδρο της συσκευής διαστολής.
 - Επανάσυνδέστε τη συσκευή διαστολής στη θύρα διαστολής του μπαλονιού και διατηρήστε την αρνητική πίεση. Επαληθεύστε ότι δεν επιστρέφει πλέον αέρας μέσα στη σύριγγα.
 - Εκπλύνετε τον αυλό του οδηγού σύρματος με ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό χρησιμοποιώντας τη βελόνη έκπλυσης και γεμίστε τον αυλό με τον ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό.
 - Βυθίστε ολόκληρο τον καθετήρα διαστολής PTA με μπαλόνι Metacross RX μέσα σε φυσιολογικό ορό.
- Εισαγωγή και διαστολή του καθετήρα με μπαλόνι
Πριν τη χρήση, ελέγξτε εάν αυτός ο καθετήρας είναι συμβατός με τον οδηγό καθετήρα (δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το kit), το θηκάρι εισαγωγέα (δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το kit) και το οδηγό σύρμα (δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το kit) με βάση τον παρακάτω πίνακα.

Αριθμός καταλόγου	Διάμετρος μπαλονιού (χλστ.)	Συμβατό θηκάρι (Fr/χλστ.)	Μέγιστη διάμετρος για το οδηγό σύρμα (ίντσες/χλστ.)
BD-L30020MR ~	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 inch (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Όταν χρησιμοποιείτε τον καθετήρα εισηγμένο στο θηκάρι εισαγωγέα ή τον οδηγό καθετήρα

- 1) Όταν χρησιμοποιείτε τον καθετήρα μέσα στον οδηγό καθετήρα, χαλαρώστε την αιμοστατική βαλβίδα ενώ την κρατάτε αρκετά σφικτή ώστε να αποφευχθεί η διαρροή αίματος.
- 2) Εισάγετε σταδιακά τον καθετήρα, με το μπαλόνι σε πλήρη συστολή, στο θηκάρι εισαγωγέα ή τον οδηγό καθετήρα πάνω από το οδηγό σύρμα και προωθήστε προς την άνω περιφέρεια της βλάβης. Υπό ακτινοσκόπηση, προωθήστε τον καθετήρα αργά μέχρι ο ακτινοσκιερός του δείκτη μέσα στο μπαλόνι να φτάσει στο σημείο-στόχο.
- 3) Υπό ακτινοσκόπηση, επαληθεύστε τη θέση του ακτινοσκιερού δείκτη μέσα στο μπαλόνι και καθορίστε το σημείο διαστολής.
- 4) Συνδέστε με ασφάλεια τη συσκευή διαστολής στη θύρα διαστολής του μπαλονιού.
- 5) Διαστείλατε το μπαλόνι σταδιακά στη διάμετρο-στόχο επαληθεύοντας την πίεση διαστολής και διαστείλατε τη στενωτική βλάβη (για τις διαμέτρους του διασταλμένου μπαλονιού συμβουλευθείτε τον πίνακα συμμόρφωσης μπαλονιού που παρέχεται στον Πίνακα 1 στο τέλος αυτών των Οδηγιών Χρήσης).
4. Απομάκρυνση του καθετήρα
 - 1) Αφού εφαρμόσετε αρνητική πίεση για την πλήρη συστολή του μπαλονιού, απομακρύνετε τον καθετήρα.
5. Επανεισαγωγή του καθετήρα
 - 1) Εάν απαιτείται επανεισαγωγή του αφαιρεμένου καθετήρα με το μπαλόνι σε συστολή, βεβαιωθείτε ότι το μπαλόνι έχει συσταλεί πλήρως και έχει διπλωθεί πριν το επανεισάγετε στο αιμοφόρο αγγείο του ασθενούς. Κατά την επανεισαγωγή χρησιμοποιήστε τον καθετήρα σύμφωνα με την ενότητα "Εισαγωγή και διαστολή του καθετήρα με μπαλόνι".
 - 2) Εάν συναντήσετε τυχόν αντίσταση ενώ επανεισάγετε τον καθετήρα, σταματήστε την προώθησή του και προσεκτικά αφαιρέστε τον από το αιμοφόρο αγγείο του ασθενούς. Προετοιμαστείτε για τη χρήση ενός νέου Metacross RX σύμφωνα με τις διαδικασίες που παρέχονται παραπάνω σε αυτή την ενότητα αυτών των Οδηγιών Χρήσης.

[Επιπλοκές]

Αστοχίες Συσκευής:

- Ρήξη μπαλονιού
- Ανεπαρκής συστολή / διαστολή του μπαλονιού
- Θραύση του μπαλονιού και / ή του στελέχους καθετήρα
- Δυσκολία στην απομάκρυνση της συσκευής
- Διαρροή υγρού διαστολής

Ανεπιθύμητα Συμβάντα:

- Τοπικές ή συστηματικές λοιμώξεις
- Τοπική εσωτερική αιμορραγία ή αιμάτωμα
- Ρήξη του έσω χιτώνα
- Αγγειακός διαχωρισμός
- Αγγειακή διάτρηση
- Αγγειακή ρήξη
- Ανευρύσμα
- Αρρυθμία
- Οξεία αγγειακή απόφραξη
- Φλεβικός θρομβοεμβολισμός
- Αγγειοσπασμός
- Σχηματισμός ψευδοανευρύσματος
- Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο
- Αιμορραγία που απαιτεί μετάγγιση

- Αλλεργική αντίδραση στα σκιαγραφικά μέσα / νεφρική ανεπάρκεια
- Άλγος ή πιεστικός πόνος
- Θάνατος
- Εμβολισμός
- Ενδοκαρδίτιδα
- Πυρετός
- Υπέρταση / Υπόταση
- Φλεγμονή
- Έμφραγμα του μυοκαρδίου
- Σήψη
- Καταπληξία
- Αποπληξία
- Παροδική Ισχυμική Προσβολή

[Αποθήκευση και ημερομηνία λήξης]

1. Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό, σκοτεινό μέρος. Αποφύγετε την έκθεση σε νερό, άμεσο ηλιακό φως.
2. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο κουτί. Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

[Συσκευασία]

1 σετ/κουτί

[Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου]



Κατασκευαστής: KANEKA CORPORATION

Διεύθυνση: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city, OSAKA, 530-8288 JAPAN

Αρ. τηλ.: (+81)-(0) 6-6226-5256

Αρ. fax: (+81)-(0) 6-6226-5143



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Διεύθυνση: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Αρ. τηλ.: (+32)-(0) 14-256-297

Αρ. fax: (+32)-(0) 14-256-298

Διανομέας στην ΕΕ: TERUMO EUROPE N.V.

Διεύθυνση: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgium

Αρ. τηλ.: (+32)-(0) 16 381 211

Αρ. fax: (+32)-(0) 16 400 249

Όλες οι εμπορικές ονομασίες αποτελούν εμπορικά σήματα της TERUMO CORPORATION και των αντιστοίχων ιδιοκτητών τους

Πίνακας 1. Πίνακας Συμμόρφωσης Μπαλονιού του Metacross RX

Πίεση (atm)	Διάμετρος Μπαλονιού (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Ονομαστική πίεση

** Ονομαστική Πίεση Ρήξης

[ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ]

Metacross RX – это баллонный дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) периферических сосудов. Metacross RX относится к типу катетеров быстрой замены (RX), максимальный диаметр совместимого проводника составляет 0,035 дюймов (0,89 мм). Дистальный участок данного катетера состоит из баллона и двухпросветных shaftов (коаксиальных). Внешний просвет предназначен для раздувания и сдувания баллона с использованием контрастного вещества, растворенного в физиологическом растворе. Внутренний просвет (просвет проводника; от дистального кончика до порта проводника) предназначен для введения совместимого проводника, чтобы облегчить продвижение катетера через участок стеноза или расширяемый стент. Проксимальный участок представляет собой shaft с одним просветом и одним коннектором люэра для подключения устройства раздувания/сдувания. Внутри баллона расположены две рентгеноконтрастные метки, которые показывают рабочую длину баллона и помогают врачу правильно расположить баллон в очаге поражения под контролем рентгеноскопии. Катетеры Metacross RX имеют разные размеры баллона в зависимости от диаметра и длины при рекомендованном давлении раздувания (Номинальное давление). После раздувания диаметр баллона варьируется в соответствии с давлением раздувания. Шкала растяжимости баллонов Metacross RX представлена в Таблице 1 в конце данной Инструкции по применению. В стерильной упаковке устройство защищено специальными приспособлениями – защитной трубкой для баллона и стилетом, которые следует удалить перед применением. Защитная трубка баллона размещается поверх максимально свернутого баллона, а стилет вставлен в просвет проводника с целью предотвращения поломки shaftа катетера. Дистальный кончик катетера суживается к концу, чтобы облегчить продвижение катетера в участок стеноза или в стенте. Промывочная игла прилагается в качестве дополнительной принадлежности к данному устройству для промывки и заполнения просвета проводника гепаринизированным физиологическим раствором.

<НАИМЕНОВАНИЕ КАЖДОЙ ЧАСТИ>



Стерильно и апиrogenно в неповрежденной и нераскрытой blisterной упаковке. Данное изделие стерилизовано оксидом этилена.

Рекомендуемый диаметр проводника:

Максимальный диаметр: 0,035" (0,89 мм)

Рекомендуемое давление раздувания и максимальное давление раздувания

Номинальное давление:

- Диаметр баллона: менее 6 мм:	10 атм
- Диаметр баллона: 6 мм и более:	8 атм

Расчетное давление разрыва:

- Диаметр баллона: менее 5 мм:	20 атм
- Диаметр баллона: 5 мм:	18 атм
- Диаметр баллона: 6 мм, 7 мм, 8 мм:	14 атм
- Диаметр баллона: 9 мм и более:	12 атм

[ПОКАЗАНИЯ]

Периферический баллонный катетер для ЧТА Metacross RX предназначен для расширения стенозированных участков в подвздошной, бедренной, подвздошно-бедренной, подколенной, нижних подколенных и ренальной артериях, а также для лечения обструктивных участков стеноза в сформированной «естественной» или искусственной артериовенозной фистуле для диализа. Данное устройство также предназначено для расширения сосуда после установки стента в периферическом сосудистом русле.

Примечание. Проверочные испытания стента после раздувания катетера Metacross RX проводились с использованием Системы стентирования сосудов Complete® SE (Medtronic, Inc), Системы стентирования сосудов S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) и Самораскрывающейся системы стентирования сосудов Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ]

1. Пациенты с развившимся анастомозным стенозом в течение одного месяца после операции артериовенозного шунтирования.
2. Пациенты с патологическими изменениями, связанными с псевдоаневризмой.
3. Беременные пациентки.
4. Пациенты с непереносимостью антитромбоцитарной или антикоагулянтной терапии.

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]

[Предупреждения]

1. Данное изделие предназначено для однократового использования. Не использовать повторно. Не стерилизовать. Не подвергать повторной обработке. Повторная обработка может нарушить стерильность, биологическую совместимость и функциональную целостность изделия.
2. Не использовать, если изделие или его упаковка были повреждены.
3. Не раздувайте баллон больше диаметра здорового кровеносного сосуда проксимальнее и дистальнее стеноза.
4. Не накачивайте баллон до давления, превышающего расчетное давление разрыва.
5. Не используйте этот катетер для операций на коронарных сосудах.

[Меры предосторожности во время процедуры]

1. Медленно и осторожно извлеките устройство из держателя и удалите защитные части изделия. Неосторожное обращение может повредить баллон и/или shaft катетера, препятствуя раздуванию и/или сдуванию баллона.
2. Раздуйте баллон при помощи контрастного вещества, разведенного в физиологическом растворе в соотношении 1:1 (далее по тексту «жидкость раздувания»). Для раздувания не следует использовать газообразные вещества, такие как воздух. (Баллон в этом случае может раздуться неравномерно.)
3. Перед использованием удалите весь воздух из баллона и просвета для раздувания баллона и заполните его жидкостью раздувания. (В случае неполного удаления воздуха раздувание баллона невозможно будет контролировать во время рентгеноскопии.)
4. При наличии серьезных участков стеноза, таких как кальцифицированные очаги, кровеносный сосуд невозможно будет раздуть полностью. В этом случае запрещается применять давление, превышающее расчетное давление разрыва. (Баллон может разорваться и в теле пациента могут остаться его части.)
5. При использовании совместно с катетером других устройств, соблюдайте инструкции по использованию данных устройств. (При использовании баллонного катетера для расширения

стента при проведении процедуры установки периферического стента смотрите инструкцию по применению изготовителя стента.)

6. Для введения в стент, извлечения из стента или раздувания баллона внутри стента действуйте с осторожностью под контролем рентгеноскопии. (Проведение процедуры без рентгеноскопического контроля может привести к повреждению катетера или травме внутренней оболочки сосуда.)
7. Не пытайтесь провести периферический баллонный катетер для ЧТА Metacross RX через интродьюсер меньшего размера, чем указано на маркировке. См. маркировку продукта.

[Меры предосторожности во время использования]

1. Используйте устройство сразу же после вскрытия упаковки.
2. Вся процедура должна проводиться с соблюдением правил асептики.
3. Данный катетер должен использоваться только врачами, обладающими навыками чрескожной сосудистой хирургии.
4. Выберите катетер с соответствующим размером баллона (диаметр баллона, длина баллона) в соответствии со следующими критериями.
 - 1) Диаметр баллона в раздутом состоянии не должен превышать внутренний диаметр сосуда проксимальнее и дистальнее пораженного места.
 - 2) Длина баллона в раздутом состоянии не должна превышать длину целевого участка, на котором будет проводиться процедура. (Неверный выбор катетера может привести к острой сосудистой окклюзии.)
5. Используйте данный катетер только в том случае, если неотложная операция может быть выполнена в любое время.
6. Врач, отвечающий за проведение процедуры, должен определить длительность и число раздуваний баллона в соответствии с имеющимся у него опытом.
7. Во время нахождения баллона в кровеносном сосуде необходимо вливать гепаринизированный физиологический раствор для антикоагуляции.
8. Никогда не раздувайте баллон и не продвигайте проводник по перегнутому или перекрученному катетеру.
9. Выполняйте все манипуляции с катетером с осторожностью, проверяя положение и перемещение кончика катетера под рентгеновским контролем или с использованием цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА).
10. Всегда раздувайте баллон под контролем ренгена. Осторожно раздувайте баллон, проверяя его движение при помощи рентгеноконтрастных меток. В случае возникновения каких-либо отклонений, например, небольшого сопротивления, неподвижности катетера во время манипуляций или перекручивания дистального кончика проводника, следует незамедлительно прервать процедуру и медленно извлечь катетер вместе с проводником.
11. Нельзя быстро вводить или извлекать этот катетер. (Быстрые действия могут привести к повреждению катетера или травме внутренней оболочки сосуда.)
12. Не перемещайте катетер с раздутым баллоном. (Перемещение катетера с раздутым баллоном может привести к разрыву баллона или поломке шфта катетера).
13. Нельзя быстро раздувать или сдувать баллон в кровеносном сосуде. (Быстрое раздувание или сдувание может привести к повреждению сосуда или разрыву баллона, остатки которого могут остаться внутри тела.)
14. Не используйте инъектор (устройство автоматической инъекции) для раздувания баллона.
15. Необходимо принять меры предосторожности, чтобы предотвратить повреждение катетера скальпелем или ножницами.
16. Если при манипуляциях с катетером возникает какая-либо аномальная ситуация, такая как, например, сильное сопротивление, процедуру необходимо немедленно прекратить. Необходимо установить причину данной ситуации и предпринять соответствующие меры. (Продолжение на следующей странице)

с применением чрезмерной силы может привести к повреждению катетера или травмированию стенки сосуда.)

17. Всегда обращайтесь внимание на состояние пациента и отслеживайте температуру тела, пульс и дыхание. В случае каких-либо отклонений немедленно прекратите использование катетера или примите соответствующие меры, адекватные, по мнению врача, состоянию пациента.
18. Всегда утилизируйте катетер как медицинские отходы в соответствии с процедурами медицинского учреждения.
19. Не используйте вещества, содержащие органические растворители и контрастные вещества на масляной основе. При контакте с данными веществами может произойти повреждение катетера.
20. При манипуляциях с катетером не скручивайте его и не вращайте.
21. При вводе данного изделия в кровеносный сосуд или извлечение его из сосуда убедитесь, что баллон полностью сдут. (Изделие с более крупным и длинным баллоном потребует больше времени для сдувания.)
22. Если после проведения операции при извлечении устройства чувствуется сопротивление, рекомендуется извлечь всю систему вместе с интродьюсером / проводником.
23. Всегда используйте катетер по проводнику, установленному в просвете для проводника.

[Инструкция по эксплуатации]

Стандартные материалы, необходимые для ЧТА с использованием периферического баллонного катетера Metacross RX:

- Проводник (-и) соответствующего диаметра и длины
- Соответствующий комплект интродьюсер / проводник и дилататор
- Флакон контрастного вещества
- Флакон стерильного физиологического раствора
- Индефлятор с манометром
- Шплиц с люверсовским наконечником
- Трехходовой кран

[Методика выполнения или инструкция по применению]

1. Выбор катетера
Перед использованием проверьте под рентгеновским контролем внутренний диаметр кровеносного сосуда проксимально и дистально стенозному повреждению и выберите катетер с соответствующим размером баллона. Если для полученного диаметра могут быть применены два размера, выберите меньший размер.
2. Подготовка
 - 1) После асептического извлечения этого катетера из упаковочного контейнера удалите защитные материалы.
 - 2) Удалите воздух в баллоне и просвет раздувания баллона с помощью жидкости раздувания в соответствии со следующими процедурами.
 - a) Подсоедините устройство раздувания (не входит в данный комплект), заполненное жидкостью раздувания к порту раздувания баллона.
 - b) После создания отрицательного давления в течение 10 секунд на устройстве раздувания, направьте кончик стержня катетера вниз и медленно сбросьте негативное давление для того, чтобы жидкость заполнила баллон и просвет раздувания баллона и вытолкнула весь воздух.
 - c) При обнаружении воздуха в баллоне и хабе после раздувания баллона жидкостью раздувания, повторите процедуру b) до полного удаления воздуха.
 - d) Отсоедините устройство раздувания от порта раздувания баллона и удалите воздух из цилиндра устройства раздувания.
 - e) Снова подсоедините устройство раздувания к порту раздувания баллона и поддерживайте отрицательное давление. Убедитесь, что воздух больше не возвращается в шприц.
 - 3) Промойте просвет проводника гепаринизированным физиологическим раствором с использованием промывочной

иглы и заполните просвет гепаринизированным физиологическим раствором.

- 4) Погрузите весь периферический баллонный катетер ЧТА Metacross RX в физиологический раствор.
3. Введение и раздувание баллонного катетера
Перед использованием катетера проверьте, совместим ли данный катетер с направляющим катетером (не входит в данный набор), интродьюсером (не входит в данный набор) и проводником (не входит в данный набор) с использованием следующей таблицы.

Каталожный номер	Диаметр баллона (мм)	Совместимый шaft (Fr/мм)	Максимальный диаметр проводника (дюймы/мм)
BD-L30020MR ~ BD-L70200ER	3 мм, 4мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10мм, 12 мм	6 Fr / 2,00 мм 7 Fr / 2,33 мм	0,035 дюйма (0,89 мм)

Когда данный катетер, введен в интродьюсер или направляющий катетер

- 1) При использовании данного катетера в направляющем катетере ослабьте гемостатический клапан, сохраняя его достаточно плотно закрытым, чтобы предотвратить протекание крови.
- 2) Постепенно вводите катетер с полностью сдутым баллоном в интродьюсер или направляющий катетер по проводнику и продвигайте его дистальнее к периферии участка поражения. Под рентгеновским контролем медленно продвигайте катетер до тех пор, пока рентгеноконтрастная метка баллона не достигнет целевого участка.
- 3) С помощью рентгена проверьте положение рентгеноконтрастной метки в баллоне и определите участок для расширения.
- 4) Жестко закрепите устройство раздувания / сдувания баллона на порте раздувания баллона доставляющего катетера.
- 5) Постепенно раздуйте баллон до необходимого диаметра, контролируя давление раздувания и расширьте участок стеноза (информацию о диаметрах раздувания баллонов см в шкале растяжимости баллонов, приведенной в Таблице 1 в конце данной Инструкции по применению).
4. Извлечение катетера
- 1) После полного сдувания баллона извлеките катетер.
5. Повторный ввод катетера
- 1) Если потребуется повторно ввести извлеченный катетер со сдутым баллоном, убедитесь в том, что баллон полностью сдут и сложен перед повторным вводом его в кровеносный сосуд пациента. При повторном введении используйте катетер в соответствии с разделом «Ввод и раздувание баллонного катетера» данного документа.
- 2) Если при повторном вводе катетера ощущается сопротивление, прекратите продвижение катетера и осторожно извлеките его из кровеносного сосуда пациента. Подготовьте к использованию новый катетер Metacross RX в соответствии с приведенными ранее в данном разделе процедурами данной Инструкции по применению.

[Осложнения]

Неисправности устройства:

- Разрыв баллона
- Недостаточное раздувание / сдувание баллона
- Поломка баллона и / или шaftа катетера
- Сложности при извлечении устройства
- Утечка жидкости раздувания

Нежелательные явления:

- Локальная или системная инфекция
- Локальное внутреннее кровотечение или гематома
- Разрыв внутренней оболочки сосуда
- Диссекция сосуда
- Перфорация сосуда
- Разрыв сосуда
- Аневризма
- Аритмия
- Острая сосудистая окклюзия
- Венозная тромбоземболия
- Сосудистый спазм
- Образование псевдоаневризмы
- Артериовенозная фистула
- Кровотечение, требующее переливания крови
- Аллергическая реакция на контрастное вещество
- Болезненные ощущения или давящая боль
- Летальный исход,
- Эмболизм
- Эндокардит
- Лихорадка
- Гипертензия / Гипотензия
- Воспаление
- Инфаркт миокарда
- Сепсис
- Шок
- Инсульт
- Транзиторная ишемическая атака

[Условия и срок хранения]

1. Храните в сухом, прохладном и темном месте. Избегайте попадания воды и прямых солнечных лучей.
2. Дата окончания срока годности указана на коробке. Не использовать после истечения срока годности.

[Упаковка]

1 комплект/коробка

[Название и адрес изготовителя или представителя]



Изготовитель: KANEKA CORPORATION

Адрес: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city, OSAKA, 530-8288 JAPAN

№ тел.: (+81)-(0) 6-6226-5256

№ факса: (+81)-(0) 6-6226-5143



Авторизованный представитель в Европейском сообществе:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Адрес: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

№ тел.: (+32)-(0) 14-256-297

№ факса: (+32)-(0) 14-256-298

Дистрибьютор на территории EC: TERUMO EUROPE N.V.

Адрес: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Бельгия

№ тел.: (+32)-(0) 16 381 211

№ факса: (+32)-(0) 16 400 249

Все фирменные наименования являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками TERUMO CORPORATION и соответствующих владельцев.

Таблица 1. Шкала растяжимости баллонов Metacross RX

Давление (атм)	Диаметр баллона (мм)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Номинальное давление

** Расчетное давление разрыва


[OPIS PRODUKTU]

Metacross RX jest balonowym cewnikiem dylatacyjnym do przezskórnej angioplastyki (Percutaneous Transluminal Angioplasty, PTA) przeznaczonym do naczyń obwodowych. Metacross RX to cewnik typu Rapid Exchange (RX), a maksymalna średnica przewodnika wynosi 0,035 cala (0,89 mm).

Część dystalna cewnika składa się z balonu i korpusu (trzonu) o podwójnym świetle (współosiowo). Światło zewnętrzne jest stosowane do napełniania i opróżniania balonu środkiem kontrastowym rozpuszczonym w roztworze soli fizjologicznej. Wewnętrzne światło (światło przewodnika; od końcówki dystalnej do portu przewodnika) jest używane do umieszczania zgodnego przewodnika w celu ułatwienia wprowadzania cewnika przez zmianę stenotyczną lub stent, które mają zostać poszerzone. Część proksymalna to trzon z pojedynczym światłem z jednym węzłem portu typu luer do podłączania urządzenia do napełniania/opróżniania. We wnętrzu balonu umieszczone są dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieniowania rentgenowskiego, które wskazują długość roboczą balonu, i służą lekarzowi do prawidłowego umieszczenia balonu w docelowej zmianie stenotycznej pod kontrolą badania fluoroskopowego. Cewnik Metacross RX jest dostępny z różnymi rozmiarami balonu (średnica i długość) przy zalecanych ciśnieniach napełniania (ciśnienie nominalne). Po napełnieniu średnica balonu zmienia się w zależności od ciśnienia napełniania. Dane zgodności cewnika Metacross RX zamieszczono w Tabeli 1 na końcu niniejszej instrukcji stosowania. W ramach sterylnej paczki urządzenie jest wyposażone w materiały ochronne, pojemnik ochronny balonu i mandryn, które należy usunąć przed użyciem. Pojemnik ochronny balonu jest umieszczany na balonie złożonym do niewielkich rozmiarów, a mandryn jest wsuwany do światła przewodnika, by zapobiec zapadnięciu trzonu cewnika. Końcówka dystalna cewnika jest zwężona, co ułatwia wsuwanie cewnika do zmiany stenotycznej lub stentu.

Wśród akcesoriów do wyrobu znajduje się igła do płukania i napełniania światła przewodnika heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.

<NAZWA KAŻDEJ CZĘŚCI>

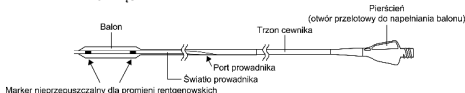

Sterylny i jałowy w nieuszkodzonym i nieotwartym blistrze. Ten wyrób jest sterylizowany tlenkiem etylenu.

Zalecana średnica przewodnika:

Maksymalna średnica: 0,89 mm (0,035")

Zalecane ciśnienie napełniania i maksymalne ciśnienie napełniania

Ciśnienie nominalne:

- Średnica balonu: mniejsza niż 6 mm: 10 atm
- Średnica balonu: 6 mm i większa: 8 atm

Ciśnienie rozrywające:

- Średnica balonu: mniejsza niż 5 mm: 20 atm
- Średnica balonu: 5 mm: 18 atm
- Średnica balonu: 6 mm ± 8 mm: 14 atm
- Średnica balonu: 9 mm i większa: 12 atm

[WSKAZANIA]

Balonowy cewnik dylatacyjny do PTA Metacross RX jest przeznaczony do poszerzania zmiany stenotycznej w tętnicy biodrowej, udowej, biodrowo-udowej, podkolanowej, tętnic położonych dystalnie od tętnicy podkolanowej oraz nerkowych oraz w zabiegach wewnątrznaczyniowego udrażniania naturalnej lub syntetycznej przetoki żyłno-tętniczej. Stosowanie urządzenia jest także wskazane przy postdylatacji w naczyniach obwodowych.

Uwaga: Test weryfikacji stentu po rozszerzeniu dla cewnika Metacross RX został przeprowadzony z użyciem systemu stentu naczyniowego Complete® SE (Medtronic, Inc), systemu stentu naczyniowego S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) i samorozszerzającego się systemu stentu naczyniowego Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[PRZECIWWSKAZANIA]

1. Pacjenci, u których stwierdzono zwężenie zespoleniowe w ciągu jednego miesiąca od wytworzenia przetoki żyłno-tętniczej.
2. Pacjenci, u których stwierdza się zmiany, które łączą się z pseudotętniakiem.
3. Pacjentki w ciąży.
4. Pacjenci, którzy nie tolerują leczenia antypłytkowego lub przeciwzakrzepowego.

[OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]

[Ostrzeżenia]

1. Wyrób przeznaczony do użytku jednorazowego. Nie używać powtórnie. Nie sterylizować ponownie. Nie przetwarzać. Przetwarzanie może doprowadzić do utraty sterylności, biologicznej zgodności oraz spójności funkcjonalnej wyrobu.
2. Nie stosować, jeżeli wyrób lub opakowanie jednostkowe zostały uszkodzone.
3. Nie napełniać balonu z przekroczeniem średnicy naczynia krwionośnego proksymalnie i dystalnie względem zmiany stenotycznej.
4. Nie napełniać balonu do ciśnienia przekraczającego ciśnienie rozrywające.
5. Nie stosować tego cewnika w ośrodkowym układzie krążenia.

[Środki ostrożności związane z procedurami]

1. Powoli i ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania i usunąć z urządzenia elementy zabezpieczające. Nieostrożne posługiwanie się urządzeniem może być przyczyną uszkodzenia balonu i/lub trzonu cewnika, pogarszając właściwości balonu związane z napełnianiem i/lub opróżnianiem.
2. Napełnić balon środkiem kontrastowym rozcieńczonym solą fizjologiczną w stosunku 1:1 (dalej zwanym „płynem do napełniania”). Do napełniania balonu nie wolno stosować żadnych substancji gazowych, jak powietrze. (Balon może napełniać się w sposób nieregularny).
3. Przed zastosowaniem usunąć powietrze z balonu oraz światła przewodu do napełniania balonu i zastąpić je płynem do napełniania. (W przypadku niepełnej eliminacji powietrza nie można obserwować stanu napełnienia balonu pod kontrolą badania fluoroskopowego).
4. W przypadku poważnych zmian stenotycznych, jak zmiany zwężniałe, naczynie krwionośne może zostać nieposzerzone całkowicie. W takim przypadku nie stosować ciśnienia przekraczającego ciśnienie rozrywające. (Balon może pęknąć, a jego fragmenty mogą pozostać w ciele pacjenta).
5. W instrukcjach danych wyrobów medycznych przedstawiono, czy mogą być stosowane z niniejszym cewnikiem. (Jeśli cewnik balonowy jest stosowany do postdylatacji podczas procedury umieszczania stentu w naczyniach obwodowych, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta).
6. Umieszczanie w stencie, usuwanie ze stentu lub poszerzanie balonu w stencie należy przeprowadzać ostrożnie pod kontrolą badania fluoroskopowego. (Wykonywanie tych czynności bez kontroli badania fluoroskopowego może spowodować uszkodzenie cewnika lub naczynia).
7. Nie wolno podejmować prób przesuwania balonowego cewnika dylatacyjnego do PTA Metacross RX przez koszulkę naczyniową o rozmiarze mniejszym od wskazanego na etykiecie. Należy zapoznać się z treścią etykiet umieszczonych na wyrobie.

[Środki ostrożności w czasie stosowania]

1. Użyć wyrobu zaraz po otworzeniu sterylnego opakowania.
2. Cały zabieg powinien być przeprowadzony w warunkach aseptycznych.
3. Niniejszy cewnik powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy z doświadczeniem w procedurach przezskórnej angioplastyki naczyń.
4. Wybrać cewnik o odpowiedniej wielkości balonu (średnica balonu, długość balonu) zgodnie z następującymi kryteriami (procedurami).
 - 1) Średnica napelnionego balonu nie może przekraczać wewnętrznej średnicy naczyńa proksymalnie i dystalnie do zmiany.
 - 2) Długość napelnionego balonu nie może przekroczyć długości zmiany podanej leczeniu.
(Nieprawidłowy wybór cewnika może być przyczyną ostrej niedrożności naczyńa).
5. Ten cewnik należy stosować wyłącznie w sytuacjach, gdy zawsze można przeprowadzić operację ratunkową.
6. Lekarz kierujący procedurą powinien określić czas trwania napelniania oraz liczbę napelnień balonu w oparciu o swoje przeszłe doświadczenie.
7. Roztwór soli fizjologicznej z heparyną należy podać w ramach profilaktyki przeciwzakrzepowej w trakcie wprowadzania tego cewnika balonowego do naczyńa krwionośnego.
8. Nigdy nie napelniać balonu ani nie przesuwac przewodnika, jeżeli cewnik jest zagięty lub złamany.
9. Ostrożnie manipulować cewnikiem w naczyńiu kontrolując położenie i ruch jego końcówki pod kontrolą badania fluoroskopowego lub na monitorze DSA (Digital Subtraction Angiography).
10. Zawsze napelniać balon, obserwując jego stopień napelnienia pod kontrolą badania fluoroskopowego. Ostrożnie napelnić balon, sprawdzając jego położenie na podstawie znaczników nieprzepuszczalnych dla promieni rentgenowskich. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, np. niewielkiego oporu lub zgiętej dystalnej końcówki przewodnika procedurę należy niezwłocznie przerwać, a cewnik powoli usunąć razem z przewodnikiem.
11. Nie należy szybko wprowadzać ani wyjmować cewnika. (Szybkie działanie może uszkodzić cewnik lub błonę wewnętrzną naczyńa).
12. Nie przesuwac cewnika, jeśli balon jest napelniony. (Przesuwanie cewnika razem z napelnionym balonem może spowodować rozerwanie balonu lub pęknięcie trzonu cewnika).
13. Nie wolno szybko napelnić ani usuwać płynu z balonu w naczyńiu krwionośnym. (Szybkie napelnienie lub usunięcie zawartości może uszkodzić naczynie krwionośne lub spowodować pęknięcie balonu, czego wynikiem będzie pozostanie jego fragmentów w ciele pacjenta).
14. Nie stosować iniektora (automatycznego urządzenia do iniekcji) w celu napelnienia balonu
15. Należy zachować ostrożność, by nie uszkodzić cewnika skalpelem ani nożyczkami chirurgicznymi.
16. Jeśli podczas manipulowania cewnikiem wystąpią takie nieprawidłowości, jak silny opór, należy natychmiast przerwać procedurę. Należy zweryfikować przypadek i podjąć odpowiednie kroki. (Kontynuowanie operacji z użyciem nadmiernej siły może być przyczyną uszkodzenia cewnika lub zranienia ściany naczyńa).
17. Należy zawsze obserwować stan pacjenta i monitorować jego temperaturę ciała, tętno i oddech. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości niezwłocznie przerwać stosowanie cewnika lub podjąć odpowiednie środki zależnie od stanu pacjenta i zgodnie z opinią lekarza.
18. Po użyciu cewnik usunąć razem z odpadami medycznymi zgodnie z procedurami szpitala.
19. Nie używać substancji zawierających rozpuszczalniki organiczne ani olejnych środków kontrastowych. Kontakt z tymi substancjami może być przyczyną uszkodzenia cewnika.
20. Podczas manipulowania cewnikiem nie wolno go skręcać ani obracać.
21. Podczas umieszczania wyrobu w naczyńiu krwionośnym lub usuwania urządzenia z naczyńa krwionośnego należy się

że balon jest całkowicie opróżniony. (Wyrób z większym lub dłuższym balonem wymaga dłuższego czasu opróżniania).

22. Jeśli podczas następującego po zabiegu wycofywania wyrobu daje się wyczuć opór, zaleca się wycofanie całego systemu wraz z koszulką naczyńiową/prowadzącą.

23. Należy zawsze przemieszczać cewnik na przewodniku, umieszczonym w świetle przewodnika.

[Instrukcje operacyjne]

Wśród elementów typowo używanych z balonowym cewnikiem dylatacyjnym do PTA Metacross RX można wymienić co następuje:

- Przewodnik (przewodniki) o odpowiedniej średnicy i długości
- Odpowiednia koszulka naczyńiowa/prowadząca i zestaw poszerzający
- Fiolka ze środkiem kontrastowym
- Fiolka ze sterylnym roztworem soli fizjologicznej
- Urządzenie napelniające z manometrem
- Strzykawka z łącznikiem typu luer lock
- Trójdrożny zawór odcinający

[Metoda operacji lub instrukcja użycia]

1. Wybór cewnika
Przed użyciem sprawdzić wewnętrzną średnicę naczyńa krwionośnego proksymalnie i dystalnie względem zmiany stenotycznej pod kontrolą badania fluoroskopowego i wybrać cewnik o odpowiedniej wielkości balonu. Jeżeli do danej średnicy naczyńa pasują dwa rozmiary, wybrać mniejszy rozmiar.
2. Przygotowanie
 - 1) Po wyjęciu cewnika z opakowania w warunkach aseptycznych należy zdjąć osłony.
 - 2) Zastąpić powietrze w balonie i przewodzie do napelniania balonu płynem do napelniania zgodnie z następującymi procedurami.
 - a) Podłączyć urządzenie do napelniania (niedolączone do zestawu) napelnione płynem napelniającym do portu napelniania balonu.
 - b) Po zastosowaniu ciśnienia ujemnego przez około 10 sekund w urządzeniu do napelniania skierować końcówkę trzonu cewnika w dół i powoli uwolnić ciśnienie ujemne tak, aby płyn napelniał balon i przewód do napelniania balonu, a powietrze było eliminowane.
 - c) Gdy wewnątrz balonu i w świetle przewodu do napelniania balonu znajdzie się powietrze, należy powtórzyć procedurę b) do czasu pełnej eliminacji powietrza.
 - d) Odłączyć urządzenie do napelniania od portu do napelniania balonu i usunąć powietrze z cylindra urządzenia do napelniania.
 - e) Podłączyć ponownie urządzenie do napelniania do portu napelniania balonu i utrzymywać ciśnienie ujemne. Sprawdzić, czy powietrze już nie powraca do strzykawki.
 - 3) Przepłukać światło przewodnika heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej używając igły do płukania i napelnić światło heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.
 - 4) Zanurzyć cały balonowy cewnik dylatacyjny do PTA Metacross RX w roztworze soli fizjologicznej.
3. Wkładanie i napelnianie cewnika balonowego
Przed użyciem sprawdzić, czy niniejszy cewnik jest zgodny z cewnikiem prowadzącym (niedostarczonym w zestawie), koszulką naczyńiową (niedostarczaną w zestawie) i przewodnikiem (niedostarczonym w zestawie) korzystając z poniższej tabeli.

Numer katalogowy	Średnica balonu (mm)	Kompatybilna koszulka (Fr/mm)	Maksymalna średnica przewodnika (cal/mm)
BD-L30020MR ~	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 cala (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

W przypadku stosowania tego cewnika razem z koszulką naczyńiową lub cewnikiem wprowadzającym:

- 1) W przypadku stosowania tego cewnika w cewniku prowadzącym należy poluzować lekko zastawkę hemostatyczną tak, aby nie dopuścić do przecieku krwi.
- 2) Stopniowo wsuwać cewnik, z balonem całkowicie opróżnionym, do koszulki naczyniowej lub cewnika prowadzącego po przewodniku i wsunąć go dystalnie na pograniczu zmiany. Pod kontrolą badania fluoroskopowego wsunąć cewnik powoli, by znacznik nieprzepuszczalny dla promieniowania rentgenowskiego dotarł do zmiany docelowej.
- 3) Pod kontrolą badania fluoroskopowego sprawdzić położenie znacznika nieprzepuszczalnego dla promieniowania rentgenowskiego na balonie i określić miejsce poszerzenia.
- 4) Przyłączyć stabilnie urządzenie do napełniania do portu napełniania balonu.
- 5) Stopniowo napełniać balon do osiągnięcia średnicy docelowej, sprawdzając ciśnienie napełniania i rozszerzając zmianę stenotyczną (średnice napełnionego balonu znajdują się w danych zgodności balonu w Tabeli zgodności balonu na końcu niniejszej instrukcji stosowania).
4. Usunięcie cewnika
 - 1) Po zastosowaniu ciśnienia ujemnego w celu całkowitego opróżnienia balonu wyjąć cewnik.
5. Ponowne umieszczenie cewnika
 - 1) Jeśli konieczne jest ponowne umieszczenie cewnika ze złożonym balonem, przed ponownym umieszczeniem cewnika w naczyniu krwionośnym pacjenta należy sprawdzić, czy z balonu całkowicie usunięto powietrze. Podczas ponownego umieszczania stosować cewnik zgodnie z zamieszczoną w niniejszym dokumencie sekcją „Umieszczanie i napełnianie cewnika balonowego”.
 - 2) Jeśli podczas ponownego umieszczania cewnika daje się wyczuć jakikolwiek opór, przerwać umieszczanie i ostrożnie usunąć cewnik z naczynia krwionośnego pacjenta. Przygotować się do użycia nowego cewnika Metacross RX zgodnie z procedurami zamieszczonymi w niniejszej sekcji instrukcji stosowania.

[Powikłania]

Awarie wyrobu

- Pęknięcie balonu
- Niewystarczające napełnienie/opróżnienie balonu
- Pęknięcie balonu i/lub trzonu cewnika
- Trudności z usunięciem wyrobu
- Wyciek płynu do napełniania

Zdarzenia niepożądane:

- Infekcje miejscowe i ogólne
- Miejscowe krwawienie wewnętrzne lub krwiak
- Przerwanie błony wewnętrznej naczynia
- Rozwarstwienie naczynia
- Perforacja naczynia
- Przerwanie naczynia
- Tętniak
- Zaburzenia rytmu
- Ostre zamknięcie naczynia
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
- Skurcz naczynia
- Wytworzenie pseudotętniaka
- Przetoka tętniczo-żylna
- Krwotok, konieczność transfuzji
- Reakcja alergiczna na środek kontrastowy
- Ból lub ból po ucisku
- Zgon
- Zator
- Zapalenie wsierdzia
- Gorączka
- Nadciśnienie/niedociśnienie
- Stan zapalny
- Zawał mięśnia sercowego
- Posocznica
- Wstrząs
- Udar

- Przemijający atak niedokrwienny

[Przechowywanie i data ważności]

1. Przechowywać w chłodnym, suchym, ciemnym miejscu. Unikać narażenia na działanie wody i bezpośrednie działanie światła słonecznego.
2. Datę przydatności do użytku podano na opakowaniu. Nie używać po dacie przydatności do użytku.

[Opakowanie]

1 zestaw/pudełko

[Nazwa i adres producenta lub przedstawiciela]



Producent: KANEKA CORPORATION

Adres: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city, OSAKA, 530-8288 JAPAN

Nr tel. (+81)-(0) 6-6226-5256

Nr faksu: (+81)-(0) 6-6226-5143



Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adres: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Nr tel. (+32)-(0) 14-256-297

Nr faksu: (+32)-(0) 14-256-298

Dystrybutor w UE: TERUMO EUROPE N.V.

Adres: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgia

Nr tel. (+32)-(0) 16 381 211

Nr faksu: (+32)-(0) 16 400 249

Wszystkie nazwy marek są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi TERUMO CORPORATION i ich prawnych właścicieli.

Tabela 1. Dane zgodności balonu cewnika Metacross RX

Ciśnienie (atm)	Średnica balonu (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40*	7.49*	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41*	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Ciśnienie nominalne:


** Ciśnienie rozrywające:

[TERMÉKLEÍRÁS]

A Metacross RX egy perkután transzlumináris angioplasztikai (PTA) tágitó ballonkatéter periferiális indikációk kezelésére. Metacross RX gyorscsereős (RX) típusú, a kompatibilis vezetődrót maximális átmérője 0,89 mm.

A katéter disztális része egy ballont és egy kétlumenes (koaxiális) szárat tartalmaz. A külső lumen a ballon sóoldattal hígított kontrasztanyaggal történő feltöltésére és leengedésére, míg a belső lumen a vezetődrót lumen a disztális hegytől a vezetődrót csatlakozóig) kompatibilis vezetődrót bevezetésére, a katéternek a tágitandó sztenotikus lézió, vagy sztenten történő áthaladás elősegítésére szolgál. A proximális rész egy egylumennű szár egy Luer-csatlakozóval a feltöltő-leeresztő eszköz csatlakoztatásához. A ballonnal belül két sugárárműveket adó marker helyezkedik el, melyek a ballon munkahosszát jelzik és segítik a ballon megfelelő képerősítős pozícionálását a céllezión keresztül. A Metacross RX megvásárolható az ajánlott feltöltési nyomás (névleges nyomás) melletti többféle ballonméretben (átmérő és hossz). A feltöltés után a ballon átmérője a feltöltési nyomástól függ. A Metacross RX táglasi táblázata a használati utasítás végén, az 1. táblázatban található. A sterilizáló csomagban az eszköz a védőeszközökkel (ballonvédőcső és szonda) van felszerelve, melyek használat előtt eltávolítandók. A ballonvédőcső a ballonnal összehajlítva található, míg a szonda a katéterszár összeesését megelőzendő a vezetődrót lumenébe van vezetve. A katéter disztális vége elkeskenyedik, hogy segítse a katéter előrejutását a sztenotikus lézió, vagy sztenten keresztül. Az átöltött tü az eszközhöz tartozó tartozék, mely a vezetődrót lumen heparinos sóoldattal történő öblítésére és feltöltésére szolgál.

<AZ ALKOTÓRÉSZEK MEGNEVEZÉSE>

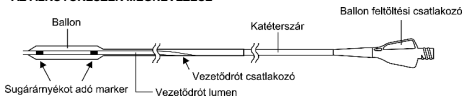

Steril és nem pirogén, ha a bliszter sértetlen és bontatlan. A termék etilén-oxidai sterilizálva.

A vezetődrót ajánlott átmérője:

Maximális átmérő: 0,89 mm (0,035")

Ajánlott feltöltőnyomás és maximális feltöltőnyomás

Névleges nyomás:

- Ballonátmérő 6 mm alatt : 10 atm
- Ballonátmérő 6 mm és efölött : 8 atm

Becsült szakítónyomás:

- Ballonátmérő 5 mm alatt : 20 atm
- Ballonátmérő 5 mm: 18 atm
- Ballonátmérő 6, 7, 8 mm 14 atm
- Ballonátmérő 9 mm és efölött: 12 atm

[INDIKÁCIÓ]

A Metacross RX egy PTA tágitó ballonkatéter az a. iliaca, femoralis, ilio-femoralis, poplitea, infrapoplitea és renalis stenózisainak tágitására, valamint a natív vagy mesterséges dialízis AV-fisztulák obstrukcióinak kezelésére. Az eszköz emellett a periferiális erek sztent-tágitására is alkalmas.

Megjegyzés: A Metacross RX sztent poszt-dilatációs ellenőrző tesztje került elvégzésre a Complete® SE Vascular Stent System (Medtronic, Inc), a S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System (Cordis Corporation) illetve az Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System (Boston Scientific Corporation) segítségével.

[ELLENJAVALLATOK]

- Azonkál a betegéknél, akínél az AV-shunt megtörténte után egy hónapon belül anasztomotikus szűkület alakult ki.
- Azonkál a betegéknél, akínél a lézió pszeudoaneurizmával áll kapcsolatban.

- Terhesség során.
- Azonkál a betegéknél, akik nem alkalmasak a vérelemzke-elleni vagy antikoaguláns kezelésére.

[FIGYELMEZTETÉSEK/ÖVINTÉZKEDÉSEK]

[Figyelmeztetések]

- Az eszköz egyszer használna, ismételt használata, reterilizációja nem megengedett! Ismételt felhasználásra való előkészítése nem megengedett, mivel ez veszélyeztetheti a termék sterilizását, biokompatibilitását és funkcionális integritását.
- Ne használja, ha termék vagy az egység csomagolása megrongálódott.
- A ballont ne töltse fel nagyobbra, mint a véredénynek a sztenotikus elváltozás proximális és disztális végénél mért átmérője!
- Ne lépje túl a ballon tágitásakor a becsült szakítónyomást!
- Ne használja a katétert a központi keringési rendszerben!

[A beavatkozást illeő övintézkedések]

- Az eszközt óvatosan és lassan távolítsa el a szállítócsőből és távolítsa el ki a védőeszközöket. A figyelmen kezelés károsíthatja a ballont, vagy a katéterszárat, ami gátolhatja a ballon feltöltését vagy leeresztését.
- Töltse fel a ballont kontrasztanyag és sóoldat 1:1 arányú keverékével (továbbiakban feltöltési folyadék). Ne használjon a ballon feltöltésére gázt (pl. levegőt). (A ballon szabálytalanul töltődhet fel.)
- Használat előtt távolítsa el a levegőt a ballonnól és a ballon inflációs csatornájából, és helyettesítse azt a feltöltő folyadékkal. (Ha a levegőt nem távolítja el teljes mértékben, a ballon feltöltésének állapotát nem lehet röntgenátvilágítással ellenőrizni.)
- Súlyos (pl. meszes) sztenotikus léziók esetén az ér nem tágitható ki teljesen. Ilyen esetben ne fejtson ki a becsült szakítónyomásnál nagyobb nyomást. (A ballon elszakadhat és darabjai a testben maradhatnak.)
- A katéterrel együtt használt orvosi eszközökkel kapcsolatban kövesse az adott eszközökre vonatkozó utasításokat! (Amennyiben a ballonkatétért periferiális sztentbeültetés során a sztent tágitására használja, kövesse a gyártó használati utasításait.)
- A sztentbe való bevezetést, az abból történő kihúzást, illetve a ballon sztentben történő feltöltését óvatosan, röntgenátvilágítás mellett végezze. (A röntgenátvilágítás nélküli manipuláció károsíthatja a katétért vagy sérülést okozhat a véredény intimáján.)
- Ne próbálja átloolni a Metacross RX PTA tágitó ballonkatétért a címkén jelzett méretűnél kisebb bevezető hüvelyen. Nézzze meg az eszköz címkéjét.

[Használat alatti övintézkedések]

- A készüléket közvetlenül a steril csomagolás felbontása után használja fel.
- A teljes beavatkozást aszeptikusan kell végezni.
- A katétért kizárólag a perkután vaszkuláris beavatkozásokban jártas szakorvosok használhatják.
- Válassza ki a megfelelő ballon mérettel rendelkező (ballonátmérő, ballonhossz) katétért a következő (beavatkozási) kritériumoknak megfelelően.
 - A felfújó ballon átmérője ne haladja meg a véredénynek az elváltozástól proximálisan és disztálisan mért belső átmérőjét.
 - A felfújó ballon hossza ne haladja meg a kezelendő elváltozás hosszát.
 - (A nem megfelelő katéterméret az ér akut elzáródását okozhatja.)
- Csak olyan esetben használja a katétért, ha bármikor végrehajtható sürgősségi műtéti beavatkozás.
- Az eljárásért felelős szakorvosnak saját korábbi tapasztalatai alapján kell megállapítania a ballonfeltöltések időtartamát és számát.
- A ballonkatéternek a véredénybe való bevezetése alatt heparinos sóoldatot kell bejuttatni a vérárvadás gátlására.

8. Soha ne töltse fel a ballont vagy vezesse be a vezetődrótot, ha a katéter elhajlott vagy megtört.
9. Óvatosan manipulálja a katéterrel az érben és közben figyelje a katéter végének helyzetét és mozgását röntgenátvilágítás vagy digitális szubsztrakciós angiográfias vizsgálat (DSA) segítségével.
10. Mindig töltse fel a ballont, miközben feltöltött állapotában vizsgálja röntgenátvilágítással. Óvatosan töltse fel a ballont miáltal a röntgenárrnyékot add markerekkel ellenőrizi a ballon mozgását. Bármilyen rendellenesség esetén, legyen az egy kis ellenállás, a manipuláció során nem mozdítható katéter vagy a vezetődrót elferdült disztális vége, az eljárást azonnal meg kell szakítani, és ezt a katétért a vezetődróttal együtt lassan el kell távolítani.
11. Ne vezesse be, és ne távolítsa el a katétért gyorsan. (A gyors művelet károsíthatja a katétért vagy sérülést okozhat a véredény intímáján.)
12. Ne mozdítsa el a tágitó katétért amíg a ballon nincs teljesen leeresztve. (A katéter feltöltött ballonnal történő mozgataa a ballon repedéséhez vagy a katéterszár töréséhez vezethet.)
13. Ne töltse fel, vagy eressze le a ballont gyorsan a véredényben. (A gyors feltöltés vagy leeresztés károsíthatja a véredényt, vagy megreprezetheti a ballont, melynek következtében a ballon darabjai a testben maradhatnak.)
14. Ne használjon befecskendező készüléket (automatikus befecskendező eszközt) a ballon feltöltésére.
15. Járjon el óvatosan, ne sértse meg a katétért szíkével vagy sebészti ollóval.
16. Amennyiben a katéterrel történő manipulálás során bármilyen rendellenességet, pl. erős ellenállást tapasztal, azonnal fűggesse fel az eljárást. Keresse meg a jelenség okát és tegye meg a szükséges lépéseket. (A beavatkozás folytatása nagy erő kifejtésével a katéter vagy az ér sérülését okozhatja.)
17. Folyamatosan figyelje a beteg állapotát, monitorozza a testhőmérsékletét, pulzusát és légzését. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal szakítsa meg a katéter használatát, vagy tegye meg a megfelelő intézkedést a beteg állapota érdekében a szakorvos véleménye alapján.
18. A katétért használatát után egészségügyi hulladékként kell kezelni a kórházi gyakorlatnak megfelelően.
19. Ne használjon szerves oldószert tartalmazó anyagokat vagy olajos kontrasztanyagokat. Ezen anyagokkal történő érintkezés a katéter sérülését okozhatja.
20. A manipulálás során ne tekerje vagy forgassa el a katétért.
21. Az eszköznek az érbe történő bevezetése vagy onnan történő eltávolítása során ügyeljen arra, hogy a ballon teljesen le legyen engedve. (A nagyobb vagy hosszabb ballonnal rendelkező eszközök esetében több idő kell a leeresztéshez.)
22. Ha az eljárás végén az eszköz eltávolítása közben ellenállás tapasztalható, ajánlott a teljes rendszert egyben, a bevezető/vezető hüvellyel együtt eltávolítani.
23. A katétért mindig a vezetődrót lumenbe helyezett vezetődróton használni.

[Használati utasítások]

PTA beavatkozás esetén a Metacross RX PTA tágitó ballonkatéter használatához általában az alábbi eszközök szükségesek:

- Megfelelő hosszúságú és átmérőjű vezetődrót(ok)
- Megfelelő bevezető/vezető hüvely és tágitók
- Kontrasztanyag
- Steril sóoldat
- Feltöltő eszköz nyomásmérővel
- Luer-lock fecskendő
- 3-utas csap

[Műteti módszer vagy használati útmutatás]

1. A katéter kiválasztása

A beavatkozás előtt röntgenátvilágítással határozza meg a véredény belső átmérőjét a sztenotikus elváltozástól proximálisan és disztálisan, és válassza ki a megfelelő méretű ballonkatétért. Ha két méret is megfelel a mért átmérőnek, akkor válassza a kisebbet!

2. Előkészületek

- 1) Miután aszeptikusan kivette a katétért a csomagolásából, távolítsa el a védőborítást!
- 2) Távolítsa el a ballonból és a ballon inflációs csatornájából a levegőt feltöltő folyadék segítségével az alábbi eljárásnak megfelelően.
 - a) Csatlakoztassa a feltöltő folyadékkal teli feltöltő készüléket (ez a készlet nem tartalmazza) a ballon inflációs nyílásához.
 - b) A feltöltő készülékre gyakorolt körülbelül 10 másodperces negatív nyomás alkalmazása után irányítsa a katéter nyelét lefelé, és lassan engedjen a negatív nyomáson, hogy a folyadék feltöltsa a ballon belső üregét és az inflációs csatornát, valamint hogy kiszorítsa a levegőt.
 - c) Ha maradt valamennyi levegő a ballonban, miután a ballont feltöltötte a feltöltő folyadék, ismételje meg a b) lépést amíg a levegő teljesen ki nem szorul.
 - d) Vegye le a feltöltő készüléket a ballon inflációs nyílásáról, és távolítsa el a levegőt a feltöltő készülék cilindereből!
 - e) Csatlakoztassa vissza a feltöltő készüléket a ballon inflációs nyílásához és tartsa fent a negatív nyomást. Ügyeljen arra, hogy ne jusson levegő a fecskendőbe.
- 3) Az átöblítő tű segítségével öblítse át, majd töltse fel a vezetődrót lument heparinós sóoldattal.
- 4) Mérítse az egész Metacross RX PTA tágitó ballonkatétért sóoldatba.
3. A ballonkatéter bevezetése és feltöltése

Használat előtt, kérjük, az alábbi táblázat segítségével ellenőrizze, hogy a katéter kompatibilis a vezetőkatéterrel, a bevezető hüvellyel és a vezetődróttal (a készlet ezeket nem tartalmazza).

Katalógusszám	Ballonátmérő (mm)	Kompatibilis hüvely (Ch/mm)	Vezetődrót maximális átmérője (mm/hüvelyk)
BD-L30020MR ~ BD-L70200ER	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm 9 mm, 10 mm, 12 mm	6 Ch / 2 mm 7 Ch / 2,33 mm	0,89 mm (0,035")

A katéter használatát a bevezető hüvelybe, vagy vezetőkatéterbe vezette

- 1) Amikor a vezetőkatéterben használja a katétért, lazítsa meg a hemosztatikus szelepet, ugyanakkor tartsa elég szorosan a vérszivárgás megakadályozása érdekében.
- 2) A katétért teljesen leeresztett ballonnal fokozatosan vezesse be a bevezető hüvelybe, vagy vezetőkatéterbe a vezetődróton és tolja a lézió disztális végéhez. Röntgenátvilágítás mellett tolja előre lassan a katétért, hogy a ballonban lévő sugárárrnyéket adó marker elérje a beavatkozás helyét.
- 3) Röntgenátvilágítás segítségével ellenőrizze a a ballonban lévő sugárárrnyéket adó marker pozícióját és határozza meg a tágitás helyét.
- 4) Csatlakoztassa a feltöltő eszközt a katéter ballonjának feltöltési csatlakozójára,
- 5) Töltse fel fokozatosan a ballont a megadott átmérőig a nyomás ellenőrzése mellett, és tágitssa ki a sztenotikus elváltozást (a feltöltött ballon jellemzőit lásd a használati utasítás végén, az 1. táblázatban található táglási táblázatban).
4. A katéter eltávolítása
- 1) Alkalmazzon negatív nyomást a ballon tökéletes leeresztéséhez, majd távolítsa el a katétért.
5. A katéter újbóli bevezetése
- 1) Ha az eltávolított katéter leeresztett ballonnal történő újbóli bevezetése szükséges, a betegbe történő bevezetés előtt ellenőrizze, hogy a ballon teljesen le van eresztve és össze van hajtv. Az újbóli bevezetést az „A ballonkatéter bevezetése és feltöltése” fejezetnek megfelelően végezze el.
- 2) Ha a katéter újbóli bevezetése során ellenállást tapasztal, álljon meg és óvatosan távolítsa el a katétért a beteg vérréből. Készítsen elő egy új Metacross RX katétért ezen Használati

utasítás ezen fejezetében található fenti utasításoknak megfelelően.

Minden márkánév a TERUMO CORPORATION és tulajdonosainak védjegye vagy bejegyzett védjegye.

[Szövődmények]

Eszközhibák:

- A ballon kiszakadása
- A ballon elégtelen feltöltése vagy leeresztése
- A ballon, illetve a katéterszár törése
- Az eszköz eltávolításának nehézsége
- A feltöltő folyadék szivárgása

Nem kívánatos események:

- Helyi vagy szisztémás gyulladás
- Lokális belső vérzés vagy hematoma
- Intimasérülés
- Érfal disszekció
- Érperforáció
- Véredény ruptura
- Aneurizma
- Arrhythmia
- Akut érelzáródás
- Vénás thromboembolizmus
- Vazospazmus
- Pszeudoaneurizma kialakulása
- Arteriovenózus fistula
- Vérzés, transzfúziót igénylő
- A kontrasztanyagra való allergiás reakció
- Fájdalom vagy szorító fájdalom
- Halál
- Embólia
- Endokarditisz
- Láz
- Magas vagy alacsony vérnyomás
- Gyulladás
- Szívinfarktus
- Szepszis
- Sokk
- Stroke
- TIA

[Tárolás és a lejárati időpontja]

1. Hűvös, száraz, sötét helyen tárolandó. Kerülje a vízzel vagy a közvetlen napfénnel való érintkezést.
2. A lejárati idő a dobozon található. A lejárati idő után ne használja.

[Csomagolás]

1 készlet/doboz

[A gyártó vagy a képviselő neve és címe]



Gyártó: KANEKA CORPORATION

Cím: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel.: (+81)-(0) 6-6226-5256
Fax: (+81)-(0) 6-6226-5143

EC	REP
----	-----

Felhatalmazott képviselő az EU-ban:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Cím: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tel.: (+32)-(0) 14-256-297
Fax: (+32)-(0) 14-256-298

EU-forgalmazó : TERUMO EUROPE N.V.

Cím: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgium
Tel.: (+32)-(0) 16 381 211
Fax: (+32)-(0) 16 400 249

1. táblázat Metacross RX Ballon tágulási táblázat

Nyomás (atm)	Ballonátmérő (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Névleges nyomás


** Becsült szakítónyomás

[POPIS VÝROBKU]

Metacross RX je balonkový dilatační katétr pro perkutánní transluminální angioplastiku (PTA), určený k použití v periferních cévách. Metacross RX je typ určený pro rychlou výměnu (RX); maximální průměr kompatibilního vodícího drátu je 0,89 mm (0.035 palce).

Distální část tohoto katétru se skládá z balónku a z dvoulumenového (koaxiálního) těla. Vnější lumen se používá k inflaci a deflaci balónku kontrastní látkou ředěnou fyziologickým roztokem. Vnitřní lumen (lumen pro vodící drát, od distálního hrotu po port vodícího drátu) je určen k zavádění kompatibilního vodícího drátu k usnadnění posouvání katétru přes stenotickou lézi nebo stent, které se mají dilatovat. Proximální část je jednolumenové tělo s ústím s jedním portem Luer Lock pro připojení inflačního/deflačního zařízení. Uvnitř balónku jsou umístěny dvě rentgenkontrastní značky, které označují pracovní délku balónku; ty slouží jako pomůcka pro lékaře při správném polohování balónku v cílové lézi pod skioskopickou kontrolou. Metacross RX je dostupný v různých velikostech balónku určených jeho průměrem a délkou při doporučeném inflačním tlaku (jmenovitém tlaku). Po inflaci se průměr balónku mění podle inflačního tlaku. Tabulka 1 na konci tohoto návodu k použití je tabulka kompatibility balónku pro Metacross RX. Ve sterilním balení je prostředek opatřen ochranným materiálem, ochrannou trubici pro balónek a styletem, které se musí před použitím odstranit. Ochranná trubice balónku je umístěna na balónku, který je složen do úzkého profilu, a do lumen vodícího drátu je vložen stylet zabírající zhroutení těla katétru. Distální hrot katétru je zúžený, aby se usnadnilo posouvání katétru do stenotické léze nebo stentu. Jako příslušenství tohoto prostředku se dodává proplachovací jehla pro proplachování a plnění lumen vodícího drátu heparinizovaným fyziologickým roztokem.

<NÁZEV JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROSTŘEDKU>

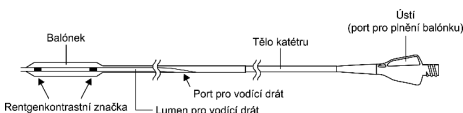

Sterilní a nepyrogenní v nepoškozeném a neotevřeném blistrovém obalu. Tento prostředek je sterilizován ethylenoxidem.

Doporučený průměr vodícího drátu:

Maximální průměr: 0,035" (0,89 mm)

Doporučený inflační tlak a maximální inflační tlak

Jmenovitý tlak:

- průměr balónku: menší než 6 mm: 10 atm
- průměr balónku: 6 mm a větší: 8 atm

Stanovený mezní tlak prasknutí:

- průměr balónku: menší než 5 mm: 20 atm
- průměr balónku: 5 mm: 18 atm
- průměr balónku: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- průměr balónku: 9 mm a větší: 12 atm

[INDIKACE]

Balonkový dilatační katétr pro PTA Metacross RC je určen k dilataci stenóz v iliačních, femorálních, iliofemorálních, popliteálních, infrapopliteálních a renálních artériích a k léčbě obstrukčních lézí nativních nebo syntetických arteriovenózních pěstířů pro dialýzu. Tento prostředek je také indikován k postdilataci periferních cév po implantaci stentu.

Poznámka: Byl proveden verifikační test postdilatace stentu pomocí prostředku Metacross RX za použití systému cévního stentu Complete® SE (Medtronic, Inc.) systému cévního stentu S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) a systému samoexpandujícího cévního stentu Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[KONTRAINDIKACE]

1. Pacienti, u kterých do jednoho měsíce po vytvoření AV fistule rozvinula anastomotická stenóza.
2. Pacienti s lézemi, které komunikují s pseudoaneuryzmaty.
3. Těhotné pacientky.
4. Pacienti, kteří nesnášejí protidestičkovou nebo antikoagulační léčbu.

[VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ]

[Varování]

1. Tento prostředek je určen pouze pro jednorázové použití. Nelze použít opakovaně. Opakovaně nesterilizujte. Nikak neupravujte. Opakované použití může ohrozit sterilitu, biokompatibilitu a funkčnost celistvost prostředku.
2. Pokud je poškozen výrobek nebo obal, výrobek nepoužívejte.
3. Balónek nenapínajte na větší velikost než je průměr krevní cévy proximálně a distálně od stenotické léze.
4. Balónek nenapínajte více než na stanovený mezní tlak prasknutí.
5. Tento katétr nepoužívejte v centrálním oběhovém systému.

[Upozornění týkající se výkonů]

1. Opatrně a pomalu vyjměte prostředek z transportní trubice a odstraňte ochranné prvky z prostředku. Při neopatrném zacházení se může poškodit balónek a/nebo tělo katétru, což může způsobit potíže s plněním a vyprazdňováním balónku.
2. Naplňte balónek kontrastní látkou zředěnou fyziologickým roztokem v poměru 1:1 (dále „inflační kapalina“). K inflaci se nesmí použít plynné médium, například vzduch. (Balónek by se nenaplnil stejným.)
3. Před plněním vytlačte z balónku a plicního lumen balónku veškerý vzduch a nahraďte jej inflační kapalinou. (V případě nedostatečného odstranění vzduchu nelze naplněný balónek sledovat skioskopicky.)
4. V případě výskytu závažných stenotických lézí, jako jsou například kalcifikované léze, nelze krevní cévu zcela dilatovat. V takovém případě neaplikujte tlak vyšší, než je jmenovitý mezní tlak prasknutí. (Balónek může prasknout a jeho zbytky mohou zůstat v těle pacienta.)
5. Co se týče zdravotnických prostředků používaných společně s tímto katétre, postupujte podle návodu k použití těchto prostředků. (Pokud se balonkový katétr používá k postdilataci stentu během postupu umístění periferního stentu, řídte se návodem k použití, daným výrobcem.)
6. Při zavádění do stentu, vytahování ze stentu nebo při dilataci balónku uvnitř stentu postupujte opatrně a pod skioskopickou kontrolou. (Pokud se nepoužije skioskopie, může se poškodit katétr nebo může dojít k poranění krevní cévy.)
7. Nepokoušejte se zasunout balonkový dilatační katétr pro PTA Metacross RX přes zaváděcí sheath/pouzdro menší velikosti, než jaká je uvedena na označení. Viz označení výrobku.

[Upozornění během použití]

1. Prostředek použijte ihned po otevření sterilního obalu.
2. Celý výkon se musí provádět asepticky.
3. Tento katétr smí používat výhradně lékaři s příslušnou kvalifikací pro provádění perkutánní vaskulární terapie.
4. Vyberte katétr s balónkem vhodné velikosti (průměr balónku, délka balónku), a to podle následujících kritérií (postupů):
 - 1) Průměr naplněného balónku nesmí přesáhnout vnitřní průměr cévy proximálně a distálně od léze.
 - 2) Délka naplněného balónku nesmí přesáhnout délku léčené léze. (Výběr nevhodného katétru může vést k akutní okluzi cévy.)
5. Tento katétr používejte pouze v případě, že lze kdykoli provést nouzovou chirurgickou výkon.
6. Lékař zodpovědný za provedení výkonu musí stanovit trvání a počet plnění balónku, a to na základě svých předchozích zkušeností.
7. Když se balonkový katétr zavádí do cévy, musí se provést infuze heparinizovaného fyziologického roztoku za účelem antikoagulace.

8. Nikdy nepiňte katétr ani neposouvejte vodič drát v případě, že je katétr ohnutý nebo zasmyčkován.
9. S katétretem manipulujte opatrně a přitom kontrolujte umístění a pohyb hrotu katétru pod skiaskopickým naváděním nebo na monitoru DSA (digitální subtrakční angiografie).
10. Při plnění balónku vždy skiaskopicky sledujte stav naplnění. Balónek plňte opatrně a současně kontrolujte jeho pohyb pomocí rentgenkontrastních značek. Pokud zjistíte jakoukoli anomálii (např. pocítujete-li mírný odpor, nelze-li katétretem během manipulace pohnout nebo když se zasmyčkuje distální hrot vodičového drátu), musíte ihned zastavit provádění výkonu a pomalu vyjmout katétr společně s vodičím drátem.
11. Katétr nezavádějte ani nevyjímejte rychle. (Při rychlém pohybu se může poškodit katétr nebo může dojít k poranění intimy.)
12. Je-li balónek naplněný, katétretem nepohybujte. (Při pohybování katétretem s naplněným balonkem může dojít k prasknutí balónku nebo ke zlomení těla katétru.)
13. Balónek v krevní cévě nenaplníte ani nevyprázdníte rychle. (Při rychlém naplnění nebo vyprázdnění se může poškodit krevní céva nebo může dojít k prasknutí balónku a jeho zbytky mohou zůstat v těle pacienta.)
14. K plnění balónku nepoužívejte žádný injektor (automatické injekční zařízení).
15. Musíte dávat pozor, abyste katétr nijak nepoškodili skalpelem nebo nůžkami.
16. Pokud při manipulaci s katétretem narazíte na jakoukoli anomálii, například na silný odpor, okamžitě výkon přerušte. Je nutno zjistit příčinu této anomálie a provést vhodná opatření. (Budete-li ve výkonu pokračovat s nadměrnou silou, může to vést k poškození katétru nebo k poranění cévní stěny.)
17. Neustále věnujte pozornost stavu pacienta a sledujte tělesnou teplotu, pulz a dýchání. Pokud zjistíte anomálii, přestaňte katétr ihned používat nebo podle rozhodnutí lékaře proveďte opatření odpovídající stavu pacienta.
18. Po použití katétru zlikvidujte se zdravotnickým odpadem podle směrnice zdravotnického zařízení.
19. Nepoužívejte prostředky s obsahem organických rozpouštědel nebo olejovitých kontrastních médií. Kontakt s těmito látkami může vést k poškození katétru.
20. Katétretem při manipulaci nekruťte ani neotáčejte.
21. Při zavádění tohoto prostředku do krevní cévy a při jeho vytahování z krevní cévy zkontrolujte, zda je balónek zcela vyprázdněný. (Prostředek s větším a delším balonkem vyžaduje delší dobu pro vyprázdnění.)
22. Pokud při vytahování tohoto prostředku pro provedení výkonu narazíte na odpor, doporučuje se vytáhnout celý systém vcelku spolu se zaváděčem / vodičím sheathem.
23. Katétr vždy používejte spolu s vodičím drátem, zasunutý do lumen vodičového drátu.

[Návod k použití]

Materiál obvykle potřebný pro provedení PTA pomocí balónkového dilatačního katétru pro PTA Metacross RX zahrnuje:

- vodič (drát(y) vhodného průměru a délky;
- vhodný set zaváděče / vodičového sheathu a dilatátoru;
- lahvičku s kontrastní látkou;
- lahvičku se sterilním fyziologickým roztokem;
- inflační zařízení s tlakoměrem;
- stříkačku Luer Lock;
- trojcestný uzavírací kohout.

[Metodika výkonu či návod k použití]

1. Výběr katétru
Před použitím skiaskopicky zkontrolujte vnitřní průměr krevní cévy proximálně a distálně ke stenotické lézi a vyberte katétr s odpovídající velikostí balónku. Pokud lze pro ověření průměr použít dvě velikosti, vyberte tu menší.
2. Přípravy
 - 1) Poté, co katétr asepticky vyjmete z obalové nádoby, odstraňte z něj ochranný materiál.
 - 2) Následujícím postupem nahraďte vzduch v balónku a v inflačním lumenu balónku inflační kapalinou.

- a) K inflačnímu portu balónku připojte inflační zařízení (není součástí této sady), naplněné inflační kapalinou.
- b) Do inflačního zařízení aplikujte podtlak po dobu přibližně 10 sekund a poté nasměrujte hrot těla katétru dolů a pomalu podtlak uvolněte, aby mohla kapalina naplnit balónek a inflační lumen balónku a aby se vytlačil vzduch.
- c) Pokud se v balónku a v inflačním lumenu balónku nachází vzduch, opakujte krok b), dokud se úplně neodstraní veškerý vzduch.
- d) Odpojte inflační zařízení od inflačního portu balónku a odstraňte vzduch obsažený v lahvi inflačního zařízení.
- e) Znovu připojte inflační zařízení k inflačnímu portu balónku a udržujte podtlak. Ověřte, zda se již do stříkačky nevrací vzduch.
- 3) Pomocí proplachovací jehly propláchněte lumen vodičového drátu heparinizovaným fyziologickým roztokem a naplňte lumen heparinizovaným fyziologickým roztokem.
- 4) Celý balonkový dilatační katétr pro PTA Metacross RX ponořte do fyziologického roztoku.
3. Zavedení a naplnění balónkového katétru
Před použitím zkontrolujte kompatibilitu tohoto katétru s vodičím katétretem (není součástí této soupravy), se zaváděcím sheathem (není součástí této soupravy) a s vodičím drátem (není součástí této soupravy) podle následující tabulky.

Katalogové číslo	Průměr balónku (mm)	Kompatibilní sheath (Fr/mm)	Maximální průměr vodičového drátu (palce/mm)
BD-L30020MR	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 palce (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Při použití katétru zasunutého v zaváděcím sheathu nebo vodičím katétru

- 1) Používáte-li tento katétr ve vodičím katétru, uvolněte hemostatický ventil; současně jej však nechejte utažený tak, aby nedocházelo k prosakování krve.
- 2) Celý katétr s vyprázdněným balonkem postupně zavedte do zaváděcího sheathu nebo vodičového katétru, a to po vodičím drátu zasunutém do distálního okraje léze. Pod skiaskopickým naváděním katétr pomalu posouvajte, až rentgenkontrastní značka na balónku dosáhne cílového místa.
- 3) Pod skiaskopickým naváděním ověřte polohu rentgenkontrastní značky na balónku a určete místo dilatace.
- 4) Inflační zařízení bezpečně připojte na inflační port balónku.
- 5) Balónek postupně naplňte na cílový průměr a přitom kontrolujte inflační tlak a dilatujte stenotickou lézi (údaje o průměru naplněného balónku najdete v tabulce kompatibility balónku v Tabulce 1 na konci tohoto návodu k použití).
4. Výměti katétru
 - 1) Aplikujte podtlak a úplně vyprázdněte balónek; poté vyjměte katétr.
5. Opětovné zavedení katétru
 - 1) Pokud je nutno opětovně zavést vyjmutý katétr s vyprázdněným balonkem, před opětovným zavedením do cévy pacienta zkontrolujte balónek, zda je úplně prázdný a složený. Postup použití katétru viz „Zavedení a naplnění balónkového katétru“ v tomto dokumentu.
 - 2) Pokud při vytahování tohoto prostředku při opětovném zavádění katétru narazíte na odpor, zastavte jeho posouvání a opatrně jej vytáhněte z cévy pacienta. Připravte k použití nový prostředek Metacross RX podle postupů uvedených výše v tomto odstavci v tomto návodu k použití.

[Komplikace]

Selhání zařízení:

- prasknutí balónku;
- nedostatečná inflace/deflace balónku;
- prasknutí balónku a/nebo těla katétru;
- potíže při vyjímání prostředku;
- prosakování inflační kapaliny;

Nežádoucí příhody:

- lokální nebo celková infekce;
- lokální vnitřní krvácení nebo hematom;
- ruptura intímy;
- disekce cévy;
- perforace cévy;
- ruptura cévy;
- aneuryzma;
- arytmie;
- akutní uzávěr cévy;
- žilní tromboembolie;
- vazospasmus;
- vznik pseudoaneuryzmatu;
- arteriovenózní píštěl;
- krvácení vyžadující transfúzi;
- alergická reakce na kontrastní látku / selhání ledvin;
- bolest nebo tlak;
- smrt;
- embolie;
- endokarditida;
- horečka;
- hypertenze nebo hypotenze;
- zánět;
- infarkt myokardu;
- sepse;
- šok;
- mrtvice;
- transientní ischemická ataka.

[Skládování a datum expirace]

1. Skladujte v chladu, suchu a temnu. Chraňte před vodou a přímým slunečním světlem.
2. Datum expirace je vyznačeno na obalu. Nepoužívejte po datu použitelnosti.

[Balení]

1 set v krabici

[Název a adresa výrobce nebo zástupce]



Výrobce: KANEKA CORPORATION

Adresa: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel. č.: (+81)-(0) 6-6226-5256
Fax. č.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Oprávněný zástupce pro Evropské společenství:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresa: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tel. č.: (+32)-(0) 14-256-297
Fax. č.: (+32)-(0) 14-256-298

Distributor v EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresa: INTERLEUVENLAAN 40, 40,3001 LEUVEN, Belgie
Tel. č.: (+32)-(0) 16 381 211
Fax. č.: (+32)-(0) 16 400 249

Všecké názvy značek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti TERUMO CORPORATION a jejich příslušných vlastníků.

Tabulka 1. Tabulka kompatibility balónku Metacross RX

Tlak (atm)	Průměr balónku (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97'	6.98'	8.06'	9.00'	9.91'	12.03'
10	3.02'	4.01'	5.04'	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36"	10.44"	12.64"
14	3.16	4.15	5.26	6.40"	7.49"	8.66"	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48"						
20	3.38"	4.41"	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Jmenovitý tlak:

** Stanovený mezní tlak prasknutí

[POPIS PRODUKTU]

Metacross RX je balónikový dilatčný katéter na perkutánnu transluminálnu angioplastiku (PTA) pre periférne indikácie. Metacross RX patrí k rýchlovýmennému (RX) typu a maximálny priemer kompatibilného vodiaceho drôtu je 0,89 mm (0,035 palca). Distálna časť tohto katétra sa skladá z balónika a (koaxiálneho) telesa s dvomi lúmenmi. Vonkajší lúmen sa používa na nafukovanie a vyfukovanie balónika kontrastným médiom rozriedeným fyziologickým roztokom. Vnútorňý lúmen (lúmen vodiaceho drôtu; od distálnej špičky k vstupu pre vodiaci drôt) je určený na zavedenie kompatibilného vodiaceho drôtu s cieľom uľahčiť zasúvanie katétra cez stenotickú léziu alebo stent, ktoré sa majú dilatovať. Proximálnu časť tvorí jednolúmenové teleso s hrdlom s portom typu luer na pripojenie nafukovacieho/vyfukovacieho zariadenia. Vnútri balónika sa nachádzajú dve röntgenkontrastné značky, ktoré indikujú pracovnú dĺžku balónika, a pri skiaskopickom zobrazení lekára vedú pri správnom umiestňovaní balónika v cieľovej lézii. Metacross RX je k dispozícii v rôznych veľkostiach balónika podľa priemeru a dĺžky pri odporúčaných tlakoch nafúknutia (nominálny tlak). Pri nafukovaní sa priemer balónika mení podľa tlaku nafúknutia. Na konci týchto pokynov na používanie je v Tabuľke 1 k dispozícii prehľad kompatibility balónika pre balónikové katétre Metacross RX. V sterilnom balení je zariadenie vybavené ochrannými materiálmi, ochrannou trubičkou balónika a mandrénom, ktorý sa má pred použitím vytiahnuť. Ochranná trubička balónika sa nachádza na balóniku, ktorý je poskladaný do nízkeho profilu a do lúmenu vodiaceho drôtu je vložený mandrén, ktorý má vysužovať katétra. Distálna špička katétra je kužeľová, aby sa uľahčilo zasúvanie katétra do stenotickej lézie alebo stentu. Ako doplnok k tomuto zariadeniu sa dodáva preplachovacia ihla na prepláchnutie a naplnenie lúmenu vodiaceho drôtu heparinizovaným fyziologickým roztokom.

<NÁZOV KAŽDEJ ČASTI>

Výrobok je sterilný a nehorľavý v nepoškodenom a neotvorenom blistrovom vrecku. Táto pomôcka bola sterilizovaná etylénoxidom.

Odporúčaný priemer vodiaceho drôtu:

Maximálny priemer: 0,89 mm (0,035")

Odporúčaný nafukovací tlak a maximálny nafukovací tlak

Nominálny tlak:

- Priemer balónika: menej než 6 mm: 10 atm
- Priemer balónika: 6 mm a viac: 8 atm

Menovitý tlak prasknutia:

- Priemer balónika: menej než 5 mm: 20 atm
- Priemer balónika: 5 mm: 18 atm
- Priemer balónika: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Priemer balónika: 9 mm a viac: 12 atm

[INDIKÁCIE]

PTA balónikový dilatčný katéter Metacross RX je určený na dilatáciu stenóz v iliakálnych, femorálnych, iliofemorálnych, popliteálnych, infrapopliteálnych a renálnych artériách na liečbu obštrukčných lézií natívnych alebo syntetických artériovenózných

dialyzačných fistúl. Táto pomôcka je indikovaná aj na postdilatáciu stentov v periférnej vaskulatúre.

Poznámka: Vykonal sa verifikačný test pre postdilatáciu stentu Metacross RX pomocou systému vaskulárneho stentu Complete® SE (Medtronic, Inc), systému vaskulárneho stentu S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) a systému samoexpandovateľného stentu Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[KONTRAINDIKÁCIE]

1. Pacienti, u ktorých sa rozvinula anastomotická stenóza do jedného mesiaca po vytvorení konštrukcie AV shuntu.
2. Pacienti s léziami v spojení s pseudoaneurizmou.
3. Tehotné pacientky.
4. Pacienti, ktorí netolerujú antiagregačnú alebo ani antikoagulačnú liečbu.

[UPOZORNENIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA]**[UPOZORNENIA]**

1. Táto pomôcka je určená len na jednorazové použitie. Nepoužívať opakovane. Neresterilizovať. Neaplikujte opakovane. Repasovanie môže narušiť sterilitu, biokompatibilitu a fyzikálnu integritu pomôcky.
2. Nepoužívajte, ak došlo k poškodeniu produktu alebo jednotkového balónika.
3. Balónik nenafukujte na viac než je priemer cievy, ktorá je proximálne a distálne k stenotickej lézii.
4. Balónik nenafukujte na tlak vyšší, než je menovitý tlak prasknutia.
5. Nepoužívajte tento katéter v centrálnom obehovom systéme.

[Preventívne opatrenia súvisiace s vykonávanými zákrokmi]

1. Opatrne a pomaly vybrať toto zariadenie z nosnej trubičky a odstrániť ochranné časti z tohto zariadenia. Pri nedbanlivom zaobchádzaní sa môže poškodiť balónik a/alebo driek katétra, čím sa znemožní nafúknutie a/alebo vyfúknutie balónika.
2. Balónik nafúknite kontrastným médiom rozpusteným vo fyziologickom roztoku v pomere 1:1 (ďalej len „nafukovacia kvapalina“). Pri nafukovaní sa nesmie použiť žiadne plyné médium. (Balónik sa môže nafukovať nepravidielne.)
3. Pred použitím vytlačte všetok vzduch z balónika a nafukovacieho lúmenu balónika a nahraďte ho nafukovacou kvapalinou. (V prípade neúplného vyprázdnenia vzduchu nemožno stav nafúknutia balónika skiaskopicky pozorovať.)
4. V prípade závažných stenotických lézií ako kalcifikované lézie, nie je možné cievu plne dilatovať. V takomto prípade neaplikujte tlak, ktorý prekračuje menovitý tlak prasknutia. (Balónik môže prasknúť a jeho zvyšky môžu zostať v tele.)
5. V prípade medicínskych pomôcok používaných spolu s týmto katétrom dodržiavajte pokyny na používanie týchto pomôcok. (Keď sa balónikový katéter používa na postdilatáciu stentu počas zákroku vloženia periférneho stentu, pozrite si pokyny na použitie od daného výrobcu.)
6. Pri zavádzaní balónika do stentu, vyťahovaní zo stentu alebo dilatácii vnútri stentu postupujte opatrne pri súčasnem skiaskopickom zobrazení. (Bez použitia skiaskopického zobrazenia sa tento katéter môže poškodiť alebo môže poraniť cievu.)
7. Tento PTA balónikový dilatčný katéter Metacross RX nezavádzajte nepresúvajte cez puzdro zavádzača s menšou veľkosťou, ako je uvedená na etikete. Pozrite si označenie produktu.

[Preventívne opatrenia počas používania]

1. Pomôcku použite okamžite po otvorení sterilného balenia.
2. Celú procedúru treba urobiť asepticky.
3. Tento katéter majú používať iba lekári so zručnosťami perkutánnej vaskulárnej terapie.
4. Vyberte katéter s náležitou veľkosťou balónika (priemer balónika, dĺžka balónika) podľa nasledujúcich kritérií (zákroku).
 - 1) Priemer nafúknutého balónika nesmie neprekročiť vnútorný priemer cievy, ktorá je proximálne a distálne k lézii.
 - 2) Dĺžka nafúknutého balónika nesmie prekročiť dĺžku ošetrovanej lézie. (Nevhodný výber katétra môže viesť k akútnej vaskulárnej oklúzii.)
5. Tento katéter používajte iba v prípade, ak je možné kedykoľvek vykonať núdzový chirurgický zákrok.
6. Lekár vykonávajúci zákrok musí určiť trvanie a počet nafúknutí balónika na základe svojich doterajších skúseností.

7. Počas zavedenia balónikového katétra v cieve treba infúzie podávať heparinizovaný fyziologický roztok na zabránenie koagulácii.
8. Nikdy nenafukujte balónik ani neposúvajte vodiaci drôt s ohnutým alebo zauzleným katéтром.
9. S katéтром v cieve manipulujte opatrne, umiestnenie a pohyb jeho špičky overujte skioskopicky alebo monitorovaním cez DSA (digitálnu subtrakčnú angiografiu).
10. Balónik vždy nafukujte za stáloho sledovania jeho stavu nafúknutia pomocou skioskopie. Balónik opatrne nafukujte a súčasne overujte jeho pohyb pomocou röntgenkontrastných značiek. V prípade zistenia akejkoľvek anomálie, ako napríklad mierného odporu, nepohyblivého katétra počas manipulácie alebo zauzlenej distálnej špičky vodiaceho drôtu, treba zákrok okamžite ukončiť a tento katéter treba pomaly vytiahnuť spolu s vodiacim drôtom.
11. Katéter nezávadzajte ani nevyťahujte rýchlo. (Rýchle postupovanie môže poškodiť tento katéter alebo poškodiť intímu cievy.)
12. Katéтром nehybte, keď je balónik nafúknutý. (Pohyb katétra s nafúknutým balónikom môže spôsobiť prasknutie balónika alebo zlomenie drieku katétra.)
13. Balónik v cieve nenafukujte ani nevyfukujte rýchlo. (Rýchle nafúknutie alebo vyfúknutie balónika môže poškodiť cievu alebo spôsobiť prasknutie balónika, pričom jeho zvyšky zostanú v tele.)
14. Na nafukovanie balónika nepoužívajte injektor (automatické injekčné zariadenie).
15. Na zabránenie akéhokoľvek poškodenia katétra chirurgickým nožom alebo nožnicami treba vykonať preventívne opatrenia.
16. Ak počas manipulácie s katéтром pocítite akúkoľvek anomáliu, ako napríklad silný odpor, zákrok okamžite ukončíte. Skontrolujte príčinu a vykonajte príslušné opatrenia. (Pokračovanie v operácii nadmernou silou môže spôsobiť poškodenie katétra alebo poškodenie steny cievy.)
17. Vždy venujte pozornosť stavu pacienta a monitorujte teplotu tela, pulz a dychanie. Ak sa zaznamená akákoľvek anomália, okamžite ukončíte používanie tohto katétra alebo vykonajte príslušné opatrenia podľa stavu pacienta na základe uváženia lekára.
18. Po použití katétra zlikvidujte ako medicínsky odpad podľa nemocničných postupov.
19. Nepoužívajte látky obsahujúce organické rozpúšťadlá ani olejnaté kontrastné médiá. Kontakt s týmito látkami môže viesť k poškodeniu katétra.
20. Počas manipulácie s týmto katéтром katéter nestáčajte ani ním netočte.
21. Počas zavádzania tejto pomôcky do cievy alebo počas vyberania pomôcky z cievy zabezpečte, aby bol balónik úplne vyfúknutý. (Pomôcka s väčším alebo dlhším balónikom si vyžaduje dlhší čas na vyfúknutie).
22. Ak počas vyťahovania tejto pomôcky po vykonaní zákroku pocítite odpor, odporúča sa vytiahnuť celý systém spolu so zavádzacím / vodiacim puzdom.
23. Vždy používajte katéter spolu s vodiacim drôtom zavedeným v lúmene pre vodiaci drôt. Katéter zasúvajte po vodiacom drôte zavedenom do lúmenu vodiaceho drôtu.

[Operačné pokyny]

Medzi materiál potrebný pre vykonanie PTA s PTA balónikovým dilatáčnym katéтром Metacross RX patria:

- vodiaci drôt(-y) s náležitým priemerom a dĺžkou,
- vhodná súprava zavádzacia/vodiaceho puzdra a dilatátora,
- ampulka s kontrastným médiom,
- ampulka so sterilným fyziologickým roztokom,
- nafukovacie zariadenie s manometrom,
- striekačka s konektorom luer-lock,
- trojcestný uzatvárací kohút.

[Spôsob operácie alebo pokyny na použitie]

1. Výber katétra
Pred použitím overte pomocou skioskopie vnútorný priemer cievy proximálne a distálne k stenotickej lézii a vyberte katéter s

príslušnou veľkosťou balónika. Ak sú vhodné pre overený priemer dve rôzne veľkosti, vyberte menšiu veľkosť.

2. Príprava

- 1) Po aseptickom vybratí katétra z obalu snímte z katétra ochranné materiály.
- 2) Nahraďte vzduch v balóniku a nafukovacím lúmene balónika za nafukovaciu kvapalinu podľa nasledujúcich postupov.
 - a) Nasadte nafukovacie zariadenie (nezahrnuté v tejto súprave) naplnené nafukovacou kvapalinou na prípojku na nafúknutie balónika.
 - b) Po aplikovaní podtlaku približne 10 sekúnd na nafukovacím zariadení nasmerujte špičku drieku katétra smerom nadol a pomaly uvoľňujte podtlak, aby mohla kvapalina naplniť balónik a nafukovací lúmen balónika a vytlačiť vzduch.
 - c) Ak sa v balóniku a nafukovacím lúmene balónika nachádza nejaký vzduch, zopakujte postup b), až kým sa vzduch úplne nevytláči.
 - d) Odpojte nafukovacie zariadenie od nafukovacej prípojky balónika a odstráňte vzduch z valca nafukovacieho zariadenia.
 - e) Znovu pripojte nafukovacie zariadenie k prípojke na nafúknutie balónika a udržiavajte podtlak. Overte, či sa do striekačky nevracia už žiadny vzduch.
- 3) Lúmen vodiaceho drôtu prepláchnite heparinizovaným fyziologickým roztokom pomocou preplachovacej ihly a lúmen naplňte heparinizovaným fyziologickým roztokom.
- 4) Ponorte celý PTA balónikový dilatáčny katéter Metacross RX do fyziologického roztoku.
3. Zavedenie a nafúknutie balónikového katétra
Pred použitím skontrolujte, či je tento katéter kompatibilný s vodiacim katéтром (nie je súčasťou tejto súpravy), puzdom zavádzacia (nie je súčasťou tejto súpravy) a vodiacim drôtom (nie je súčasťou tejto súpravy) podľa nasledujúcej tabuľky.

Katalógové číslo	Priemer balónika (mm)	Kompatibilné puzdro (Fr/mm)	Maximálny priemer pre vodiaci drôt (palc/mm)
BD-L30020MR	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 inch (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Pri použití katétra vloženého v puzdre zavádzacia alebo vodiacom katéri

- 1) Pri použití tohto katétra vo vodiacom katéri uvoľnite hemostatický ventil, avšak nechajte ho dostatočne tesný, aby sa zabránilo úniku krvi.
- 2) Postupne po vodiacom drôte zavádzajte katéter s úplne vyfúknutým balónikom do puzdra zavádzacia alebo vodiaceho katétra a posúvajte ho k distálnej periférii lézie. Pri skioskopickom zobrazení katéter pomaly posúvajte, aby sa röntgenkontrastná značka v balóniku dostala na cieľové miesto.
- 3) Pri skioskopickom zobrazení overte polohu röntgenkontrastnej značky v balóniku a určite miesto dilatácie.
- 4) Pripojte nafukovacie zariadenie riadne k prípojke na nafukovanie balónika.
- 5) Postupne nafukujte balónik na cieľový priemer, pričom overujte tlak nafukovania, a dilatujte stenotickú léziu (pri priemeroch nafúknutého balónika si pozrite prehľad kompatibilitivity v Tabuľke 1 na konci týchto pokynov na používanie).
4. Vybratie katétra
1) Po úplnom vypustení balónika aplikovaním podtlaku odstráňte katéter.
5. Opätovné zavedenie katétra
1) Ak sa vyžaduje opätovné zavedenie vybratého katétra s vyfúknutým balónikom, zabezpečte, aby bol balónik úplne vyfúknutý a poskladaný skôr, než ho opätovne zavediete do cievy pacienta. Pri opätovnom zavádzaní použite katéter podľa pokynov v časti „Zavedenie a nafúknutie balónikového katétra“ tohto dokumentu.
- 2) Ak pri opätovnom zasúvaní katétra pocítite odpor, prestaňte so zasúvaním a opatrne katéter vyberte von z cievy pacienta.

Pripravte si na použitie nový katéter Metacross RX podľa postupov uvedených vyššie v tejto časti pokynov na používanie.

Všetky názvy značiek sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti TERUMO CORPORATION a ich príslušných vlastníkov.

[Komplikácie]

Zlyhanie pomôcky:

- prasknutie balónika,
- nedostatočné nafúknutie, vyfúknutie balónika,
- zlomenie balónika a/alebo drieku katétra,
- ťažkosti pri vyberaní pomôcky,
- únik nafukovacej kvapaliny.

Nežiaduce udalosti:

- lokálne alebo systémové infekcie,
- lokálne vnútorné krvácanie alebo hematóm,
- prasknutie intímy cievy,
- vaskulárna disekcia,
- vaskulárna perforácia,
- vaskulárna ruptúra,
- aneurizma,
- arytmia,
- akútna vaskulárna oklúzia,
- venózný tromboembolizmus,
- vazospazmus,
- vytvorenie pseudoaneurizmu,
- arteriovenózna fistula,
- krvácanie s nutnosťou transfúzie,
- alergická reakcia na kontrastné médium / zlyhanie obličiek,
- bolesť alebo úpenlivá bolesť,
- smrť,
- embólia,
- endokarditída,
- horúčka,
- hypertenzia / hypotenzia,
- zápal,
- infarkt myokardu,
- sepsa,
- šok,
- náhla mozgová príhoda iktus,
- tranzitórny ischemický atak.

[Skladovanie a dátum expirácie]

1. Uchovávať na chladom, suchom a tmavom mieste. Vyhnúť sa vystaveniu vode, priamemu slnečnému žiareniu.
2. Dátum expirácie je uvedený na škatuli. Nepoužívajte po dátume expirácie.

[Balenie]

1 súprava/krabica

[Meno a adresa výrobcu alebo obchodného zástupcu]



Výrobca: KANEKA CORPORATION

Adresa: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel. č.: (+81)-(0) 6-6226-5256
Fax: (+81)-(0) 6-6226-5143



Spĺnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresa: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tel. č.: (+32)-(0) 14-256-297
Fax: (+32)-(0) 14-256-298

Distribútor v EÚ: TERUMO EUROPE N.V.

Adresa: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgicko
Tel. č.: (+32)-(0) 16 381 211
Fax: (+32)-(0) 16 400 249

Tabuľka 1. Balónik Metacross RX Prehľad kompatibility

Tlak (atm)	Priemer balónika (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40*	7.49*	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Nominálny tlak


** Menovitý tlak prasknutia

[ÜRÜN TANIMI]

Metacross RX, periferik endikasyonlar için bir Perkütan Translüminal Anjiyoplasti (PTA) Balon Dilatasyon Kateteridir. Metacross RX hızlı değişim (RX) tipindedir ve uyumlu kılavuz telin maksimum çapı 0.035 inç (0,89 mm) şeklindedir.

Bu kateterin distal kısmı bir balon ve iki lümenli shaftlardan (koaksiyal) oluşur. Dış lümen balonun salın solüsyonla seyreltilmiş kontrast maddeyle şişirilmesi ve indirilmesi için kullanılır. İç lümen (kılavuz tel lümeni; distal uçtan kılavuz tel portuna) kateteri dilate edilecek stenotik lezyon veya stent içinden ilerletmeyi kolaylaştırmak üzere uyumlu bir kılavuz tel yerleştirmek içindir. Proksimal kısım bir şişirme/indirme cihazı bağlamak için tek luer port göbekli tek lümenli bir shafttır. Balon içinde balonun çalışma uzunluğuna işaret eden iki radyopak işaret doktorun floroskopi altında balonu hedeflenen lezyon içinde uygun şekilde konumlandırmasına rehberlik yapmak üzere yerleştirilmiştir. Metacross RX önerilen şişirme basınçlarında (Nominal basınç) çap ve uzunluğa göre çeşitli balon büyüklüklerinde sağlanmaktadır. Şişirme sonrasında balon çapı şişirme basıncına göre değişir. Metacross RX balon esneklik tablosu bu Kullanma Talimatı sonunda Tablo 1 içinde verilmiştir. Sterilizasyon paketinde cihaz koruyucu materyal, bir balon koruma tüpü ve bir stile ile donatılmıştır ve bunların kullanım öncesinde çıkarılması gerekir. Balon koruma tüpü balonun üzerine alçak bir profile katlanmış olarak yerleştirilirken kateter shaftının çökmesini önlemek için stile kılavuz tel içine yerleştirilir. Kateterin distal ucu kateterin stenotik lezyon veya stent içine ilerlemesini kolaylaştırmak üzere koniktir.

Sıvı geçirme iğnesi bu cihazın bir aksesuarı olarak kılavuz tel lümeninden heparinize salın geçirmek ve doldurmak için kullanılır.
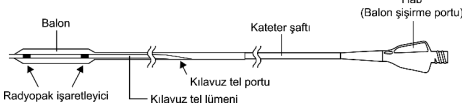
<HER BÖLÜMÜN İSMİ>

Hasar görmemiş ve açılmamış blister poşette sterilidir ve pirojenik değildir. Bu ürün etilen oksitle sterilize edilmiştir.

Önerilen kılavuz tel çapı:

Maksimum çap: 0,035 inç (0,89 mm)

Önerilen şişirme basıncı ve maksimum şişirme basıncı**Nominal basınç:**

- Balon çapı: 6 mm'den az:	10 atm
- Balon çapı: 6 mm ve üstü :	8 atm

Anlık patlama basıncı:

- Balon çapı: 5 mm'den az:	20 atm
- Balon çapı: 5 mm:	18 atm
- Balon çapı: 6 mm, 7 mm, 8 mm:	14 atm
- Balon çapı: 9 mm ve üstü:	12 atm

[ENDİKASYONLAR]

Metacross RX PTA balon dilatasyon kateterinin iliyak, femoral, iliyofemoral, popliteal, infrapopliteal ve renal arterlerde stenoz dilatasyonunda ve doğal veya sentetik arteriyovenöz diyaliz fistüllerinin obstrüktif lezyonlarının tedavisinde kullanılması amaçlanmıştır. Bu cihaz ayrıca periferik vasküler sistemde stent post dilatasyonu için endikedir.

Not: Metacross RX post dilatasyon doğrulama testi Complete® SE Vasküler Stent Sistemi (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® Vasküler Stent Sistemi (Cordis Corporation) ve Epic™ Vasküler Kendi Kendine Genişleyen Stent Sistemi (Boston Scientific Corporation) kullanılarak yapılmıştır.

[KONTRENDİKASYONLAR]

1. AV şant konstrüksiyonu sonrasında bir ay içinde anastomotik stenoz gelişmiş hastalar.
2. Bir psödoanevrizma ile iletişim halinde lezyonları bulunan hastalar.
3. Hamile hastalar.
4. Antitrombotik tedavi veya antikoagulan tedaviyi tolere edemeyen hastalar.

[UYARILAR VE ÖNLEMLER]**[Uyarılar]**

1. Bu ürün sadece tek kullanımlıktır. Tekrar kullanmayın. Tekrar sterilize etmeyin. Tekrar işleme tabi tutmayın. Tekrar işleme tabi tutmak bu ürünün sterilliğini, biyolojik uyumluluğunu ve fiziksel bütünlüğünü tehlikeye altına bırakabilir.
2. Ürün veya ürün ambalajı hasarlıysa kullanmayın.
3. Stenotik lezyona proksimal ve distal kan damarının çapını açacak şekilde balonu şişirmeyin.
4. Balonu anlık patlama basıncının üzerinde bir basınca şişirmeyin.
5. Bu kateteri merkezi dolaşım sisteminde kullanmayın.

[İşlemlerle ilgili önlemler]

1. Cihazı taşıyıcı tüp dışına dikkatli ve yavaş bir şekilde çıkarın ve cihazın koruyucu kısımlarını tekrar yerleştirin. Dikkatsiz muamele cihazın kateter shaftı ve/veya balonuna zarar verebilir ve balon şişmesi ve/veya inmesi bozabilir.
2. Balonu salinle 1:1 oranında seyreltilmiş kontrast maddeyle (bundan sonra, "şişirme sıvısı") şişirin. Şişirme için hava gibi herhangi bir gazlı ortam kullanılmamalıdır. (Balon düzensiz olarak şişebilir.)
3. Kullanım öncesinde balon ve balon şişirme lümeni içindeki tüm havayı dışarı atın ve yerine şişirme sıvısı koyun. (Tam olmayan hava çıkarma durumunda balon şişme durumu floroskopi altında gözlemlenemez.)
4. Kalsifik lezyonlar gibi ciddi stenotik lezyonlar durumunda kan damarı tam olarak dilate edilemez. Böyle bir durumda anlık patlama basıncını aşan bir basınç uygulamayın. (Balon patlayabilir ve kalıntılar vücut içinde kalabilir.)
5. Bu kateterle ilişkili olarak kullanılan tıbbi cihazlar için, bu cihazların kullanma talimatını izleyin. (Balon kateteri periferik stent yerleştirme işlemi sırasında stentin post dilatasyonu için kullanıldığında üreticinin kullanma talimatına başvurun.)
6. Stent içine yerleştirme, stentten geri çekme veya balonun stent içi dilatasyonu için floroskopi altında dikkatle ilerleyin. (Bu işlemi floroskopi olmadan yapmak katetere zarar verebilir veya kan damarına hasara yol açabilir.)
7. Metacross RX PTA balon dilatasyon kateterini etikette belirtilenden daha küçük bir introducer kılıf içinden geçirmeye kalkışmayın. Ürün etiketine başvurun.

[Kullanım sırasında önlemler]

1. Ürünü steril ambalajı açıldıktan hemen sonra kullanın.
2. Tüm işlem aseptik olarak yapılmalıdır.
3. Bu kateter sadece perkütan vasküler tedavi konusunda ehl doktorlarca kullanılmalıdır.
4. Uygun balon büyüklüğü (balon çapı, balon uzunluğu) değerine sahip kateteri şu kriterlere (prosedürlere) göre seçin.
 - 1) Şişmiş balonun çapı, lezyonun proksimal ve distalindeki iç damar çapını geçmemelidir.
 - 2) Şişirilen balonun uzunluğu, tedavi edilecek lezyonun uzunluğunu geçmemelidir. (Uygun olmayan kateter seçimi akut vasküler oklüzyona neden olabilir.)
5. Bu kateteri ancak her an acil cerrahi müdahale yapılabilecek durumlarda kullanın.
6. İşlemi yöneten doktor geçmiş deneyimleri uyarınca, balon şişirmelerin süresi ve sayısını belirlemelidir.
7. Bu balon kateter kan damarına yerleştirilmiş durumdayken antikoagülasyon için heparinize salın infüzyonu yapılmalıdır.
8. Kateter bükülü veya eğikken asla balonu şişirmeyin veya kılavuz teli ilerletmeyin.

9. Kateter ucunun yeri ve hareketini floroskopi veya DSA (Dijital Subtraksiyon Anjiyografi) ile izleyerek doğrulama yoluyla kateteri kan damarı içinde dikkatle hareket ettirin.
10. Balonun şişme durumunu daima floroskopi altında izleyerek şişirin. Balonun hareketini radyopak işaretlerle doğrularken dikkatle şişirin. Hafif direnç, manipülasyonu sırasında kateterin hareket etmemesi veya kilavuz tel distal ucunun bükülmesi gibi herhangi bir anormallik saptanırsa işlem hemen sonlandırılmalı ve bu kateter, kilavuz tel ile birlikte yavaşça çıkarılmalıdır.
11. Kateteri hızla yerleştirmeyin veya çıkarmayın. (Hızlı çalışmak bu katetere zarar verebilir veya vasküler intımıyı yaralayabilir.)
12. Kateteri balonu (Kateteri balonu (Kateteri balonu şişmiş haldeyken hareket ettirmek balonun patlamasına veya kateter şaftının kırılmasına neden olabilir.)
13. Balonu kan damarı içinde hızla şişirmeyin veya indirmeyin. (Hızla şişirme veya indirme kan damarına zarar verebilir veya balonun patlayıp vücut içinde kalıntılarının kalmasına neden olabilir.)
14. Balonu şişirmek için bir enjektör (otomatik enjeksiyon cihazı) kullanmayın.
15. Kateterin bir cerrahi bıçak veya makasla herhangi bir zarar görmesini önlemek için önlemler alınmalıdır.
16. Kateter manipülasyonu sırasında kuvvetli direnç gibi herhangi bir anormallik saptanırsa işlem hemen sonlandırılmalıdır. Nedeni belirlenmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. (Operasyona aşırı güçle devam etmek kateter hasarı veya vasküler duvarın zarar görmesine yol açabilir.)
17. Daima hastanın durumuna dikkat edin ve ateş, nabız ve solunumunu izleyin. Herhangi bir anormallik bulunduğu anda kateterin kullanımını hemen sonlandırın veya doktorun itibasına göre hastanın durumu için uygun önlemleri alın.
18. Kullanımdan sonra kateteri hastane kurallarına göre tıbbi atık çöplüne atın.
19. Organik solventler veya oleajinöz kontrast madde içeren ajanlar kullanmayın. Bu ajanlarla temas etmek, kateter hasarına yol açabilir.
20. Bu kateterin manipülasyonu sırasında kateteri bükmemeyi veya çevirmeyin.
21. Bu kateteri kan damarına yerleştirirken veya bu kateteri kan damarından çıkarırken balonun tamamen imiş olduğundan emin olun. (Daha büyük veya daha uzun balonlu bir cihaz, daha uzun bir indirme süresi gerektirir.)
22. İşlemden sonra bu cihaz geri çekilirken direnç hissedilirse, tüm sistemi introduser / kilavuz kılıfı birlikte geri çekmek önerilir.
23. Kateteri daima kilavuz tel lümenine yerleştirilmiş bir kilavuz telle kullanın.

[Kullanım talimatı]

Metacross RX PTA balon dilatasyon kateteri ile PTA için tipik olarak gereken materyaller şunlardır:

- Uygun çap ve uzunlukta kilavuz tel(ler)
- Uygun introduser/kilavuz kılıf ve dilatör seti
- Kontrast madde şişesi
- Steril salin şişesi
- Manometreli şişirme cihazı
- Luer-lock şırınga
- Üç yollu musluk

[Kullanım yöntemi veya kullanma talimatı]

1. Kateterin seçilmesi
Kullanım öncesinde stenotik lezyonun proksimal ve distal kan damarı iç çapını floroskopi altında doğrulayın ve uygun balon büyüklüğüne sahip kateteri seçin. Seçilen çap için iki büyüklük geçerliyse daha küçük olan boyu seçin.
2. Hazırlıklar
 - 1) Kateteri ambalajından aseptik olarak çıkardıktan sonra katetere koruyucu materyalleri çıkarın.
 - 2) Balon ve balon şişirme lümeni içindeki hava yerine aşağıdaki işlemlere göre şişirme sıvısını koyun.
 - a) Şişirme sıvısıyla dolu şişirme cihazını (bu sette bulunmamaktadır) balon şişirme portuna takın.
 - b) Şişirme cihazına yaklaşık 10 saniye negatif basınç uyguladıktan sonra kateter şaftı ucunu aşağı doğru yerleştirin.

- ve sıvının balon ve balon şişirme lümenine girip havayı dışarı atmasını sağlamak için negatif basıncı yavaşça serbest bırakın.
- c) Balon ve balon şişirme lümeninde herhangi bir hava bulunduğunda b) işlemini hava tamamen dışarı atılınca kadar tekrarlayın.
- d) Şişirme cihazını balon şişirme portundan ayırın ve şişirme cihazı silindirden havayı çıkarın.
- e) Şişirme cihazını tekrar balon şişirme portuna takın ve negatif basıncı sürdürün. Artık havanın şırıngaya dönmeye başladığını doğrulayın.
- 3) Sıvı geçirme iğnesini kullanarak kilavuz tel lümeninden heparinize salın geçirin ve lümeni heparinize salınle doldurun.
- 4) Tüm Metacross RX PTA balon dilatasyon kateterini haline batırın.
3. Balon kateterinin yerleştirilmesi ve şişirilmesi
Kullanım öncesinde lümen kateterin kilavuz kateter (bu sette bulunmamaktadır), introduser kılıf (bu sette bulunmamaktadır) ve kilavuz telle (bu sette bulunmamaktadır) uyumlu olduğunu aşağıdaki tabloya göre kontrol edin.

Ürün kodu	Balon çapı (mm)	Uyumlu kılıf (Fr/mm)	Kilavuz tel için maksimum çap (inç/mm)
BD-L30020MR ~ BD-L70200ER	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 inç (0,89 mm)
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Kateteri introduser kılıf veya kilavuz katetere yerleştirilmiş olarak kullanırken

- 1) Kateteri kilavuz kateter içinde kullanırken, hemostatik valfi kan sızıntısını önlemeye yetecek kadar sıkı tutarak gevsetin.
- 2) Kateteri balon tamamen imiş olarak introduser kılıf veya kilavuz kateter içine kilavuz tel üzerinden kademeli olarak yerleştirin ve lezyonun distal periferine kadar ilerletin. Floroskopi altında kateteri, balondaki radyopak işaretleyicisinin hedef bölgeye erişmesini sağlayacak şekilde ilerletin.
- 3) Floroskopi altında balondaki radyopak işaretleyicinin konumunu doğrulayın ve dilatasyon bölgesini belirleyin.
- 4) Şişirme cihazını balon şişirme portuna sıkıca takın.
- 5) Şişirme basıncını doğrularak balonu hedef çapa ulaştıracaya kadar kademeli olarak şişirin ve stenotik lezyonu dilate edin (işirilmiş balon çapları için bu Kullanma Talimatı sonunda Tablo 1'de sağlanan balon esnekliği tablosuna başvurun).
4. Kateterin çıkarılması
 - 1) Balonu tamamen indirmek için negatif basınç uyguladıktan sonra kateteri çıkarın.
5. Kateterin tekrar insersiyonu
 - 1) Çıkarılmış kateterin indirilmiş balonla tekrar insersiyonu gerekiyorsa hastanın kan damarına tekrar yerleştirmeden önce balonun tamamen imiş ve katlanmış durumda olduğundan emin olun. Tekrar insersiyon durumunda kateteri buradaki "Balon kateterinin insersiyonu ve şişirilmesi" kısmına göre kullanın.
 - 2) Kateterin tekrar insersiyonu sırasında herhangi bir dirençle karşılaşılırsa ilerletmeyi durdurun ve hastanın kan damarından dikkatle çıkarın. Kullanma Talimatında bu bölümde yukarıda sağlanan işlemler uyarınca yeni bir Metacross RX hazırlayın.

[Komplikasyonlar]

Cihaz Arızaları:

- Balon rüptürü
- Balonun yetersiz şişirilmesi/indirilmesi
- Balonun ve/veya kateter şaftının kopması
- Cihazı çıkarmakta zorluk
- Şişirme sıvısının sızması

Advers Olaylar:

- Lokal veya sistemik enfeksiyonlar
- Lokal iç kanama veya hematoma
- İntima rüptürü
- Vasküler diseksiyon

- Vasküler perforasyon
- Vasküler rüptür
- Anevrizma
- Aritmi
- Akut vasküler oklüzyon
- Venöz tromboemboli
- Vazospazm
- Psödoanevrizma oluşumu
- Arteriyovenöz fistül
- Transfüzyon gerektiren kanama
- Kontrast maddeye alerjik cevap / böbrek yetmezliği
- Sızı veya basınç tarzında ağrı
- Ölümler
- Emboli
- Endokardit
- Ateş
- Hipertansiyon/Hipotansiyon
- Enflamasyon
- Miyokard enfarktüsü
- Sepsis
- Şok
- İnme
- Geçici İskemik Atak

[Saklama ve son kullanma tarihi]

1. Serin, kuru, karanlık bir yerde saklayın. Suya ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının.
2. Son kullanma tarihi kutuda belirtilmiştir. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

[Paket]

1 set/kutu

[Üretici veya temsilcinin adı ve adresi]



Üretici firma: KANEKA CORPORATION

Adres: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,

OSAKA, 530-8288 JAPAN

TEL No.: (+81)-(0) 6-6226-5256

FAKS No.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Avrupa Topluluğunda Yetkili Temsilci:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adres: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

TEL No.: (+32)-(0) 14-256-297

FAKS No.: (+32)-(0) 14-256-298

AB Distribütörü: TERUMO EUROPE N.V.

Adres: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belçika

TEL No.: (+32)-(0) 16 381 211

FAKS No.: (+32)-(0) 16 400 249

Yazılı olan tüm şirket adları ve diğer adlar, TERUMO CORPORATION ve ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Tablo 1. Metacross RX Balon Esnekliđi Tablosu

Basınç (atm)	Balon Çapı (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40*	7.49*	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Nominal basınç


** Anma Patlama Basıncı

[TOOTE KIRJELDUS]

Metacross RX on perkutaanse transluminaalse angioplastika (PTA) balloondilatatsioonikateeter kasutamiseks perifeersetes veresoontes. Metacross RX on kiirvahetustüüpi (RX) kateeter, mille ühilduva juhtetraadi maksimumdiameeter on 0,035 tolli (0,89 mm). Kateetri distaalosa koosneb balloonist ja kahekordse valendikuga (koaksiaalsest) kehaosast. Välimist valendikku kasutatakse ballooni täitmiseks soolalahusega lahjendatud kontrastainega ja selle lahuse eemaldamiseks. Sisemine valendik (juhtetraadi valendik; ulatub distaalsatsast kuni juhtetraadi pordini) on ette nähtud sobiva juhtetraadi sisestamiseks, et lihtsustada kateetri viimist läbi stenoosi või laiendatava stendi. Kateetri proksimaalosa valendik on ühekordne ja see on tühjendamise/täitmisseadme ühendamiseks varustatud ühe haardlukustusega (Luer-) pordi jaoturiga. Ballooni sisse on paigutatud kaks ballooni tööpikkust näitavat röntgenkontrastset märgist, mis abistavad arsti ballooni õigel paigutamisel fluoroskoopial kontrolli all laiendatava stenoosi sisse. Metacross RX on saadaval erineva diameetri ja pikkusega balloonisuurustega (soovitava täitmisrõhu ehk nominaalrõhu tingimustes). Täitmisel ballooni diameeter varieerub lähtuvalt täitmisrõhust. Metacross RX kateetri ballooneid pausimismärgend on esitatud käesoleva kasutusjuhendi lõpus tabelis 1. Steriliseerimispakendis on seade varustatud enne kasutamist eemaldatavate kaitsematerjalidega – ballooni kaitsetoru ja stiletiga. Ballooni kaitsetoru pannakse madala profiiliga volditud ballooni peale ja stilet sisestatakse juhtetraadi valendikku kateetri kehaosa kokkuvajumise ennetamiseks. Kateetri distaalots on kooniliselt ehitusega, et lihtsustada kateetri sisestamist stenoosi või stenti. Selle seadme lisatarvikuna tarnitakse loputusnõel juhtetraadi valendiku loputamiseks ja täitmiseks hepariniseeritud füsioloogilise lahusega.

Märkus. Metacross RX stendi järeldilateerimise verifitseerimisel kasutati Complete® SE Vascular Stent System veresoonte stentimissüsteemi (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System veresoonte stentimissüsteemi (Cordis Corporation) ja Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System veresoonte iselaienevat stentimissüsteemi (Boston Scientific Corporation).

<IGA OSA NIMI>

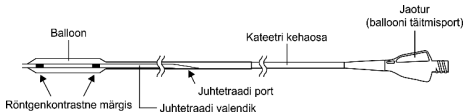

Steriilne ja mittepürogeenne kahjustamata ja avamata blistertaskus. See seade on steriliseeritud etüleenoksiidiga.

Soovitav juhtetraadi diameeter

Maksimaalne diameeter: 0,035" (0,89 mm)

Soovitav täiterõhk ja maksimaalne täiterõhk

Nominaalrõhk:

- Ballooni diameeter: väiksem kui 6 mm: 10 atm
- Ballooni diameeter: 6 mm ja suurem: 8 atm

Nominaalne purunemisrõhk:

- Ballooni diameeter: väiksem kui 5 mm: 20 atm
- Ballooni diameeter: 5 mm: 18 atm
- Ballooni diameeter: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Ballooni diameeter: 9 mm ja suurem: 12 atm

[NÄIDUSTUSED]

Metacross RX PTA balloondilatatsioonikateeter on ette nähtud niudearterite, reiearterite, iliofemoraalararterite, õndlaarterite, infrapopliteaalararterite ja neuruarterite stenooside laiendamiseks ja hemodialüüsi natiivsoontest või sünteetilise arteriovenoosse fistuli obstruktiivsete muutuste raviks. See seade on ette nähtud ka perifeerse veresoone stendi järellaiendamiseks.

Märkus. Metacross RX stendi järeldilateerimise verifitseerimisel kasutati Complete® SE Vascular Stent System veresoonte stentimissüsteemi (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System veresoonte stentimissüsteemi (Cordis Corporation) ja Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System veresoonte iselaienevat stentimissüsteemi (Boston Scientific Corporation).

[VASTUNÄIDUSTUSED]

1. Patsiendid, kellel on tekkinud anastomoosipiirkonna stenoos ühe kuu jooksul pärast arteriovenoosse šundi loomist.
2. Patsiendid, kellel on pseudoaneürüsmiga ühenduses olevad kahjustused.
3. Rasedad patsiendid.
4. Patsiendid, kes ei talu antiagregantide või antikoagulantide.

[Hoiatused JA ETTEVAATUSABINÕUD]

[Hoiatused]

1. See seade on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Ärge kasutage korduvalt. Ärge steriliseerige. Ärge puhastage ega steriliseerige toodet uuesti. See võib rikuda seadme steriilsust, bioloogilist sobivust ja ehituslikku terviklikkust.
2. Ärge kasutage, kui toode või toote pakend on kahjustatud.
3. Ärge täitke ballooni rohkem kui stenoosist proksimaalsele ja distaalsele jääva veresoone diameeter.
4. Ärge täitke ballooni rõhuga, mis ületab nominaalse lõhkemisrõhu.
5. Ärge kasutage seda kateetrit vereringesüsteemi tsentraalses osas.

[Protseduuriga seotud ettevaatusabinõud]

1. Võtke seade ettevaatlikult ja aeglaselt transporditorust välja ja võtke seadme kaitseid. Hooletu käsitsemine võib kahjustada seadme ballooni ja/või kateetri kehaosa ning takistada ballooni täitmist ja/või tühjendamist.
2. Täitke balloon füsioloogilise lahusega suhtes 1:1 lahjendatud kontrastainega (siin ja edaspidi „täitevedelik“). Täitmiseks ei tohi kasutada gaase, näiteks õhku. (Ballooni täitumine võib olla ebaühtlane.)
3. Enne kasutamist väljutage balloonnist ja ballooni täitevalendikust kogu õhk ja asendage täitevedelikuga. (Kui õhku ei õnnestu täielikult eemaldada, ei ole fluoroskoopial võimalik ballooni täitumist jälgida.)
4. Raskete stenooside, nt kaltsifitseerunud stenooside korral ei saa veresoont täielikult laiendada. Sellistel juhtudel ärge kasutage nominaalset purunemisrõhku ületavat rõhku. (Balloon võib puruneda ja selle tükid võivad jääda organismi.)
5. Kateetrit koos kasutatavate meditsiiniseadmetega puhul järgige nende seadmete kasutusjuhiseid. (Kui balloonkateetrit kasutatakse perifeerse veresoone stendi paigaldamiseks ajal järellaiendamiseks, lugege selle kohta tootja kasutusjuhiseid.)
6. Ballooni stenti sisestamisel, stendist eemaldamisel või stendi laiendamisel toimige ettevaatlikult fluoroskoopial kontrolli all. (Nende toimingute tegemine fluoroskoopial kontrollita võib kahjustada kateetrit või vigastada veresoont.)
7. Ärge proovige viia Metacross RX PTA balloondilatatsioonikateetrit läbi väiksema suurusega sisestushülgi, kui silidil näidatud. Vaadake toote etiketti.

[Kasutamisaegsed ettevaatusabinõud]

1. Kasutage seadet kohe pärast steriilse pakendi avamist.
2. Kogu protseduuri tuleb teha aseptiliselt.
3. Kateetrit tohib kasutada ainult perkutaanse vaskulaarse teraapia oskustega arstid.
4. Valige sobiva balloonisuurusega (ballooni diameetri, ballooni pikkusega) kateeter, järgides allpool toodud (protseduuri) kriteeriume.
 - 1) Täidetud ballooni diameeter ei tohi ületada kahjustusest proksimaalsele ja distaalsele jääva veresoone sisidiameetrit.
 - 2) Täidetud ballooni pikkus ei tohi ületada ravitava stenoosi pikkust. (Kateetri ebaõige valik võib põhjustada ägedat veresoonesulgust.)

- Kasutage kateetrit ainult siis, kui on olemas erakorralise operatsiooni tegemise võimalus.
- Protseduuri eest vastutav arst otsustab oma varasema kogemuse alusel ballooni täitmise kestuse ja täitmiskordade arvu.
- Balloonkateetri veresoonde sisestamise ajal peab antikoagulatsiooni infundeerima hepariniseeritud füsioloogilist lahust.
- Ärge mitte kunagi täitke ballooni ega lükake juhtetraati edasi, kui kateeter on paindunud või niverdunud.
- Liigutage kateetrit veresoones ettevaatlikult, kontrollides selle otsa asukohta ja liikumist fluoroskoopia või DSA (digitaalne subtraaktsioonangiograafia) monitoril.
- Ballooni täitmise ajal kontrollige alati selle täitumist fluoroskoopia abil. Täitke ballooni ettevaatlikult, kontrollides röntgenkontrastsete määrgiste abil selle liikumist. Kui esineb kõrvalekalte normist, näiteks vähimigi resistentsus, kateetri muutmine manipuleerimise ajal liikumatuks või juhtetraadi distaalotsa niverdumine, tuleb protseduur kohe katkestada ja kateeter koos juhtetraadiga eemaldada.
- Ärge sisestage ega eemaldage kateetrit kiiresti. (Kiire liigutamine võib kahjustada kateetrit või vigastada veresoone sisekasta.)
- Ärge liigutage kateetrit, kui balloon on täidetud. (Kateetri eemaldamine täidetud ballooni eest võib põhjustada ballooni lõhkemise või kateetri kehaosa purunemise.)
- Ärge täitke ega tühjendage ballooni veresoones kiiresti. (Kiire täitmine või tühjendamine võib kahjustada veresoont või põhjustada ballooni purunemist, mille tagajärjel jäävad ballooni osad kehasse.)
- Ärge kasutage ballooni täitmiseks automaatsüstalt.
- Kateetri kahjustamise vältimiseks kirurgilise noa või käärdega tuleb olla ettevaatlik.
- Kui tunnete kateetri käsitsemise ajal mis tahes häiret, nagu tugevat takistust, tuleb protseduur kohe katkestada. Välja tuleb selgitada selle häire põhjus ja rakendada asjakohaseid abinõusid. (Protseduuri jätkamine ülemäärase jõu kasutamise eest võib kahjustada kateetrit või vigastada veresoone seinu.)
- Pöörake alati tähelepanu patsiendi seisundile ja jälgige kehatemperatuuri, pulssi ja hingamist. Kõrvalekallete esinemisel katkestage kohe kateetri kasutamine või rakendage arsti otsuse kohaselt patsiendi seisundile vastavaid abinõusid.
- Pärast kasutamist visake kateeter meditsiiniliste jäätmete hulka, järgides haigla protseduure.
- Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid ega õlipõhiseid kontrastaineid. Kokkupuude nende ainetega võib kateetrit kahjustada.
- Kateetri käsitsemise ajal ärge painutage ega pöörake kateetrit.
- Seadme veresoonde sisestamisel või veresoonest eemaldamisel veenduge, et balloon on täielikult tühjendatud. (Suurema ja pikema ballooni seadme korral on vajalik pikem tühjendamisaeg.)
- Kui protseduuri järel on tunda seadme eemaldamise ajal takistust, soovitataks kogu süsteemi koos sisestaja/juhtühisiga välja tõmmata.
- Kasutage kateetrit alati koos selle valendikku sisestatud juhtetraadiga.

[Kasutusjuhised]

Metacross RX PTA balloondilatatsiooni kateetri kasutamiseks vajalike materjalide hulka kuuluvad tavaliselt:

- sobiva diameetri ja pikkusega juhtetraat
- sobiv sisestaja/juhtühis ja dilatatorikomplekt
- kontrastaine
- steriilne füsioloogiline lahus
- manomeetriga täitmisseade
- haardlukustusega (Luer) süstal
- kolmesuunaline korkkraan

[Kasutusmeetod või kasutusjuhised]

- Kateetri valik
Enne kasutamist kontrollige fluoroskoopia abil veresoone sisediaameetrit enne ja pärast stenootilist kahjustust ja valige sobiva balloonisuurusega kateeter. Kui määratud diameetri puhul

on võimalik kasutada kahte balloonisuurust, siis valige väiksem suurus.

2. Ettevalmistamine

- Pärast kateetri aseptilist eemaldamist pakendikonteinerist eemaldage kateetri kaitsematerjalid.
- Asendage balloonis ja ballooni täitevalendikus olev õhk täitevedelikuga, järgides allpool kirjeldatud protseduuri.
 - Kinnitage täitevedelikuga täidetud täitmisseade (ei kuulu komplekti) ballooni täitmispordi külge.
 - Pärast negatiivse rõhu rakendamist täitmisseadmele ligikaudu 10 sekundi jooksul suunake kateetri kehaosa ots allapoole ja vabastage negatiivne rõhk aeglaselt, et lasta vedelikul voolata ballooni ja ballooni täitevalendikku ja õhk välja suruda.
 - Kui ballooni või ballooni täitevalendikku on jäänud veel õhku, korrake protseduuri b) seni, kuni kogu õhk on süsteemist väljutatud.
 - Eemaldage täitmisseade ballooni täitmispordi küljest ja eemaldage täitmisseadme silindris olev õhk.
 - Ühendage täitmisseade uuesti ballooni täitmispordiga ja süstige negatiivne rõhk. Veenduge, et süstlasse ei tule enam õhku.
- Loputage juhtetraadi valendik loputusnõela abil hepariniseeritud füsioloogilise lahusega ja täitke valendik hepariniseeritud füsioloogilise lahusega.
- Kasutage kogu Metacross RX PTA balloondilatatsiooni kateetri füsioloogilises lahuses.
- Balloonkateetri sisestamine ja täitmine
Enne kasutamist kontrollige alljärgnevat tabelist, kas seda kateetrit saab kasutada koos juhtekateetriga (ei kuulu sellesse komplekti), sisestushülssiga (ei kuulu sellesse komplekti) ja juhtetraadiga (ei kuulu sellesse komplekti).

Kataloogi nr	Ballooni diameeter (mm)	Ühilduv hülss (Fr/toll)	Juhtetraadi maksimaalne diameeter (toll/mm)
BD-L30020MR ~	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00mm	0,035 tolli (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Kateetri kasutamine koos sisestushülsi või juhtekateetriga

- Kateetri kasutamisel juhtekateetris keerake hemostaasiklappi rohkem lahti, hoides seda siiski küllaldasel määral suletuna, et vältida vere leket.
- Sisestage täielikult tühjendatud ballooni kateeter juhtetraadi peal järk-järgult sisestushülssi või juhtekateetrisse ja lükake see aeglaselt perifeerse veresoone stenoosist distaalsemale. Lükake fluoroskoopia kontrolli all kateetrit aeglaselt edasi seni, kuni ballooni röntgenkontrastne märgis jõuab sihtkohta.
- Kontrollige fluoroskoopia abil ballooni röntgenkontrastse märgise asukohta ja määrake laiendamiskoht.
- Ühendage täitmisseade kindlalt ballooni täitmispordiga.
- Täitke balloon täiterõhku jälgides järk-järgult sihtdiameetrit ja laiendage stenoos (täidetud ballooni diameetrid on esitatud käesoleva kasutusjuhendi lõpus paisumisandmete tabelis 1).
- Kateetri eemaldamine
 - Eemaldage kateeter pärast negatiivse rõhu rakendamist ballooni täielikuks tühjendamiseks.
- Kateetri uuesti sisestamine
 - Kui vajalik on eemaldatud kateetri uuesti sisestamine tühja ballooni, siis veenduge enne kateetri uuesti sisestamist patsiendi veresoonde, et balloon on täiesti tühi ja et balloon on kokku volditud. Kateetri uuesti sisestamisel järgige käesoleva juhendi lõigus „Balloonkateetri sisestamine ja täitmine“ antud juhiseid.
 - Kui te tunnete kateetri korduval sisestamisel mis tahes takistust, siis lõpetage kateetri edasilükkamine ja eemaldage see ettevaatlikult patsiendi veresoonest. Valmistuge kasutama uut Metacross RX kateetrit, järgides ülalkirjeldatud protseduure käesoleva kasutusjuhendi kõnealuses lõigus.

[Tüsistused]

Seadme rikked:

- ballooni purunemine
- ballooni ebapiisav täitmine/tühjendamine
- ballooni ja/või kateetri kehaosa purunemine
- raskused seadme eemaldamisel
- täitevedeliku leke

Kõrvaltoimed:

- paikne või süsteemne infektsioon
- paikne sisemine veritsus või hematoom
- veresoone sisekesta rebend
- veresoone dissektsioon
- veresoone perforatsioon
- veresoone ruptuur
- aneurüsm
- arütmia
- äge veresoonesulgus
- venoosne trombemboolia
- vasospasm
- pseudoaneurüsmi moodustumine
- arteriovenoosne fistul
- vereülekannet vajav verejooks
- allergiline reaktsioon kontrastainele / neerupuudulikkus
- valu või palpatoorne valulikkus
- surm
- emboolia
- endokardiit
- palavik
- hüpertensioon/hüpotensioon
- põletik
- müokardiinfarkt
- sepsis
- šokk
- insult
- transitoorne isheemiline atakk

[Säilitamine ja aegumiskuupäev]

1. Hoida kuivas, jahedas, pimedas kohas. Vältida kokkupuudet vee ja otsese päikesevalgusega.
2. Aegumiskuupäev on näidatud karbil. Ärge kasutage pärast aegumiskuupäeva.

[Pakend]

1 komplekt/karp

[Tootja või esindaja nimi ja aadress]**Tootja: KANEKA CORPORATION**

Address: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel nr: (+81)-(0) 6-6226-5256
Faksi nr: (+81)-(0) 6-6226-5143

**Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses:****KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.**

Address: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tel nr: (+32)-(0) 14-256-297
Faksi nr: (+32)-(0) 14-256-298

Edasimüüja Euroopa Liidus: TERUMO EUROPE N.V.

Address: Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgia
Tel nr: (+32)-(0) 16 381 211
Faksi nr: (+32)-(0) 16 400 249

Kõik marginimetused on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele TERUMO CORPORATION ja vastavatele omanikele.

Tabel 1. Metacross RX ballooni paisumisandmete tabel

Rõhk (atm)	Ballooni diameeter (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40*	7.49*	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							


* Nominaalrõhk

** Nominaalne purunemisrõhk

[PRODUKTA APRAKSTS]

Metacross RX ir zemādas transluminālais (PTA) dilatācijas balonkatetrs angioplastijas procedūru veikšanai perifēriskajos asinsvados. Metacross RX ir ātras apmaiņas (RX) veida, un saderīgas vadītājstīgas maksimālais diametrs ir 0,035 collas (0,89 mm). Šī katetra distālo sekciju veido balons un divu lūmenu ass (koaksāls). Ārējo lūmenu izmanto balona inflācijai un deflācijai ar kontrastvielu, kas atšķaidīta ar fizioloģisko šķidrumu. Iekšējais lūmens (vadītājstīgas lūmens, no distālā uzgaļa līdz vadītājstīgas atverei) ir paredzēts saderīgas vadītājstīgas ievietošanai, lai atvieglotu katetra ievadīšanu caur stenotisku asinsvada bojājumu vai dilatācijai paredzētu stentu. Proksimālā sekcija ir atsevišķa lūmena daļa ar atsevišķu Luera atveres mezglu inflācijas/deflācijas ierīces pievienošanai. Balona iekšpusē ir novietoti divi rentgenstarojumu necaurīdīgi marķieri, kas norāda balona darba garumu un palīdz ārstam pareizi novietot balonu vajadzīgajā bojātajā asinsvadā, izmantojot fluoroskopiju. Metacross RX ir pieejams ar dažāda izmēra baloniem atkarībā no to diametra un garuma pie ieteicamā inflācijas spiediena (nominālais spiediens). Pie inflācijas balonu diametrs atšķiras atkarībā no inflācijas spiediena. Metacross RX balonu saderības rādītāji ir sniegti 1. tabulā, kas ievietota šo lietošanas norādījumu beigās. Sterilizēšanas komplektā ierīce ir aprīkota ar aizsargmateriāliem, balona aizsargcaurulīti un stileti, kas visi ir jānoņem pirms lietošanas. Balona aizsargcaurulīte ir novietota pār balonu un salocīta nelielā izmērā, un stileti ir ievietota vadītājstīgas lūmenā, lai aizsargātu katetra daļu no salūšanas. Katetra distālais uzgalis ir konusveida, lai atvieglotu katetra ievadīšanu stenotiskajā asinsvada bojājumā vai stentā. Skalošanas adata ir pievienota komplektā šai ierīcei kā piederums, lai nodrošinātu vadītājstīgas skalošanu un piepildīšanu ar heparīnu saturošu fizioloģisko šķidrumu.

<KATRAS DAĻAS NOSAUKUMS>

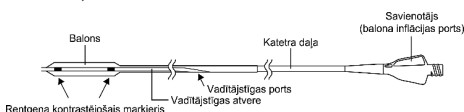

Sterils un apirogēns katetrs atrodas nebojātā un neatvērtā blistera iepakojumā. Šī ierīce ir sterilizēta ar etilēna oksīdu.

Ieteicamais vadītājstīgas diametrs:

Maksimālais diametrs: 0,035" (0,89 mm)

Ieteicamais piepildīšanas spiediens un maksimālais piepildīšanas spiediens

Nominālais spiediens:

- balona diametrs: mazāks par 6 mm : 10 atm
- balona diametrs: 6 mm un lielāks : 8 atm

Aprēķinātais sprādziena spiediens:

- balona diametrs: mazāks par 5 mm : 20 atm
- balona diametrs: 5 mm : 18 atm
- balona diametrs: 6 mm, 7 mm, 8 mm : 14 atm
- balona diametrs: 9 mm un lielāks : 12 atm

[INDIKĀCIJAS]

Metacross RX PTA dilatācijas balonkatetrs ir paredzēts, lai dilatētu stenozis iegurna, femorālajā, iliofemorālajā, popliteālajā, infrapopliteālajā un renālajā artērijā, kā arī dabīgas vai sintētiskas arteriovenozās dialīzes fistulas obstruktīvu bojājumu ārstēšanai. Šī ierīce ir arī paredzēta stenta pēcdilatācijas procedūrām perifērajās asinsvados.

Piezīme: Metacross RX verifikācijas tests stenta pēcdilatācijai tika veikts, izmantojot Complete® SE asinsvadu stentu sistēmu (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® asinsvadu stentu sistēmu (Cordis Corporation) un Epic™ asinsvadu stentu sistēmu ar pašpaplašināšanas funkciju (Bostonas zinātniskā korporācija).

[KONTRINDIKĀCIJAS]

1. Pacientiem, kuriem ir izveidojusies anastomozes stenoze viena mēneša laikā pēc AV šunta izveidošanas.
2. Pacientiem ar patoloģijām, kas saistītas ar pseidoaneirismu.
3. Pacientēm-grūtniecēm.
4. Pacientiem, kuri nepanes antitrombocītu un antikoagulantu terapiju.

[BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI]

[Brīdinājumi]

1. Šī ierīce paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Nelietot atkārtoti. Atkārtoti nesterilizēt Neapstrādāt atkārtoti. Atkārtota apstrāde var radīt risku ierīces sterilītai, biosavietojamībai un fiziskajam veselumam.
2. Nelietot, ja produkta vai daļas iepakojums ir bojāts.
3. Piepildiet balonu tik daudz, lai tas nepārsniegtu diametru asinsvada proksimālajā un distālajā daļā līdz stenotiskam asinsvada bojājumam.
4. Nepiepildiet balonu līdz spiedienam, kas pārsniedz aprēķināto sprādziena spiedienu.
5. Nelietojiet šo katetru centrālajā asinsvadu sistēmā.

[Piesardzības pasākumi, kas saistīti ar procedūram]

1. Uzmanīgi un lēnām izņemiet šo ierīci no pārmešanas apvalka un noņemiet aizsargdaļas no šīs ierīces. Bezrūpīga apiešanās ar ierīci var bojāt ierīces balonu un/vai katetra daļu, radot traucējumus balona piepildīšanai un/vai iztukšošanai.
2. Piepildiet balonu ar kontrastvielu, kas atšķaidīta ar fizioloģisko šķidrumu proporcijā 1:1 (šeit un turpmāk tekstā, "piepildīšanas šķidrums"). Piepildīšanai nedrīkst lietot gāzveida vielu, piemēram, gaisu. (Balonu var piepildīt neregulāri.)
3. Pirms lietošanas izlaist visu balona un balona piepildīšanas lūmenā esošo gaisu un nomainīt to ar piepildīšanas šķidrumu. (Nepilnīgas gaisa izlaišanas gadījumā balona piepildīšanas stāvokli nevar novērot fluoroskopijā.)
4. Smagu stenotisku asinsvadu bojājumu gadījumos, piemēram, apkaļķojušies asinsvadi, asinsvadu nav iespējams pilnībā paplašināt. Šajā gadījumā nepiemērojiet spiedienu, kas pārsniedz aprēķināto sprādziena spiedienu. (Balons var pārsprāgt un tā atliekas var palikt ķermenī.)
5. Attiecībā uz medicīnas ierīcēm, kas tiek lietotas kopā ar šo katetru, izmantojiet norādījumus par šādu ierīču izmantošanu. (Kad balonkatetrs tiek lietots stenta pēcdilatācijai perifērā stenta ievietošanas procedūras laikā, skatiet ražotāja lietošanas norādījumus.)
6. Balona ievietošanu stentā, izņemšanu no stenta vai dilatāciju stentā veiciet uzmanīgi, veicot novērošanu fluoroskopijā. (Neveicot novērošanu fluoroskopijā var sabojāt šo katetru vai radīt asinsvada bojājumus.)
7. Nemēģiniet ievietot Metacross RX PTA dilatācijas balonkatetru caur mazāka izmēra ievadslūžām, nekā tas norādīts uz marķējuma. Skatiet produkta marķējumu.

[Piesardzības pasākumi lietošanas laikā]

1. Lietojiet ierīci tūlīt pēc sterili iepakojuma atvēršanas.
2. Procedūra pilnībā jāveic aseptiski.
3. Šī katetra lietošana ir atļauta ārstiem, kuriem ir pieredze zemādas asinsvadu terapijā.
4. Izvēlieties katetru ar atbilstošu balona izmēru (balona diametru, balona garumu) saskaņā ar tālāk minēto (procedūru) kritērijiem.
 - 1) Piepildītā balona diametrs nedrīkst pārsniegt asinsvada iekšējo diametru proksimālajā un distālajā daļā līdz bojātam asinsvadam.
 - 2) Piepildītā balona garums nedrīkst pārsniegt ārstēšanai paredzētā bojātā asinsvada garumu. (Neatbilstoša katetra izvēlēšanās var izraisīt akūtu asinsvada oklūziju.)
5. Lietojiet šo katetru tikai tad, kad neatliekama operācija var tikt veikta jebkurā laikā.

- Par procedūru atbildīgajam ārstam ir jānosaka balona piepildīšanas ilgumu un skaitu, pamatojoties uz savu iepriekšējo pieredzi.
- Antikoagulācijai jāievada heparīnu saturošs fizioloģiskais šķīdums, kamēr balonkatetrs atrodas asinsvadā.
- Nepiepildiet balonu vai nevirziet vadītājstīgu, ja katetrs ir salocījies vai savījies.
- Uzmanīgi manipulējiet katetru asinsvadā, pārbaudot tā uzgaļa novietojumu un kustību, izmantojot fluoroskopiju vai DSA (Digitālās subtrakcijas angiogrāfijas) monitoru.
- Vienmērīgi piepildiet balonu, novērojot tā piepildīšanas stāvokli, ar fluoroskopijas palīdzību. Uzmanīgi piepildiet balonu, uzturot tā kustību ar rentgenstarojuma neaurlaidīgiem marķieriem. Ja tiek novērota jebkāda veida anomālija, piemēram, neliela pretestība, nekustīgs katetrs manipulācijas laikā vai savijies vadītājstīgas distālās uzgali, procedūru ir nekavējoties jāpārtrauc un šo katetru kopā ar vadītājstīgu ir lēnām jāizņem.
- Neievietojiet vai neizņemiet šo katetru strauji. (Ātra darbība var sabojāt katetru vai radīt asinsvada iekšējus bojājumus.)
- Nevirzīt šo katetru, ja balons ir piepildīts. (Virzot šo katetru, ja balons ir piepildīts, var izraisīt balona sprāgšanu vai katetra daļas salīšanu.)
- Kad balons ir asinsvadā, to strauji nepiepildiet vai neiztukšojiet. (Strauja balona piepildīšana vai iztukšošana var sabojāt asinsvadu vai izraisīt balona sprāgšanu, kā rezultātā tā atliekas var palikt ķermenī.)
- Nelietojiet inžektoru (automātisku injekcijas ierīci), lai piepildītu balonu.
- Jāievēro piesardzība, lai novērstu katetra bojājumus, ko var radīt skalpelis vai šķēres.
- Ja tiek novērota jebkāda veida anomālija, piemēram, stipra pretestība katetra manipulācijas laikā, procedūru ir nekavējoties jāpārtrauc. Jānosaka cēlonis un jāveic atbilstoši pasākumi. (Turpinot operāciju ar pārmērīgu spēku, var radīt katetra bojājumu vai asinsvada sienas ievainojumu.)
- Vienmērīgi ņemiet vērā pacienta stāvokli un novērojiet ķermeņa temperatūru, pulsu un elpošanu. Ja tiek konstatēta jebkāda veida anomālija, nekavējoties pārtrauciet katetra izmantošanu vai veiciet atbilstošus pasākumus pacienta stāvokļa normalizēšanai ārstu uzraudzībā.
- Pēc katetra izmantošanas likvidējiet katetru kā medicīniskos atkritumus saskaņā ar slimnīcā pieņemto kārtību.
- Nelietojiet reagentus, kas satur organiskus šķīdinātājus vai eļļainas kontrastvielas. Nonaķet saskarē ar šiem reagentiem katetram var rasties bojājums.
- Veicot manipulācijas ar šo katetru, nelieciet vai negrieziet katetru.
- Ievadot šo ierīci asinsvadā vai izņemot šo ierīci no asinsvada pārliecinieties, ka balons ir pilnībā iztukšots. (Ierīcei ar lielāku un garāku balonu būs nepieciešams ilgāks laiks, lai balons iztukšotos.)
- Ja pēc procedūras veikšanas šīs ierīces izņemšanas laikā novērojama pretestība, ieteicams izņemt visu sistēmu kopā ar ievadītāju/vadītājstīgām.
- Vienmērīgi lietojiet katetru kopā ar vadītājstīgu, kas ievietota vadītājstīgas atverē.

[Darbības norādījumi]

Materiāli, kas parasti nepieciešami PTA ar Metacross RX PTA dilatācijas balonkatetru, ietver:

- vadītājstīgu(-as) ar atbilstošu diametru un garumu
- atbilstošu ievadītāju/vadītājstīgas un dilatora komplektu
- kontrastvielas flakonu
- sterila fizioloģiskā šķīduma flakonu
- piepildīšanas ierīci ar manometru
- Luera slēga šļirci
- trīsvirzenu noslēgkrānu

[Darbības metode vai lietošanas norādījumi]

- Katetra izvēle
Pirms lietošanas pārbaudiet asinsvada iekšējo diametru proksimāli un distāli līdz stenotiskam asinsvada bojājumam, izmantojot fluoroskopiju, un izvēlieties katetru ar atbilstošu balona

izmēru. Ja pārbaudītajam diametram ir izmantojami divi izmēri, tad izvēlieties mazāko.

2. Sagatavošana

- Atdaliet aizsargmateriālus pēc tam, kad katetrs ir aseptiski izņemts no iepakojuma.
- Balonā un balona piepildīšanas lūmenā esošo gaisu nomainiet ar kontrastvielā saskaņā ar tālāk minētajām procedūram.
 - Pievienojiet piepildīšanas ierīci (nav ietverta šajā komplektā), kas piepildīta ar piepildīšanas šķidrumu, pie balona piepildīšanas atveres.
 - Pēc aptuveni 10 sekunžu negatīvā spiediena piemērošanas piepildīšanas ierīcei virziet katetra daļas uzgali uz leju un lēnām atbrīvojiet negatīvo spiedienu, lai ļautu šķidrumam piepildīt balonu un balona piepildīšanas lūmenu un izvadītu gaisu.
 - Ja pēc tam balonā un balona piepildīšanas lūmenā ir palicis gaiss, atkārtojiet procedūru b), līdz viss gaiss ir pilnībā izvadīts.
 - Atvienojiet piepildīšanas ierīci no balona piepildīšanas atveres un izvadiet gaisu no piepildīšanas ierīces cilindra.
 - Pievienojiet atkal piepildīšanas ierīci balona piepildīšanas atverei un saglabājiet negatīvu spiedienu. Pārbaudiet, vai šļircē vairāk nenonāk atpakaļ gaiss.
- Izskalojiet vadītājstīgas lūmenu ar heparīnu saturošu fizioloģisko šķidrumu, izmantojot skalošanas adatu, un piepildiet lūmenu ar heparīnu saturošu fizioloģisko šķidrumu.
- Iegremdējiet visu Metacross RX PTA dilatācijas balonkatetru fizioloģiskajā šķīdumā.
- Balonkatetra ievietošana un piepildīšana
Pirms lietošanas, lūdzu, pārbaudiet, vai šis katetrs ir saderīgs ar vadītājkatetru (nav ietverts šajā komplektā), ievadslūžām (nav ietvertas šajā komplektā) un vadītājstīgu (nav ietverta šajā komplektā), saskaņā ar tālāk esošo tabulu.

Kataloga numurs	Balona diametrs (mm)	Savietojamas slūžas (Fr/mm)	Maksimālais diametrs vadītājstīgai (colla/mm)
BD-L30020MR ~	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 collas (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Lietojot katetru, kas ievietots ievadslūžās vai vadītājkatetrā

- Lietojot šo katetru vadītājkatetrā, atbrīvojiet hemostatisko ārstu, vienlaicīgi turot to pietiekami cieši noslēgtu, lai novērstu asins noplūdi.
- Pakāpeniski ievadiet katetru ar pilnībā iztukšotu balonu ievadslūžās vai vadītājkatetrā pa vadītājstīgu un virziet līdz bojātā asinsvada distālajai periferijai. Lietojot fluoroskopiju, lēnām virziet katetru, lai tā rentgena kontrastējošais marķieris balonā sasniegtu vajadzīgo vietu.
- Lietojot fluoroskopiju, pārbaudiet rentgena kontrastējošā marķiera novietojumu balonā un nosakiet dilatācijas vietu
- Stingri pievienojiet piepildīšanas ierīci balona piepildīšanas atverei.
- Pakāpeniski piepildiet balonu līdz vajadzīgajam diametram, pārbaudot piepildīšanas spiedienu un dilatējot stenotisko asinsvada bojājumu (informāciju par balonu infliācijas diametriem skatiet balonu saderības rādītāju tabulā, kas ievietota šo lietošanas norādījumu beigās 1. tabulā).
- Katetra izņemšana
 - Pēc negatīvā spiediena piemērošanas, lai pilnībā iztukšotu balonu, izņemiet katetru.
- Katetra atkārtota ievietošana
 - Ja nepieciešama atkārtota izņemšana katetra ar iztukšotu balonu ievadīšana, pārliecinieties, ka balons ir pilnībā iztukšots un salocīts, pirms tā atkārtotas ievadīšanas pacienta asinsvadā. Veicot atkārtotu ievadīšanu, lietojiet katetru saskaņā ar šeit esošo sadaļu "Balonkatetra ievietošana un infliācija".
 - Ja katetra atkārtotas ievadīšanas laikā novērota jebkāda veida pretestība, pārtrauciet tā ievadīšanu un uzmanīgi izņemiet to no pacienta asinsvada. Sagatavojieties izmantot jaunu Metacross

RX saskaņā ar procedūram, kas sniegtas iepriekš šo lietošanas norādījumu nodaļā.

Visi zīmoli ir uzņēmuma TERUMO CORPORATION un attiecīgo tpašnieku preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.

[Komplikācijas]

Ierīces atteices:

- balona plīsums
- nepietiekama balona piepildīšana/iztukšošana
- balona vai katetra daļas salūšana
- grūtības izņemt ierīci
- piepildīšanas šķidrums noplūde

Blakusparādības

- Lokālās vai sistēmiskās infekcijas
- Lokālā iekšējā asiņošana vai hematoma
- Iekšējs plīsums
- Asinsvadu disekcija
- Asinsvadu perforācijas
- Asinsvada plīsums
- Aneirisma
- Aritmija
- Akūta asinsvadu oklūzija
- Venozā trombembolija
- Vazospazmas
- Pseudoaneirismas veidošanās
- Arteriovenozā fistula
- Asiņošana, kam nepieciešama asins pārlešana
- Alerģiskā reakcija uz kontrastvielu/nieru atteice
- Sāpes vai spiedošas sāpes
- Nāve
- Embolija
- Endokardīts
- Drudzis
- Hipertensija/hipotensija
- Iekaisums
- Miokarda infarkts
- Sepsē
- Šoks
- Insults
- Pārejoša išēmiska lēkme

[Uzglabāšana un derīguma termiņš]

1. Uzglabāt vēsā, sausā, tumšā vietā. Nepakļaut ūdenim, tiešiem saules stariem.
2. Derīguma termiņš norādīts uz kārbas. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

[Iepakojums]

1 komplekts/kārba

[Ražotāja vai pārstāvja vārds, uzvārds un adrese]



Ražotājs: KANEKA CORPORATION

Adrese: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,

OSAKA, 530-8288 JAPAN

Tel. Nr.: (+81)-(0) 6-6226-5256

Faksa Nr.: (+81)-(0) 6-6226-5143



Autorizēts pārstāvis Eiropas Kopienā:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adrese: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Tel. Nr.: (+32)-(0) 14-256-297

Faksa Nr.: (+32)-(0) 14-256-298

Izplatītājs ES: TERUMO EUROPE N.V.

Adrese: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Beļģija

Tel. Nr.: (+32)-(0) 16 381 211

Faksa Nr.: (+32)-(0) 16 400 249

1. tabula. Metacross RX balonu saderības tabula

Spiediens (atm)	Balona diametrs (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40*	7.49*	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Nominālais spiediens

** Aprēķinātais sprādziena spiediens


[PRODUKTO APRAŠYMAS]

„Metacross RX“ yra poodinės transiluminalinės angioplastikos (PTA) kateteris su išplečiamuoju balionėliu, skirtas periferinėms indikacijoms. „Metacross RX“ yra staigaus pakeitimo (RX, angl. Rapid Exchange) tipo ir didžiausias suderinamos kreipiamosios vielos spindis yra 0.035 colio (0,89 mm).

Šio kateterio distalinė dalis sudaryta iš balionėlio ir dvigubo spindžio stiebo (bendraašė). Išorinis spindis naudojamas balionėliui pripūsti ir išleisti su kontrastine medžiaga, atskiesta fiziologiniu tirpalu. Vidinis spindis (kreipiamosios vielos spindis; nuo distalinio galiuko iki kreipiamosios vielos angos) naudojamas suderinamos kreipiamosios vielos įkišimui, kad būtų galima prarvesti kateterį per stenozuotą pažeidimą ar plėtiną steną. Proksimalinė dalis yra viengubo spindžio su vienu luerio jungties anga, skirta pripūtimo / išleidimo prietaiso prijungimui. Balionėlio viduje yra du rentgenkontrastiniai žymekliai, nurodantys balionėlio darbinį ilgį ir padedantys gydytojui fluoroskopu tinkamai išdėstyti balionėlį reikiamoje pažeidimo vietoje. „Metacross RX“ tiekiamas su įvairiais balionėlių dydžiais pagal skersmenį ir ilgį su rekomenduojamais pripūtimo slėgiais (vardiniu slėgiu). Pripūsto balionėlio skersmuo skiriasi atsižvelgiant į pripūtimo slėgį. „Metacross RX“ balionėlių atitikties diagrama pateikia šių naudojimo instrukcijų pabaigoje esančioje 1 lentelėje. Sterili pakuoje, kurioje yra prietaisas, turi apsaugines medžiagas, balionėlio apsauginį vamzdelį ir stiletą, kuriuos reikia pašalinti prieš naudojimą. Balionėlio apsauginį vamzdelį reikia uždėti ant smulkiai sulankstyto balionėlio, o stiletą įkišti į kreipiamosios vielos spindį, kad nesusispaustų kateterio stiebas. Smailelantis kateterio distalinis galiukas palengvina kateterio įvedimą į stenozuotą pažeidimą ar steną.

Praplovimo adata, skirta kreipiamosios vielos spindžio praplovimui ir pripildymui heparinuotu fiziologiniu tirpalu, yra pridėama kaip šio prietaiso priedas.

<KIEKVIENOS DALIES PAVADINIMAS>

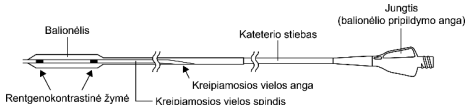

Sterilus ir nedegus nepažeistame ir neatidarytame maišelyje. Šis prietaisas sterilizuotas etileno oksidu.

Rekomenduojamas kreipiamosios vielos skersmuo:

Maksimalus skersmuo: 0,89 mm (0,035 colio)

Rekomenduojamas pripildymo slėgis ir maksimalus pripildymo slėgis

Vardinis slėgis:

- Balionėlio skersmuo: mažesnis nei 6 mm: 10 atm
- Balionėlio skersmuo: 6 mm ir didesnis: 8 atm

Vardinis srauto slėgis:

- Balionėlio skersmuo: mažesnis nei 5 mm: 20 atm
- Balionėlio skersmuo: 5 mm: 18 atm
- Balionėlio skersmuo: 6 mm, 7 mm, 8 mm: 14 atm
- Balionėlio skersmuo: 9 mm ir didesnis: 12 atm

[INDIKACIJOS]

„Metacross RX“ PTA kateteris su išplečiamuoju balionėliu yra skirtas stenozai išplėsti klubo, šlaunies, klubo–šlaunies, pakinklio, žemiau pakinklio esančiose ir inkstų arterijose bei natūralios arba sintetinės arterioveninės dializės fistulių obstrukciniams pažeidimams gydyti. Be to, šis įtaisas yra skirtas stentui papildomai išplėsti periferinėse kraujagyslėse.

Pastaba: „Metacross RX“ papildomo išplėtimo patikros testas buvo atliktas naudojant „Complete™ SE kraujagyslių stento sistemą (Medtronic, Inc)“, S.M.A.R.T.® CONTROL® kraujagyslių stento sistemą („Cordis Corporation“) ir „Epic™“ savaimi išsiplečiančio kraujagyslių stento sistemą („Boston Scientific Corporation“).

[KONTRAINDIKACIJOS]

1. Pacientai, kuriems išsivystė anastomotinė stenozė per viena mėnesį po AV šunto įstatymo.
2. Pacientai, kurių organizme rasta pakitimų dėl pseudoaneurizmos.
3. Neščios pacienės.
4. Pacientai, kurie negali toleruoti gydymo antitrombotiniais vaistais arba antikoagulantais.

[ISPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS]

[Ispėjimai]

1. Šis įrenginys yra tik vienkartinio naudojimo. Nenaudoti pakartotinai. Nesterilizuoti. Pakartotinai neapdoroti. Pakartotinai apdorojus gali pablogėti įrenginio sterilumas, biologinis suderinamumas ir fizinis vientisumas.
2. Nenaudokite, jeigu produkto arba įrenginio pakuotė buvo pažeista.
3. Nepripildykite balionėlio tiek, kad jo skersmuo būtų didesnis nei kraujagyslės skersmuo prieš stenotinį pažeidimą ir už jo.
4. Nepripūskite balionėlio slėgiu, viršijančiu vardinį plyšimo slėgį.
5. Nenaudokite šio kateterio centrinei kraujų apytakos sistemai.

[Atsargumo priemonės, susijusios su procedūromis]

1. Atsargiai ir lėtai išimkite prietaisą iš transportavimo vamzdelio ir nuimkite apsaugines dalis nuo prietaiso. Neatsargiai elgiantis galima pažeisti prietaiso balionėlį ir (arba) kateterio korpusą, susilpninti balionėlio pripildymą ir (arba) išleidimą.
2. Pripildykite balionėlį kontrastine medžiaga, atskiesta fiziologiniu tirpalu santykiu 1:1 (toliau „pripildymo skystis“). Balionėliui pripildyti negalima naudoti dujinės terpės, pavyzdžiui, oro (balionėlis gali netolygiai išsiplesti).
3. Prieš naudodami išstumkite visą orą iš balionėlio bei jo pripildymo angos ir pakeiskite jį pripildymo skystiu (nevisiškai pašalinus orą, balionėlio pripildymo būsenos nebus galima stebėti fluoroskopu).
4. Esant stipriems stenotiniams pažeidimams, pavyzdžiui, užkalkėjimams, kraujagyslė gali būti ne visiškai išplėsta. Tokie atveju neviršykite vardinio plyšimo slėgio (balionėlis gali plyšti ir jo liekanos gali likti kraujagyslėje).
5. Kartu su šiuo kateteriu naudojami kitus medicinius įrenginius, laikykites šių įrenginių naudojimo instrukcijų (kai naudojate balioninį kateterį stentui papildomai išplėsti periferinio stento įstatymo procedūros metu, žiūrėkite gamintojo naudojimo instrukcijas).
6. Įvesdami į steną, ištraukdami iš stento arba pripūsdami stente balionėlį, procedūrą atlikite atidžiai stebėdami fluoroskopu (tai atlikdami be fluoroskopo galite sugadinti šį kateterį arba pažeisti kraujagyslių sienelės).
7. Nebandykite prastumti „Metacross RX“ PTA kateterio su išplečiamuoju balionėliu per mažesnio dydžio įvedimo movą, nei nurodyta etiketėje. Žiūrėkite gaminio etiketę.

[Atsargumo priemonės naudojant]

1. Naudokite įrenginį iškart atidarę sterilią pakuotę.
2. Visa procedūra turi būti atliekama aseptinėmis sąlygomis.
3. Šį kateterį gali naudoti tik gydytojai, turintys patirties poodinės kraujagyslių terapijos srityje.
4. Pasirinkite kateterį su atitinkamo dydžio balionėliu (balionėlio skersmuo, balionėlio ilgis) pagal šiuos (procedūrų) kriterijus.
 - 1) Pripildyto balionėlio skersmuo neturi viršyti vidinio kraujagyslės skersmens proksimalinėje ir distalinėje pažeidimo srityje.
 - 2) Pripildyto balionėlio ilgis neturi viršyti gydymo pažeidimo ilgio (netinkamai pasirinkus kateterį galima ūmi kraujagyslių okliuzija).
5. Naudokite šį kateterį tik tada, kai yra galimybė bet kurio metu iškilus pavojui atlikti operaciją.
6. Už procedūrą atsisakęs gydytojas turi nustatyti balionėlio pripildymų trukmę ir skaičių remdamasis ankstesne patirtimi.
7. Kai balionėlio kateteris yra įvestas į kraujagyslę, krešėjimui sumažinti turi būti įleidžiama heparinuotu fiziologinio tirpalo.
8. Niekada nepūskite balionėlio ir nestumkite kreipiamosios vielos, kai kateteris yra sulanktas arba susuktas.

9. Atsargiai manipuliukite kateteriu kraujagyslėje stebėdami jo galiuko padėtį bei judėjimą fluoroskopu arba DSA (angl. „Digital Subtraction Angiography“) monitoriumi.
10. Visada pildykite balionėlį stebėdami jo pripildymo būklę fluoroskopu. Pildykite balionėlį atsargiai, stebėdami jo judėjimą pagal rentgenokontrastines žymes. Pastebėjus ką nors neįprasto, pvz., nedidelį pasipriešinimą, nejudantį kateterį manipuliuojant arba užsikimšusį distalinį kreipiamosios vielos antgalį, procedūrą reikia nedelsiant nutraukti, o šį kateterį lėtai ištraukti kartu su kreipiamąja viela.
11. Neįveskite arba neištraukite šio kateterio greitai (dėl staigių veiksmų gali sugesti šis kateteris arba būti pažeistos kraujagyslių sienelės).
12. Nejudinkite kateterio, kol balionėlis pripildytas (judinant kateterį su pripildytu balionėliu gali sprogti balionėlis arba sulūžti kateterio stiebas).
13. Greitai nepildykite arba neišleiskite balionėlio, jam esant kraujagyslėje (greitai pildant arba išleidžiant galima pažeisti kraujagyslę arba balionėlis gali sprogti, ir jo liekanos liks organizme).
14. Nenaudokite stūmoklio (automatinio įleidimo įrenginio), kai pripildote balionėlį.
15. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte kateterio chirurginių peiliu ar žirkklėmis.
16. Jei manipuliudami kateteriu pajutote ką nors neįprasto, pavyzdžiui, stiprų pasipriešinimą, nedelsdami nutraukite procedūrą. Reikia nustatyti priežastį ir imtis atitinkamų priemonių (tęsdami procedūrą ir naudodami per didelę jėgą, galite sugadinti kateterį arba pažeisti kraujagyslės sienelę).
17. Visada atkreipkite dėmesį į paciento būklę ir stebėkite kūno temperatūrą, pulsą bei kvėpavimą. Pastebėjus ką nors neįprasto, nedelsdami nutraukite šiuo kateteriu atliekamą procedūrą arba gydytoju nuožūria imkitės atitinkamų priemonių paciento būklei pagerinti.
18. Panaudoję pašalinkite kateterį kaip medicininės atliekas pagal ligoninės procedūras.
19. Nenaudokite jokių medžiagų, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių arba aliejinės kontrastinės terpės. Dėl sąlyčio su šiomis medžiagomis gali sugesti kateteris.
20. Manipuliudami šiuo kateteriu, nesusukite ir nepasukite kateterio.
21. Įvesdami šį prietaisą į kraujagyslę arba išimdami jį iš kraujagyslės, įsitikinkite, kad balionėlis yra visiškai išleistas (prietaisui su didesniu ir ilgesniu balionėliu išleisti reikia daugiau laiko).
22. Jeigu po procedūros ištraukiant šį prietaisą jaučiamas pasipriešinimas, rekomenduojama ištraukti visą sistemą kartu su įvedimo įtaisu ir kreipiamąja mova.
23. Visada naudokite kateterį su kreipiamąja viela, įvestą į kreipiamosios vielos spindį.

[Naudojimo instrukcijos]

Priemonės, dažniausiai reikalingos PTA su „Metacross RX“ PTA kateteriu su išplečiamuoju balionėliu, yra šios:

- Atitinkamo skersmens ir ilgio kreipiamoji viela (ar kreipiamosios vielos)
- Atitinkamas įvedimo įtaiso / kreipiamosios mova ir plėtiklio rinkinys
- Kontrastinės medžiagos buteliukas
- Sterilus fiziologinio tirpalo buteliukas
- Pildymo įtaisas su manometru
- Švirkštas su Luerio jungtimi
- Trijų atšakų čiaupas

[Naudojimo metodas arba instrukcijos]

1. Kateterio pasirinkimas
Prieš naudodami fluoroskopu patikrinkite kraujagyslės vidinį skersmenį proksimaliai ir distaliai stentiniame pažeidime bei pasirinkite kateterį su atitinkamo dydžio balionėliu. Jeigu patikrinus skersmenį tinka du dydžiai, pasirinkite mažesnįjį.
2. Pasiruošimas
 - 1) Stipriai išėmę šį kateterį iš pakuotės, nuimkite nuo jo apsaugines medžiagas.
 - 2) Pakeiskite orą balionėlyje ir jo pripildymo spindyje pripildymo skysčiu, vykdydami šias procedūras.

- a) Pritvirtinkite pripildymo įrenginį (šiam rinkinyje nėra), pripildytą pripildymo tirpalo, prie balionėlio pripildymo prievado.
 - b) Pripildymo įrenginiu apytiksliai 10 sekundžių panaudoję neigiamą slėgį, nukreipkite kateterio stiebo antgalį žemyn ir lėtai leiskite neigiamą slėgį, kad skystis pripildytų balionėlį, jo pripildymo spindį ir išspastų orą.
 - c) Jeigu balionėlyje ir pripildymo kanale bus likę orų, kartokite procedūrą, b) kol oras bus visiškai pašalintas.
 - d) Atjunkite pripildymo įrenginį nuo balionėlio pripildymo prievado ir pašalinkite orą iš pripildymo įrenginio cilindro.
 - e) Vėl prijunkite pripildymo įtaisą prie balionėlio pripildymo angos ir panaudokite neigiamą slėgį. Įsitikinkite, kad oras nebegįžta į švirkštą.
- 3) Praplaukite kreipiamosios vielos spindį heparinizuotu fiziologiniu tirpalu naudodami praplovimo adatą ir pripildykite spindį heparinizuotu fiziologiniu tirpalu.
 - 4) Įmerkite visą „Metacross RX“ PTA kateterį su išplečiamuoju balionėliu į fiziologinį tirpalą.
 5. Balioninio kateterio įvedimas ir pripildymas
Prieš naudodami patikrinkite, ar šis kateteris yra suderinamas su kreipiamuoju kateteriu (šiam rinkinyje nėra), įvedimo mova (šiam rinkinyje nėra) ir kreipiamąja viela (šiam rinkinyje nėra) pagal toliau pateikiamą lentelę.

Katalogo numeris	Balionėlio skersmuo (mm)	Suderinama mova (Fr/mm)	Maksimalus kreipiamosios vielos skersmuo (in/mm)
BD-L30020MR ~ BD-L70200ER	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 in (0,89 mm)
	9 mm, 10mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Naudodami šį kateterį, įstatytą į įvedimo įtaiso movą arba kreipiamąjį kateterį

- 1) Naudodami kateterį su kreipiamuoju kateteriu, atlaisvinkite hemostatinį vožtuvą, laikydami jį pakankamai prispaudę, kad netekėtų kraujas.
- 2) Tolygiai įstatykite kateterį su visiškai išleistu balionėliu, į įvedimo movą arba kreipiamąjį kateterį kreipiamąją viela ir stumkite į distalinį pažeidimo kraštą. Stebėdami fluoroskopu, lėtai stumkite kateterį, kol balionėlio rentgenokontrastinė žymė pasieks numatytą vietą.
- 3) Stebėdami fluoroskopu patikrinkite balionėlio rentgenokontrastinės žymės padėtį ir nustatykite išplėtimo vietą.
- 4) Tvirtai prijunkite pripildymo renginį prie balionėlio pripildymo angos.
- 5) Palaipsniui pripildykite balionėlį iki reikiamo skersmens tikrindami pripildymo slėgį ir išplėskite stenotinį pažeidimą. (Išpūstų balionėlių skersmenų ieškote balionėlių atitikties diagramoje, pateiktoje šių naudojimo instrukcijų pabaigoje esančioje 1 lentelėje).
4. Kateterio išėmimas
 - 1) Naudodami neigiamą slėgį visiškai ištuštinkite balionėlį, išimkite kateterį.
5. Pakartotinis kateterio įvedimas
 - 1) Jei reikia pakartotinai įvesti ištrauktą kateterį su išleistu balionėliu, įsitikinkite, kad balionėlis visiškai išleistas ir sulankstytas prieš jį pakartotinai įvesdami į paciento kraujagyslę.
 - 2) Jei kateterio pakartotinio įvedimo metu jaučiamas bet koks pasipriešinimas, nebestumkite jo ir atsargiai jį ištraukite iš paciento kraujagyslės. Paruoškite naudojimui naują „Metacross RX“ vadovaudamiesi procedūromis, pateiktomis šiame naudojimo instrukcijų skyriuje.

[Komplikacijos]

Prietaiso gedimai:

- Balionėlio plyšimas
- Nepakankamas balionėlio pripildymas / išleidimas
- Balionėlio ir (arba) kateterio stiebo lūžimas
- Problemos išimant prietaisą

- Pripildymo skysčio išteklėjimas

Nepageidaujami reiškiniai:

- Vietinės arba sisteminės infekcijos
- Vietinis vidinis kraujavimas arba hematoma
- Intimos plyšimas
- Kraujagyslių perpjovimas
- Kraujagyslių pradūrimas
- Kraujagyslių plyšimas
- Aneurizma
- Aritmija
- Ūmi kraujagyslių okliuzija
- Venos tromboembolija
- Kraujagyslių spazmai
- Pseudoaneurizmos susiformavimas
- Arterioveninė fistulė
- Kraujavimas su būtinu kraujo perpylimu
- Alerginė reakcija į kontrastinę terpę
- Skausmas arba spaudžiantis maudimas
- Mirtis
- Embolija
- Endokarditas
- Karščiavimas
- Hipertenzija / hipotenzija
- Uždegimas
- Miokardo infarktas
- Sepsis
- Šokas
- Insultas
- Praeinantis smegenų išėjimos priepuolis

[Saugojimas ir galiojimo laikas]

1. Laikykite vėsioje, sausoje, tamsioje vietoje. Saugokite nuo vandens, tiesioginių saulės spindulių.
2. Galiojimo data nurodyta ant dėžutės. Nenaudokite pasibaigus galiojimo datai.

[Pakuotė]

1 komplektas / dėžutė

[Gamintojo arba atstovo vardas, pavardė ir adresas]



Gamintojas: KANEKA CORPORATION

Adresas: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel. (+81)-(0) 6-6226-5256
Faks. (+81)-(0) 6-6226-5143



Igaliotasis atstovas Europos Bendrijoje:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresas: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tel. (+32)-(0) 14-256-297
Faks. (+32)-(0) 14-256-298

ES platintojas: TERUMO EUROPE N.V.

Adresas: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgija
Tel. (+32)-(0) 16 381 211
Faks. (+32)-(0) 16 400 249

Visi prekių ženklai yra „TERUMO CORPORATION“ ir jos atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai

1 lentelė. „Metacross RX“ balionėliatitikties diagrama

Slėgis (atm)	Balionėlio skersmuo (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40*	7.49*	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Vardinis slėgis

** Vardinis srauto slėgis:

[OPIS IZDELKA]


Metacross RX je balonski kateter za dilatacijo za periferno uporabo pri perkutani transluminalni angioplastiki (PTA). Balonski kateter Metacross RX je namenjen hitri izmenjavi (RX), največji premer združljive vodilne žice pa znaša 0,89 mm.

Distalni del tega katetra sestavljajo balon in cevka z dvojno svetlino (koaksialna zasnova). Zunanja svetlina se uporablja za polnjenje in praznjenje balona s kontrastnim sredstvom, razredčenim s fiziološko raztopino. Notranja svetlina (svetlina vodilne žice; od distalne konice do odprtine vodilne žice) služi vstavljanju združljive vodilne žice za lažje potiskanje katetra skozi stenotično lezijo ali opornico, ki jo je treba dilatirati. Proksimalni del je cevka z enojno svetlino z enojnim spojem odprtine za priključek Luer za priključitev pripomočka za polnjenje/praznjenje. V balonu se nahajata dva radioneprepustna označevalca, ki označujeta delovno dolžino balona, kar zdravniku olajša pravilno postavitve balona v želeni leziji pod presvetlitvijo. Balonski kateter Metacross RX je na voljo v različnih velikostih balona po premeru in dolžini pri priporočenih tlakih polnitve (nazivni tlak). Po polnjenju se premer balona razlikuje glede na tlak polnitve.

Razpredelnico skladnosti za balone katetra Metacross RX najdete v 1. tabeli na koncu teh navodil za uporabo. V paketu za sterilizacijo je priprava opremljena z zaščitnimi materiali, zaščitnim tulcem balona in mandrenom, kar je treba pred uporabo odstraniti. Zaščitni tulec balona je nameščen prek zloženega balona, mandren pa se nahaja v svetlini vodilne žice ter preprečuje sesedanje cevke katetra. Distalna konica katetra je koničasta zaradi lažjega pomikanja katetra v stenotično lezijo ali opornico.

Igla za izpiranje je priložena kot dodatek tej pripravi za izpiranje in polnjenje svetline vodilne žice s heparinizirano fiziološko raztopino.

Opomba: preizkus preverjanja za post-dilatacijo katetra Metacross RX je bil opravljen z uporabo vaskularnega sistema opornice Complete® SE (Medtronic, Inc), vaskularnega sistema opornice S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) in vaskularnega sistema samorazširjive opornice Epic™ (Boston Scientific Corporation).
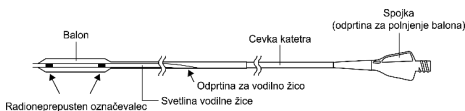
<IME POSAMEZNIH DELOV>

Sterilno in apirogeno v nepoškodovani in neodprti plastični vrečki. Ta priprava je sterilizirana z etilen oksidom.

Priporočen premer vodilne žice:

Največji premer: 0,89 mm

Priporočen tlak za polnitev in najvišji tlak za polnitev

Nazivni tlak:

- Premer balona: manjši od 6 mm:	10 barov
- Premer balona: 6 mm in več:	8 barov

Naznačen delovni tlak:

- Premer balona: manjši od 5 mm:	20 barov
- Premer balona: 5 mm:	18 barov
- Premer balona: 6 mm, 7 mm, 8 mm:	14 barov
- Premer balona: 9 mm in več:	12 barov

[INDIKACIJE]

Balonski kateter za dilatacijo PTA Metacross RX je namenjen dilataciji stenoz v črvenih, femoralnih, črvenso-femoralnih, poplitealnih, infra-poplitealnih in ledvičnih arterijah ter zdravljenje obstruktivnih lezij nativnih ali sintetičnih arteriovenskih fistul za dializo. Priprava je namenjena tudi post-dilataciji opornice v perifernem ožilju.

[KONTRAINDIKACIJE]

1. Bolniki, pri katerih se je en mesec po vzpostavitvi arteriovenskega spoja pojavila anastomozna stenoza.
2. Bolniki z lezijami, ki komunicirajo s psevdoanevrizmo.
3. Nosečnice.
4. Bolniki, ki ne prenesejo antiagregacijske terapije ali terapije s sredstvom proti strjevanju krvi.

[OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI]**[Opozorila]**

1. Ta priprava je namenjena le enkratni uporabi. Ni za ponovno uporabo. Ni namenjeno ponovnemu steriliziranju. Ne predelujte ponovno. Predelovanje lahko ogrozi steriliteto, biološko združljivost in funkcionalno neokrnjenost priprave.
2. Ne uporabljajte, če je izdelek ali embalaža poškodovan/a.
3. Ne polnite balona bolj, kot znaša premer krvne žile proksimalno in distalno od stenotične lezije.
4. Balona ne smete napolniti bolj, kot znaša naznačen delovni tlak.
5. Tega katetra ne uporabljajte v osrednjem cirkulacijskem sistemu.

[Varnostni ukrepi, povezani s postopki]

1. Previdno in počasi odstranite pripravo iz nosilne cevke in namestite nazaj zaščitne dele s priprave. Neprevidno rokovanje lahko poškoduje balon in/ali cevko katetra priprave, kar ovira polnjenje in/ali praznjenje balona.
2. Napolnite balon s kontrastnim sredstvom, razredčenim s fiziološko raztopino v razmerju 1:1 (v nadaljevanju tekočino za polnjenje). Za polnjenje ne smete uporabljati plinskih sredstev, kot je zrak. (Balon se lahko neenakomerno napolni.)
3. Pred uporabo iztisnite ves zrak iz balona in razširitvene svetline balona ter ga nadomestite s tekočino za polnjenje. (V primeru nepopolne odstranitve zraka stanja napolnenosti balona ne bo mogoče opazovati pod presvetlitvijo.)
4. V primeru hudih stenotičnih lezij, kot so poapnele lezije, krvne žile ni mogoče povsem razširiti. Tudi v tem primeru ne prekoračite naznačenega delovnega tlaka. (Balon lahko počni in delci lahko ostanejo v telesu.)
5. Za medicinske pripomočke, uporabljene skupaj s tem katetrom, upoštevajte navodila za uporabo takih pripomočkov. (Ko balonski kateter uporabljate za post-dilatacijo opornice med postopkom vstavljanja periferne opornice, si oglejte proizvajalčeva navodila za uporabo.)
6. Vstavljanje v opornico, odstranjevanje iz opornice ali dilatacijo balona znotraj opornice opravite previdno pod presvetlitvijo. (Če za te postopke ne boste uporabili presvetlitve, lahko pride do poškodb katetra ali notranje plasti žile.)
7. Balonskega katetra za dilatacijo PTA Metacross RX ne poskušajte spraviti skozi vodilo, manjše od označenega na nalepki. Poglejte oznako izdelka.

[Previdnostni ukrepi med uporabo]

1. Pripravo uporabite takoj po odprtju sterilne embalaže.
2. Celoten postopek je treba opraviti aseptično.
3. Ta kateter lahko uporabljajo le zdravniki, ki imajo izkušnje s perkutanim žilnim zdravljenjem.
4. Izberite kateter z ustrezno velikostjo balona (premer balona, dolžina balona) v skladu z naslednjimi (postopki) merili.
 - 1) Premer napolnjenega balona ne sme preseči notranjega premera žile proksimalno in distalno od lezije.
 - 2) Dolžina napolnjenega balona ne sme preseči dolžine lezije, ki jo je treba zdraviti. (Neprimerna izbira katetra lahko pripelje do akutne žilne zapore.)
5. Ta kateter uporabite le, ko lahko v trenutku izvedete urgentno operacijo.
6. Zdravnik, odgovoren za postopek, mora določiti trajanje in število polnjenj balona glede na svoje pretekle izkušnje.
7. Heparinizirano fiziološko raztopino je treba infundirati zaradi preprečevanja strjevanja krvi, medtem ko je ta balonski kateter vstavljen v žilo.

8. Balona ne polnite in ne potiskajte vodilne žice naprej, ko je kateter ukrivljen ali upognjen.
9. Kateter previdno uvajajte v krvno žilo in ob tem preverjajte mesto in pomikanje njegove konice pod presvettliljivo ali digitalno subtraksijsko angiografijo DSA.
10. Balon vedno polnite ob spremljanju stanja napolnjenosti pod presvettliljivo. Balon polnite previdno, ob tem pa preverjajte njegovo premikanje z radioneupustnimi označevalcema. Če opazite kakršnoli nepravilnost, kot je majhen upor, nepremičen kateter med uvajanjem ali ukrivljena distalna konica vodilne žice, morate postopek takoj prekiniti in počasi odstraniti kateter skupaj z vodilno žico.
11. Katetra ne vstavljajte ali odstranjujte na hitro. (Hitro premikanje lahko poškoduje kateter ali notranjo plast žile.)
12. Katetra ne premikajte z napolnjenim balonom. Ob premikanju katetra z napolnjenim balonom lahko balon počli ali se pretrga cevka katetra.
13. Balona v žili ne polnite ali praznite hitro. Zaradi hitrega polnjenja ali praznjenja se lahko poškoduje žila ali počli balon in delci ostanejo v telesu.
14. Za polnjenje balona ne uporabljajte injektorja (priprave za samodejno injiciranje).
15. Bodite previdni, da preprečite poškodbe katetra s skalpelom ali škarkjami.
16. Če med uvajanjem katetra zaznate kakršnoli nepravilnost, kot je močan upor, morate postopek takoj prekiniti. Nato morate preveriti vzrok in ustrezno ukrepati. (Če boste nadaljevali s postopkom s prekomerno silo, lahko pride do poškodbe katetra ali stene žile.)
17. Vedno pazite na stanje bolnika in nadzorujte telesno temperaturo, utrip ter dihanje. Če opazite kakršnoli nepravilnost, takoj prenehajte z uporabo katetra ali ukrepaite ustrezno po zdravniški presoji glede na stanje bolnika.
18. Po uporabi kateter odstranite kot medicinske odpadke v skladu z bolnišničnimi postopki.
19. Ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo organska topila, ali oljnatih kontrastnih sredstev. Stik s temi sredstvi lahko pripelje do poškodb katetra.
20. Katetra med uvajanjem ne smete ukrivljati ali obračati.
21. Med uvajanjem priprave v krvno žilo ali odstranjevanjem priprave iz krvne žile mora biti balon povsem izprazen. (Pripravo z večjim in daljšim balonom praznimo dlje časa.)
22. Če med izvlačenjem priprave po opravljenem postopku začitute upor, priporočamo odstranitev celotnega sistema skupaj z uvajalom/vodilom.
23. Vedno uporabite kateter poleg vodilne žice, vstavljene v svetlino vodilne žice.

[Navodila za postopek]

Materiali, ki jih običajno potrebujemo ob uporabi balonskega katetra za dilatacijo PTA Metacross RX, so:

- Vodilna žica(e) ustreznega premera in dolžine
- Ustrezno uvajalo/vodilo in dilatator
- Fiola s kontrastnim sredstvom
- Fiola sterilne fiziološke raztopine
- Pripomoček za polnjenje z manometrom
- Brizgalka z zaklepnim priključkom Luer
- Tripotni petelinček

[Postopek ali navodila za uporabo]

1. Izbiira katetra
Pred uporabo pod presvettliljivo preverite notranji premer žile proksimalno in distalno od stenotične lezije in izberite kateter z ustrežno velikostjo balona. Če sta za potrjen premer primerni dve velikosti, izberite manjšo.
2. Priprava
 - 1) Po aseptični odstranitvi katetra iz embalaže odstranite zaščitne materiale.
 - 2) Zrak v balonu in razširitevni svetlini balona nadomestite s tekočino za polnjenje v skladu z naslednjimi postopki.
 - a) Na odprtino za polnjenje balona pritrdite napravo za polnjenje (ni vključena v ta komplet), napolnjeno s tekočino za polnjenje.

- b) Po tem, ko približno 10 sekund ustvarjate negativni tlak v napravi za polnjenje, usmerite konico cevke katetra navzdol in počasi sprostite negativni tlak, da bo tekočina napolnila balon in razširitevno svetlino balona ter izločila zrak.
- c) Če je po tem, ko balon napolnite s tekočino za polnjenje, v njem in spojki prisoten zrak, ponavljajte postopek b), dokler povsem ne izločite zraka.
- d) Odstranite napravo za polnjenje z odprtine za polnjenje balona in izločite zrak iz valja naprave za polnjenje.
- e) Napravo za polnjenje ponovno pritrdite na odprtino za polnjenje balona in ohranjajte negativni tlak. Preverite, da zrak ne uhaja več nazaj v brizgalko.
- 3) Svetlino vodilne žice izperite s heparinizirano fiziološko raztopino z uporabo igle za izpiranje in jo napolnite s heparinizirano fiziološko raztopino.
- 4) Celoten balonski kateter za dilatacijo PTA Metacross RX potopite v fiziološko raztopino.
3. Vstavitvev in napolnitev balonskega katetra
Pred uporabo preverite, ali je kateter združljiv z vodilnim katetrom (ni vključen v ta komplet), vodilom (ni vključen v ta komplet) in vodilno žico (ni vključena v ta paket) glede na naslednjo razpredelnico.

Kataloška številka	Premer balona (mm)	Združljivo vodilo (Fr/mm)	Največji premer za vodilno žico (palci/mm)
BD-L30020MR ~	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 palca (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Pri uporabi tega katetra, vstavljenega v vodilo ali vodilni kateter

- 1) Pri uporabi tega katetra v vodilnem katetru popustite hemostatični ventil, a naj ostane še vedno dovolj pritv, da preprečite iztekanje krvi.
- 2) Ta kateter s povsem izpraznjenim balonom postopno vstavljajte v vodilo ali vodilni kateter vzdolž vodilne žice, ki je potisnjena do distalnega obrobja lezije. Pod presvettliljivo kateter počasi potiskajte, da se radioneupustni označevalec na balonu pomakne do ciljnega mesta.
- 3) Pod presvettliljivo preverite položaj radioneupustnega označevalca na balonu in določite mesto dilatacije.
- 4) Na odprtino za polnjenje balona čvrsto pritrdite pripomoček za polnjenje.
- 5) Postopno napolnite balon do končnega premera in preverjajte tlak za polnitev ter razširite stenotično lezijo (za premere napolnjenega balona si oglejte razpredelnico skladnosti za balone v 1. tabeli na koncu teh navodil za uporabo).
4. Odstranitev katetra
 - 1) Ko ustvarite negativni tlak, da povsem izpraznite balon, odstranite kateter.
5. Ponovna vstavitvev katetra
 - 1) Če je potrebna ponovna vstavitvev odstranjenega katetra z izpraznjenim balonom, se prepričajte, da je balon povsem izprazen in zložen, preden ga ponovno vstavite v krvno žilo pacienta. Pri ponovni vstavitvi uporabljajte kateter, kot je navedeno v delu »Vstavitvev in napolnitev balonskega katetra«.
 - 2) Če pri ponovnem vstavljanju katetra začitute oteženo pomikanje, ga nehalje pomikati naprej in ga previdno odstranite iz krvne žile pacienta. Za uporabo pripravite nov kateter Metacross RX skladno s postopki, ki jih najdete zgoraj v tem delu navodil za uporabo.

[Zapleti]

Okvare priprave:

- Pretgranje balona
- Nezadostna polnitev/praznjenje balona
- Pretgranje balona/ali cevke katetra
- Težave pri odstranitvi priprave
- Iztekanje tekočine za polnjenje

Neželeni učinki:

- Lokalne ali sistemske okužbe
- Lokalna notranja krvavitev ali hematoma
- Poškodba intime
- Disekcija žile
- Predrtje žile
- Pretrganje žile
- Anevrizma
- Aritmija
- Akutna zamašitev obkoda
- Venska trombembolija
- Vazospazem
- Nastanek psevdooanevrizme
- Arteriovenska fistula
- Krvavitev, zaradi katere je potrebna infuzija
- Alergična reakcija na kontrastni medij/ledvična odpoved
- Bolečina ali trgajoča bolečina
- Smrt
- Embolija
- Endokarditis
- Vročica
- Hipotenzija/Hipertenzija
- Vnetje
- Miokardni infarkt
- Sepsa
- Šok
- Kap
- Prehodni ishemični napad (tranzitorna ishemična ataka)

[Shranjevanje in rok uporabnosti]

1. Hranite v hladnem, suhem in temnem prostoru. Ne izpostavljajte vodi, neposredni sončni svetlobi.
2. Rok uporabnosti je naveden na škatli. Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.

[Paket]

1 pribor/škatla

[Ime in naslov proizvajalca ali zastopnika]



Proizvajalec: KANEKA CORPORATION

Naslov: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel. št.: (+81)-(0) 6-6226-5256
Št. faksa: (+81)-(0) 6-6226-5143



Zakonit pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Naslov: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tel. št.: (+32)-(0) 14-256-297
Št. faksa: (+32)-(0) 14-256-298

Distributer v EU: TERUMO EUROPE N.V.

Naslov: INTERLEUVENLAAN 40, 40,3001 LEUVEN, BELGIJA
Tel. št.: (+32)-(0) 16 381 211
Št. faksa: (+32)-(0) 16 400 249

Vsa imena blagovnih znamk so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja TERUMO CORPORATION ali njihovih drugih lastnikov.

1. Tabela Metacross RX balon Razpredelnica skladnosti

Tlak (atm)	Premer balona (mm)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.97'	6.98'	8.06'	9.00'	9.91'	12.03'			
10	3.02'	4.01'	5.04'	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31			
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36"	10.44"	12.64"			
14	3.16	4.15	5.26	6.40"	7.49"	8.66"	9.56	10.70	13.01			
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90						
18	3.30	4.30	5.48"									
20	3.38"	4.41"	5.61									
22	3.47	4.51	5.75									
24	3.57	4.64										

* Nazivni tlak


** Naznačen delovni tlak

[OPIS PROIZVODA]

Metacross RX je dilatacioni balon-kateter za perkutanu transluminalnu angioplastiku (PTA) kod perifernih indikacija. Ovaj Metacross RX je tip brze zamene (RX) a maksimalni prečnik kompatibilne vodič-žice je 0,89 mm (0,035 inča).

Distalni deo ovog katetera sastoji se balona i osovine (ko-aksijalne) dvostrukog lumena. Spoljni lumen koristi se za naduvavanje i izdavanje balona kontrastnim sredstvom razređenim fiziološkim rastvorom. Unutrašnji lumen (lumen vodič-žice; od distalnog vrha do otvora za vodič-žicu) služi za umetanje kompatibilne vodič-žice radi lakšeg uvođenja katetera kroz stenotičnu leziju ili stent koji treba da se izduva. Proksimalni deo je osovina jednog lumena sa jednim „luer-port“ čvorištem za priključivanje medicinskog sredstva za naduvavanje / izdavanje. Dva radiopaktna markera postavljena su u balon, a oni ukazuju na radnu dužinu balona, i služe da vode lekara pri pravilnom pozicioniranju balona u ciljanu leziju pomoću fluoroskopije. Metacross RX je dostupan u različitim veličinama balona po prečniku i dužini pri preporučenim pritisacima za naduvavanje (nominalni pritisak). Nakon naduvavanja, prečnik balona varira prema pritisku naduvavanja. Grafikon usklađenosti balona Metacross RX dat je u tabeli 1 na kraju ovih uputstava za upotrebu. U paketu za sterilizaciju, medicinsko sredstvo je opremljeno zaštitnim materijalima, zaštitnom cevi balona i malom sondom, a sve treba ukloniti pre upotrebe. Zaštitna cev balona postavlja se preko balona savijenog u niskom profilu a mala sonda se postavlja u lumen vodič-žice kako bi sprečila lomljenje osovine katetera. Distalni vrh katetera sužen je kako bi olakšao napredovanje katetera u stenotičnu leziju ili stent.

Igla za ispiranje priložena je kao dodatak ovom medicinskom sredstvu radi ispiranja i punjenja lumena vodič-žice kontrastnim sredstvom.
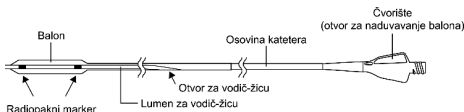
<NAZIV SVAKOG DELA>

Sterilan i nepirogen u neoštećenoj i neotvorenoj blister-kesici. Ovo medicinsko sredstvo je sterilisano etilen-oksidiom.

Preporučeni prečnik vodič-žice:

Maksimalni prečnik: 0,035" (0,89 mm)

Preporučeni pritisak naduvavanja i maksimalni pritisak naduvavanja**Nominalni pritisak:**

- | | |
|----------------------------------|--------|
| - Prečnik balona: manji od 6 mm: | 10 atm |
| - Prečnik balona: 6 mm i veći: | 8 atm |

Procenjeni pritisak pucanja:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Prečnik balona: manji od 5 mm: | 20 atm |
| - Prečnik balona: 5 mm: | 18 atm |
| - Prečnik balona: 6 mm, 7 mm, 8 mm: | 14 atm |
| - Prečnik balona: 9 mm i veći: | 12 atm |

[INDIKACIJE]

Metacross RX dilatacioni balon-kateter za PTA namenjen je za dilataciju stenoza u ilijačnoj, femoralnoj, ilijačno-femoralnoj, poplitealnoj, infrapoplitealnoj i renalnim arterijama, kao i za terapiju opstruktivnih lezija nativne ili sintetičke arteriovenske dijalizne fistule. Ovo medicinsko sredstvo je indikovano i za post-dilataciju stenta u perifernoj vaskulaturi.

Napomena: Test verifikacije za post-dilataciju stenta medicinskog sredstva Metacross RX objavljen je korišćenjem Complete® SE vaskularnog stent sistema (Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® vaskularnog stent sistema (korporacija Cordis) i Epic™ vaskularnog samoširećeg stent sistema (Bostonska naučna korporacija).

[KONTRAINDIKACIJE]

1. Pacijenti kod kojih se razvila anastomotična stenoza u periodu od jednog meseca nakon postavljanja AV šanta.
2. Kod pacijenata koji imaju lezije koje komuniciraju sa pseudoaneurizmom.
3. Trudnice.
4. Pacijenti koji ne podnose antiagregaciju ili antikoagulaciju terapiju.

[UPOZORENJA I MERE PREDOSTROŽNOSTI]**[Upozorenja]**

1. Ovaj uređaj je namenjen samo za jednokratnu upotrebu. Ne upotrebljavati ponovo. Ne sterilisati. Ne obrađivati ponovo. Ponovna obrada može da ugrozi sterilnost, biološku kompatibilnost i fizički integritet medicinskog sredstva.
2. Nemojte koristiti ako su proizvod ili pojedinačno pakovanje oštećeni.
3. Nemojte naduvavati balon tako da premaši prečnik krvnog suda proksimalno i distalno od stenotične lezije.
4. Nemojte naduvavati balon na pritisak koji premašuje procenjeni pritisak pucanja.
5. Nemojte koristiti ovaj kateter u sistemu centralne cirkulacije.

[Mere opreza koje se odnose na postupke]

1. Pažljivo i polako izvadite medicinsko sredstvo iz cevi nosača i uklonite zaštitne delove sa medicinskog sredstva. Nepažljivo rukovanje može da uzrokuje oštećenje balona i/ili osovine katetera medicinskog sredstva, čime se narušava sposobnost naduvavanja i/ili izdavanja balona.
2. Balon naduvavajte kontrastnim sredstvom razređenim fiziološkim rastvorom u odnosu 1:1 (u daljem tekstu „tečnost za naduvavanje“). Za naduvavanje se ne sme koristiti nikakvo gasovito sredstvo, kao što je vazduh. (Balon se može nepravilno naduvati.)
3. Pre upotrebe, izbacite sav vazduh iz balona i lumena za naduvavanje balona i zamenite ga tečnošću za naduvavanje. (U slučaju nepotpunog izbacivanja vazduha, stanje naduvanosti balona se ne može pratiti pomoću fluoroskopije.)
4. U slučaju ozbiljnih stenotičnih lezija, kao što su kalcifikovane lezije, krvni sud se ne može u potpunosti dilatirati. U tom slučaju nemojte primenjivati pritisak koji premašuje procenjeni pritisak pucanja. (Balon može puci, a njegovi ostaci mogu ostati u telu pacijenta.)
5. Što se tiče medicinskih sredstava koja se koriste zajedno sa ovim kateterom, sledite uputstva za upotrebu tih medicinskih sredstava. (Kada se balon-kateter koristi za post-dilataciju stenta prilikom postupka postavljanja perifernog stenta, konsultujte uputstvo za upotrebu koje je priložio proizvođač.)
6. Pri umetanju u stent, vadenju iz stenta ili dilataciji balona unutar stenta, postupajte pažljivo uz praćenje fluoroskopijom. (Postupanje bez praćenja fluoroskopijom može dovesti do oštećenja katetera ili do povrede krvnog suda.)
7. Nemojte pokušavati da provučete Metacross RX dilatacioni balon-kateter za PTA kroz uvodnik manje veličine nego što je ona naznačena na oznaci. Pogledajte oznaku na proizvodu.

[Mere predostrožnosti tokom upotrebe]

1. Medicinski uređaj upotrebite odmah po otvaranju sterilnog pakovanja.
2. Celokupna procedura se mora izvoditi u sterilnim uslovima.
3. Ovaj kateter smeju da koriste samo lekari koji su obučeni za perkutanu vaskularnu terapiju.
4. Izaberite kateter sa balonom odgovarajuće veličine (prečnikom i dužinom balona) u skladu sa sledećim (proceduralnim) kriterijumima ().
 - 1) Prečnik naduvanog balona ne sme da premaši unutrašnji prečnik krvnog suda proksimalno i distalno u odnosu na leziju.
 - 2) Dužina naduvanog balona ne sme da premaši dužinu lezije koja se tretira. (Izbor neodgovarajućeg katetera može da dovede do akutne okluzije krvnog suda.)

- Koristite ovaj kateter samo ako postoje uslovi za izvođenje hitne hirurške intervencije u svakom trenutku.
- Lekar koji je zadužen za obavljanje postupka mora da odredi trajanje i broj naduvavanja balona na osnovu svojih prethodnih iskustava.
- Heparinizovan fiziološki rastvor mora da se ubrizga da bi se sprečilo zgrušavanje dok se ovaj balon-kateter uvodi u krvni sud.
- Nikada nemojte naduvavati balon ili uvoditi vodič-žicu ako je kateter savijen ili iskrivljen.
- Pažljivo manipulišite kateterom unutar krvnog suda proveravajući položaj i pomeranje njegovog vrha pomoću fluoroskopije ili DSA (digitalna suprakciona angiografija).
- Balon uvek naduvavajte prateći stanje njegove naduvanosti pomoću fluoroskopije. Pažljivo naduvavajte balon proveravajući njegovo pomeranje pomoću radiopaktnih markera. Ako dođe do bilo kakve abnormalnosti, kao što je blag otpor, nepokretljivost katetera za vreme manipulisanja ili savijenost distalnog vrha vodič-žice, postupak se mora odmah prekinuti, a ovaj kateter polako izvući zajedno sa vodič-žicom.
- Nemojte brzo umetati ili vaditi ovaj kateter. (Brzo rukovanje može da dovede do oštećenja ovog katetera ili do povrede intime krvnog suda.)
- Nemojte pomerati kateter dok god je balon naduvan. (Pomeranje katetera sa naduvanim balonom može da dovede do pucanja balona ili do preloma osovine katetera.)
- Nemojte brzo naduvavati ili izduvavati balon unutar krvnog suda. (Brzo naduvavanje ili izduvavanje balona može da dovede do oštećenja krvnog suda ili do pucanja balona i zaostajanja ostataka balona u telu pacijenta.)
- Nemojte koristiti injektor (sredstvo za automatsko ubrizgavanje) za naduvavanje balona.
- Moraju se preduzeti mere predostrožnosti kako bi se sprečilo bilo kakvo oštećenje katetera hirurškim nožem ili makazama.
- Ako dođe do bilo kakve abnormalnosti prilikom manipulisanja kateterom, kao što je snažan otpor, postupak se mora odmah prekinuti. Mora se utvrditi uzrok i moraju se preduzeti odgovarajuće mere. (Nastavak rada uz primenu sile može da dovede do oštećenja katetera ili zida krvnog suda.)
- Uvek obraćajte pažnju na stanje pacijenta i pratite njegove vitalne parametre kao što su telesna temperatura, puls i disanje. Ukoliko dođe do bilo kakve abnormalnosti, odmah prekinite sa upotrebom ovog katetera ili preduzmite mere prilagođene stanju pacijenta prema odluci lekara.
- Nakon upotrebe bacite kateter u medicinski otpad u skladu sa bolničkim procedurama.
- Ne koristite sredstva koja sadrže organske rastvarače ili uljana kontrastna sredstva. Kontakt sa ovim sredstvima može da dovede do oštećenja katetera.
- Prilikom manipulisanja ovim kateterom nemojte ga uvijati niti okretati.
- Prilikom umetanja ovog medicinskog sredstva u krvni sud ili vađenja ovog medicinskog sredstva iz krvnog suda, uverite se da je balon potpuno izduvan. (Medicinsko sredstvo sa većim i dužim balonom zahteva duže vreme izduvavanja.)
- Ako se oseti otpor prilikom vađenja ovog medicinskog sredstva nakon obavljenog postupka, preporučuje se da se čitav sistem izvadi zajedno sa uvodnikom.
- Uvek koristite kateter uz vodič-žicu koja je umetnuta u lumen za vodič-žicu.

[Uputstva za rad]

Materijali koji su obično potrebni pri korišćenju Metacross RX dilatacionog balon-katetera za PTA pri PTA postupcima obuhvataju:

- Vodič-žicu/e odgovarajućeg prečnika i dužine
- Odgovarajući uvodnik i komplet za dilataciju
- Bočicu kontrastnog sredstva
- Bočicu fiziološkog rastvora
- Sredstvo za naduvavanje sa manometrom
- Špic sa luer-blokadom
- Trokraku slavinu

[Metod rada ili uputstvo za upotrebu]

- Izbor katetera

Pre upotrebe proverite unutrašnji prečnik krvnog suda proksimalno i distalno od stenotične lezije pomoću fluoroskopije i izaberite kateter sa balonom odgovarajuće veličine. Ako odgovaraju dve veličine balona, odaberite manju veličinu.

2. Priprema

- Nakon aseptičnog vađenja katetera iz pakovanja, uklonite zaštitne materijale sa katetera.
 - Zamenite vazduh iz balona i iz lumena za naduvavanje balona tečnošću za naduvavanje primenom sledećih postupaka.
 - Priključite medicinsko sredstvo za naduvavanje (nije uključeno u ovaj komplet) napunjeno tečnošću za naduvavanje na priključak za naduvavanje balona.
 - Nakon primene negativnog pritiska u trajanju od oko 10 sekundi na medicinsko sredstvo za naduvavanje, usmerite vrh osovine katetera nadole i polako otpustite negativan pritisak kako biste dozvolili da tečnost napuni balon i lumen za naduvavanje balona i tako izbaci vazduh.
 - Ako u balonu i u lumen za naduvavanje balona zaostane vazduh, ponovite proceduru b) sve dok se vazduh u potpunosti ne izbaci.
 - Odvojte medicinsko sredstvo za naduvavanje od priključka za naduvavanje balona i uklonite vazduh iz cilindra medicinskog sredstva za naduvavanje.
 - Ponovo priključite medicinski uređaj za naduvavanje na priključak za naduvavanje balona i održavajte negativan pritisak. Uverite se da se vazduh više ne vraća u špic.
 - Isperte lumen za vodič-žicu heparinizovanim fiziološkim rastvorom koristeći iglu za ispiranje i napunite lumen heparinizovanim fiziološkim rastvorom.
 - Potopite kompletan Metacross RX dilatacioni balon-kateter za PTA u fiziološki rastvor.
3. Umetanje i naduvavanje balon-katetera
- Pre upotrebe proverite da li je ovaj kateter kompatibilan sa vodič-kateterom (nije uključen u ovaj komplet), uvodnikom (nije uključen u ovaj komplet) i vodič-žicom (nije uključena u ovaj komplet) pomoću tablice u nastavku.

Kataloški broj	Prečnik balona (mm)	Kompatibilni uvodnik (Fr/mm)	Maksimalni prečnik vodič-žice (inč/mm)
BD-L30020MR ~	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 inča (0,89 mm)
BD-L70200ER	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

U slučaju upotrebe ovog katetera umetnutog u uvodnik ili vodič-kateter

- Kada se koristi ovaj kateter umetnut u vodič-kateter, olabavite hemostatsku valvulu istovremeno pazeći da bude dovoljno pritegnut da bi se sprečilo curenje krvi.
 - Postupno uvodite kateter, uz potpuno izduvan balon, u uvodnik ili vodič-kateter preko vodič-žice i uvedite ga do distalne periferije lezije. Pomoću fluoroskopije polako uvodite kateter tako da radiopaktni marker na balonu dosegne ciljno mesto.
 - Pomoću fluoroskopije proverite položaj radiopaktnog markera na balonu i utvrdite mesto dilatacije.
 - Čvrsto pričvrstite medicinsko sredstvo za naduvavanje na priključak za naduvavanje balona.
 - Postupno naduvajte balon do ciljnog prečnika proveravajući pritisak naduvavanja i dilatirajte stenotičnu leziju (za prečnike naduvanih balona, pogledajte grafikon usklađenosti balona dat u tabeli 1, na kraju ovog uputstva za upotrebu).
4. Uklanjanje katetera
- Nakon primene negativnog pritiska radi potpunog izduvavanja balona, izvadite kateter iz tela pacijenta.

5. Ponovno uvođenje katetera

- 1) Ako je potrebno ponovno uvođenje izvađenog katetera sa izdvanim balonom, uverite se da je balon u potpunosti izdvan i sklopljen pre ponovnog uvođenja u krvni sud pacijenta. Prilikom ponovnog uvođenja koristite kateter po ovde datom odeljku „Uvođenje i naduvavanje balon katetera“.
- 2) Ako se oseti otpor prilikom ponovnog uvođenja katetera, prestanite sa uvođenjem i pažljivo ga izvucite iz krvnog suda pacijenta. Pripremite za korišćenje novi Metacross RX u skladu sa gore datim postupcima u ovom odeljku uputstva za upotrebu.

[Komplikacije]

Nedostaci medicinskog sredstva:

- Pucanje balona
- Nedovoljno naduvavanje/izduvavanje balona
- Pucanje balona i/ili prelom osovine katetera
- Teškoće pri vađenju medicinskog sredstva
- Curenje tečnosti za naduvavanje

Neželjeni događaji:

- Lokalne ili sistemske infekcije
- Lokalno unutrašnje krvarenje ili hematoma
- Pucanje intime
- Disekcija krvnog suda
- Perforacija krvnog suda
- Pucanje krvnog suda
- Aneurizma
- Aritmija
- Akutna okluzija krvnog suda
- Venska tromboembolija
- Vazospazam
- Formiranje pseudoaneurizme
- Arteriovenska fistula
- Krvarenje koje zahteva transfuziju
- Alergijski odgovor na kontrastno sredstvo/otkaz bubrega
- Dugotrajan ili pritiskajući bol
- Smrt
- Embolija
- Endokarditis
- Groznica
- Visok/nizak krvni pritisak
- Upala
- Infarkt miokarda
- Sepsa
- Šok
- Moždani udar
- Prolazni ishemični napad

[Skladištenje i datum isteka roka trajanja]

1. Čuvati na hladnom, suvom i tamnom mestu. Izbegavati izlaganje vodi i direktnom sunčevom svetlu.
2. Datum isteka roka trajanja naznačen je na kutiji. Nemojte koristiti po isteku roka trajanja.

[Pakovanje]

1 komplet/kutija

[Naziv i adresa proizvođača ili zastupnika]



Proizvođač: KANEKA CORPORATION

Adresa: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN

Br. tel.: (+81)-(0) 6-6226-5256

Br. faksa: (+81)-(0) 6-6226-5143

EC	REP
----	-----

Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj uniji:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresa: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Br. tel.: (+32)-(0) 14-256-297

Br. faksa: (+32)-(0) 14-256-298

Distributer za EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresa: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgija

Br. tel.: (+32)-(0) 16 381 211

Br. faksa: (+32)-(0) 16 400 249

Svi nazivi robnih marki su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi korporacije TERUMO CORPORATION i njihovih odnosnih vlasnika.

Tabela 1. Metacross RX Grafikon usklađenosti balona

Pritisak (atm)	Prečnik balona (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40*	7.49*	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

* Nominalni pritisak


** Procenjeni pritisak pucanja

[DESCRIEREA PRODUSULUI]

Metacross RX este un cateter de dilatare pe balon, pentru angioplastia transluminală percutanată (PTA) pentru indicații periferice. Metacross RX este de tipul cu schimb raid (RX) iar diametrul maxim al firului de ghidaj compatibil este de 0.035 inci (0,89 mm).

Secțiunea distală a cateterului constă dintr-un balon și țije cu lumen dual (co-axiale). Lumenul exterior este utilizat pentru umflarea și dezumflarea balonului cu substanță de contrast diluată cu soluție salină. Lumenul interior (lumenul pentru firul de ghidaj, de la vârful distal până la portul firului de ghidaj) este pentru introducerea unui fir de ghidaj compatibil pentru a facilita avansarea cateterului prin leziunea stenotică sau stentul care trebuie dilatat. Secțiunea proximală este o țijă cu lumen unic, având un singur racord cu port luer destinat conectării unui dispozitiv de umflare/dezumflare. În interiorul balonului, două marcaje radioopace, care indică lungimea de lucru a balonului, sunt plasate pentru a facilita poziționarea corespunzătoare, de către medic, a balonului în leziunea țintă, sub control fluoroscopic. Metacross RX este disponibil în diverse mărimi ale balonului, în diametru și în lungime, la presiunile de umflare recomandate (presiune nominală). La umflare, diametrul balonului variază în funcție de presiunea de umflare. Diagrama de complianță a balonului pentru Metacross RX este furnizată în Tabelul 1 de la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare. În ambalajul de sterilizare, dispozitivul este echipat cu materiale de protecție, un tub de protecție a balonului și un stilet, care vor fi scoase înainte de utilizare. Tubul de protecție a balonului este plasat pe balon, printr-o împăturire strânsă, iar stiletul este introdus în lumenul pentru firul de ghidaj pentru a preveni colabarea țije cateterului. Vârful distal al cateterului este conic pentru a facilita avansarea cateterului în leziunea stenotică sau în stent. Acul de spălare este furnizat ca accesoriu al acestui dispozitiv, pentru spălarea și umplerea lumenului pentru firul de ghidare cu soluție salină heparinizată.

<DENUMIREA PĂRȚILOR COMPONENTE>

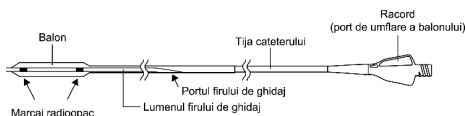

Steril și apirogen dacă punga nu este deschisă sau deteriorată. Acest dispozitiv este sterilizat cu oxid de etilenă.

Diametrul recomandat al firului de ghidaj:

Diametru maxim: 0.035" (0,89 mm)

Presiunea de umflare recomandată și presiunea maximă de umflare

Presiunea nominală:

- Diametrul balonului: mai mic de 6 mm:	10 atm
- Diametrul balonului: 6 mm sau mai mare:	8 atm

Presiunea nominală de explozie:

- Diametrul balonului: mai mic de 5 mm:	20 atm
- Diametrul balonului: 5 mm:	18 atm
- Diametrul balonului: 6 mm, 7 mm, 8 mm:	14 atm
- Diametrul balonului: 9 mm sau mai mare:	12 atm

[INDICAȚII]

Cateterul de dilatare pe balon pentru PTA Metacross RX este destinat dilatării stenozei în arterele iliacă, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra-poplitee și renală, precum și pentru tratamentul leziunilor obstructive pe fistulele arteriovenoase de dializă, native sau artificiale. De asemenea, acest dispozitiv este indicat pentru post-dilatarea stentului în vasculatura periferică.

Notă: Testul de verificare a Metacross RX pentru post-dilatarea stentului a fost efectuat utilizând sistemul de stent vascular Complete® SE (Medtronic, Inc), sistemul de stent vascular S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) și sistemul de stent vascular auto-expandabil Epic™ (Boston Scientific Corporation)

[CONTRAINDICAȚII]

1. Pacienții care au dezvoltat stenoza anastomozei în termen de o lună după crearea șuntului arteriovenos.
2. Pacienții care au leziuni care comunică cu un pseudoanevrism.
3. Paciențele însărcinate.
4. Pacienții care nu pot tolera tratamentul antiplachetar sau anticoagulant.

[AVERTISMENTE ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE]

[Avertismente]

1. Acest dispozitiv este de unică folosință. Nu refolosiți. Nu resterilizați. Nu reprocesați. Reprocesarea poate compromite caracterul steril, biocompatibilitatea și integritatea fizică a dispozitivului.
2. A nu se utiliza dacă produsul sau ambalajul a fost deteriorat.
3. Nu umflați balonul depășind diametrul vasului sanguin, în punctele proximal și distal față de leziunea stenotică.
4. Nu umflați balonul la o presiune mai mare decât presiunea nominală de explozie
5. Nu utilizați acest cateter în sistemul circulator central.

[Măsurile de precauție privind procedurile]

1. Scoateți încet și cu atenție dispozitivul din tubul de portaj și înlocuiți părțile de protecție ale dispozitivului. Prin manipulare neatență se poate produce deteriorarea balonului și/sau a țije cateterului, afectând totodată procesul de umflare și/sau dezumflare a balonului.
2. Umflați balonul cu substanță de contrast diluată cu soluție salină în proporția 1:1 (amestec denumit mai jos „lichid de umflare”). Pentru umflare nu trebuie utilizat un mediu gazos, de exemplu aer. (Balonul se poate umfla în mod neregulat.)
3. Înainte de utilizare, eliminați tot aerul din balon și din lumenul de umflare a balonului și înlocuiți-l cu lichidul de umflare. (În cazul în care aerul nu este eliminat complet, starea de umflare a balonului nu poate fi observată la fluoroscopie)
4. În cazul unei leziuni stenotice severe cum sunt leziunile calcificate, vasul de sânge nu va putea fi dilatat în întregime. În asemenea caz, nu aplicați o presiune care să depășească valoarea nominală a presiunii de explozie. (Balonul ar putea exploda și detritusurile ar putea rămâne în corpul pacientului.)
5. Pentru dispozitivele medicale utilizate împreună cu acest cateter, respectați instrucțiunile de utilizare a dispozitivelor respective. (Atunci când cateterul cu balon este utilizat pentru post-dilatarea stentului în cadrul procedurii de amplasare a stentului periferic, consultați instrucțiunile de utilizare emise de fabricant.)
6. Pentru introducerea în stent, retragerea din stent sau dilatarea balonului în interiorul stentului, procedați cu atenție, sub control fluoroscopic. (Lucrând fără control fluoroscopic puteți deteriora cateterul sau puteți leza vasul sanguin).
7. Nu încercați să treceți cateterul de dilatare pe balon pentru PTA Metacross RX printr-o teacă de introducere având mărimea mai mică decât cea indicată pe etichetă. Consultați eticheta produsului.

[Măsurile de precauție în timpul utilizării]

1. Utilizați dispozitivul imediat după deschiderea ambalajului steril.
2. Întreaga procedură trebuie efectuată în condiții aseptice.
3. A se utiliza acest cateter numai de medicii instruiți în terapie vasculară percutanată.
4. Selectați cateterul cu dimensiunea corespunzătoare a balonului (diametrul balonului, lungimea balonului) conform următoarelor criterii (proceduri).
- 1) Diametrul balonului umflat nu trebuie să fie mai mare decât diametrul interior al vasului de sânge, în punctele proximal și distal față de leziune.

- 2) Lungimea balonului umflat nu trebuie să depășească lungimea leziunii care urmează să fie tratată.
(O selecție inadecvată a cateterului poate conduce la ocluzie vasculară acută.)
5. Utilizați acest cateter numai în cazul în care intervenția chirurgicală în regim de urgență poate fi efectuată în orice moment.
6. Medicul care trebuie să efectueze procedura trebuie să stabilească durata și numărul de umflări ale balonului, pe baza experienței sale anterioare.
7. Trebuie să fie perfuzată soluție salină heparinizată pentru anti-coagulare în timpul introducerii cateterului cu balon în vasul de sânge.
8. Nu umflați niciodată balonul sau nu avansați firul de ghidaj în cazul în care cateterul este îndoit sau răsucit.
9. Manevrați cu atenție cateterul în vasul sanguin, verificând locația și mișcarea vârfului său cu ajutorul fluoroscopiei sau monitorizării DSA (angiografie cu substrație digitală).
10. Umflați întotdeauna balonul, verificând starea de umflare cu ajutorul fluoroscopiei. Umflați cu atenție balonul, verificând mișcarea acestuia cu ajutorul marcărilor radio-opace. Dacă se descoperă o anomalie, de exemplu faptul că există o rezistență ușoară, cateterul este fix în timpul manevrării sau vârful distal al firului de ghidaj este răsucit, trebuie să întrerupeți imediat procedura iar cateterul trebuie să fie îndepărtat încet, împreună cu firul de ghidaj.
11. Nu introduceți și nu îndepărtați rapid acest cateter. (Dacă acționați rapid, puteți deteriora cateterul sau puteți leza intima vasculară).
12. Nu mișcați cateterul atunci când balonul este umflat. (Mișcarea cateterului cu balonul umflat poate duce la explozia balonului sau la ruperea țije cateterului.)
13. Nu umflați și nu dezumflați balonul rapid în vasul de sânge. (Umflarea sau dezumflarea rapidă poate provoca lezarea vasului de sânge sau explozia balonului, resturile rămânând în corpul pacientului).
14. Nu utilizați un injectomat (dispozitiv de injectare automată) pentru umflarea balonului.
15. Trebuie luate măsuri de precauție pentru a preveni orice deteriorare a cateterului de către bisturiu sau foarfecii chirurgicale.
16. Dacă, la manevrarea cateterului, apare orice anomalie, de exemplu o rezistență puternică, procedura trebuie întreruptă imediat. Cauza trebuie investigată și trebuie luate măsuri adecvate. (Operarea în continuare, cu forță excesivă, poate conduce la deteriorarea cateterului sau la lezarea peretelui vascular.)
17. Întotdeauna, acordați atenție stării pacientului și monitorizați temperatura corporală, pulsul și respirația. În momentul identificării anomaliei, întrerupeți imediat utilizarea cateterului sau luați măsurile adecvate pentru starea pacientului, acestea fiind la latitudinea medicului.
18. După utilizare, eliminați cateterul ca deșeu medical, conform procedurilor spitalului.
19. Nu folosiți agenți care conțin solvenți organici sau substanțe de contrast uleioase. Contactul cu acești agenți poate conduce la deteriorarea cateterului.
20. La manevrarea cateterului, nu răsuciți și nu rotiți cateterul.
21. La introducerea acestui dispozitiv în vasul de sânge sau la scoaterea acestui dispozitiv din vasul de sânge, aveți grijă ca balonul să fie complet dezumflat. (Un dispozitiv prevăzut cu balon mai mare și mai lung necesită un timp de dezumflare mai lung.)
22. Dacă se întâmpină o rezistență în cursul retragerii post-procedurale a acestui dispozitiv, se recomandă retragerea întregului sistem, împreună cu teaca de introducere/de ghidaj.
23. Utilizați întotdeauna cateterul împreună cu un fir de ghidaj introdus prin lumenul pentru firul de ghidaj.

[Instrucțiuni de operare]

Materialele care sunt, de obicei, necesare pentru efectuarea PTA cu ajutorul cateterului de dilatare pe balon pentru PTA Metacross RX includ:

- Fir(e) de ghidaj cu diametru și lungime adecvate
- Teacă de introducere/ghidaj și set de dilatare adecvate

- Flacon cu substanță de contrast
- Flacon cu soluție salină sterilă
- Dispozitiv de umflare cu manometru
- Seringă luer-lock
- Robinet cu trei căi

[Metoda de operare sau instrucțiuni de utilizare]

1. Selectarea cateterului
Înainte de utilizare, verificați diametrul interior al vasului de sânge în punctele proximal și distal față de leziunea stenotică cu ajutorul fluoroscopiei și selecția cateterului cu dimensiunea corespunzătoare a balonului. Dacă pentru diametrul verificat se pot utiliza două dimensiuni, selectați dimensiunea mai mică.
2. Pregătirea
 - 1) După ce îndepărtați aseptice cateterul din ambalaj, detașați materialele de protecție de la cateter.
 - 2) Înlocuiți aerul din balon și din lumenul de umflare a balonului cu lichid de umflare, conform următoarelor proceduri.
 - a) Atașați dispozitivul de umflare (nu este inclus în acest set) umplut cu lichidul de umflare la portul de umflare al balonului.
 - b) După ce aplicați o presiune negativă timp de aproximativ 10 secunde asupra dispozitivului de umflare, direcționați în jos vârful țije cateterului și eliberați încet presiunea negativă pentru a permite lichidului să umple balonul și lumenul de umflare a balonului și pentru a elimina aerul.
 - c) Dacă încă se mai află aer în balon și în lumenul de umflare a balonului, repetați procedura b) până când aerul este eliminat complet.
 - d) Detașați dispozitivul de umflare de la portul de umflare a balonului și scoateți aerul din tubul dispozitivului de umflare.
 - e) Reatașați dispozitivul de umflare la portul de umflare a balonului și mențineți presiunea negativă. Verificați ca aerul să nu se mai întoarcă în seringă.
 - 3) Spălați lumenul firului de ghidaj cu soluție salină heparinizată folosind acul de spălare și umpleți lumenul cu soluție salină heparinizată.
 - 4) Scufundati întregul cateter de dilatare pe balon pentru PTA Metacross RX în soluție salină.
3. Introducerea și umflarea balonului cateterului
Înainte de utilizare, verificați compatibilitatea cateterului cu cateterul de ghidaj (nu este inclus în acest set), teaca de introducere (nu este inclusă în acest set) și firul de ghidaj (nu este inclus în acest set) folosind tabelul de mai jos.

Număr de catalog	Diametru balon (mm)	Teacă compatibilă (Fr/mm)	Diametru maxim al firului de ghidaj (inch/mm)
BD-L30020MR ~ BD-L70200ER	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm	6 Fr / 2,00 mm 7 Fr / 2,33 mm	0,035 inch (0,89 mm)

Când utilizați acest cateter introdus în teaca de introducere sau cateterul de ghidaj

- 1) Când utilizați acest cateter în cateterul de ghidaj, slăbiți valva hemostatică, păstrând-o în același timp suficient de strânsă, astfel încât să prevină scurgerile de sânge.
- 2) Introduceți treptat cateterul, cu balonul complet dezumflat, în teaca de introducere sau cateterul de ghidaj, peste firul de ghidaj, și avansați către periferia distală a leziunii. Sub control fluoroscopic, avansați încet cateterul până când marcajul radioopac al balonului acestuia ajunge la locul țintă.
- 3) Sub control fluoroscopic, verificați poziția marcajului radioopac al balonului și determinați locul unde va avea loc dilatarea.
- 4) Atașați în mod ferm dispozitivul de umflare la racordul de umflare a balonului.
- 5) Umflați treptat balonul până la diametrul țintă, verificând presiunea de umflare și dilatați leziunea stenotică (pentru diametrele balonului în stare umflată, consultați diagrama de complianță a balonului furnizată în Tabelul 1 de la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare).

4. Îndepărtarea cateterului

- 1) După ce aplicați o presiune negativă pentru a dezumfla complet balonul, îndepărtați cateterul.

5. Re-introducerea cateterului

- 1) Dacă este necesară re-introducerea cateterului scos cu balonul dezumflat, asigurați-vă că balonul este complet dezumflat și împăturit înainte de a-l re-introduce în vasul de sânge al pacientului. Pentru re-introducere utilizați cateterul conform instrucțiunilor de la secțiunea „Introducerea și umflarea balonului cateterului” din acest document.
- 2) Dacă întâmpinați vreo rezistență în timpul re-introducerii cateterului, opriți avansarea acestuia și scoteți-l cu grijă din vasul de sânge al pacientului. Pregătiți pentru utilizare un nou dispozitiv Metacross RX în conformitate cu procedurile descrise mai sus, în această secțiune a acestor instrucțiuni de utilizare.



Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresă: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Nr. tel.: (+32)-(0) 14-256-297

Nr. fax: (+32)-(0) 14-256-298

Distributor pentru UE: TERUMO EUROPE N.V.

Adresă: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgia

Nr. tel.: (+32)-(0) 16 381 211

Nr. fax: (+32)-(0) 16 400 249

Toate numele numele de firme și denumirile sunt mărci de firmă și mărci înregistrate ale TERUMO CORPORATION și ale firmelor respective.

[Complicații]

Defecțiuni ale dispozitivului:

- Ruperea balonului
- Umflarea/dezumflarea insuficientă a balonului
- Ruperea balonului și/sau a tije cateterului
- Dificultate la îndepărtarea dispozitivului
- Scurgerea lichidului de umflare

Evenimente adverse:

- Infecție locală sau sistemică
- Hemoragie internă locală sau hematom
- Ruptură de intimă
- Disecție vasculară
- Perforație vasculară
- Ruptură vasculară
- Anevrism
- Aritmie
- Ocluzie vasculară acută
- Tromboembolism venos
- Spasm vascular
- Formarea unui pseudoanevrism
- Fistulă arteriovenoasă
- Hemoragie care necesită transfuzie
- Reacție alergică la substanța de contrast/insuficiență renală
- Disconfort sau durere la apăsare
- Deces
- Embolism
- Endocardită
- Febră
- Hipertensiune / Hipotensiune
- Inflamație
- Infarct miocardic
- Sepsis
- Șoc
- Accident vascular cerebral
- Atac ischemic tranzitoriu

[Depozitare și data expirării]

1. A se păstra într-un loc răcoros, uscat și întunecos. A se evita expunerea la apă și la lumina solară directă.
2. Data de expirare este indicată pe cutie. A nu se utiliza după data de expirare.

[Ambalaj]

1 set/cutie

[Numele și adresa producătorului sau reprezentantului]



Producător: KANEKA CORPORATION

Adresă: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN

Nr. tel.: (+81)-(0) 6-6226-5256

Nr. fax: (+81)-(0) 6-6226-5143

PM-05580

102/115 (3209-3)

Tabelul 1. Metacross RX Diagrama de complianță a balonului

Presiune (atm)	Diametru balon (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							


* Presiunea nominală

** Presiunea nominală de explozie

[ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА]

Metacross RX е перкутанен транслуминален (РТА) дилатационен балон-катетър за ангиопластика за периферни приложения. Metacross RX е от бързоосменен (RX) тип и максималният диаметър на съвместимия водач е 0.035 инча (0,89 мм). Дисталната секция на този катетър се състои от балон и тела с двойни канали (коаксиални). Външният канал се използва за надуване и изпускане на балона с рентгеноконтрастен агент, разтворен във физиологичен разтвор. Вътрешният канал (каналът на водача; от дисталния край до порта на водача) служи за прекъсване на съвместим водач, който да улесни придвижването на катетъра през стенотичната лезия или стента, който трябва да бъде разширен. Проксималната част представлява тяло с единичен канал с накрайник тип луер за свързване на устройство за надуване/изпускане. Вътре в балона са поставени два рентгеновонепроницаеми маркера, които показват работната дължина на балона и са предназначени да насочват лекаря за правилно позициониране на балона в целевата лезия под флуороскопия. Metacross RX се предлага с различни размери на балона по отношение на диаметъра и дължината при препоръчителните налягания на надуване. След надуването диаметърът на балона варира в зависимост от налягането на надуване. Диаграмата за съответствие на балоните за Metacross RX е представена в таблица 1 в края на тези указания за употреба. В стерилизационния пакет изделието е оборудвано с предпазни материали, предпазна тръба за балона и стилет, които трябва да бъдат отстранени преди употреба. Предпазната тръба за балона е поставена над съгнатия балон като нисък профил, а стилетът е поставен в канала на водача, за да се предотврати съгъването на тялото на катетъра. Дисталният край на катетъра е заострен, за да се улесни придвижването на катетъра в стенотичната лезия или стента. Иглата за промиване се предоставя като аксесоар за това изделие и служи за промиване и напълване на канала на водача с хепаринизиран физиологичен разтвор.

<НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ>

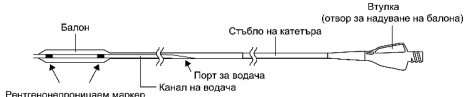

Стерилна и непиrogenна неповредена и неотворена blister - опаковка. Водачът е стерилизиран с етиленов оксид.

Препоръчителен диаметър на водача:

Максимален диаметър: 0,035 инча (0,89 мм)

Препоръчително налягане при надуване и максимално налягане при надуване

Номинално налягане:

Диаметър на балона: по-малък от 6 мм:	10 атм
- Диаметър на балона: 6 мм и по-голям:	8 атм

Номинално налягане на спукване:

- Диаметър на балона: по-малък от 5 мм:	20 атм
- Диаметър на балона: 5 мм:	18 атм
- Диаметър на балона: 6 мм, 7 мм, 8 мм:	14 атм
- Диаметър на балона: 9 мм и по-голям:	12 атм

[ПОКАЗАНИЯ]

Дилатационният балон катетър Metacross RX РТА е предназначен за дилатиране на стенози в иличните, феморални, илю-феморални, политеални, инфра-политеални и ренални артерии, и за лечение на обструктивни лезии на нативни или синтетични артерио-венозни диализни фистули. Това изделие е предназначено също и за последваща дилатация след поставяне на стента в периферната васкулатура.

Бележка: Проверочното изпитване за пост-дилатация на стента за Metacross RX беше извършено посредством система за васкуларни стентове Complete® SE (Medtronic, Inc), система за васкуларни стентове S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) и система за саморазпръскващи се васкуларни стентове Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ]

1. Пациенти, които са развили анатомична стеноза един месец след имплантиране на артерио-венозен байпас.
2. Пациенти които имат лезии, свързани с псевдоаневризма.
3. Пациентки които са бременни.
4. Пациенти които не толерират антиплателетна терапия или антикоагулантна терапия.

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ]

[Предупреждения]

1. Това изделие е само за еднократна употреба. Да не се ползва повторно. Да не се стерилизира повторно. Да не се подлага на повторна обработка. Да не се подлага на повторна обработка, тъй като тя може да влоши стерилността, биосъвместимостта и физичната цялост на устройството.
2. Не използвайте, ако продуктът или опаковката са повредени.
3. Не надувайте балона над диаметъра на кръвоносния съд проксимално или дистално на стенотичната лезия.
4. Не надувайте балона до стойности на налягането надвишаващи номиналното налягане на спукване.
5. Не използвайте този катетър за централната кръвоносна система.

[Предпазни мерки по отношение на процедурите]

1. Внимателно и бавно извадете това изделие от носещата тръба и извадете предпазните части от него. Невнимателното боравене може да повреди балона и/или каналата на катетъра на изделието, влошавайки надуването и/или изпускането на балона.
2. Надуйте балона с контрастно вещество, разтворено с физиологичен разтвор в съотношение 1:1 (по-долу, "флуид за надуване"). За надуване не може да се използва газообразно средство, например въздух. (Балонът може да се надуе неравномерно.)
3. Преди употреба изгонете изцяло въздуха от балона и лумена за надуването му и го заменете с флуид за надуване. (Ако остане въздух, състоянието на надуване на балона не може да се наблюдава под флуороскоп.)
4. В случай на сериозни стенотични лезии като калцирани лезии, кръвоносният съд не може да бъде надут изцяло. Не прилагайте налягане, което да надвишава номиналното налягане на спукване в този случай. (Балонът може да се спуца и в тялото да остане остатък.)
5. Що се отнася до медицинските изделия, които се използват заедно с този катетър, следвайте инструкциите за употребата им. (Когато балонът на катетъра се ползва за последваща дилатация на стента по време на процедура за поставяне на периферен стент, направете справка с инструкциите за ползване на производителя.)
6. За поставяне в стент, изваждате от стент, или дилатация на балона в стент, работете внимателно под флуороскоп. (Работа без флуороскоп може да повреди катетъра или нарани кръвоносния съд.)
7. Не се опитвайте да прокарате дилатационния балонен катетър РТА Metacross RX през въвеждащ катетър с размер, по-малък от отбелязания на етикета. Направете справка с етикета на продукта.

[Предпазни мерки по време на употреба]

1. Използвайте изделието непосредствено след отваряне на стерилната опаковка. Цялата процедура трябва да се извърши в асептични условия.

3. Този катетър трябва да се използва само от лекари с опит в перкутанната васкуларна терапия.
4. Изберете катетър с подходящ размер на балона (диаметър на балона, дължина на балона) в съответствие със следните (процедурни) критерии.
 - 1) Диаметърът на надутия балон не трябва да надвишава вътрешния диаметър на кръвоносния съд, проксимално и дистално на лезията.
 - 2) Дължината на надутият балон не трябва да надвишава дължината на третираната лезия. (Неподходящ избор на катетър може да доведе до остра оклузия на кръвоносните съдове.)
5. Използвайте този катетър само когато извършването на спешна хирургическа операция е възможно по всяко време.
6. Отговорният за процедурата лекар трябва да определи продължителността и броя на надуванията на балона на базата на своя предшестваш опит.
7. Трябва да се влее хепаринизиран физиологичен разтвор като анти-коагулант при въвеждане на балон-катетъра в кръвоносния съд.
8. В никакъв случай не надувайте балона и не въвеждайте водача при огънат или усукан катетър.
9. Движете катетъра внимателно в кръвоносния съд, като проверявате местоположението и движението на върха му под флуороскоп или DSA (дигитална субтракционна ангиография).
10. Винаги надувайте балона като същевременно наддувате състоянието му на надуване под флуороскоп. Надувайте балона внимателно като проверявате придвижването му чрез рентгенонепроницаемите маркери. При установяване на аномалия, например леко съпротивление, катетър, който не може да се премести по време на манипулацията, или при прегънат дистален връх на водача, процедурата трябва да бъде прекъсната незабавно и катетърът да се извади бавно заедно с водача.
11. Не въвеждайте и не вадете катетъра бързо. (Бързите манипулации могат да предизвикат повреда на катетъра или нараняване на вътрешността на кръвоносния съд.)
12. Не местете катетъра при надут балон. (При преместване на катетъра с надут балон може да се стигне до спукване на балона или до счулване на ствола на катетъра.)
13. Не надувайте или изпускате балона бързо в кръвоносния съд. (Бързото надуване или изпускане може да увреди кръвоносния съд или да предизвика спукване на балона, при което в тялото остават замърсители.)
14. Не използвайте инжектор (автоматично устройство за инжектиране) за надуване на балона.
15. Трябва да се вземат предпазни мерки, за да се предпази катетъра от повреди, нанесени от хирургическите нож или ножичи.
16. Ако настъпят аномалии, като силно съпротивление по време на манипулиране на катетъра, процедурата трябва да се прекъсне незабавно. Трябва да бъде установена причината и да се предприемат подходящи действия. (Продължаването на работата с прекалена сила може да доведе до повреда на катетъра или до увреждане на съдовата стена.)
17. Винаги обръщайте внимание на състоянието на пациента и наблюдавайте телесната температура, пулса и дишането. При установяване на аномалия, преустановете използването на катетъра незабавно или предприемете съответните мерки за състоянието на пациента, по усмотрение на лекаря.
18. След употреба депоирирайте катетъра като медицински отпадък в съответствие с болничните процедури.
19. Не използвайте агенти, съдържащи органични разтворители или маслени контрастни носители. Допирът с тези агенти може да доведе до повреда на катетъра.
20. Не усуквайте и въртете катетъра, по време на работа с него.
21. При въвеждане или изваждане на изделието в/от кръвоносния съд се убедете, че балонът е напълно изпуснат. (Изделие с по-голям или по-дълъг балон се нуждае по-дълго време за изпускане.)

22. Ако усетите съпротива по време на изваждането на изделието след процедурата, се препоръчва да извадите заедно цялата система заедно с интродوسера/ водещия катетър.
23. Винаги използвайте катетъра заедно с водач, вкран в канала на водача.

[Инструкции за работа]

Материалите, необходими обикновено за РТА с дилатационен балон-катетър Metacross RX PTA, включват:

- Водач(и) с подходящ диаметър и дължина
- Подходящ интродосер/водец катетър и комплект дилататори
- Флакон с контрастно вещество
- Флакон със стерилен физиологичен разтвор
- Устройство за надуване с манометър
- Спринцовка с лuerов крайник
- Трипътно кранче

[Оперативен метод или инструкции за употреба]

1. Избор на катетър
Преди употреба проверете вътрешния диаметър на кръвоносния съд проксимално и дистално на стенотичната лезия под флуороскоп и изберете катетър с подходящ размер на балона. В случай че за проверка диаметър са приложими два размера, изберете по-малкия.
2. Подготовка
 - 1) След асептично изваждане на катетъра от опаковката, отстранете от него защитните материали.
 - 2) Заменете въздуха в балона и лумена за надуване на балона с флуид за надуване в съответствие със следните процедури.
 - a) Закрепете устройството за надуване (не е включено в този комплект), напълнено с флуид за надуване, върху отвора за надуване на балона.
 - b) След прилагане на отрицателно налягане към устройството за надуване в продължение на около 10 секунди, насочете крайника на ствола на катетъра надолу и освободете отрицателното налягане бавно, така че флуидът да запълни балона и лумена за надуването му и да изгони въздуха.
 - c) В случай че установите наличие на въздух в балона и отвора за надуването му, повторете процедура б) до цялостно изгонване на въздуха.
 - d) Откачете устройството за надуване от отвора за надуване на балона и отстранете въздуха от цилиндъра на устройството за надуване.
 - e) Отново прикачете устройството за надуване към отвора за надуване на балона и поддържайте негативно налягане. Убедете се, че въздухът не се връща в спринцовката.
 - 3) Промийте канала на водача с хепаринизиран физиологичен разтвор посредством иглата за промиване и напълнете канала с хепаринизиран физиологичен разтвор.
 - 4) Потопете целия дилатационен балон-катетър Metacross RX PTA във физиологичен разтвор.
3. Въвеждане и надуване на балон-катетъра
Преди употреба, моля, проверете дали този катетър е съвместим с водещия катетър (не е включен в този комплект), въвеждащ катетър (не е включен в този комплект), и водача (не е включен в този комплект) с помощта на следната таблица.

Каталожен номер	Диаметър на балона (мм)	Съвместима конзола (Френчове/мм)	Максимален диаметър на водача (инч/мм)
BD-L30020MR	3 мм, 4 мм, 5 мм,	6 френча / 2,0 мм	0,035 инча (0,89 мм)
~	6 мм, 7 мм, 8 мм		
BD-L70200ER	9 мм, 10 мм, 12 мм	7 френча / 2,33 мм	

При използване на катетъра, когато е поставен във въвеждащия или водещия катетър

- 1) При използване на катетъра във въвеждащия катетър, разхлабете хемостатичния клапан, като го задържате достатъчно затегнат, за да предотвратите изтичането на кръв.
- 2) Постепенно въведете катетъра, с изцяло изпуснат балон във въвеждащия или водещия катетър през водача и го придвижете напред към дисталната периферия на лезията. Под флуороскоп бавно прокарайте напред катетъра за да може рентгенонепроницаемият маркер в балона да достигне до целевото място.
- 3) Под флуороскоп проверете положението на рентгенонепроницаемия маркер в балона и определете мястото за надуване.
- 4) Закрепете здраво устройството за надуване към отвора за надуване на балона.
- 5) Надувайте балона постепенно до желания диаметър, като проверявате налягането при надуване и същевременно разширявате стенотичната лезия (за диаметъра на надутия балон,направете справка с диаграмата за съответствие на балоните в таблица 1 в края на тези Указания за употреба).
4. Изваждане на катетъра
 - 1) След като приложите отрицателно налягане за цялостно изпускане на балона, извадете катетъра.
5. Повторно въвеждане на катетъра
 - 1) Ако е необходимо повторно поставяне на извадения катетър с изпуснат балон, уверете се, че балонът е напълно изпуснат и сгънат, преди да го поставите отново в кръвоносния съд на пациента. При повторното поставяне използвайте катетъра съгласно раздела „Поставяне и надуване на балонния катетър“ в този документ.
 - 2) Ако срещнете съпротивление при повторното поставяне на катетъра, прекратете придвижването му и внимателно го извадете от кръвоносния съд на пациента. Подгответе за използване нов Metacross RX в съответствие с процедурите, посочени в този раздел на тези Указания за употреба.

[Усложнения]

Повреди в изделието:

- Слукване на балона
- Недостатъчно надуване / изпускане на балона
- Счупване на балона и/или ствола на катетъра
- Трудности при преместване на изделието
- Изтичане на флуид за надуване

Неблагоприятни явления:

- Локални или систематични инфекции
- Местно вътрешно кървене или хематом
- Вътрешно разкъсване
- Дисекация на кръвоносен съд
- Перфорация на кръвоносен съд
- Разкъсване на кръвоносен съд
- Аневризма
- Аритмия
- Акутна васкуларна оклузия
- Венозен тромбоемболизъм
- Спазъм на кръвоносен съд
- Образуване на псевдоаневризма
- Артеровенозна фистула
- Кръвотечение, изискващо кръвопреливане
- Алергична реакция към контрастното вещество/ бъбречна недостатъчност
- Болка или болка от притискане
- Смъртен изход
- Емболизъм
- Ендокардит
- Треска
- Високо / Ниско кръвно налягане
- Възпаление
- Инфаркт на миокарда
- Сепсис
- Удар
- Инсулт

- Преходна исхемична атака

[Съхранение и срок на годност]

1. Съхранявайте на хладно, сухо и тъмно място. Избягвайте излагане на вода и пряка слънчева светлина.
2. Срокът на годност е указан върху кутията. Да не се използва след срока на годност.

[Опаковка]

1 комплект/кутия

[Име и адрес на производителя или представителя]



Производител: KANEKA CORPORATION

Адрес: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN

Тел.: (+81)-(0) 6-6226-5256

Факс: (+81)-(0) 6-6226-5143



Оторизиран представител за Европейската общност: KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Адрес: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Тел.: (+32)-(0) 14-256-297

Факс: (+32)-(0) 14-256-298

Дистрибутор за EC: TERUMO EUROPE N.V.

Адрес: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, Belgium (Белгия)

Тел.: (+32)-(0) 16 381 211

Факс: (+32)-(0) 16 400 249

Всички марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на TERUMO CORPORATION и техните съответни собственици.

Таблица 1. Metacross RX Диаграма за съответствието на балоните

Налягане (атм)	Диаметър на балона (мм)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*			
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31			
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**			
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01			
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90						
18	3.30	4.30	5.48**									
20	3.38**	4.41**	5.61									
22	3.47	4.51	5.75									
24	3.57	4.64										

* Номинално налягане

** Номинално налягане на спукване

[ОПИС ПРОДУКТУ]

Metacross RX – це дилатаційний балонний катетер для черезшкірної транслюмінальної ангіопластики (ЧТА) призначений для периферійних судин. Metacross RX є катетером швидкої заміни (Rapid Exchange), а максимальний діаметр сумісного провідника складає 0.035 дюйма (0,89 мм). Дистальна частина катетера складається з балона та стрижнів із двома просвітами (коаксiальних). Зовнішній просвіт використовують для заповнення та здуття балона за допомогою контрастної речовини, розведеної фізіологічним розчином. Внутрішній просвіт (просвіт провідника; від дистального кінчика до порту провідника) призначений для розташування сумісного провідника з метою полегшення просування катетера крізь ділянку стенозу чи стента, який потрібно розширити. Проксимальна частина складається шафту із одним просвітом та окремим люеровським роз'ємом порту для під'єднання пристрою роздуття/здуття. Всередині балона знаходяться два рентгеноконтрастні маркери, що вказують на робочу довжину балону, які допомагають лікарів належним чином розташувати балон у цільовій ділянці під контролем рентгеноскопії. Катетер Metacross RX доступний із різними розмірами балона за діаметром та довжиною при рекомендованому тиску роздуття (номінальний тиск). Під час роздуття діаметр балона змінюється відповідно до тиску роздуття. Схему відповідності балонів Metacross RX наведено у таблиці 1 наприкінці цієї інструкції за використання. У стерильній упаковці пристрій оснащено захисними матеріалами — трубкою для захисту балона та стилетом, які слід вилучити перед використанням. Трубка для захисту балона охоплює балон, згорнутий для компактності, а стилет уставлено в просвіт провідника для запобігання деформації шафту катетера. Дистальний кінчик катетера має скіс для полегшення просування катетера до ділянки стенозу чи стента.

Голку для промиття надано в якості приладдя для цього пристрою, щоб промивати та наповнювати просвіт провідника гепаринізованим фізіологічним розчином.

<НАЙМЕНУВАННЯ КОЖНОЇ ЧАСТИНИ>



Пристрій є стерильним та апірогенним у неущожденій і закритій блістерній упаковці. Пристрій простерилізовано оксидом етилену.

Рекомендований діаметр провідника:

Максимальний діаметр: 0,035" (0,89 мм)

Рекомендований тиск заповнення та максимальний тиск заповнення

Номінальний тиск:

- Діаметр балона: менший 6 мм:	10 атм
- Діаметр балона: 6 мм та більше:	8 атм

Номінальний тиск розриву:

- Діаметр балона: менше 5 мм:	20 атм
- Діаметр балона: 5 мм:	18 атм
- Діаметр балона: 6 мм, 7 мм, 8 мм:	14 атм
- Діаметр балона: 9 мм та більше:	12 атм

[ВКАЗІВКИ]

Metacross RX - дилатаційний балонний катетер для ЧТА призначено для розширення звужень клубової, стенової, клубово-стенової, підколінної, задньої підколінної та ниркової артерій та для лікування обструктивних патологічних змін, артеріовенозних діалізних свищів природного або штучного походження. Цей пристрій також призначено для пост-дилатаційного стентування у периферійній судинній сітці.

Примітка. Тест верифікації щодо стента після дилатації катетером Metacross RX проводили за використанням васкулярної стент-системи стента Complete® SE (Medtronic, Inc), васкулярної стент-системи S.M.A.R.T.® CONTROL® (Cordis Corporation) та васкулярної саморозширювальної стент-системи Epic™ (Boston Scientific Corporation).

[ПРОТИПОКАЗАННЯ]

1. Пацієнтам, у яких розвинувся стеноз анастомозу протягом одного місяця після встановлення артеріовенозного шунта.
2. Пацієнтам з ураженнями, які поєднані з псевдоаневризмою.
3. Вагітним пацієнтам або з підозрою на вагітність.
4. Пацієнтам із непереносимістю тромбоцитарних та антикоагулянтних терапій.

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ]

[Попередження]

1. Цей пристрій призначено для одноразового використання. Не використовувати повторно. Повторно не стерилізувати. Не піддавати повторній обробці. Повторна обробка може призвести до втрати стерильності, до порушення біосумісності та втрати функціональної цілісності виробу.
2. Не використовувати, якщо продукт або його упаковка пошкоджено.
3. Не надувати балон до розмірів, що перевищують діаметр кровоносної судини проксимально або дистально до стенозованої ділянки.
4. Тиск заповнення балона не повинен перевищувати номінальний тиск розриву.
5. Не використовувати цей катетер у центральній системі кровообігу.

[Запобіжні заходи, пов'язані з процедурами]

1. Акуратно та повільно вийміть пристрій з трубки утримувача і вилучіть захисні частини з цього пристрою. Необробжене поводження може призвести до пошкодження балона та/або шафту катетера, що унеможливить заповнення та/або здуття балона.
2. Заповнювати балон сумішшю контрастної речовини та фізіологічного розчину у пропорції 1:1 (надалі «рідина для заповнення»). Не слід використовувати газоподібні контрастні речовини для заповнення. (Балон може заповнюватися нерівномірно.)
3. Перед використанням випустіть все повітря з балона і з просвіту для заповнення балона та замініть його рідиною для заповнення. (У разі неповного видалення повітря, виявити стан заповненості балона на рентгеноскопії неможливо.)
4. У випадку серйозних стенозних новоутворень, таких як кальциновані новоутворення, кровоносна судина не може бути дилатована повністю. У такому випадку не використовуйте тиск, що перевищує номінальний тиск розриву. (Балон може розірватися, і фрагменти можуть залишитися всередині тіла.)
5. Для медичних пристроїв, які використовуються разом з цим катетером, слід дотримуватися інструкцій з використання цими пристроями. (Коли балонний катетер використовується для пост-дилатації стенту під час процедури встановлення периферичного стенту, зверніться до інструкцій з використання від виробника.)
6. Для введення у стент, виведення зі стенту або внутрішньостентової дилатації балона, процедури слід проводити з обережністю, з використанням рентгеноскопії. (Здійснення цього без рентгеноскопії може зруйнувати катетер або пошкодити кровоносну судину.)
7. Не намагайтеся провести Metacross RX дилатаційний балонний катетер для ЧТА через інтродьюсер меншого діаметру, ніж вказано на етикетці. Інформація зазначена на етикетці продукту.

[Заходи безпеки під час використання]

1. Використовуйте пристрій відразу ж після відкриття стерильної упаковки.
2. Усі маніпуляції повинні проводитися в асептичних умовах.
3. Цей катетер повинен використовуватися тільки лікарями, кваліфікованими для проведення черезшкірної судинної терапії.
4. Оберіть катетер із відповідним розміром балона (діаметр балона, довжина балона), дотримуючись наступних (процедур) критеріїв.
 - 1) Діаметр заповненого балона не повинен перевищувати внутрішній діаметр судини проксимально та дистально до ураження
 - 2) Довжина заповненого балона не повинна перевищувати довжину ураження, яке слід лікувати. (Невірний вибір катетера може призвести до різкої оклюзії судини).
5. Використовуйте цей катетер за умови можливості проведення термінової операції.
6. Лікар, який виконуватиме процедуру, повинен визначити тривалість і кількість заповнень балона, спираючись на свій минулий досвід.
7. Коли балонний катетер вставлений в кровоносну судину, для забезпечення антикоагуляції слід ввести гепаринізований фізіологічний розчин.
8. Ніколи не заповнюйте балон та не просувайте провідник із зігнутих або залупланих катетером.
9. Маніпулюйте катетером у кровоносній судині обережно, відстежуючи розташування і рух його кінчика на рентгеноскопії або на моніторі ЦСА (цифрова субтракційна ангиографія).
10. Завжди заповнюйте балон, спостерігаючи за його заповненням за допомогою рентгеноскопії. Обережно заповнюйте балон, перевіряючи його рух за допомогою рентгеноконтрастних маркерів. Якщо спостерігаються будь-які відхилення від норми, такі як слабкий опір, нерухомий катетер під час маніпуляцій або вигнутий дистальний кінчик провідника, процедуру слід негайно припинити і повільно вилучити катетер разом з провідником.
11. Не поспішайте при розташуванні або вилученні катетера. (Різкі рухи можуть пошкодити катетер або інтиму судини.)
12. Не маніпулюйте дилатаційним катетером із заповненим балоном. (Переміщення катетера із заповненим балоном може призвести до розриву балона або руйнування шфату катетера)
13. Не поспішайте при заповнюванні або здутті балону в кровоносній судині. (Швидке заповнення або дефляція можуть пошкодити кровоносні судини або призвести до розриву балона, що спричинить відокремлення фрагментів в тіло пацієнта.)
14. Не використовуйте інжектор (автоматичний пристрій для заповнення) для заповнення балона.
15. Слід вжити застережних заходів для запобігання будь-якому ушкодженню катетера хірургічним ножем або ножицями.
16. Якщо під час маніпулювання катетером помічено будь-яке відхилення від норми, наприклад, значний опір, слід негайно припинити процедуру. Слід з'ясувати причину і вжити відповідних заходів. (Продовження операції з докладанням надмірної сили може призвести до руйнування катетера або пошкодження стінки кровоносної судини).
17. Завжди приділяйте увагу стану пацієнта та відстежуйте його температуру тіла, пульс та дихання. Якщо виявлено будь-які відхилення від норми, слід негайно припинити використання катетера або, на розсуд лікаря, вжити належних заходів для покращення стану пацієнта.
18. Після використання утилізуйте катетер як медичні відходи, дотримуючись клінічних процедур.
19. Не використовуйте органічні розчинники або маслянисті контрастні речовини. Контакт з цими речовинами може призвести до пошкодження катетера.
20. Під час маніпулювання катетером, не гнітайте та не крутіть катетер.
21. Під час введення цього пристрою у кровоносну судину або виведення цього пристрою з кровоносної судини слід

- упевнитися, що балон повністю пустий. (Пристрій з більшим або довшим балоном потребує більшого часу для здуття).
22. Якщо відчувається опір під час післяпроцедурного виведення цього пристрою, рекомендовано вилучити всю систему разом з інтродьюсером/провідником.
 23. Завжди використовуйте катетер разом з провідником, встановленим у просвіті для провідника.

[Інструкції з використання]

Матеріали, що зазвичай використовуються для ЧТА за допомогою Metacross RX дилатаційного балонного катетера для ЧТА:

- Провідник(и) відповідного діаметру та довжини
- Відповідний інтродьюсер / направляючий катетер і набір дилататорів
- Флакон з контрастною речовиною
- Флакон стерильного фізіологічного розчину
- Пристрій для заповнення з манометром
- шприц з роз'ємом Люера
- Триходовий краник

[Метод експлуатації або інструкції із застосування]

1. Вибір катетера
Перед використанням перевірте на рентгеноскопії внутрішній діаметр кровоносних судин проксимально та дистально до стенозного ураження та виберіть катетер з відповідним розміром балона. Якщо обидва розміри відповідають передбаченому діаметру, оберіть катетер меншого розміру.
2. Приготування
 - 1) Після видалення в асептичних умовах катетера з контейнера, зніміть захисне покриття з катетера.
 - 2) Замініть повітря в балоні та в просвіті для заповнення балона рідиною для заповнення у відповідності до наступних процедур.
 - a) Закріпіть пристрій для заповнення (не входить у цей комплект) із рідиною для заповнення у порт для заповнення балона.
 - b) Після застосування негативного тиску до пристрою для заповнення протягом приблизно 10 секунд, спрямуйте кінчик катетера донизу та повільно послабте негативний тиск, щоб дозволити рідині заповнити балон та просвіт для заповнення балона, витиснувши повітря.
 - c) Якщо після того, як балон був заповнений рідиною для заповнення, в ньому та просвіті катетера залишилось повітря, повторіть процедуру b) до повної відсутності повітря.
 - d) Від'єднайте пристрій для заповнення від порту для заповнення балона та випустіть повітря з циліндра пристрою для заповнення.
 - e) Під'єднайте пристрій для заповнення балона до порту заповнення балона і утримуйте негативний тиск. Упевніться, що повітря більше не повертається до шприца.
 - 3) Промийте просвіт провідника гепаринізованим фізіологічним розчином за допомогою голки для промиття та заповніть ним просвіт.
 - 4) Занурте Metacross RX дилатаційний балонний катетер для ЧТА повністю у фізіологічний розчин.
3. Встановлення та заповнення балонного катетера
Перед використанням, будь-ласка, перевірте сумісність даного катетера з провідниковим катетером (не включеного у цей комплект), інтродьюсером (не включеного у цей комплект) та провідником (не включеного у цей комплект) відповідно до наступної таблиці.

Номер в каталозі	Діаметр балона (мм)	Сумісний інтродьюсер (Fr/мм)	Максимальний діаметр для провідника (дюйм/мм)
BD-L30020MR ~ BD-L70200ER	3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм	6 Fr / 2.00 мм	0,035 дюймів (0,89 мм)
	9 мм, 10 мм, 12 мм	7 Fr / 2.33 мм	

Використання катетера, розташованого в інтродьюсері або провідниковому катетері

- 1) Під час використання катетера в провідниковому катетері дещо послабте гемостатичний клапан, проте залиште його досить туго затиснутим для запобігання витоку крові.
- 2) поступово введіть катетер з повністю пустим балоном у інтродьюсер або провідниковий катетер поверх провідника та просувайте до дистальної периферії ушкодження. Повільно просувайте катетер під рентгеноскопією до досягнення рентгеноконтрастним маркером на балоні мети необхідної ділянки.
- 3) Під рентгеноскопією слід підтвердити розміщення рентгеноконтрастного маркера та визначити область дилатації.
- 4) Надійно під'єднайте пристрій для заповнення балона до порту для заповнення.
- 5) Поступово заповніть балон до потрібного діаметру, перевіряючи тиск заповнення, та розширте стенозоване ураження (відомості щодо діаметру роздутного балона див на схемі відповідності балонів, наведених у таблиці 1 наприкінці цієї інструкції з використання).
4. Вилучення катетера
 - 1) Після застосування негативного тиску для повного видалення повітря з балона, катетер слід видалити.
5. Повторне встановлення катетера
 - 1) Якщо потрібно повторно встановити виїнятий катетер зі здутим балоном, переконайтеся, що балон повністю здутий та згорнутий, перед тим як повторно встановлювати його у кровоносну судину пацієнта. Під час повторного встановлення катетера поведіться з ним згідно з розділом цієї інструкції «Встановлення та роздуття балонного катетера».
 - 2) Якщо під час повторного встановлення катетера спостерігається будь-який опір, припиніть його просування й акуратно вилучіть його з кровоносної судини пацієнта. Підготуйте до використання новий катетер Metacross RX відповідно до процедур, наведених вище у цьому розділі цієї інструкції з використання.

[Ускладнення]

Дисфункції пристрою:

- Розрив балона
- Недостатнє заповнення / здуття балона
- Пошкодження балона та/або шайф катетера
- Ускладнення під час видалення приладу
- Виткання речовини для заповнення

Побічні явища:

- Місцеві або системні інфекції
- Місцева внутрішня кровотеча або гематома
- Розрив інтими
- Дисекція судини
- Перфорація судини
- Розрив судини
- Аневризми
- Аритмія;
- Гостра оклюзія судини
- Венозна тромбоемболія
- Вазоспазм
- Утворення псевдоаневризми
- Артеріовенозний свищ
- Кровотеча, що вимагає переливання крові

- Алергічна реакція на контрастну речовину / відмова нирок
- Тупий або стискаючий біль
- Смерть
- Емболія
- Ендокардит
- Лихоманка
- Гіпертензія / Гіпотензія
- Печія
- Інфаркт міокарду
- Сепсис
- Шок
- Інсульт
- Транзиторний ішемічний напад

[Зберігання та термін придатності]

1. Зберігати у прохолодному, сухому, темному місці. Уникати контакту з водою, прямими сонячними променями.
2. Термін придатності вказано на коробці. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

[Упаковка]

1 комплект/коробка

[Назва та адреса виробника або представника]



Виробник: KANEKA CORPORATION

Адреса: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,

OSAKA, 530-8288 JAPAN

Телефон: (+81)-(0) 6-6226-5256

Факс: (+81)-(0) 6-6226-5143



Авторизований представник у Європейській Співдружності: KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Адреса: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM

Телефон: (+32)-(0) 14-256-297

Факс: (+32)-(0) 14-256-298

Дистриб'ютор у ЄС: TERUMO EUROPE N.V.

Адреса: INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM

(БЕЛЬГІЯ)

Телефон: (+32)-(0) 16 381 211

Факс: (+32)-(0) 16 400 249

Усі зазначені назви компаній та різні імена є торговими марками та зареєстрованими торговими марками корпорації Terumo, а також кожної компанії.

Таблиця 1. Схема відповідності балонів Metacross RX

Тиск (атм)	Діаметр балона (мм)											
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*			
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31			
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**			
14	3.16	4.15	5.26	6.40**	7.49**	8.66**	9.56	10.70	13.01			
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90						
18	3.30	4.30	5.48**									
20	3.38**	4.41**	5.61									
22	3.47	4.51	5.75									
24	3.57	4.64										

* Номінальний тиск

** Номінальний тиск розриву:


[OPIS PROIZVODA]

Metacross RX je balonski dilatacijski kateter za perkutano transluminalnu angioplastiku (PTA) za periferne okluzije. Metacross RX je tip katetera za brzu razmjenu kompatibilan sa žicom vodiljom maksimalnog promjera 0,89 mm (0.035 in).

Distalni dio ovog katetera sastoji se od balona i dvolumenskih osovina (koaksijalnih). Vanjski lumen služi za napuhavanje i ispuhavanje balona kontrastnim sredstvom razrijeđenim fiziološkom otopinom. Unutarnji lumen (lumen žice vodilje; od distalnog vrha do otvora žice vodilje) služi za umetanje kompatibilne žice vodilje čime se olakšava uvođenje katetera kroz stenotičnu leziju ili stent koje treba dilatirati. Proksimalni dio je jednolumenska osovina s jednom utičnicom luer spojnice za spajanje na uređaj za napuhavanje/ispuhavanje. Unutar balona postavljena su dva rentgenski vidljiva markera koji označavaju radnu dužinu balona, kako bi liječnika vodili u pravilnom postavljanju balona na ciljano leziju pri fluoroskopiji. Metacross RX je dostupan s balonima različitih promjera i dužina pri preporučenim tlakovima napuhavanja (nominalni tlak). Nakon napuhavanja promjer balona se mijenja sukladno tlaku napuhavanja. U tablici 1 na kraju ove Upute za uporabu nalazi se shema usklađenosti Metacross RX balona. U pakiranju za sterilizaciju, uređaj je opremljen zaštitnim materijalima, zaštitna cijev balona i stilet, koje treba ukloniti prije upotrebe. Zaštitna cijev balona je postavljena preko balona i tanko presavijena a stilet je umetnut u lumen žice vodilje kako bi se spriječio prijelom trupa katetera. Distalni vrh katetera je konusni kako bi se olakšalo uvođenje katetera u stenotičnu leziju ili stent.

Igla za ispiranje je priložena kao dodatak uređaju za ispiranje i punjenje lumena žice vodilje hepariniziranom fiziološkom otopinom.

<NAZIVI DIJELOVA>

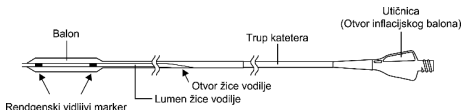

Sterilan i nepirogen u neoštećenoj i neotvorenoj blister vrećici. Ovaj uređaj je steriliziran etilen-oksikom.

Preporučeni promjer žice vodilje:

Maksimalni promjer: 0,035" (0,89 mm)

Preporučeni infacijski tlak i maksimalni infacijski tlak

Nominalni tlak:

- Promjer balona: manji od 6 mm:	10 atm
- Promjer balona: 6 mm i više:	8 atm

Nazivni tlak prsnuća:

- Promjer balona: manji od 5 mm:	20 atm
- Promjer balona: 5 mm:	18 atm
- Promjer balona: 6 mm, 7 mm, 8 mm:	14 atm
- Promjer balona: 9 mm i više:	12 atm

[INDIKACIJE]

Balonski dilatacijski kateter Metacross RX PTA namijenjen je dilataciji stenoza kod ilijačnih, femoralnih, iliofemoralnih, poplitealnih, infra-poplitealnih i renalnih arterija, kao i za liječenje opstrukcijskih lezija nativnih ili sintetskih arteriovenskih dijaliznih fistula. Ovaj uređaj se također primjenjuje u postdilataciji periferne vaskulature.

Napomena: Test provjere za postdilataciju stenta Metacross RX proveden je koristeći Complete® SE Vascular Stent System

(Medtronic, Inc), S.M.A.R.T.® CONTROL® Vascular Stent System (Cordis Corporation) i Epic™ Vascular Self-Expanding Stent System (Boston Scientific Corporation).

[Kontraindikacije]

1. Pacijenti koji su razvili anastomozne stenoze u roku od mjesec dana nakon ugradnje AV shunta.
2. Pacijenti koji imaju lezije koje komuniciraju s pseudoaneurizmom.

3. Trudnice.
4. Pacijenti koji ne mogu tolerirati antitrombotičnu ili antikoagulantnu terapiju.

[UPOZORENJA I MJERE OPREZA]

[Upozorenja]

1. Ovaj uređaj je za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovno koristiti uređaj. Nemojte iznova sterilizirati. Nemojte ponavljati postupak. Ponavljanje može utjecati na sterilnost, biokompatibilnost i fizički integritet uređaja.
2. Nemojte koristiti proizvod ako su proizvod ili ambalaža oštećeni.
3. Balon se ne smije napuhati tako da prelazi promjer krvne žile proksimalno i distalno prema leziji stenoze.
4. Nemojte napuhivati balon tako da prelazi tlak pucanja.
5. Kateter se ne smije koristiti u središnjem krvožilnom sustavu.

[Mjere opreza u pogledu postupaka]

1. Pažljivo i polagano izvadite uređaj iz nosača i uklonite dijelove za zaštitu uređaja. Nepažljivo rukovanje može oštetiti balon ili trup katetera te utjecati na napuhivanje ili ispuhivanje balona.
2. Napužite balon kontrastnim sredstvom razrijeđenim s fiziološkom otopinom u omjeru 1:1 (u daljnjem tekstu "infacijski fluid"). Plinoviti medij kao što je zrak ne smiju se koristiti za napuhivanje. (Balon bi se mogao nepravilno napuhati.)
3. Prije uporabe, istisnite sav zrak iz balona i infacijskog lumena balona i zamijenite ga s infacijskim fluidom. (U slučaju nepotpunog uklanjanja zraka, balon se u napuhanom stanju ne može promatrati pod fluoroskopijom.)
4. U slučaju ozbiljnih stenotičnih lezija kao što su kalcificirane lezije, krvne žile ne mogu biti dilatirane u potpunosti. U tom slučaju, nemojte primjenjivati tlak koji prelazi tlak pucanja. (Balon može puknuti i krhotine mogu ostati u tijelu.)
5. Što se tiče medicinskih uređaja koji se koriste uz ovaj kateter, slijedite upute za uporabu takvih uređaja. (Kad se balonski kateter koristi za postdilataciju stenta tijekom postupka postavljanja perifernog stenta, pogledajte upute proizvođača.)
6. Pri umetanju u stent, povlačenju iz stenta ili in-stent dilataciji balona, radite oprezno pod fluoroskopijom. (Radom bez fluoroskopije mogli biste oštetiti kateter ili ozlijediti krvnu žilu.)
7. Nemojte pokušavati provući dilatacijski balonski kateter Metacross RX PTA kroz ovojnicu vodnice koja je manje veličine od one navedene na naljepnici. Pogledajte oznake proizvoda.

[Mjere opreza tijekom uporabe]

1. Koristite uređaj odmah nakon otvaranja sterilnog paketa.
2. Cijeli postupak treba provoditi aseptički.
3. Kateter trebaju koristiti samo liječnici vješti u perkutanoj vaskularnoj terapiji.
4. Odaberite kateter odgovarajuće veličine balona (promjer i duljina balona) prema sljedećim kriterijima (postupka).
 - 1) Promjer napuhanog balona ne smije prelaziti unutarnji promjer krvne žile proksimalno i distalno u odnosu na leziju.
 - 2) Duljina napuhanog balona ne smije prelaziti duljinu tretirane lezije. (Neprikladan izbor katetera može dovesti do akutne vaskularne okluzije.)
5. Koristite ovaj kateter samo ako je moguće izvesti hitni kirurški zahvat u bilo kojem trenutku.
6. Liječnik zadužen za postupak treba utvrditi trajanje i broj napuhivanja balona na temelju svojih ranijih iskustava.
7. Dok je balonski kateter u krvnoj žili, treba primijeniti infuziju heparinirane fiziološke otopine radi anti-koagulacije.
8. Nikada ne napuhujte balon niti uvodite žicu vodilju sa savijenim ili iskrivljenim kateterom.
9. Pažljivo rukujte kateterom u krvnoj žili provjeravajući položaj i kretanje njegovog vrha pod fluoroskopijom ili digitalnom suptrakcijskom angiografijom (DSA).
10. Balon uvijek napuhujte tako da njegovo stanje promatrate pod fluoroskopijom. Pažljivo napuhujte balon provjeravajući njegove

kretnje pomoću rendgenski vidljivog markera. Ako dođe do abnormalnosti kao što su slab otpor, zastoj katetera tijekom rukovanja ili iskrivljivanje distalnog vrha žice vodilje, postupak treba odmah prekinuti i kateter treba polagano ukloniti zajedno sa žicom vodiljom.

11. Kateter se ne smije brzo uvoditi niti uklanjati. (Brzi rad s kateterom može ga oštetiti ili ozlijediti vaskularnu intimu.)
12. Nemojte pomicati kateter dok je balon napuhan. (Pomicanje katetera s napuhanim balonom može dovesti do pucanja balona ili prijeloma trupa katetera.)
13. Dok je u krvnoj žili, balon se ne smije naglo napuhati ili ispuhati. (Brzo napuhivanje ili ispuhivanje može oštetiti krvne žile ili uzrokovati pucanje balona te u tijelu mogu ostati krhotine.)
14. Za napuhivanje balona nemojte koristiti injektor (automatski uređaj za ubrizgavanje).
15. Treba poduzeti mjere opreza kako bi se spriječilo oštećenje katetera kirurškim nožem ili škarama.
16. Ako se pojave abnormalnosti, kao što je jak otpor tijekom rukovanja kateterom, postupak treba odmah prekinuti. Treba pronaći uzrok i poduzeti odgovarajuće mjere. (Nastavak operacije primjenom prekomjerne sile može dovesti do oštećenja katetera ili ozljede stijenke krvne žile.)
17. Uvijek obratite pozornost na stanje pacijenta i pratite tjelesnu temperaturu, puls i disanje. Kada se pojave abnormalnosti, odmah prekinite uporabu katetera ili poduzmite odgovarajuće mjere sukladno stanju pacijenta prema procjeni liječnika.
18. Nakon uporabe odložite kateter kao medicinski otpad u skladu s bolničkim postupcima.
19. Nemojte koristiti sredstva koja sadrže organska otapala ili kontrastna sredstva na bazi ulja. Kontakt s njima može dovesti do oštećenja katetera.
20. Dok rukujete kateterom, nemojte ga savijati niti okretati.
21. Prilikom uvođenja uređaja u krvne žile ili uklanjanja iz njih, pobrinite se da je balon u potpunosti ispraznjen. (Uređaju s većim ili duljim balonom treba više vremena za napuhivanje.)
22. Ako osjetite otpor tijekom postupoduralnog povlačenja uređaja, preporučljivo je povući cijeli sustav, zajedno s uvodnicom / vodičem ovojnice.
23. Kateter uvijek koristite sa žicom vodiljom umetnutom u lumen žice vodilje.

[Operativne upute]

Materijali koji su obično potrebni za PTA s balonskim dilatacijskim kateterom Metacross RX PTA uključuju:

- Žicu vodilju odgovarajućeg promjera i dužine
- Odgovarajući uvodnicu / vodič ovojnice i dilator komplet
- Bočicu kontrastnog sredstva
- Bočicu sterilnog pufera
- Uređaj za napuhivanje s manometrom
- Luer-lock špicu
- Troputni sigurnosni ventil

[Metode operacije ili upute za uporabu]

1. Odabir katetera
Prije uporabe, pod fluoroskopijom provjerite unutarnji promjer krvne žile proksimalno i distalno u odnosu na stenotičnu leziju i odaberite kateter s odgovarajućom veličinom balona. Ako su za procijenjeni promjer primjenjive dvije veličine, odaberite manju.
2. Pripreme
 - 1) Nakon aseptičnog vađenja katetera iz spremnika, uklonite zaštitni materijal s katetera.
 - 2) Ispuštite zrak iz balona i infliacijskog lumena balona i zamijenite ga s infliacijskim fluidom prema sljedećem postupku.
 - a) Pričvrstite uređaj za napuhivanje (nije uključen u ovaj komplet) ispunivši infliacijskim fluidom na otvor za napuhivanje balona.
 - b) Nakon primjene negativnog tlaka otprilike 10 sekundi na uređaju za napuhivanje, usmjerite vrh trupa katetera prema dolje i polagano oslobodite negativni tlak kako biste fluidom ispunili balon i infliacijski lumen balona te istisnuli zrak.
 - c) Ako u balonu i infliacijskom lumenu balona još uvijek ima zraka, ponovite postupak b) sve dok se sav zrak u potpunosti ne ukloni.

- d) Odvojite uređaj za napuhivanje s otvora infliacijskog balona i uklonite zrak iz cilindra uređaja za napuhivanje.
- e) Ponovno pričvrstite uređaj za napuhivanje na otvor infliacijskog balona i održavajte negativan tlak. Uvjerite se da se zrak više ne vraća u štrcaljku.
- 3) Iglom za ispiranje isperite lumen žice vodilje hepariniziranim fiziološkom otopinom i ispunite ga njome.
- 4) Uronite cijeli balonski dilatacijski kateter Metacross RX PTA u fiziološku otopinu.
3. Umetanje i napuhivanje balonskog katetera
Prije uporabe, provjerite je li kateter kompatibilan s uvodnim kateterom (nije uključen u ovaj komplet), ovojnicom uvodnice (nije uključena u ovaj komplet), i žicom vodiljom (nije uključena u ovaj komplet) prema sljedećoj tablici.

Kataloški broj	Promjer balona (mm)	Kompatibilna ovojnica (Fr/mm)	Maksimalni promjer žice vodilje (inch/mm)
BD-L30020MR~ BD-L70200ER	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	6 Fr / 2,00 mm	0,035 inch (0,89 mm)
	9 mm, 10 mm, 12 mm	7 Fr / 2,33 mm	

Kada koristite kateter umetnut u ovojnicu uvodnice ili uvodni kateter

- 1) Kada se ovaj kateter koristi u uvodnom kateteru, otpustite hemostatski ventil, ali istovremeno pazite da bude dovoljno zategnut kako biste spriječili gubitak krvi.
- 2) Postupno umetnite kateter s potpuno ispraznjenim balonom u ovojnicu uvodnice ili uvodni kateter preko žice vodilje i uvodite do distalnog ruba lezije. Kateter uvodite polagano, pod fluoroskopijom, dok njegov rendgenski vidljivi marker u balonu ne dođe na ciljno mjesto.
- 3) Pod fluoroskopijom, provjeravajte položaj rendgenski vidljivog markera u balonu i odredite mjesto dilatacije.
- 4) Uređaj za napuhivanje dobro pričvrstite na otvor infliacijskog balona.
- 5) Postupno napuhujte balon do ciljnog promjera provjeravajući tlak infliacije i dilatirajte stenotičnu leziju (za promjere napuhanog balona pogledajte shemu sukladnosti u tablici 1. na kraju ovih uputa za upotrebu).
4. Uklanjanje katetera
 - 1) Primjenom negativnog tlaka potpuno ispraznite balon i izvadite kateter.
5. Ponovno uvođenje katetera
 - 1) Ako je potrebno ponovo uvođenje izvađen kateter s ispuhanim balonom, uvjerite se da je balon potpuno ispuhan i presavijen prije ponovnog uvođenja u krvnu žilu pacijenta. Pri ponovnom uvođenju kateter upotrijebite prema odjeljku "Umetanje i napuhivanje balonskog katetera" ovdje.
 - 2) Ako se pri ponovnom uvođenju katetera naide na otpor, prekinite uvođenje i pažljivo ga uklonite iz krvne žile pacijenta. Pripremite za upotrebu novi Metacross RX u skladu s postupkom opisanom gore u ovom odjeljku Uputa za upotrebu.

[Komplikacije]

Kvarovi na uređaju:

- Probijanje balona
- Nedovoljna infliacija ili deflacija balona
- Pucanje balona ili prijelom trupa katetera
- Poteškoće pri uklanjanju uređaja
- Istjecanje infliacijskog fluida

Štetni događaji:

- Lokalne ili sistavne infekcije
- Lokalno unutarnje krvarenje ili hematoma
- Intimalna ruptura
- Vaskularna disekcija
- Vaskularna perforacija
- Vaskularna ruptura
- Aneurizma
- Aritmija

- Akutna vaskularna okluzija
- Venska tromboembolija
- Vazospazam
- Formiranje pseudoaneurizme
- Arteriovenske fistule
- Krvarenje koje zahtijeva transfuziju
- Alergijske reakcije na kontrastna sredstva / zatajenje bubrega
- Dugotrajna bol ili bol pod pritiskom
- Smrt
- Embolija
- Endokarditis
- Groznica
- Hipertenzija / hipotenzija
- Upala
- Infarkt miokarda
- Sepsa
- Šok
- Moždani udar
- Prolazni ishemijski napad

[Skladištenje i datum isteka]

1. Čuvati na hladnom, suhom i tamnom mjestu. Izbjegavajte izlaganje vodi i izravnoj sunčevoj svjetlosti.
2. Datum isteka je označen na kutiji. Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti.

[Paket]

1 komplet / kutija

[Ime i adresa proizvođača ili zastupnika]



Proizvođač: KANEKA CORPORATION

Adresa: 3-18, 2-chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN
Tel. br. : (+81)-(0) 6-6226-5256
Faks. : (+81)-(0) 6-6226-5143



Ovlašteni zastupnik u Europskoj Uniji:

KANEKA MEDICAL EUROPE N.V.

Adresa: Nijverheidsstraat 16, 2260 Westerlo-Oevel, BELGIUM
Tel. br. : (+32)-(0) 14-256-297
Faks. : (+32)-(0) 14-256-298

Distributer u EU: TERUMO EUROPE N.V.

Adresa: INTERLEUVENLAAN 40,3001 LEUVEN, Belgija
Tel. br. : (+32)-(0) 16 381 211
Faks. : (+32)-(0) 16 400 249

Svi nazivi brenda su trgovački žigovi ili registrirani trgovački žigovi tvrtke TERUMO CORPORATION i njihovih vlasnika.

Tablica 1. Shema sukladnosti Metacross RX balona

Tlak (atm)	Promjer balona (mm)								
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8				5.97*	6.98*	8.06*	9.00*	9.91*	12.03*
10	3.02*	4.01*	5.04*	6.12	7.15	8.26	9.19	10.17	12.31
12	3.09	4.08	5.15	6.25	7.31	8.46	9.36**	10.44**	12.64**
14	3.16	4.15	5.26	6.40*	7.49*	8.66**	9.56	10.70	13.01
16	3.23	4.22	5.36	6.54	7.68	8.90			
18	3.30	4.30	5.48**						
20	3.38**	4.41**	5.61						
22	3.47	4.51	5.75						
24	3.57	4.64							

*Nominalni tlak

** Nazivni tlak prsnuća

© TERUMO CORPORATION September, 2021

PM-05580
(3209-3)